

# **ASAHI Miracle / MIRACLEbros series Grand Slam PCI Guide Wire**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>SYMBOLS</b>             | 1  |
| <b>English [EN]</b>        | 4  |
| <b>Dansk [DA]</b>          | 7  |
| <b>Nederlands [NL]</b>     | 10 |
| <b>Suomi [FI]</b>          | 13 |
| <b>Français [FR]</b>       | 16 |
| <b>Deutsch [DE]</b>        | 19 |
| <b>Ελληνικά [EL]</b>       | 22 |
| <b>Magyar [HU]</b>         | 25 |
| <b>Italiano [IT]</b>       | 28 |
| <b>Polski [PL]</b>         | 31 |
| <b>Português [PT]</b>      | 34 |
| <b>Español [ES]</b>        | 37 |
| <b>Svenska [SV]</b>        | 40 |
| <b>Česky [CS]</b>          | 43 |
| <b>Norsk [NO]</b>          | 46 |
| <b>Slovenský [SK]</b>      | 49 |
| <b>Eesti keel [ET]</b>     | 52 |
| <b>Latviešu [LV]</b>       | 55 |
| <b>Lietuvių kalba [LT]</b> | 58 |
| <b>Türkçe [TR]</b>         | 61 |
| <b>Русский [RU]</b>        | 64 |
| <b>Български [BG]</b>      | 67 |
| <b>Hrvatski [HR]</b>       | 70 |
| <b>Română [RO]</b>         | 73 |
| <b>Slovenščina [SL]</b>    | 76 |
| <b>Malti [MT]</b>          | 79 |

SYMBOLS

| English                                                                                                                                                  | Dansk                                                        | Nederlands                                          | Suomi                                           | Français                                                              | Deutsch                                                                                  | Ελληνικά                                                             | Magyar                                                                      | Italiano                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  Legal manufacturer                                                       | Autoriseret producent                                        | Wettelijke fabrikant                                | Laillinen valmistaja                            | Fabricant légal                                                       | Juristischer Hersteller                                                                  | Νόμιμος κατασκευαστής                                                | Hivatalos gyártó                                                            | Produttore legale                                                         |
|  Do not use if package is damaged                                        | Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget                    | Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is      | Älä käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut        | Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé                          | Nicht verwenden, falls Packung beschädigt ist                                            | Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά                | Ne alkalmazza az eszközöt, ha a csomagolás sérült.                          | Non utilizzare se la confezione è danneggiata                             |
|  Do not reuse                                                            | Må ikke genbruges                                            | Niet opnieuw gebruiken                              | Älä käyttää uudelleen                           | Ne pas réutiliser                                                     | Nicht wiederverwenden                                                                    | Μην επαναχρησιμοποιήσετε                                             | Ne használja újból.                                                         | Non riutilizzare                                                          |
|  Do not resterilize                                                      | Må ikke resteriliseres                                       | Niet opnieuw steriliseren                           | Älä steriloi uudelleen                          | Ne pas résteriliser                                                   | Nicht erneut sterilisieren                                                               | Μην επανααστεριώσετε                                                 | Ne fertőtlenítsen újbóli használatához.                                     | Non risterilizzare                                                        |
|  Caution, consult accompanying documents                                 | Forsigtig, se de medfølgende dokumenter                      | Let op, zie bijgevoegde documentatie                | Varoitus, katso mukana toimitetut asiakirjat    | Avertissement, consulter la documentation d'accompagnement            | Vorsicht, beiliegende Dokumente beachten                                                 | Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα                       | Figyelem, olvassa el a mellékelt dokumentumokat                             | Attenzione, consultare la documentazione di accompagnamento               |
|  Use by                                                                  | Anvendes inden                                               | Uiterste gebruiksdatum                              | Viimeinen käyttöpäivä                           | Expiration                                                            | Verwenden bis                                                                            | Χρήση από                                                            | Lejárat                                                                     | Utilizzare entro                                                          |
|  Keep dry                                                                | Opbevares tørt                                               | Droog bewaren                                       | Pidä kuivana                                    | À conserver au sec                                                    | Vor Nässe schützen                                                                       | Διατηρήστε το στεγνό                                                 | Száraz helyen tárolja                                                       | Conservare in luogo asciutto                                              |
|  Keep away from sunlight                                                 | Undgå direkte sol                                            | Niet aan zonlicht blootstellen                      | Pidä poissa auringonvalosta                     | À conserver à l'abri de la lumière                                    | Vor Sonneneinstrahlung schützen                                                          | Κρατήστε το μακριά από το φως του ήλιου                              | Tartsa távol napfénytől                                                     | Tenere lontano dai raggi solari                                           |
|  Authorized Representative in the European Community                     | Autoriseret representant i EU                                | Erkend vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap | Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisön alueella | Représentant habilité dans la Communauté européenne                   | Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft                                        | Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα               | Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségekben                           | Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea                         |
|  LOT number                                                              | Lotnummer                                                    | Partijnummer                                        | Eränumero                                       | Numéro de LOT                                                         | Losnummer                                                                                | Αριθμός παρτίδας                                                     | Helyrajzi szám                                                              | Numero di LOTTO                                                           |
|  Catalogue number                                                        | Katalognummer                                                | Catalogusnummer                                     | Tuotenumero                                     | Numéro de référence                                                   | Katalognummer                                                                            | Αριθμός καταλόγου                                                    | Katalógusszám                                                               | Numero di catalogo                                                        |
|  Sterilized using ethylene oxide                                         | Steriliseret med ethylenoxid                                 | Gesteriliseerd met ethylenoxide                     | Steriloitu etyleenioksidilla                    | Stérilisé à l'oxyde d'éthylène                                        | Mit Ethylenoxid sterilisiert                                                             | Αποστειρώνεται με χρήση οξειδίου του αιθυλενίου                      | Etílen-oxidálal fertőtlenítve                                               | Sterilizzato mediante ossido di etilene                                   |
|  Unit                                                                    | Produkt                                                      | Eenheid                                             | Määrä                                           | Unité                                                                 | Einheit                                                                                  | Μονάδα                                                               | Egység                                                                      | Unità                                                                     |
|  Consult instructions for use or consult electronic instructions for use | Se brugsanvisningen eller se den elektroniske brugsanvisning | Zie de (elektronische) gebruiksaanwijzing           | Katso käyttöohjeet tai sähköiset käyttöohjeet   | Consulter le mode d'emploi ou le mode d'emploi en format électronique | Bitte die beiliegende Gebrauchsanweisung oder die elektronische Gebrauchsanweisung lesen | Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης ή τις ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης. | Olvassa el a használati útmutatót vagy az elektronikus használati útmutatót | Consultare le istruzioni per l'uso o le istruzioni per l'uso elettroniche |
|  Straight                                                                | Lige                                                         | Recht                                               | Suora                                           | Droit                                                                 | Gerade                                                                                   | Τσιο                                                                 | Egyenes                                                                     | Dritto                                                                    |
|  J-shaped                                                                | J-formet                                                     | J-vorm                                              | J:n muotoinen                                   | En forme de J                                                         | J-förmig                                                                                 | Αγκιστροειδές                                                        | J-alakú                                                                     | Sagomato a J                                                              |
|  J-shaped                                                                | J-formet                                                     | J-vorm                                              | J:n muotoinen                                   | En forme de J                                                         | J-förmig                                                                                 | Αγκιστροειδές                                                        | J-alakú                                                                     | Sagomato a J                                                              |
|  Medical device                                                          | Medicinsk udstyr                                             | Medisch instrument                                  | Lääkinnällinen laite                            | Dispositif médical                                                    | Medizingerät                                                                             | Ιατρική συσκευή                                                      | Orvostechikai eszköz                                                        | Dispositivo medico                                                        |
|  Single sterile barrier system                                          | Enkelt sterilt barriersystem                                 | Enkelvoudig steriel barriersysteem                  | Yksinkertainen steriili estejärjestelmä         | Système de barrière stérile unique                                    | Individuelles Sterilbarriersystem                                                        | Ενιαίο σύστημα αποστειρωμένου φραγμού                                | Egyszeres steril gátrendszer                                                | Sistema a barriera sterile singola                                        |
|  Contains hazardous substances                                         | Indeholder farlige stoffer                                   | Bevat gevaarlijke stoffen                           | Sisältää haitallisia aineita                    | Contient des substances dangereuses                                   | Enthält gefährliche Inhaltsstoffe                                                        | Περιέχει επικίνδυνες ουσίες                                          | Veszélyes anyagot tartalmaz                                                 | Contiene sostanze pericolose                                              |
|  Importer                                                              | Importør                                                     | Importeur                                           | Maahantuoja                                     | Importateur                                                           | Importeur                                                                                | Εισαγωγέας                                                           | Importőr                                                                    | Importatore                                                               |

|                                                                                    | Polski                                                                                  | Português                                                                                | Español                                                              | Svenska                                              | Česky                                                                     | Norsk                                                            | Slovenský                                                            | Eesti keel                                                | Latviešu                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     | Legalny producent                                                                       | Fabricante legal                                                                         | Fabricante legal                                                     | Juridisk tillverkare                                 | Výrobce                                                                   | Produsent                                                        | Legálny výrobca                                                      | Juridiline tootja                                         | Likumīgs ražotājs                                                       |
|    | Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone                                          | Não utilizar se a embalagem estiver danificada                                           | No lo utilice si el envase está dañado                               | Använd inte om förpackningen är skadad               | V případě, že je obal poškozený, výrobek nepoužívejte                     | Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet                        | Nepoužívajte, ak je poškodený obal.                                  | Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud                 | Nelietojiet, ja iepakojums ir bojāts                                    |
|    | Nie używać ponownie                                                                     | Não reutilizar                                                                           | No lo reutilice                                                      | Får inte återanvändas                                | Nepoužívejte opakovaně                                                    | Må ikke gjenbrukes                                               | Nepoužívajte opakovane.                                              | Mitte korduvalt kasutada                                  | Nelietojiet atkārtoti                                                   |
|    | Nie sterylizować ponownie                                                               | Não reesterilizar                                                                        | No lo reesterilice                                                   | Får inte omsteriliseras                              | Nesterilizujte opakovaně                                                  | Må ikke resteriliseres                                           | Znovu nesterilizujte.                                                | Mitte uuesti steriliseerida                               | Nesterilizējiet atkārtoti                                               |
|    | Uwaga, zapoznać się z dołączonymi dokumentami                                           | Cuidado, consulte os documentos anexos                                                   | Precaución, consulte los documentos que se incluyen                  | Varning, läs medföljande dokument                    | Upozornění – přečtěte si přívodní dokumentaci                             | Forsiktig, se vedlagte dokumenter                                | Upozornenie, pozrite si spríevodné dokumenty.                        | Ettevaatust! Lugege seadmega kaasasolevaid juhendeid.     | Ievērojiet piesardzību, skatiet komplektācijā iekļauto dokumentāciju    |
|    | Data ważności                                                                           | Utilizar até                                                                             | Fecha de caducidad                                                   | Använd före                                          | Spotřebujte do                                                            | Brukes innen                                                     | Dátum expirácie                                                      | Aegumiskupaäev                                            | Izmantot līdz                                                           |
|    | Chronić przed wilgocią                                                                  | Manter seco                                                                              | Manténgalo seco                                                      | Förvaras torrt                                       | Uchovávejte v suchu                                                       | Må oppbevares tørt                                               | Udržiavajte v suchu.                                                 | Hoida kuivas                                              | Uzturiet sausu                                                          |
|    | Chronić przed światłem słonecznym                                                       | Manter distante da luz do sol                                                            | Manténgalo alejado de la luz del sol                                 | Håll undan från solljus                              | Chraňte před slunečním světlem                                            | Må ikke oppbevares i sollys                                      | Nevystavujte slnečnému svetu.                                        | Hoida eemal päikesevalgusest                              | Sargāt no saules gaismas                                                |
|    | Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej                                  | Representante autorizado na Comunidade Europeia                                          | Representante autorizado en la Comunidad Europea                     | Auktoriserad representant i EU                       | Autorizovaný zástupce pro Evropskou unii                                  | Autorisert representant i Det Europeiske Fellesskapet            | Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve                       | Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses                      | Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā                                  |
|    | Numer partii                                                                            | Número de LOTE                                                                           | Número del lote                                                      | LOT-nummer                                           | Číslo šarže                                                               | Parti/Batchnummer                                                | Číslo šarže                                                          | Partii number                                             | Partijas numurs                                                         |
|    | Numer katalogowy                                                                        | Número de catálogo                                                                       | Número del catálogo                                                  | Katalognummer                                        | Katalogové číslo                                                          | Katalognummer                                                    | Katalógové číslo                                                     | Kataloogi number                                          | Kataloga numurs                                                         |
|    | Sterylny z tylenkiem                                                                    | Esterilizado com óxido de etileno                                                        | Esterilizado con óxido de etileno                                    | Steriliserad med etylenoxid                          | Sterilizováno pomocí ethylenoxidu                                         | Sterilisert med etylenoksid                                      | Sterilizované pomocou etylénoxidu.                                   | Steriliseeritud etüleenoksiidiga                          | Sterilizēts, izmantot etilēnoksīdu                                      |
|    | Jednostka                                                                               | Unidade                                                                                  | Unidad                                                               | Enhet                                                | Jednotka                                                                  | Enhet                                                            | Jednotka                                                             | Üksus                                                     | Vienība                                                                 |
|    | Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania lub z elektroniczną instrukcją użytkowania | Consulte as instruções de utilização ou consulte as instruções de utilização eletrônicas | Consulte las instrucciones de uso en papel o en formato electrónico. | Se bruksanvisningen eller elektronisk bruksanvisning | Přečtěte si návod k použití nebo si přečtěte elektronický návod k použití | Se bruksanvisningen eller se elektroniske instruksjoner for bruk | Prečítajte si návod na použitie alebo elektronický návod na použitie | Lugege kasutusjuhendit või elektroonilist kasutusjuhendit | Skatiet lietošanas norādījumus vai elektroniskos lietošanas norādījumus |
|    | Prosty                                                                                  | Reto                                                                                     | Recto                                                                | Rak                                                  | Rovný                                                                     | Rett                                                             | Rovný                                                                | Sirge                                                     | Taisns                                                                  |
|    | W kształcie litery J                                                                    | Em forma de J                                                                            | En forma de J                                                        | J-formad                                             | Ve tvaru J                                                                | J-format                                                         | V tvare J                                                            | J-kujuline                                                | J-veida                                                                 |
|    | W kształcie litery J                                                                    | Em forma de J                                                                            | En forma de J                                                        | J-formad                                             | Ve tvaru J                                                                | J-format                                                         | V tvare J                                                            | J-kujuline                                                | J-veida                                                                 |
|    | Wyrób medyczny                                                                          | Dispositivo médico                                                                       | Dispositivo médico                                                   | Medicinteknisk produkt                               | Zdravotnický prostředek                                                   | Medisinsk enhet                                                  | Zdravotnícka pomôcka                                                 | Meditsiimiseade                                           | Medicīnas ierīce                                                        |
|   | System pojedynczej sterylnej bariery                                                    | Sistema de barreira estéril único                                                        | Sistema de barrera estéril único                                     | Enkelt sterilt barriärsystem                         | Jednoduchý sterilní bariérový systém                                      | Enkelt sterilt barrieresystem                                    | Systém jednej sterilnej bariéry                                      | Ühekordne steriilse barjääri süsteem                      | Vienas sterilās barjeras sistēma                                        |
|  | Zawiera substancje niebezpieczne                                                        | Contém substâncias perigosas                                                             | Contiene sustancias peligrosas                                       | Innehåller farliga ämnen                             | Obsahuje nebezpečné látky                                                 | Inneholder farlige stoffer                                       | Obsahuje nebezpečné látky                                            | Sisaldab ohtlikke aineid                                  | Satur bīstamas vielas                                                   |
|  | Importer                                                                                | Importador                                                                               | Importador                                                           | Importör                                             | Dovozce                                                                   | Importør                                                         | Dovozca                                                              | Importija                                                 | Importētājs                                                             |

|                                                                                    | Lietuvių kalba                                                   | Türkçe                                                                    | Русский                                                                                           | Български                                                                                 | Hrvatski                                                                 | Română                                                                                              | Slovenščina                                                       | Malti                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Teisėtas gamintojas                                              | Yasal üretici                                                             | Официальный производитель                                                                         | Легален производител                                                                      | Proizvodač                                                               | Producător legal                                                                                    | Legalni proizvajalec                                              | Manifattur legali                                                                             |
|    | Jeigu pažeista pakuotė, naudoti negalima                         | Ambalajı hasar görmüşse ürünü kullanmayın                                 | Не использовать, если упаковка повреждена                                                         | Не използвайте, ако опаковката е повредена                                                | Nemojte koristiti ako je pakiranje oštećeno                              | A nu se folosi dacă ambalajul este deteriorat                                                       | Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana                       | Tużax jekk hemm hsara fil-pakkett                                                             |
|    | Nenaudoti pakartotinai                                           | Tekrar kullanmayın                                                        | Повторное использование запрещено                                                                 | Да не се използва повторно                                                                | Nemojte ponovno koristiti                                                | A nu se refolosi                                                                                    | Ne uporabljajte ponovno                                           | Tużax iktar minn darba                                                                        |
|    | Nesterilizuoti pakartotinai                                      | Tekrar sterilize etmeyin                                                  | Повторная стерилизация запрещена                                                                  | Да не се стерилизира повторно                                                             | Nemojte ponovo sterilizirati                                             | A nu se resteriliza                                                                                 | Ne sterilizirajte ponovno                                         | Tisterilizax mill-ġdid                                                                        |
|    | Dėmesio, žr. kartu pateikiamus dokumentus                        | Dikkat, birlikte gelen belgelere bakın                                    | Внимание! См. сопроводительные документы                                                          | Внимание, консултирайте се с придружаващите документи                                     | Oprez, pogledati prateće dokumente                                       | Atenție, a se consulta documentele de însoțire                                                      | Pozor, glejte spremne dokumente                                   | Attenzjoni, ikkonsulta d-dokumenti ta' akkumpanjament                                         |
|    | Tinka iki                                                        | Son kullanma tarihi                                                       | Срок годности                                                                                     | Използвайте до                                                                            | Upotrijebiti do                                                          | A se utiliza de către                                                                               | Uporabno do                                                       | Uża sa                                                                                        |
|    | Laikyti sausai                                                   | Kuru tutun                                                                | Не допускать попадания влаги                                                                      | Пазете сухо                                                                               | Čuvati na suhom                                                          | A se păstra uscat                                                                                   | Hraniti na suhem                                                  | Żomx niexef                                                                                   |
|    | Saugoti nuo saulės šviesos                                       | Güneş ışığından uzak tutun                                                | Не допускать попадания солнечного света                                                           | Пазете от слънчева светлина                                                               | Čuvati dalje od sunčevog svjetla                                         | A se păstra departe de lumina soarelui                                                              | Hranite stran od sončne svetlobe                                  | Żomx 'il boghod mid-dawl tax-xemx                                                             |
|    | Igaliotasis atstovas Europos Bendrijoje                          | Avrupa Topluluğu'nda Yetkili Temsilci                                     | Уполномоченный представитель в Европейском сообществе                                             | Оторизиран представител в Европейската общност                                            | Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici                              | Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană                                                     | Pooblaščenči zastopnik v Evropski skupnosti                       | Rappreżentant Awtorizzat fl-Unjoni Ewropea                                                    |
|    | Serijos numeris                                                  | LOT numarası                                                              | Номер партии                                                                                      | Партиден номер                                                                            | LOT broj                                                                 | Număr LOT                                                                                           | LOT številka                                                      | Numru tal-LOTT                                                                                |
|    | Katalogo numeris                                                 | Katalog numarası                                                          | Номер по каталогу                                                                                 | Каталожен номер                                                                           | Kataloški broj                                                           | Număr de catalog                                                                                    | Kataloška številka                                                | Numru tal-katalogu                                                                            |
|    | Sterilizuota etileno oksidu                                      | Etilen oksitle sterilize edilmiştir                                       | Стерилизовано этиленоксидом                                                                       | Стерилизиран чрез этиленов оксид                                                          | Sterilizirano etilen oksidom                                             | S-a sterilizat folosind oxid de etilenă                                                             | Sterilizirano z etilen oksidom                                    | Sterilizat bl-ossidu tal-etilen                                                               |
|    | Elementas                                                        | Birim                                                                     | Упаковка                                                                                          | Изделие                                                                                   | Jedinica pakiranja                                                       | Unitate                                                                                             | Enota                                                             | Unità                                                                                         |
|    | Žr. naudojimo instrukcija arba elektroninę naudojimo instrukciją | Kullanım talimatlarına bakın veya elektronik kullanım talimatlarına bakın | Ознакомьтесь с инструкцией по применению или ознакомьтесь с электронной инструкцией по применению | Консултирайте се с инструкциите за употреба или вижте електронните инструкции за употреба | Pogledajte upute za uporabu ili pogledajte elektroničke upute za uporabu | A se consulta instrucțiunile de utilizare sau a se consulta instrucțiunile electronice de utilizare | Preberite navodila za uporabo ali elektronska navodila za uporabo | Ikkonsulta l-istruzzjonijiet għall-użu jew ikkonsulta l-istruzzjonijiet elettronici għall-użu |
|    | Tiesi                                                            | Düz                                                                       | Прямой                                                                                            | Направо                                                                                   | Ravno                                                                    | Drept                                                                                               | Ravna                                                             | Dritt                                                                                         |
|    | J raidės formos                                                  | J şeklinde                                                                | J-образный                                                                                        | J-образна форма                                                                           | U obliku slova J                                                         | Preformat în formă de J                                                                             | V obliki črke J                                                   | Fil-forma ta' J                                                                               |
|    | J raidės formos                                                  | J şeklinde                                                                | J-образный                                                                                        | J-образна форма                                                                           | U obliku slova J                                                         | Preformat în formă de J                                                                             | V obliki črke J                                                   | Fil-forma ta' J                                                                               |
|    | Medicinos priemonė                                               | Tibbi cihaz                                                               | Медицинское изделие                                                                               | Медицинско изделие                                                                        | Medicinski proizvod                                                      | Dispozitiv medical                                                                                  | Medicinski pripomoček                                             | Apparat mediku                                                                                |
|    | Vientis sterilus barjero sistema                                 | Tekli steril bariyer sistemi                                              | Однариная стерильная барьерная система                                                            | Система с единична стерилна бариерна                                                      | Sustav jednostruke sterilne barijere                                     | Sistem unic de bariere sterile                                                                      | Enojni sterilni sistem pregrad                                    | Sistema ta' barriera sterili unika                                                            |
|   | Sudėtyje yra pavojingų medžiagų                                  | Tehlikeli maddeler içerir                                                 | Содержит опасные вещества                                                                         | Съдържа опасни вещества                                                                   | Sadrži opasne tvari                                                      | Conține substanțe periculoase                                                                       | Vsebuje nevarne snovi                                             | Fih sustanzi perikolużi                                                                       |
|  | Importuotojas                                                    | İthalatçı                                                                 | Импортер                                                                                          | Вносител                                                                                  | Uvoznik                                                                  | Importator                                                                                          | Uvoznik                                                           | Importatur                                                                                    |

## ASAHI Miracle / MIRACLEbros series

### Grand Slam

#### PCI Guide Wire

#### INSTRUCTIONS FOR USE

Read these instructions carefully before using this guide wire and observe the Indications for Use, Contraindications, Warnings, Precautions, and How to Use sections in this Instructions for Use.

**Failure to do so may result in complications, including serious injury to the patient or death.**

If a user and/or a patient comes to know a serious incident that has occurred in relation to the guide wire, report the fact to the manufacturer and the competent authority of the Member State.

These Instructions for Use apply to the ASAHI Miracle, MIRACLEbros series and Grand Slam. For details (length of the guide wire, length of radiopaque section, etc.), refer to the product label.

### Descriptions

The basic structure of this guide wire consists of a taper core wire and coil. The taper core wire and the coil are soldered. The length of the coil is radiopaque so that its position can be easily confirmed under radioscapy.

The distal surface is coated with hydrophobic (silicone) coating, and the proximal surface is coated with PTFE (polytetrafluoroethylene). At the proximal end of the devices other than those with total lengths of 300cm, there is a connection for an extension wire, which is used to replace the combined device, and ASAHI INTECC's Extension Wire can be connected.

Refer to the table below for the tip load\* of this product.

Table 1. Product Specifications

| Product Name                     | Outer Diameter     | Tip Load* |
|----------------------------------|--------------------|-----------|
| ASAHI Miracle 3/ MIRACLEbros 3   | 0.36mm (0.014inch) | 3.0gf     |
| ASAHI Miracle 6/ MIRACLEbros 6   | 0.36mm (0.014inch) | 6.0gf     |
| ASAHI Miracle 12/ MIRACLEbros 12 | 0.36mm (0.014inch) | 12.0gf    |
| Grand Slam                       | 0.36mm (0.014inch) | 0.7gf     |

\*Tip load values represent the mean values of product specification values measured according to the internal standard testing method assuming the force applied to the lesion by the guide wire tip.

### Indications for Use

This guide wire is intended for general percutaneous coronary intervention (PCI). This guide wire is intended to facilitate the placement of balloon dilatation catheters or other interventional therapeutic devices within cardiovascularature.

**This guide wire is not intended for use in the neurovasculature and peripheral vasculature.**

### Target Treated Population

ASAHI Miracle, MIRACLEbros series and Grand Slam are intended for patients who meet indications for PCI procedures. It is not indicated for use on neonates, infants, or children as well as patients who are pregnant, have impaired renal function, or who have an allergic reaction to contrast media.

### Contraindications

- Confirm the compatibility of guide wire diameter with other interventional device before actual use.
- Do not use the guide wire in patients who have an allergic reaction to contrast media or who have impaired renal function.
- Do not use the guide wire for pregnant patients or patients who may be pregnant (X-ray may affect the fetus).
- This guide wire must be used in an institution where emergency surgical operation can be

performed immediately. If an emergency surgical operation is unavailable, in the worst case, life-threatening events may occur.

- This guide wire is presterilized with ethylene oxide gas (EOG) and is intended for single use only. Do not reuse or resterilize. If reused or resterilized, the performance or quality of this guide wire and package may be compromised and there is a risk of complications, including infection.

### Warnings

- This guide wire must be used only by a physician who is fully trained in PCI treatment.
- Never use this guide wire in combination with catheters having metal parts that may directly contact the surface of this guide wire (e.g. atherectomy catheters, metal dilators), metal needles or metal sheath inserters.
- During use of the guide wire, check and monitor the movement of its tip under fluoroscopy. Do

not use in areas of vessel that are not or cannot be visualized.

- Do not connect this guide wire with detachable extension wires produced by manufacturers other than ASAHI INTECC. Do not manipulate this guide wire while the detachable extension wire is connected. Otherwise, the guide wire may be damaged, or the detachable extension wire may be unintentionally detached.
- Do not modify this guide wire for any reason.

### Precautions

- Do not use the guide wire after the expiration date indicated on the label. Discard any guide wire that exceeds the expiration date.
- Guide wires are delicate instruments and should be handled carefully.
- If the package is opened or damaged, do not use the guide wire. Do not open the package until just prior to use. Use aseptic technique in handling and using the guide wire.
- Do not wipe this guide wire using an organic solution such as alcohol.
- Take preventive measures against infection after use. Discard this guide wire and package as medical waste.
- Never push, auger, withdraw, or torque this guide wire that meets resistance. Torquing or pushing this guide wire against resistance may cause damage and/or tip separation of this guide wire or

direct damage to a vessel. Failure to do so may cause damage to this guide wire. Determine the cause of resistance under fluoroscopy and take any necessary remedial action.

- Always advance or withdraw the guidewires slowly and carefully.
- When torquing this guide wire inside the blood vessel, do not torque continuously in the same direction. When torquing the guide wire, rotate it clockwise and counterclockwise alternately. Do not rotate more than two rotations (720°) in the same direction.
- Flush the guide wire with heparinized and sterilized saline or other suitable solution while removing and reinserting it to prevent air from entering the interventional device. Perform exchange of this guide wire carefully to prevent air entry and/or trauma. When reintroducing the

guide wire, confirm that the interventional device tip is free within the vessel lumen and is not against the vessel wall. Failure to do so may result in trauma. Use the radiopaque marker of the interventional device to confirm position.

- Free movement of the guide wire within the interventional device is an important feature of a steerable guide wire system because it gives the user valuable tactile information. Test the system for any resistance prior to use. Adjust or replace the hemostasis valve with an adjustable valve if it is found to inhibit the guide wire movement.
- Do not perform stent placement using more than one guide wire or wire operation through stent strut. Otherwise, the stent may be damaged or the guide wire may break or break apart.
- Before use, confirm that this guide wire is appropriate in size and shape for the procedure and is compatible with the device to be used in combination.
- Refer to the Instruction for Use attached to the medical device (e.g. balloon dilatation catheters or other interventional therapeutic devices) to be used in combination with this guide wire.

- When connecting the detachable extension wire with this guide wire, it should be securely inserted to the boundary line between non PTFE coating and PTFE coating at the proximal end of the guide wire. If any abnormality is found in the connection, stop using the guide wire immediately.
- Inspect the guide wire carefully for bends, kinks, or other damage prior to use and whenever possible during the procedure. Do not use the guide wire if it is damaged.
- When shaping the tip, be careful not to damage the coil.
- Before inserting the guide wire, check which end is the distal end and make sure to insert it from the distal end.
- Maintain a continuous saline flush between the guiding catheter and the interventional device and the guide wire during the procedure. Flushing prevents contrast media formation and/or clotting on the guide wire and in the catheter lumen.

- Select the most suitable guide wire for the affected area and remove the holder tube containing the guide wire from the sterile pack.
- Fill up the holder tube with heparinized and sterilized saline using a syringe to soak the entire device. Take note that heparinized and sterilized saline may spill out of the holder

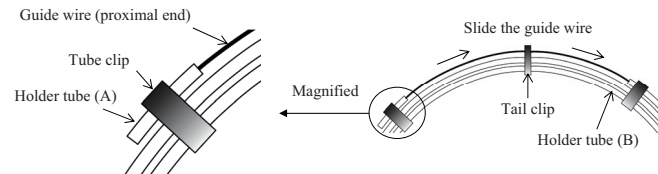


Figure 1

- When the distal end of the guide wire is extended 5 to 6 cm beyond the other end of the holder tube, if necessary, shape the tip in accordance with standard practice.
- Gently grasp the guide wire which came out from the distal end of the holder tube, at the point as close to the holder tube as possible and pull the guide wire out slowly and carefully.
- If resistance is felt when removing the guide wire from the holder tube, inject heparinized and sterilized saline into the holder tube again. Continue removing the guide wire after the resistance is not felt anymore. Be sure to inject enough heparinized and sterilized saline to the holder tube because it may be damaged when removing the guide wire forcefully.
- After pulling the guide wire out of the holder tube, inspect it to make sure that it is not damaged.

### 3. Procedures for insertion

#### ■ Over-the-wire system

- Insert the distal end of the guide wire carefully into the guide wire lumen of the interventional device.
- Advance this guide wire carefully until its tip is just proximal to the interventional device tip.
- Engage the guiding catheter and insert the interventional device system (with guide wire) into the Y connector.

- Slide the guide wire
- Fill the lumen of the interventional device with the heparinized and sterilized saline before inserting the guide wire.
- Release the guide wire from the tail clip and slide the guide wire slowly, push distal end of the guide wire through the holder tube(B).(Figure 1)

- Advance the interventional device system through the guiding catheter until the tip of the guide wire system is just proximal to the tip of the guiding catheter.
- Tighten the hemostasis valve of Yd connector to create a seal around the interventional device. Ensure the guide wire movement is still permitted.
- Check to make sure the guide wire moves smoothly.
- Attach the torque device to the guide wire if necessary.
- Advance this guide wire under fluoroscopy to pass through the lesion. Confirm by angiography that the guide wire has passed the narrowed target lesion.
- Observe the guide wire movement in the vessels.
- Advance the interventional device until the lesion is reached while preventing the guide wire from moving. Ensure that guide wire distal tip and its location in the vessel are visible during interventional device manipulations.

#### ■ Rapid exchange system

- Engage the guiding catheter.
- Insert the guide wire introducer into the Y connector of the guiding catheter.
- Carefully insert the guide wire tip into the introducer.
- Advance the guide wire through the guiding

## Malfunctions and Adverse Events

Possible malfunctions and adverse events through usage of this guide wire include, but are not limited to the following:

### 1. Malfunctions

|                           |                                       |                                  |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Failure to cross a lesion | Breakage or bending of the guide wire | Damage such as separation        |
| Difficulty in removal     | Coming off of coating                 | Debris from a damaged guide wire |

### 2. Adverse events

|                          |                        |                    |
|--------------------------|------------------------|--------------------|
| Death                    | Infection              | Vessel dissection  |
| Vessel perforation       | Bleeding complications | Embolism           |
| Thrombus                 | Infarction             | Ischemia           |
| Arrhythmia               | Vasospasm              | Vascular occlusion |
| Blood pressure reduction | Allergic reaction      |                    |

## How to Use

### 1. Inspection prior to use

- Before use, inspect carefully and confirm the guide wire and package are undamaged.
- Before use, confirm that the guide wire is

compatible with the interventional devices to be used.

### 2. Preparation

catheter under fluoroscopy until the guide wire tip is just proximal to the tip of the guiding catheter.

- e) Attach the torque device to the guide wire if necessary.
- f) Advance the guide wire under fluoroscopy to pass through the lesion. Confirm by angiography that the guide wire has passed the narrowed target lesion.
- g) Observe the guide wire movement in the vessels.
- h) Remove the guide wire torque device and the guide wire introducer.
- i) Track the interventional device over the

guide wire while preventing the guide wire from moving, and advance until the lesion is reached. Ensure that the guide wire distal tip and its location in the vessel are visible during interventional device manipulations.

#### 4. Procedures to exchange the guide wire

##### ■ Over-the-wire system

- a) Remove this guide wire slowly while monitoring the movement of this guide wire under fluoroscopy.
- b) Insert the next guide wire in accordance with the directions in this “How to Use” section.

### Storage Method

Do not keep the guide wire and package in a bent and/or heavily-loaded condition. This guide wire and package must be kept out of water. Store in a cool, dark, and dry place.

### Expiration Date

The expiration date is indicated on the label of the guide wire package.

### Contents

5 pieces / box

### Liability Disclaimer

By no means shall “ASAHI INTECC CO., LTD. and its affiliated companies” (hereinafter referred to as the “Company”) be liable for accidents, personal injuries, adverse events due to any improper use of the product(s) or any other use inconsistent with these instructions. In no event shall the Company be liable for any damages either (i) arising out of storage of the product(s) after the shipment from the Company or (ii) due to selection of patients, surgery techniques, or any other medical activities by the medical institution that uses the product(s).

“ASAHI Miracle”, “MIRACLEbros”, “Grand Slam” and “EXTENSION” are trademarks or registered trademarks of ASAHI INTECC CO., LTD. in Japan and other countries.

ASAHI Miracle/MIRACLEbros-serien  
Grand Slam  
PCI-guidewire  
Brugsanvisning

Læs omhyggeligt disse anvisninger for brug af denne guidewire, og overhold indikationer for brug, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler og afsnittet "Anbefalet procedure" i denne brugsanvisning. Hvis dette undlades, kan det medføre komplikationer, herunder alvorlig kvæstelse af patienten eller dødsfald.

Når en bruger og/eller en patient bliver bekendt med en alvorlig hændelse, der er sket på grund af guidewiren, skal dette indberettes til producenten og myndighederne i det pågældende medlemsland.

Denne brugsanvisning gælder for ASAHI Miracle, MIRACLEbros-serien og Grand Slam. Nærmere specifikationer (længden af guidewiren, længden af den røntgenfaste del mv.) fremgår af mærkaten på produktpakken.

Beskrivelser

Guidewirens grundstruktur består af en konisk kernetråd og en spole. Den koniske kernetråd og spolen er loddet. Længden af spolen er røntgentæt, så det er let at bekræfte dens position under radioskopi. Den distale overflade er belagt med en hydrofil belægning (silikone), og den proksimale overflade er belagt med PTFE (polytetrafluorethylen). I den proksimale ende af enheder, der ikke har en samlet længde på 300 cm, er der en forlængerledningstilslutning, som anvendes til at erstatte den samlede enhed, og ASAHI INTECCs forlængerledning kan tilsluttes.

Se nedenstående tabel for spidsbelastningen\* for dette produkt.

Tabel 1. Produktets specifikationer

| Produktnavn                     | Udvendige diameter     | Spidsbelastning* |
|---------------------------------|------------------------|------------------|
| ASAHI Miracle 3/MIRACLEbros 3   | 0,36 mm (0,014 tommer) | 3,0 gf           |
| ASAHI Miracle 6/MIRACLEbros 6   | 0,36 mm (0,014 tommer) | 6,0 gf           |
| ASAHI Miracle 12/MIRACLEbros 12 | 0,36 mm (0,014 tommer) | 12,0 gf          |
| Grand Slam                      | 0,36 mm (0,014 tommer) | 0,7 gf           |

\*Spidsbelastningsværdier repræsenterer middelværdierne af produktspecifikationsværdier målt i henhold til den interne standardtestmetode, hvor der tages udgangspunkt i den kraft, som guidewirespidsen påfører læsionen.

Indikationer for brug

Denne guidewire er beregnet til generel perkutan koronar intervention (PCI). Denne guidewire er beregnet til at lette placeringen af kateter til ballonudvidelse eller andet interventionelt terapeutisk udstyr inden for kardiiovaskulatur.

Denne guidewire er ikke beregnet til brug i neurovaskulær og den perifere vaskulær.

Målpopulation

ASAHI Miracle, MIRACLEbros-serien og Grand Slam er beregnet til patienter, der opfylder indikationerne for PCI-procedurer. Den er ikke indiceret til brug hos nyfødte, spædbørn og børn samt patienter, der er gravide, har nedsat nyrefunktion eller er allergiske over for kontrastmidler.

Kontraindikationer

- Bekræft, at diameteren af guidewiren er kompatibel med andet interventionelt udstyr, før den anvendes.
- Guidewiren må ikke anvendes hos patienter, der er allergiske over for kontrastmidler eller har nedsat nyrefunktion.
- Brug ikke guidewiren til gravide patienter eller patienter, der kan være gravide (røntgenstråler kan påvirke fosteret).
- Guidewiren skal bruges på institutioner, hvor det er muligt øjeblikkeligt at udføre akutte kirurgiske indgreb. Hvis det ikke er muligt at udføre akutte kirurgiske indgreb, kan der i værste fald forekomme livstruende situationer.
- Guidewiren er præsteriliseret med ethylenoxidgas (EOG) og er udelukkende beregnet til engangsbrug. Må ikke genbruges eller resteriliseres. Genbrug eller resterilisering af guidetråden kan have en negativ indvirkning på guidetråden og emballagen og dermed vil være risiko for komplikationer, herunder infektioner.

Advarsler

- Guidewiren må kun bruges af en læge, der er fuldt uddannet i PCI-behandling.
- Brug aldrig denne guidewire i kombination med kateter med metaldele, der kan berøre overfladen af denne guidewire direkte (f.eks. kateter til atherektomi, dilatorer af metal), metalnåle eller indsætter af metalskeder.
- Under brug af guidewiren skal spidsens bevægelse kontrolleres og overvåges under fluoroskopi. Må ikke anvendes i dele af kar, der ikke er iagttaget eller iagttages.
- Guidewiren må ikke sammenkøbes med aftagelige forlænger-wirer, der er fremstillet af andre producenter end ASAHI INTECC. Guidewiren må ikke manipuleres, mens den aftagelige forlænger-wire er koblet til. I modsat fald kan guidewiren blive beskadiget, eller den aftagelige forlænger-wire kan løsnest utilisget.
- Guidewiren må ikke ændres uanset grunden.

Forholdsregler

- Guidewiren må ikke anvendes efter udløbsdatoen på mærkaten. Kassér alle guidewirer, der har overskredet udløbsdatoen.
- Guidewirer er skrøbelige instrumenter, der skal behandles forsigtigt.
- Guidewiren må ikke anvendes, hvis emballagen har været åbnet eller er beskadiget. Emballagen må først åbnes lige inden brug. Guidewiren skal håndteres og anvendes aseptisk.
- Undlad at aførre guidewiren med en organisk opløsning, som f.eks. sprit.
- Træf forebyggende foranstaltninger mod infektion efter anvendelse. Kassér guidewiren og emballagen som medicinsk affald.
- Guidewiren må aldrig skubbes, drejes, trækkes ud eller vrides rundt, hvis der mærkes modstand. Hvis guidewiren vrides rundt eller skubbes til på trods af modstand, kan det beskadige spidsen af guidewiren, og/eller få spidsen til at gå af, eller det kan direkte medføre skade på karret. Hvis du ikke gør det, kan det beskadige denne guidewire. Find årsagen til modstanden under gennemlysning, og træf de nødvendige afhjælpende foranstaltninger.
- Før eller træk altid guidewiren langsomt og forsigtigt frem eller tilbage.
- Når guidewiren vrides rundt inde i blodkarret, må den ikke konstant vrides i samme retning. Guidewiren skal skiftevis vrides med og mod uret. Guidewiren må ikke drejes mere end to gange (op til 720°) rundt i samme retning.
- Skyl guidewiren med hepariniseret og steriliseret saltvandsopløsning eller anden velegnet opløsning, samtidig med at den tages ud og føres ind igen for at hindre luft i at komme ind i interventionsudstyret. Udvis forsigtighed under udskiftning af guidewiren, så der ikke kommer luft ind og/eller forårsages skade. Under

genindføring af guidewiren skal det sikres, at spidsen, der bruges til indgrebet, ligger frit inde i karrets lumen, og at den ikke ligger op mod karvæggen. I modsat fald kan der opstå traumer. Brug den røntgenfaste markør på interventionsudstyret til at fastslå positionen.

- Det er en vigtig del af det styrbare guidewiresystem, at guidewiren kan bevæge sig frit inde i interventionsudstyret, da brugeren derved kan føle sig frem til væsentlige informationer. Afprøv systemet for brug for at se, om der er modstand. Reguler, eller udskift hæmostaseventilen med en regulerbar ventil, hvis den viser sig at begrænse guidewirens bevægelsesmuligheder.
- Anlæg ikke nogen stent ved hjælp af flere end én guidewire, og for ikke guidewiren gennem stentens stivere. Ellers kan stenten blive beskadiget eller guidewiren kan lide skade eller gå i stykker.
- Før brug skal det bekræftes, at denne guidewire har en hensigtsmæssig størrelse og form til proceduren og er kompatibel med den enhed, den skal bruges sammen med.
- Se brugsanvisningen, der er vedlagt det medicinske udstyr (f.eks. kateter til

ballonudvidelse eller andet interventionelt terapeutisk udstyr), der skal bruges sammen med denne guidewire.

- Når den aftagelige forlænger-wire kobles til denne guidewire, skal den sættes godt fast til grænsefladen mellem den belægning, der ikke er PTFE, og den belægning, der er PTFE, ved guidewirens proximale ende. der konstateres en afvigelse i forbindelsen, skal du straks stoppe med at bruge guidewiren.
- Se omhyggeligt efter, om guidewiren er bøjet, knækket eller på anden vis beskadiget før brug, og når det kan lade sig gøre under indgrebet. Brug ikke guidewiren, hvis den er beskadiget.
- Når du former spidsen, skal du være forsigtig med ikke at beskadige spolen.
- Før du indsætter guidewiren, skal du kontrollere, hvilken ende der er den distale ende, og sikre dig, at du indsætter den fra den distale ende.
- Der skal opretholdes en kontinuerlig saltvandsskyllning mellem kateteret til indføring og interventionskateteret og mellem interventionskateteret og guidewiren under proceduren. Skyllning forhindrer, at der dannes kontraststoffer og/eller koaguleringer på guidewiren og i lumen i kateteret.


kompatibel med det interventionsudstyr, der skal anvendes.

## 2. Klargøring

- Vælg den mest velegnede guidewire til det berørte område, og tag opbevaringsrøret med guidewiren ud af den sterile emballage.
- Fyld opbevaringsrøret med hepariniseret og steriliseret saltvandsopløsning ved hjælp af en sprøjte for at lægge hele enheden i blød. Vær

opmærksom på, at hepariniseret og steriliseret saltvandsopløsning kan spildes fra opbevaringsrøret på dette tidspunkt.

- Fyld interventionsudstyrets lumen med hepariniseret og steriliseret saltvandsopløsning, før guidewiren indføres.
- Løsn guidewiren fra endeklippen, og lad den glide langsomt, idet den distale ende af guidewiren skubbes gennem opbevaringsrøret (B) (figur 1).

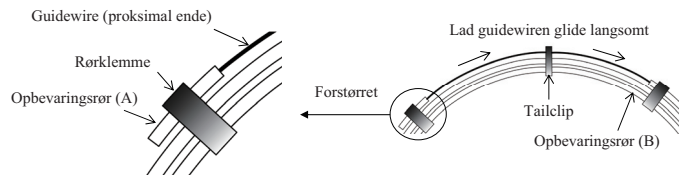

Figur 1

- Når den distale ende af guidetråden forlænges mere end 5 - 6 cm ud over den anden ende af opbevaringsrøret, formes spidsen eventuelt i henhold til standardpraksis.
- Hold forsigtigt om guidewiren, der kommer ud af den distale ende af opbevaringsrøret. Hold så tæt ved røret som muligt, og træk langsomt og forsigtigt guidewiren ud.
- Hvis der mærkes modstand, når guidewiren tages ud af opbevaringsrøret, injiceres der igen hepariniseret og steriliseret saltvandsopløsning i opbevaringsrøret. Fortsæt med at tage guidewiren ud, når der ikke længere mærkes modstand. Sørg for at injicere tilstrækkelig hepariniseret og steriliseret saltvandsopløsning i opbevaringsrøret, da den kan blive beskadiget, når guidewiren tages ud ved anvendelse af for meget kraft.
- Når guidewiren er trukket ud af opbevaringsrøret, skal den undersøges for at sikre, den ikke har lidt skade.

- Hold i indføringskateteret, og for interventionsudstyret (med guidewire) ind i Y-konnektor.
- Før interventionsudstyret ind gennem indføringskateteret, til spidsen af guidewiren er lige netop proximalt for spidsen af indføringskateteret.
- Spænd hæmostaseventilen på Y-konnektor, så der dannes en forsejling rundt om interventionsudstyret. Sørg for, at guidewiren fortsat kan bevæges.
- Se efter, om guidewiren kan bevæges uhindret.
- Sæt evt. vrideren på guidewiren.
- Før denne guidewire frem, under gennemlysning, og gennem læsionen. Kontrollér med angiografi, at guidewiren har passeret den indsnævrede mællesion.
- Hold øje med, hvordan guidewiren bevæger sig inden i karrene.
- Før interventionsudstyret frem, til læsionen er nået, samtidig med at guidewires hindres i at bevæge sig. Sørg for, at guidewires distale spids og dens placering i karret er synlige under manipulation med interventionsudstyret.

## 3. Indføringsmetoder

- Over the wire-metoden
  - Før forsigtigt den distale ende af guidewiren ind i guidewire-lumenen på interventionsudstyret.
  - Fremfør forsigtigt guidewiren, til dens spids er lige netop proximalt for spidsen af interventionsudstyret.

## ■ Hurtig udskiftning

- Hold fast i indføringskateteret.
- Før guidewirens indføringsinstrumentet ind

## Fejlfunktioner og bivirkninger/uønskede hændelser

Fejlfunktioner og bivirkninger/uønskede hændelser, der kan forekomme ved brugen af denne guidewire, omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

### 1. Fejlfunktioner

|                               |                                  |                                    |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Mislykket krydsning af læsion | Brud eller bøjning af guidewiren | Skader såsom adskillige            |
| Vanskeligheder med at fjerne  | Belægning forsvinder             | Rester fra en beskadiget guidewire |

### 2. Bivirkninger/uønskede hændelser

|                          |                             |                    |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Død                      | Infektion                   | Kardisektion       |
| Karperforation           | Komplikationer ved blødning | Emboli             |
| Trombe                   | Infarkt                     | Ischemia           |
| Arrhythmia               | Vasospasme                  | Vaskulær okklusion |
| Reduktion af blodtrykket | Allergisk reaktion          |                    |

## Anbefalet procedure

- Undersøg for brug
  - Kontrollér omhyggeligt før brug, at guidewiren og emballagen er ubeskadigede.
  - Kontrollér før brug, at guidewiren er

- i Y-konnektor på indføringskatetret.
  - c) Før forsigtigt guidewirens spids ind i indføringsinstrumentet.
  - d) Før guidewiren ind gennem indføringskatetret under gennemlysning, til guidewirens spids er lige netop proksimalt for spidsen af indføringskatetret.
  - e) Sæt evt. vrideren på guidewiren.
  - f) Før under gennemlysning guidewiren frem og gennem læsionen. Kontrollér med angiografi, at guidewiren har passeret den indsnævrede mál læsion.
  - g) Hold øje med, hvordan guidewiren bevæger sig inden i karrene.
  - h) Fjern vriderens til guidewiren og indføringsinstrumentet.
  - i) Før interventionsudstyret hen over guidewiren, samtidig med at guidewiren hindres i at bevæge sig, og før det frem, til læsionen er nået. Sørg for, at guidewirens distale spids og dens placering i karret er synlige under manipulation med interventionsudstyret.
4. Metoder til udskiftning af guidewire
- Over the wire-metoden
    - a) Tag langsomt guidewiren ud, samtidig med at der holdes øje med dens bevægelse under gennemlysning.
    - b) Før den næste guidewire ind i overensstemmelse med anvisningerne i afsnittet "Anbefalet procedure".

### Opbevaringsmetode

Opbevar ikke guidewiren og emballagen bøjet eller således, at guidewiren og emballagen udsættes for stor belastning. Denne guidewire og emballagen skal holdes væk fra vand. Opbevares på et køligt, mørkt og tørt sted.

### Udløbsdato

Udløbsdatoen er angivet på etiketten af guidewirens emballage.

### Indhold

5 stk. / æske

### Ansvarsfraskrivelse

Under ingen omstændigheder kan "ASAHI INTECC CO., LTD. og dens tilknyttede selskaber" (herefter kaldet "Virksomheden") gøres ansvarlig for uheld, persontilskadekomst eller bivirkninger, der skyldes ukorrekt brug af produktet/produkterne eller enhver anden brug, der ikke følger disse anvisninger. Firmaet er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader, der enten (i) opstår som følge af opbevaring af produktet efter forsendelse fra Firmaet eller (ii) på grund af valg af patienter, kirurgisk teknik eller andre medicinske aktiviteter, der udføres af den medicinske institution, der bruger produktet.

"ASAHI Miracle", "MIRACLEbros", "Grand Slam" og "EXTENSION" er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende ASAHI INTECC CO.,LTD. i Japan og andre lande.

**ASAHI Miracle / MIRACLEbros-serie****Grand Slam  
Geleidedraad voor PCI**

Gebruiksaanwijzing

Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze geleidedraad gebruikt en neem de hoofdstukken Gebruiksindicaties, Contra-indicaties, Waarschuwingen, Voorzorgsmaatregelen en Aanbevolen procedure in deze Gebruiksaanwijzing in acht. Als u dat niet doet, kunnen er bij de patiënt complicaties optreden, waaronder ernstig letsel, en kan deze zelfs komen te overlijden.

Als een gebruiker en/of patiënt een ernstig incident waarneemt in verband met de geleidedraad, meldt dit dan aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat.

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op de ASAHI Miracle, MIRACLEbros-serie en Grand Slam. Voor de details (lengte van de geleidedraad, lengte van het radiopake gedeelte enz.) verwijzen we naar het productlabel.

**Beschrijvingen**

De basisstructuur van deze geleidedraad bestaat uit een conische kerndraad en spoel. De conische kerndraad en de spoel worden gesoldeerd. De lengte van de spoel is radiopak, zodat de positie eenvoudig kan worden bevestigd onder radioscopie.

Het distale oppervlak is gecoat met een hydrofobe (siliconen) coating en het proximale oppervlak is gecoat met PTFE (polytetrafluorethyleen). Aan het proximale uiteinde van andere apparaten dan die met een totale lengte van 300 cm is er een aansluiting voor een verlengkabel, die wordt gebruikt om het gecombineerde apparaat te vervangen, en de verlengkabel van ASAHI INTECC kan worden aangesloten.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor de belasting aan het uiteinde\* van dit product.

Tabel 1. Productspecificaties

| Productnaam                      | Buitendiameter       | Belasting aan het uiteinde* |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| ASAHI Miracle 3/ MIRACLEbros 3   | 0,36 mm (0,014 inch) | 3,0gf                       |
| ASAHI Miracle 6/ MIRACLEbros 6   | 0,36 mm (0,014 inch) | 6,0 gf                      |
| ASAHI Miracle 12/ MIRACLEbros 12 | 0,36 mm (0,014 inch) | 12,0 gf                     |
| Grand Slam                       | 0,36 mm (0,014 inch) | 0,7 gf                      |

\*De waarden van de belasting aan het uiteinde vertegenwoordigen de gemiddelde waarden van de productspecificatiewaarden gemeten volgens de testmethode met interne standaard, uitgaande van de kracht die door het uiteinde van de geleidedraad op de laesie wordt uitgeoefend.

**Gebruiksindicaties**

Deze geleidedraad is bedoeld voor algemene percutane coronaire interventie (PCI). Deze geleidedraad is bedoeld om de plaatsing van ballondilatatie katheters of andere interventionele therapeutische hulpmiddelen in de cardiovasculatuur te vergemakkelijken.

Deze geleidedraad is niet bedoeld voor gebruik in het vaatstelsel van het zenuwstelsel en het perifere vaatstelsel.

**Behandelde doelgroep**

ASAHI Miracle, MIRACLEbros-serie en Grand Slam zijn bedoeld voor patiënten die voldoen aan de indicaties voor PCI-procedures. Het is niet geïndiceerd voor gebruik bij pasgeborenen, zuigelingen of kinderen en patiënten die zwanger zijn, een verminderde nierfunctie hebben of allergisch reageren op contrastvloeistoffen.

**Contra-indicaties**

- Controleer vóór gebruik de compatibiliteit van de diameter van de geleidedraad met andere interventie-instrumenten.
- Gebruik de geleidedraad niet bij patiënten die allergisch zijn voor contrastmiddelen of die een verminderde nierfunctie hebben.
- Gebruik de geleidedraad niet bij zwangere patiënten of patiënten die zwanger kunnen zijn (röntgenstraling kan de foetus aantasten).
- Deze geleidedraad moet worden gebruikt in instellingen waar dringende chirurgische ingrepen kunnen worden verricht. Als er geen chirurgische noodingrepen kunnen worden verricht, kunnen in het ernstigste geval levensbedreigende situaties ontstaan.
- Deze geleidedraad is vooraf gesteriliseerd met ethyleenoxidegas (EOG) en is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Niet hergebruiken of opnieuw steriliseren. Bij hergebruik of hernieuwde sterilisatie kunnen de prestaties of kwaliteit van deze geleidedraad in het gedrang komen en bestaat het risico op complicaties, waaronder infecties.

**Waarschuwingen**

- Deze geleidedraad mag uitsluitend worden gebruikt door een arts die volledig bevoegd is PCI-behandelingen uit te voeren.
- Gebruik deze geleidedraad nooit in combinatie met katheters met metalen onderdelen die direct in contact kunnen komen met het oppervlak van deze geleidedraad (bijv. atherectomiekateters of metalen dilatatoren), metalen naalden of metalen hulsinbrengers.
- Controleer en bewaak tijdens het gebruik van de geleidedraad de beweging van het uiteinde ervan met behulp van fluoroscopie. Niet gebruiken in vaatgedeelten die niet zichtbaar zijn of niet zichtbaar kunnen worden gemaakt.
- Sluit deze geleidedraad niet aan op loskoppelbare verlengdraden die zijn vervaardigd door andere producenten dan ASAHI INTECC. Bewerk deze geleidedraad niet las de loskoppelbare verlengdraad is aangesloten. Anders kan de geleidedraad beschadigd raken of kan de loskoppelbare verlengdraad ongewild losraken.
- Breng om geen enkele reden aanpassingen aan deze geleidedraad aan.

**Voorzorgsmaatregelen**

- Gebruik de geleidedraad niet na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket. Gooi een geleidedraad waarvan de uiterste gebruiksdatum is verstreken, weg.
- Geleidedraden zijn delicate instrumenten en er moet zorgvuldig mee worden omgegaan.
- Gebruik de geleidedraad niet wanneer de verpakking open of beschadigd is. Open de verpakking altijd vlak voor gebruik. Gebruik een aseptische techniek bij het werken met en gebruiken van de geleidedraad.
- Veeg deze geleidedraad niet schoon met een organisch oplosmiddel zoals alcohol.
- Neem na gebruik maatregelen om infecties te voorkomen. Gooi deze geleidedraad en de verpakking weg bij het medisch afval.
- Duw, druk of draai deze geleidedraad niet verder of trek deze niet terug wanneer u op weerstand stuit. Wanneer u deze geleidedraad tegen weerstand in duwt of toedreert, kan dit schade en/of losraken van het uiteinde ervan of directe beschadiging van het bloedvat tot gevolg hebben. Bovendien kan de geleidedraad beschadigd

raken. Stel middels fluoroscopie de oorzaak van de weerstand vast en ondorneem de actie die nodig is om deze te verhelpen.

- Geleidedraden moeten altijd langzaam worden ingebracht en teruggetrokken.
- Wanneer u de geleidedraad in het bloedvat tordeert, moet u dat niet voortdurend in dezelfde richting doen. Wanneer u de geleidedraad draait, roter dan afwisselend rechtsom en linksom. Draai nooit meer dan twee volledige omwentelingen (720°) in dezelfde richting.
- Spoel de geleidedraad met een gesteriliseerde zoutoplossing met heparine of een andere geschikte oplossing tijdens het verwijderen en weer invoeren, zodat wordt voorkomen dat er lucht in het interventie-instrument terecht komt. Vervang deze geleidedraad op een zorgvuldige manier zodat binnendringen van lucht en/of trauma's worden voorkomen. Controleer bij het opnieuw invoeren van de geleidedraad of het uiteinde van het interventie-instrument vrij in het vaatlumen kan bewegen en niet tegen de vaatwand zit. Wanneer u dit nalaat, kan dit leiden tot een trauma. Controleer de positie met behulp van de radiopake markering van het interventie-instrument.
- Vrije verplaatsing van de geleidedraad in het interventie-instrument is een belangrijke eigenschap van een stuurbaar geleidedraadsysteem, omdat het de gebruiker waardevolle tactiele informatie verschaft. Test voorafgaand aan gebruik het systeem op eventuele weerstand. Pas de hemostaseklep aan of vervang deze door een verstelbare klep als blijkt dat deze de beweging van de geleidedraad hindert.
- Plaats geen stent met meer dan één geleidedraad en gebruik de geleidedraad niet door een

stentsteun. Zo niet dan kan de stent beschadigd worden of kan de geleidedraad breken of uit elkaar vallen.

- Controleer vóór gebruik of deze geleidedraad qua grootte en vorm geschikt is voor de procedure en compatibel is om samen met het te gebruiken instrument te worden gebruikt.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het medische instrument (bv. ballondilatatie katheters of andere therapeutische interventie-instrumenten) die samen met deze geleidedraad wordt gebruikt.
- Wanneer u de loskoppelbare verlengdraad op deze geleidedraad aansluit, moet u deze stevig aansluiten op de grenslijn tussen de non-PTFE-coating en de PTFE-coating aan het proximale uiteinde van de geleidedraad. Als er een afwijking in de aansluiting wordt geconstateerd, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de geleidedraad.
- Inspecteer de geleidedraad vóór gebruik en, voor zover mogelijk, ook tijdens de procedure zorgvuldig op buigingen, knikken of andere beschadigingen. Gebruik de geleidedraad niet als deze beschadigd is.
- Let er bij het vormen van het uiteinde op dat u de spoel niet beschadigt.
- Voordat u de geleidedraad inbrengt, moet u controleren welk uiteinde het distale uiteinde is en ervoor zorgen dat u de draad vanaf het distale uiteinde inbrengt.
- Zorg tijdens de procedure voor een continue zoutoplossing tussen de geleidekatheter en het interventie-instrument en tussen het interventie-instrument en de geleidedraad. Spoelen voorkomt contrastmiddelvorming en/of stolling op de geleidedraad en in het katheterlumen.

## 2. Negatieve effecten

|                     |                                        |                     |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Overlijden          | Infectie                               | Vaatissectie        |
| Vaatperforatie      | Complicaties in de vorm van bloedingen | Embolie             |
| Trombus             | Infarct                                | Ischemia            |
| Hartritmestoornis   | Vasospasm                              | Vasculaire occlusie |
| Verlaagde bloeddruk | Allergische reactie                    |                     |

## Aanbevolen procedure

### 1. Inspectie voorafgaand aan gebruik

- Controleer vóór gebruik zorgvuldig of de geleidedraad en de verpakking niet beschadigd zijn.
- Stel voor gebruik vast dat de geleidedraad geschikt is voor de te gebruiken interventie-instrumenten.



### 2. Preparatie

- Selecteer de meest geschikte geleidedraad voor het aangedane gebied en neem de houderbuis waarin de geleidedraad zit uit de steriele verpakking.
- Vul de houderbuis met een gesteriliseerde

zoutoplossing met heparine met behulp van een injectienaald om het hele instrument mee nat te maken. Houd er rekening mee dat de gesteriliseerde zoutoplossing met heparine tijdens het vullen uit de houderbuis kan morsen.

- Vul het lumen van het interventie-instrument met de gesteriliseerde oplossing met heparine voordat u de geleidedraad invoert.
- Maak de geleidedraad los uit de eindklem en schuif de geleidedraad langzaam, duw het distale uiteinde van de geleidedraad door de houderbuis (B). (Afbeelding 1)

Geleidedraad (proximale uiteinde)

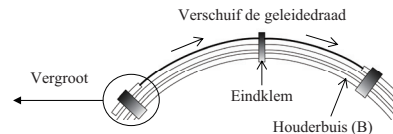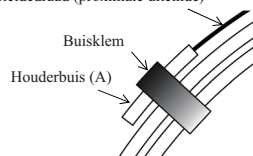

Afbeelding 1

- Wanneer het distale uiteinde van de geleidedraad meer dan 5 tot 6 cm voorbij het andere uiteinde van de houderbuis is geschoven, moet u, indien nodig, het uiteinde volgens de standaardpraktijk vormen.
- Pak de geleidedraad die uit het distale uiteinde van de houderbuis naar buiten is gekomen, voorzichtig zo dicht mogelijk bij de houderbuis vast, en trek de geleidedraad langzaam en voorzichtig naar buiten.
- Als u weerstand voelt bij het uit de houderbuis verwijderen van de geleidedraad, moet u de gesteriliseerde zoutoplossing met heparine wederom in de houderbuis injecteren. Zet de

verwijdering van de geleidedraad voort wanneer u geen weerstand meer voelt. Zorg ervoor dat er voldoende gehepariniseerde en gesteriliseerde zoutoplossing in de houderbuis wordt gespoten, omdat deze beschadigd kan raken bij het krachtig verwijderen van de geleidedraad.

- Wanneer u de geleidedraad uit de houderbuis hebt getrokken, inspecteer u de geleidedraad zodat u zeker weet dat deze niet beschadigd is.

### 3. Procedures voor inbrengen

- Over-de-draad-systeem
- a) Voer het distale uiteinde van de geleidedraad

## Storingen en negatieve effecten

Mogelijke storingen en negatieve effecten als gevolg van het gebruik van deze geleidedraad zijn onder meer (maar niet uitsluitend) de volgende:

### 1. Storingen

|                                       |                                     |                                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Onmogelijkheid een laesie te passeren | Brek of buiging van de geleidedraad | Schade zoals scheiding                 |
| Moelijke verwijdering                 | Loskomen van coating                | Afval van een beschadigde geleidedraad |

- voorzichtig in de geleide draad-lumen van het interventie-instrument in.
- b) Geleid deze geleide draad voorzichtig door totdat de tip ervan net proximaal is aan het uiteinde van het interventie-instrument.
- c) Maak de geleide katheter vast en voer het systeem van het interventie-instrument (met geleide draad) in de Y-aansluiting.
- d) Voer het systeem van het interventie-instrument door de geleide katheter totdat het uiteinde van het systeem van de geleide draad net proximaal is aan de tip van de geleide katheter.
- e) Draai de hemostaseklep van de Y-aansluiting dicht zodat een afdichting ontstaat rond het interventie-instrument. Controleer dat verplaatsing van de geleide draad nog mogelijk is.
- f) Controleer nogmaals dat de geleide draad gemakkelijk kan bewegen.
- g) Bevestig het torsie-instrument aan de geleide draad, als dat nodig is.
- h) Voer deze geleide draad in met behulp van fluoroscopie tot voorbij de laesie. Bevestig door middel van angiografie dat de geleide draad de vernauwde doellaesie heeft gepasseerd.
- i) Observeer de verplaatsing van de geleide draad in de bloedvaten.
- j) Voer het interventie-instrument in tot de laesie wordt bereikt, terwijl u voorkomt dat de geleide draad wordt verplaatst. Zorg ervoor dat het distale uiteinde van de geleide draad en de locatie ervan in het bloedvat zichtbaar zijn wanneer u het interventie-instrument manipuleert.

#### ■ Systeem voor snelle verwisseling

- a) Bevestig de geleide katheter.
- b) Voer de geleide draad-introducer in de Y-aansluiting van de geleide katheter in.
- c) Voer voorzichtig het uiteinde van de geleide draad in de introducer in.
- d) Voer de geleide draad onder fluoroscopie door de geleide katheter tot het uiteinde van de geleide draad net proximaal is aan het uiteinde van de geleide katheter.
- e) Bevestig het torsie-instrument aan de geleide draad, als dat nodig is.
- f) Voer de geleide draad in met behulp van fluoroscopie tot voorbij de laesie. Bevestig door middel van angiografie dat de geleide draad de vernauwde doellaesie heeft gepasseerd.
- g) Observeer de verplaatsing van de geleide draad in de bloedvaten.
- h) Verwijder het torsie-instrument en de introducer van de geleide draad.
- i) Leid het interventie-instrument over de geleide draad terwijl u voorkomt dat de geleide draad wordt verplaatst en ga door tot de laesie is bereikt. Zorg ervoor dat het distale uiteinde van de geleide draad en de plaatsing ervan in het bloedvat zichtbaar zijn wanneer u met het interventie-instrument werkt.

#### 4. Procedures voor het verwisselen van de geleide draad

##### ■ Over-de-draad-systeem

- a) Verwijder deze geleide draad langzaam terwijl u onder fluoroscopie de verplaatsing van deze geleide draad in de gaten houdt.
- b) Breng de volgende geleide draad in volgens de aanwijzingen in dit hoofdstuk "Aanbevolen procedure".

## Aansprakelijkheidsverklaring

Op geen enkele manier zal "ASAHI INTECC CO., LTD." en aan haar gelieerde bedrijven (hierna 'Bedrijf' genoemd) aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, persoonlijke verwondingen, negatieve effecten als het gevolg van een foutief gebruik van het(de) product(en) of enig ander gebruik dat niet in overeenstemming is met deze instructies. Het bedrijf is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele schade (i) voortvloeiend uit de opslag van het product en/of de producten na verzending vanuit het bedrijf of (ii) als gevolg van de keuze van patiënten, operatietechnieken of enige andere medische activiteiten door de medische instelling die het product en/of de producten gebruikt.

"ASAHI Miracle", "MIRACLEbros", "Grand Slam" en "EXTENSION" zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van ASAHI INTECC CO., LTD. in Japan en andere landen.

## Opslagmethode

Bewaar de geleide draad en toebehoren niet in een gebogen en/of zwaar belaste toestand. Deze geleide draad en toebehoren mogen niet nat worden. Bewaren op een koele, donkere en droge plek.

## Uiterste gebruiksdatum

De uiterste gebruiksdatum van de geleide draad staat vermeld op het etiket van de verpakking.

## Inhoud

5 stuks/doors

ASAHI Miracle / MIRACLEbros-sarja

Grand Slam  
PCI-ohjainvaijeri

Käyttöohjeet

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen tämän ohjainvaijerin käyttöä ja noudata niiden kohtia ”Käyttötarkoitukset”, ”Vasta-aiheet”, ”Varoitukset”, ”Varotoimet ennen käyttöä” ja ”Käyttö”. Muutoin seurauksena voi olla komplikaatioita, mukaan lukien potilaan vakava vammautuminen tai kuolema.

Jos käyttäjä ja/tai potilas havaitsee vakavan vaaratilanteen, joka liittyy ohjainvaijeriin, ilmoita siitä valmistajalle ja jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Nämä käyttöohjeet koskevat ASAHI Miracle, MIRACLEbros-sarjaa ja Grand Slamia. Katso lisätiedot (ohjainvaijerin pituus, röntgenpositiivisen osan pituus, jne.) tuotteen etiketistä.

Kuvaus

Tämän ohjainvaijerin perusrakenne koostuu kapenevasta kierukkavaijerista ja kierukasta. Kapeneva kierukkavaijeri ja kierukka on juotettu. Kierukan pituus on röntgenpositiivinen, jotta sen sijainti voidaan helposti vahvistaa läpivalaisulla. Distaalisessa pinnassa on hydrofobinen (silikoninen) pinnoite ja proksimaalisessa pinnassa on PTFE-pinnoite (polytetrafluorieteeni). Muiden kuin 300 cm:n kokonaispituisten laitteiden proksimaalisessa päässä on liitäntä jatkovaijerille, jolla korvataan yhdistetty laite. Ohjainvaijeriin voidaan liittää ASAHI INTECCin valmistama jatkovaijeri.

Katso alla olevasta taulukosta tämän tuotteen kärkivoima\*.

Taulukko 1. Tuotteen tekniset tiedot

| Tuotteen nimi                     | Ulkohalkaisija         | Kärkivoima* |
|-----------------------------------|------------------------|-------------|
| ASAHI Miracle 3 / MIRACLEbros 3   | 0,36 mm (0,014 tuumaa) | 3,0 gf      |
| ASAHI Miracle 6 / MIRACLEbros 6   | 0,36 mm (0,014 tuumaa) | 6,0 gf      |
| ASAHI Miracle 12 / MIRACLEbros 12 | 0,36 mm (0,014 tuumaa) | 12,0 gf     |
| Grand Slam                        | 0,36 mm (0,014 tuumaa) | 0,7 gf      |

\*Kärkivoiman arvot tarkoittavat tuotteen teknisten tietojen keskiarvoja, jotka on mitattu sisäisen vakiotestausmenetelmän mukaisesti, jossa mitataan leesioon ohjainvaijerin kärjellä kohdistettu voima.

Käyttötarkoitukset

Tämä ohjainvaijeri on tarkoitettu tyypillisiin perkutaanisiin sepelvaltimotoimenpiteisiin (PCI). Tämä ohjainvaijeri on tarkoitettu helpottamaan pallolaajennuskatetrien tai muiden toimenpidevälineiden asettamista verisuonistoon.

**Tätä ohjainvaijeria ei ole tarkoitettu käytettäväksi neurovaskulaarisissa eikä ääreisverisuoniston toimenpiteissä.**

Hoidettava kohderyhmä

ASAHI Miracle, MIRACLEbros-sarja ja Grand Slam on tarkoitettu potilaille, jotka täyttävät PCI-toimenpiteiden käyttöaiheet. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi imeväisillä, sylilapsilla tai lapsilla, eikä potilailla, jotka ovat raskaana, joilla on munuaisten vajaatoiminta tai jotka ovat allergisia varjoaineelle.

Vasta-aiheet

- Varmista, että ohjainvaijerin halkaisija sopii yhteen muiden toimenpidevälineiden kanssa, ennen kuin alat käyttää sitä.
- Älä käytä ohjainvaijeria potilailla, jotka ovat allergisia varjoaineelle tai joilla on munuaisten vajaatoiminta.
- Älä käytä ohjainvaijeria potilailla, jotka ovat raskaana tai saattavat olla raskaana (röntgenkuvaus voi vaikuttaa sikiöön).
- Tätä ohjainvaijeria saa käyttää vain hoitolaitoksessa, jossa voidaan tarvittaessa tehdä välittömästi hätäleikkaus. Jos hätäleikkaukseen ei ole valmiutta, pahimmassa tapauksessa seurauksena voi olla hengenvaara.
- Ohjainvaijeri on steriloitu valmiiksi etyleenioksidikaasulla ja se on kertakäyttöinen. Älä käytä tätä steriloitua uudelleen. Uudelleenkäyttö tai -sterilointi voi heikentää ohjainvaijerin ja pakkauksen toimintaa tai laatur ja aiheuttaa komplikaatioita, kuten infektion.

Varoitukset

- Ohjainvaijeria saa käyttää vain lääkäri, joka hallitsee PCI-toimenpiteen.
- Älä käytä ohjainvaijeria yhdessä katetrien, joissa on metalliosia, jotka voivat olla suoraan kosketuksessa ohjainvaijerin pinnan kanssa (esim. aterektomiakatetrit, metalliset laajentimet), metallineulojen tai metallisten sisäänvientiholkkien kanssa.
- Tarkkaile ohjainvaijerin kärjen liikettä fluoroskopian avulla, kun käytät laitetta. Älä käytä ohjainvaijeria verisuonen kohdissa, jotka eivät näy tai joita ei voi kuvantaa.
- Älä kytkä tätä ohjainvaijeria muiden kuin ASAHI INTECCin valmistamiin irrotettaviin jatkovaijeriinhin. Älä käsittele ohjainvaijeria, kun siihen on kytketty irrotettava jatkovaijeri. Muutoin ohjainvaijeri voi vaurioitua tai irrotettava jatkovaijeri voi vahingoissa irrota.
- Älä muuntele ohjainvaijeria mistään syystä.

Varotoimet ennen käyttöä

- Älä käytä ohjainvaijeria etikettiin merkityn viimeisen käyttöpäivän umpeuduttua. Hävitä ohjainvaijerit, joiden viimeinen käyttöpäivä on umpeutunut.
- Ohjainvaijerit ovat helposti vaurioituvia instrumenteja, minkä vuoksi niitä on käsiteltävä varoen.
- Jos pakkaus on avattu tai vaurioitunut, älä käytä ohjainvaijeria. Avaa pakkaus vasta juuri ennen käyttöä. Käsittele ja käytä ohjainvaijeria aseptisesti.
- Älä pyyhi ohjainvaijeria orgaanisella liuoksella, kuten alkoholilla.
- Huolehdi infektiونتorjunnasta käytön jälkeen. Hävitä ohjainvaijeri ja sen pakkaus sairaalajätteenä.
- Älä koskaan työnnä, kairaa, vedä tai pyöritä ohjainvaijeria, jos siinä tuntuu vastusta. Ohjainvaijerin pyörittäminen tai työntäminen vastusta vastaan voi aiheuttaa vaurioita ja/tai kärjen irtoamisen ohjainvaijerista tai verisuonen suoran vaurioitumisen. Ohjeen noudattamisen laiminlyönti voi vaurioittaa ohjainvaijeria. Selvitä vastuksen syy fluoroskopian avulla ja poista se tarvittavilla korjaustoimenpiteillä.
- Työnnä ja vedä ohjainvaijeri aina hitaasti ja varovasti.
- Kun pyörität ohjainvaijeria verisuonessa, älä pyöritä sitä jatkuvasti samaan suuntaan. Kun pyörität ohjainvaijeria, pyöritä sitä vuoroin myötä- ja vastapäivään. Pyöritä enintään kaksi täyttä kierrosta (720°) samaan suuntaan.
- Huutele ohjainvaijeria heparinoidulla ja steriloidulla keittosuolaliuoksella tai muulla soveltuvalla liuoksella sen poiston ja sisäänviennin aikana, jotta toimenpidevälineeseen ei pääse ilmaa. Vaihda ohjainvaijeri erityisen varovasti, jotta suoneen ei

pääse ilmaa ja/tai se ei vaurioidu. Kun viet ohjainvaijerin uudelleen sisään, varmista, että toimenpidevälineen kärki on vapaana verisuonen lumenissa eikä kosketa verisuonen seinämää. Muutoin se saattaa aiheuttaa vammaan. Varmista sijainti toimenpidevälineen röntgenpositiivisen merkitsimen avulla.

- Ohjainvaijerin vapaa liikkuvuus toimenpidevälineen sisällä on ohjattavan ohjainvaijerin keskeinen ominaisuus, koska se antaa käyttäjälle arvokasta tuntoon perustuvaa tietoa. Tarkista järjestelmä vastuksen varalta ennen käyttöä. Jos havaitset hemostaasiventtiilin häiritsevän ohjainvaijerin liikkumista, säädä hemostaasiventtiiliä tai korvaa se säädettävällä venttiilillä.
- Älä asenna stenttiä käyttäen useampaa kuin yhtä ohjainvaijeria äläkä käytä ohjainvaijeria stentin tuen läpi. Muutoin stentti saattaa vaurioitua ja ohjainvaijeri murtua tai katketa.
- Varmista ennen käyttöä, että tämä ohjainvaijeri on toimenpiteen kannalta sopivan kokoinen ja muotoinen ja että se sopii yhteen sen kanssa käytettävän laitteen kanssa.
- Katso yhdessä ohjainvaijerin kanssa käytettävän lääkkinnällisen laitteen (esim.

palloajennuskatetrin tai muun toimenpidevälineen) käyttöohjeet.



- Kun kytket ohjainvaijeriin irrotettavan jatkovaijerin, työssä se kunnolla ei-PTFE-pinnoitteen ja PTFE-pinnoitteen rajaviivan asti ohjainvaijerin proksimaalisessa päässä. Jos havaitset kytkennässä jotakin epätavallista, lopeta ohjainvaijerin käyttö välittömästi.
- Tarkista ohjainvaijeri huolellisesti ennen käyttöä ja mahdollisuuksien mukaan toimenpiteen aikana mutkien, taantumisen tai muiden vaurioiden varalta. Älä käytä ohjainvaijeria, jos se on vaurioitunut.
- Varo vahingoittamasta kierukkaa, kun muotoilet kärkeä.
- Tarkista ennen ohjainvaijerin sisäänvientiä, kumpi pää on distaalinen pää, ja varmista, että viet ohjainvaijerin sisään distaalisesta päästä.
- Pida yllä toimenpiteen ajan jatkuvaa keittosuolaliuoshuuhdeltua ohjainkatetrin ja toimenpidevälineen sekä toimenpidevälineen ja ohjainvaijerin välillä. Huuhtelu estää varjoaineen kertymisen ja/tai hyytymisen ohjainvaijerin ja katetrin lumeniin.

toimenpidevälineiden kanssa.

## 2. Valmistelu

- Valitse hoidettavalle alueelle sopivin ohjainvaijeri ja poista ohjainvaijerin sisältävä pakkausputki steriilistä pakkauksesta.
- Täytä pakkausputki ruiskun avulla heparinoidulla ja steriloidulla keittosuolaliuksella, jotta koko laite huuhtoutuu. Huomaa, että pakkausputkesta

Ohjainvaijeri (proksimaalinen pää)

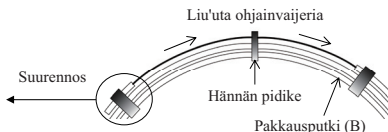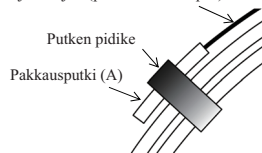

Kuva 1

- Kun ohjainvaijerin distaalinen pää on tullut yli 5–6 cm ulos pakkausputken toisesta päästä, muotoile kärkeä tarvittaessa vakioimenetelmän mukaisesti.
- Ota varovasti kiinni pakkausputken distaalisesta päästä ulos tulleesta ohjainvaijerista mahdollisimman läheltä pakkausputkea ja vedä ohjainvaijeri ulos hitaasti ja varovasti.
- g) Jos tunnet vastusta ottaessasi ohjainvaijeria pois pakkausputkesta, ruiskuta pakkausputkeen lisää heparinoidua ja steriloidua keittosuolaliuosta. Jatka ohjainvaijerin poistamista putkesta vasta sitten, kun vastusta ei enää tunnu. Varmista, että ruiskutut pakkausputkeen riittävästi heparinoidua ja steriloidua keittosuolaliuosta, sillä putki saattaa vaurioitua, jos ohjainvaijeri otetaan putkesta väkisin.
- h) Kun olet vetänyt ohjainvaijerin pakkausputkesta, tarkista se mahdollisten vaurioiden varalta.

## 3. Sisäänvienti

- Over-the-wire-järjestelmä
- Vie ohjainvaijerin distaalinen pää varovasti toimenpidevälineen ohjainvaijerilumeniin.
- h) Työnnä ohjainvaijeria varovasti eteenpäin, kunnes sen kärki on aivan toimenpidevälineen kärjen proksimaalisella

voi tässä vaiheessa vuotaa ulos heparinoidua ja steriloidua keittosuolaliuosta.

- Täytä toimenpidevälineen lumen heparinoidulla ja steriloidulla keittosuolaliuksella ennen ohjainvaijerin sisäänvientiä.
- Irrota ohjainvaijerin pää hännän pidikkeestä ja liu'uta ohjainvaijeria hitaasti painamalla sen distaalista päätä pakkausputken (B) läpi (kuva 1).

- Kiinnitä ohjainkatetri ja vie toimenpidevälinejärjestelmä (ohjainvaijerin kanssa) Y-liitoskappaleeseen.
- Työnnä toimenpidevälinejärjestelmää ohjainkatetrin läpi, kunnes ohjainvaijerijärjestelmän kärki on aivan ohjainkatetrin kärjen proksimaalisella puolella.
- Kiristä Y-liitoskappaleen hemostaasiventtiiliä niin, että se tiivistyy toimenpidevälineen ympärille. Varmista, että ohjainvaijeri voi vielä liikkua.
- Varmista, että ohjainvaijeri liikkuu tasaisesti.
- Liitä ohjainvaijeriin tarvittaessa pyörin.
- h) Työnnä ohjainvaijeria fluoroskopian avulla leesion läpi. Varmista angiografialla, että ohjainvaijeri on ohittanut ahtauneen kohdeleesion.
- Tarkkaile ohjainvaijerin liikettä verisuonissa.
- Työnnä toimenpidevälinettä eteenpäin leesiokohtaan ja estä samalla ohjainvaijerin liikkuminen. Varmista, että ohjainvaijerin distaalinen kärki ja sen sijainti verisuonessa ovat näkyvissä toimenpidevälineen käsittelyn aikana.

## ■ Rapid exchange -järjestelmä

## Toimintahäiriöt ja häiritäpahtumat

Ohjainvaijerin käyttöön liittyy muun muassa seuraavia mahdollisia toimintahäiriöitä ja häiritäpahtumia:

### 1. Toimintahäiriöt

|                                     |                                             |                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| leesion ohittamisen epäonnistuminen | ohjainvaijerin rikkoutuminen tai taipuminen | vaurioituminen, kuten katkeaminen                   |
| poistamiseen liittyvät vaikeudet    | pinnoitteen irtoaminen                      | vaurioituneesta ohjainvaijerista irtoavat kappaleet |

### 2. Häiritäpahtumat

|                        |                         |                         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| kuolema                | infektio                | verisuonen dissekoituma |
| verisuonen perforaatio | verenvuotokomplikaatiot | embolia                 |
| trombi                 | infarkti                | iskemia                 |
| eteisvärinä            | vasospasmi              | verisuonen okklusio     |
| verenpainan lasku      | allerginen reaktio      |                         |

## Käyttö

- Tarkistus ennen käyttöä
  - Tarkista ohjainvaijeri ja sen pakkaus huolellisesti ennen käyttöä ja varmista, että ne ovat vahingoittamattomia.
  - Varmista ennen käyttöä, että ohjainvaijeri on yhteensopiva käytettävien

- a) Kiinnitä ohjainkatetri.

b) Työnnä ohjainvaijerin sisäänviejä ohjainkatetrin Y-liitoskappaleeseen.

c) Vie ohjainvaijerin kärki varovasti sisäänviejään.

d) Työnnä ohjainvaijeria ohjainkatetrin läpi fluoroskopiassa, kunnes ohjainvaijerin kärki on aivan ohjainkatetrin kärjen proksimaalisella puolella.

e) Liitä ohjainvaijeriin tarvittaessa pyöritin.

f) Työnnä ohjainvaijeria fluoroskopian avulla leesion läpi. Varmista angiografialla, että ohjainvaijeri on ohittanut ahtaautuneen kohdelesion.

g) Tarkkaile ohjainvaijerin liikettä verisuonissa.
- h) Irrota ohjainvaijerin pyöritin ja ohjainvaijerin sisäänviejä.

i) Kuljeta toimenpideväline ohjainvaijeria pitkin leesiokohtaan ja estä samalla ohjainvaijerin liikkuminen. Varmista, että ohjainvaijerin distaalinen kärki ja sen sijainti verisuonessa ovat näkyvissä toimenpidevälineen käsittelyn aikana.
4. Ohjainvaijerin vaihto

■ Over-the-wire-järjestelmä

a) Poista ohjainvaijeri varovasti ja seuraa samalla sen liikettä fluoroskopian avulla.

b) Vie seuraava ohjainvaijeri paikalleen kohdan "Käyttö" ohjeiden mukaisesti.

Säilytys

Älä säilytä ohjainvaijeria ja pakkausta taivutettuna ja/tai raskaasti kuormitettuna. Tämä ohjainvaijeri ja sen pakkaus on pidettävä poissa vedestä. Säilytettävä viileässä, pimeässä ja kuivassa paikassa.

Viimeinen käyttöpäivä

Viimeinen käyttöpäivä on merkitty ohjainvaijerin pakkauksen etikettiin.

Sisältö

5 kpl / laatikko

Vastuuvapauslauseke

"ASAHI INTECC CO., LTD. ja sen konserniyhtiöt" (jäljempänä "yritys") eivät vastaa millään tavoin vahinkotapahtumista, henkilövammoista tai haittatapahtumista, jotka johtuvat tuotteen (tuotteiden) epäasianmukaisesta käytöstä tai mistä tahansa muusta näiden ohjeiden vastaisesta käytöstä. Yritys ei missään tapauksessa vastaa vahingoista, jotka johtuvat joko (i) tuotteen (tuotteiden) säilytyksestä sen jälkeen kun yritys on ne lähettänyt tai (ii) potilaiden valinnasta, leikkaustekniikoista tai mistä tahansa muista tuotteita (tuotteita) käyttävän hoitolaitoksen lääkinällisistä toimenpiteistä.

"ASAHI Miracle", "MIRACLEbros", "Grand Slam" ja "EXTENSION" ovat ASAHI INTECC CO., LTD:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Japanissa ja muissa maissa.

## Série ASAHI Miracle/MIRACLEbros

### Grand Slam Fil guide pour ICP

Mode d'emploi

**Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce fil guide et respecter les rubriques Indications d'utilisation, Contre-indications, Avertissements, Précautions, et Méthode d'utilisation de ce mode d'emploi. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des complications, notamment des blessures graves ou le décès du patient.**

Si un utilisateur et/ou un patient a connaissance d'un incident grave lié au fil guide, il doit le signaler au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre.

Ce mode d'emploi s'applique aux produits de la série ASAHI Miracle et MIRACLEbros et à Grand Slam. Pour plus de détails (longueur du fil guide, longueur de la partie radio-opaque, etc.), consulter l'étiquette du produit.

#### Description

La structure de base de ce fil guide est constituée d'un fil central conique et d'une spirale. Le fil central conique et la spirale sont soudés. La spirale est radio-opaque sur toute sa longueur, ce qui permet de vérifier facilement sa position par radioscopie.

La surface distale est recouverte d'un revêtement hydrophobe (silicone), et la surface proximale est recouverte de PTFE (polytétrafluoroéthylène). À l'extrémité proximale d'autres dispositifs que ceux d'une longueur totale de 300 cm se trouve une connexion pour un prolongateur, qui sert à remplacer le dispositif combiné ; le prolongateur d'ASAHI INTECC peut y être connecté.

Consulter le tableau ci-dessous pour connaître la charge de pointe\* de ce produit.

Tableau 1. Spécifications du produit

| Nom du produit                  | Diamètre extérieur | Charge de pointe* |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| ASAHI Miracle 3/MIRACLEbros 3   | 0,36 mm (0,014 po) | 3,0 gf            |
| ASAHI Miracle 6/MIRACLEbros 6   | 0,36 mm (0,014 po) | 6,0 gf            |
| ASAHI Miracle 12/MIRACLEbros 12 | 0,36 mm (0,014 po) | 12,0 gf           |
| Grand Slam                      | 0,36 mm (0,014 po) | 0,7 gf            |

\*Les valeurs de charge de pointe représentent les valeurs moyennes des valeurs de spécification du produit mesurées selon la méthode de test standard interne en supposant la force exercée sur la lésion par la pointe du fil guide.

#### Indications d'utilisation

Ce fil guide est conçu pour les interventions coronariennes percutanées (ICP) courantes. Ce fil guide est destiné à faciliter la mise en place de cathéters de dilatation à ballonnet ou d'autres dispositifs thérapeutiques d'intervention dans le système cardiovasculaire.

Ce fil guide n'est pas destiné à être utilisé dans le système neurovasculaire ni dans le système vasculaire périphérique.

#### Population traitée cible

La série ASAHI Miracle/MIRACLEbros et Grand Slam sont destinés aux patients qui répondent aux indications des procédures d'ICP. Le fil guide n'est pas indiqué pour les nouveau-nés, les nourrissons ou les enfants, ainsi que pour les patientes enceintes, les personnes souffrant d'insuffisance rénale ou celles qui ont une réaction allergique aux produits de contraste.

#### Contre-indications

- Vérifier la compatibilité du diamètre du fil guide avec d'autres dispositifs d'intervention avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser le fil guide chez des patients qui ont une réaction allergique aux produits de contraste ou qui présentent une insuffisance rénale.
- Ne pas utiliser le fil guide chez des patientes enceintes ou susceptibles de l'être (les rayons X peuvent affecter le fœtus).
- Ce fil guide doit être utilisé dans un établissement médical en mesure de réaliser immédiatement une intervention chirurgicale d'urgence. S'il n'est pas possible de réaliser d'intervention chirurgicale d'urgence, dans le pire des cas, des événements potentiellement mortels peuvent survenir.
- Ce fil guide est pré-stérilisé avec de l'oxyde d'éthylène et il est destiné à un usage unique. Ne pas réutiliser ou restériliser. En cas de réutilisation ou de restérilisation, les performances ou la qualité de ce fil guide et de l'emballage peuvent être affectées et il existe un risque de complications, voire d'infection.

#### Avertissements

- Ce fil guide doit être utilisé uniquement par un médecin ayant reçu une formation complète sur le traitement par ICP.
- Ne jamais utiliser ce fil guide en association avec des cathéters comportant des parties métalliques susceptibles d'entrer directement en contact avec la surface du fil guide (p. ex., cathéters d'athérectomie, dilateurs métalliques), des aiguilles métalliques ou des inséateurs de gaines métalliques.
- Vérifier et surveiller le mouvement de la pointe du fil guide sous radioscopie pendant son utilisation. Ne pas utiliser dans des zones du vaisseau qui ne sont pas visibles ou ne peuvent être visualisées.
- Ne pas relier ce fil guide à des prolongateurs détachables de fabricants autres que ASAHI INTECC. Ne pas manipuler ce fil guide lorsque le prolongateur détachable est connecté. Autrement, le fil guide pourrait s'endommager, ou le prolongateur détachable pourrait se détacher involontairement.
- Ne pas modifier ce fil guide pour quelque raison qu'il soit.

#### Précautions

- Ne pas utiliser le fil guide au-delà de la date de péremption indiquée sur l'étiquette. Jeter tout fil guide ayant dépassé la date de péremption.
- Les fils guides sont des instruments fragiles et doivent être manipulés avec soin.
- Si l'emballage est ouvert ou endommagé, ne pas utiliser le fil guide. Ne pas ouvrir l'emballage avant l'emploi. Prendre des mesures aseptiques au cours de la manipulation et de l'utilisation du fil guide.
- Ne pas essuyer ce fil guide à l'aide d'une solution organique telle que l'alcool.
- Après utilisation, prendre des mesures préventives contre les infections. Mettre au rebut ce fil guide et l'emballage en tant que déchets médicaux.
- Ne jamais pousser, vriller, rétracter le fil guide ou lui appliquer une torsion lorsqu'il rencontre une résistance. Le fait d'appliquer une torsion ou de pousser ce fil guide alors qu'il rencontre une résistance risque de l'endommager et/ou d'entraîner la séparation de la pointe du fil guide ou de léser directement un vaisseau. Le non-respect de cette consigne risque d'endommager

le fil guide. Déterminer la cause de la résistance sous radioscopie et prendre les mesures appropriées pour résoudre le problème.

- Toujours faire avancer ou retirer les fils guides lentement et avec précaution.
- Lorsque ce fil guide est soumis à une torsion dans le vaisseau sanguin, ne pas appliquer de torsion continue dans la même direction. Lors de la torsion du fil guide, le faire tourner alternativement dans le sens des aiguilles d'une montre et dans l'autre sens. Ne pas effectuer plus de deux rotations (720°) dans la même direction.
- Rincer le fil guide avec une solution saline héparinisée et stérilisée ou toute autre solution adéquate lors du retrait ou de la réinsertion afin d'éviter toute pénétration d'air dans le dispositif d'intervention. Changer ce fil guide avec précautions afin d'éviter l'entrée de l'air et/ou un traumatisme. Au moment de réintroduire le fil guide, vérifier que la pointe du dispositif d'intervention n'est pas coincée dans la lumière du vaisseau et ne se trouve pas contre la paroi du vaisseau. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un traumatisme. Utiliser le marqueur radio-opaque du dispositif d'intervention pour vérifier la position.
- Le libre mouvement du fil guide dans le dispositif d'intervention est une caractéristique importante d'un système de fil guide orientable puisqu'il donne à l'utilisateur de précieuses informations tactiles. Tester la résistance du système avant toute utilisation. Régler la valve hémostatique ou la remplacer par une valve réglable s'il s'avère qu'elle empêche le mouvement du fil guide.
- Ne pas pratiquer la pose de stent en utilisant plus d'un fil guide, ne pas manipuler le fil guide à

travers les entretoises du stent. Sinon, le stent peut être endommagé ou le fil guide peut se rompre ou se disloquer.

- Avant utilisation, s'assurer que ce fil guide est de taille et de forme appropriées pour la procédure et qu'il est compatible avec le dispositif à utiliser en association.
- Consulter le mode d'emploi joint au dispositif médical (p. ex., cathétres de dilatation à ballonnet ou autres dispositifs d'intervention thérapeutique) qui sera utilisé en association avec ce fil guide.
- Lors de la connexion du prolongateur détachable à ce fil guide, celui-ci doit être inséré en toute sécurité à la ligne de démarcation entre le revêtement non PTFE et le revêtement PTFE à l'extrémité proximale de ce fil guide. Si une anomalie est constatée au niveau de la connexion, cesser immédiatement d'utiliser le fil guide.
- Inspecter soigneusement le fil guide à la recherche de plis, torsions ou autres dommages avant toute utilisation et à chaque fois que cela est possible au cours de la procédure. Ne pas utiliser le fil guide s'il est endommagé.
- Faire attention à ne pas endommager la spirale lors de la mise en forme de la pointe.
- Avant d'insérer le fil guide, vérifier quelle est l'extrémité distale et veiller à l'insérer à partir de l'extrémité distale.
- Maintenir un rinçage à la solution saline continu entre le cathéter de guidage et le dispositif d'intervention et entre le dispositif d'intervention et le fil guide pendant la procédure. Le rinçage empêche la formation de produit de contraste et/ou la coagulation sur le fil guide et dans la lumière du cathéter.

Perforation de vaisseau  
Thrombose  
Arythmie  
Baisse de la tension artérielle

Complications hémorragiques  
Infarctus  
Vasospasme  
Réaction allergique

Embolie  
Ischémie  
Occlusion vasculaire

## Méthode d'utilisation

- Examen préalable à l'utilisation
  - Avant utilisation, effectuer un examen attentif et s'assurer que le fil guide et l'emballage ne sont pas endommagés.
  - Avant utilisation, s'assurer que le fil guide est compatible avec les dispositifs d'intervention qui seront utilisés.
- Préparation
  - Sélectionner le fil guide le plus adapté pour la zone concernée et retirer le support tubulaire contenant le fil guide de l'emballage stérile.
  - Remplir le support tubulaire avec une solution

saline héparinisée et stérilisée en utilisant une seringue de manière à faire tremper l'ensemble du dispositif. Il est à noter que la solution saline héparinisée et stérilisée peut s'écouler du support tubulaire à ce moment-là.

- Remplir la lumière du dispositif d'intervention avec la solution saline héparinisée et stérilisée avant d'insérer le fil guide.
- Libérer le fil guide de l'attache et faire glisser lentement le fil guide, pousser l'extrémité distale du fil guide à travers le support tubulaire (B). (Figure 1)

Fil guide (extrémité proximale)

Attache du tube  
Support tubulaire (A)

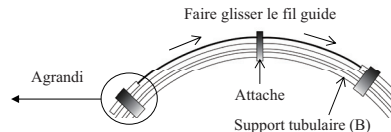


Figure 1

- Quand l'extrémité distale du fil guide s'étend 5 à 6 cm au-delà de l'autre extrémité du support tubulaire, si nécessaire, former la pointe conformément aux pratiques courantes.
- Saisir doucement le fil guide qui sort de l'extrémité distale du support tubulaire, à un point aussi proche que possible du support tubulaire, et sortir le fil guide lentement et avec précautions.
- En cas de résistance lors du retrait du fil guide du support tubulaire, injecter de nouveau de la solution saline héparinisée et stérilisée dans le support tubulaire. Une fois que la résistance a disparu, continuer à retirer le fil guide. S'assurer d'injecter suffisamment de solution saline héparinisée et stérilisée dans le support tubulaire. Le retrait forcé du fil guide peut en effet endommager le support tubulaire.
- Après avoir retiré le fil guide du support

tubulaire, l'examiner pour s'assurer qu'il n'est pas endommagé.

## 3. Procédures d'insertion

- Système sur fil
  - Insérer soigneusement l'extrémité distale du fil guide dans la lumière du fil guide du dispositif d'intervention.
  - Faire progresser doucement ce fil guide jusqu'à ce que sa pointe soit toute proche de la pointe du dispositif d'intervention.
  - Engager le cathéter-guide et insérer le dispositif d'intervention (avec le fil guide) dans le connecteur en Y.
  - Faire progresser le dispositif d'intervention dans le cathéter-guide jusqu'à ce que la pointe du système de fil guide soit toute proche de la pointe du cathéter-guide.
  - Serrer la valve hémostatique du connecteur

## Dysfonctionnements et effets indésirables

Les dysfonctionnements et effets indésirables dérivés de l'utilisation de ce fil guide comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants :

### 1. Dysfonctionnements

|                                 |                                     |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Non-franchissement d'une lésion | Rupture ou déformation du fil guide | Dommages tels que la séparation           |
| Difficulté de retrait           | Décollement du revêtement           | Débris provenant d'un fil guide endommagé |

### 2. Effets indésirables

|      |           |                        |
|------|-----------|------------------------|
| Mort | Infection | Dissection de vaisseau |
|------|-----------|------------------------|

en Y pour sceller le tout autour du dispositif d'intervention. S'assurer que le fil guide peut encore bouger.

- f) Vérifier que le fil guide se déplace sans difficulté.
- g) Fixer, si nécessaire, le dispositif de couple au fil guide.
- h) Faire progresser ce fil guide sous radioscopie pour franchir la lésion. Confirmer par angiographie que le fil guide a franchi la lésion cible rétrécie.
- i) Observer le mouvement du fil guide dans les vaisseaux.
- j) Faire progresser le dispositif d'intervention jusqu'à ce qu'il atteigne la lésion tout en évitant que le fil guide ne bouge. S'assurer que la pointe distale du fil guide et son emplacement dans le vaisseau soient visibles pendant les manipulations du dispositif d'intervention.

#### ■ Système d'échange rapide

- a) Engager le cathéter-guide.
- b) Insérer l'introducteur de fil guide dans le connecteur en Y du cathéter-guide.
- c) Insérer soigneusement la pointe du fil guide dans l'introducteur.
- d) Faire avancer le fil guide dans le cathéter-

guide sous radioscopie jusqu'à ce que la pointe du fil guide soit toute proche de la pointe du cathéter-guide.

- e) Fixer, si nécessaire, le dispositif de couple au fil guide.
- f) Faire progresser le fil guide sous radioscopie pour franchir la lésion. Confirmer par angiographie que le fil guide a franchi la lésion cible rétrécie.
- g) Observer le mouvement du fil guide dans les vaisseaux.
- h) Retirer le dispositif de couple de fil guide et l'introducteur de fil guide.
- i) Suivre le dispositif d'intervention sur le fil guide tout en empêchant le fil guide de bouger, et le faire avancer jusqu'à atteindre la lésion. S'assurer que la pointe distale du fil guide et son emplacement dans le vaisseau soient visibles pendant les manipulations du dispositif d'intervention.

#### 4. Procédures de changement du fil guide

##### ■ Système sur fil

- a) Retirer lentement ce fil guide en surveillant ses mouvements sous radioscopie.
- b) Insérer le fil guide suivant conformément aux instructions de la section « Méthode d'utilisation ».

« ASAHI Miracle », « MIRACLEbros », « Grand Slam » et « EXTENSION » sont des marques de commerce ou des marques déposées de ASAHI INTECC CO., LTD. au Japon et dans d'autres pays.

### Méthode d'entreposage

Ne pas plier le fil guide et l'emballage et/ou ne pas mettre de poids dessus. Le fil guide et l'emballage ne doivent pas entrer en contact avec l'eau. Conserver dans un lieu frais, sombre et sec.

### Date de péremption

La date de péremption est indiquée sur l'étiquette de l'emballage du fil guide.

### Contenu

5 pièces/coffret

### Clause de non-responsabilité

**En aucun cas « ASAHI INTECC CO., LTD. et ses filiales » (ci-après l'« Entreprise ») ne seront tenues responsables des accidents, des blessures corporelles, des effets indésirables causés par un mauvais usage du ou des produit(s) ou par un usage ne respectant pas les présentes instructions. En aucun cas, l'Entreprise ne sera tenue pour responsable de tout dommage (i) résultant du mode d'entreposage du ou des produits suite à leur expédition depuis les locaux de l'Entreprise ou (ii) dû à la sélection des patients, des techniques chirurgicales ou de toute autre procédure médicale effectuée par l'établissement de santé utilisant le ou les produits en question.**

**ASAHI Miracle / MIRACLEbros Serie****Grand Slam**  
**PCI-Führungsdraht**  
Gebrauchsanweisungen

Lesen Sie diese Anweisung sorgfältig durch, bevor Sie diesen Führungsdraht verwenden, und beachten Sie die Indikation, Gegenanzeigen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die Hinweise im Abschnitt „Anwendung“ in der Gebrauchsanweisung. Andernfalls kann es zu Komplikationen einschließlich schwerer Verletzungen und zum Tod des Patienten kommen.

Wenn ein Benutzer und/oder ein Patient auf einen schweren Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Führungsdraht aufmerksam wird, sollte dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates gemeldet werden.

Diese Gebrauchsanweisungen gelten für den ASAHI Miracle, die MIRACLEbros Serie und Grand Slam. Details (Länge des Führungsdrahtes, Länge des röntgendichten Abschnitts usw.) finden Sie auf dem Etikett des Produkts.

**Beschreibungen**

Die Grundstruktur dieses Führungsdrahts besteht aus einem kegelförmigen Kerndraht und einer Spule. Der kegelförmige Kerndraht und die Spule sind gelötet. Die Spule ist auf ihrer Länge röntgendicht, so dass ihre Position unter Röntgendurchleuchtung kontrolliert werden kann.

Die distale Oberfläche ist mit einer hydrophoben (Silikon-)Beschichtung beschichtet und die proximale Oberfläche ist mit PTFE (Polytetrafluorethylen) beschichtet. Am proximalen Ende der weniger als 300 cm langen Instrumente befindet sich ein Anschluss für einen Verlängerungsdraht, der das Kombiinstrument ersetzt; es kann ein Verlängerungsdraht von ASAHI INTECC angeschlossen werden.

Siehe nachfolgende Tabelle für die Spitzenbelastung\* dieses Produkts.

Tabelle 1. Produktspezifikationen

| Produktname                      | Außendurchmesser     | Spitzenbelastung* |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| ASAHI Miracle 3/ MIRACLEbros 3   | 0,36 mm (0,014 Zoll) | 3,0 gf            |
| ASAHI Miracle 6/ MIRACLEbros 6   | 0,36 mm (0,014 Zoll) | 6,0 gf            |
| ASAHI Miracle 12/ MIRACLEbros 12 | 0,36 mm (0,014 Zoll) | 12,0 gf           |
| Grand Slam                       | 0,36 mm (0,014 Zoll) | 0,7 gf            |

\*Die Spitzenbelastungswerte stellen die Mittelwerte der technischen Daten dar, die nach der internen Normprüfungsmethode gemessen wurden, unter Annahme, dass die Kraft durch die Spitze des Führungsdrahts auf die Läsion aufgebracht wird.

**Indikation**

Dieser Führungsdraht ist für die allgemeine perkutane Koronarintervention (PCI) vorgesehen. Dieser Führungsdraht soll die Stelle von Ballonkathetern oder anderen interventionellen Therapiegeräten in der Kardiovaskulatur erleichtern.

Dieser Führungsdraht ist nicht für eine Verwendung im neurovaskulären und peripheren Gefäßsystem geeignet.

**Behandelte Zielgruppe**

ASAHI Miracle, die MIRACLEbros Serie und Grand Slam sind zur Behandlung von Patienten bestimmt, die die Indikationen von PCI-Eingriffen erfüllen. Sie dürfen nicht bei Neugeborenen, Säuglingen oder Kindern sowie bei Patienten eingesetzt werden, die schwanger sind, an eingeschränkter Nierenfunktion leiden oder allergisch auf Kontrastmittel reagieren.

**Gegenanzeigen**

- Stellen Sie vor der Verwendung die Kompatibilität des Führungsdrahtdurchmessers mit anderen interventionellen Instrumenten sicher.
- Der Führungsdraht darf nicht bei Patienten eingesetzt werden, die allergisch auf Kontrastmittel reagieren oder an eingeschränkter Nierenfunktion leiden.
- Verwenden Sie den Führungsdraht nicht bei Schwangeren oder möglicherweise schwangeren Patientinnen (Röntgenstrahlen können den Fötus schädigen).
- Der Führungsdraht darf nur in einer Einrichtung verwendet werden, in der unverzüglich

Notfalloperationen durchgeführt werden können. Wenn keine Notfalloperationen möglich sind, können schlimmstenfalls lebensbedrohliche Situationen auftreten.

- Der Führungsdraht wurde mit Ethylenoxidgas (EOG) sterilisiert und ist ausschließlich für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Nicht wiederverwenden oder erneut sterilisieren. Eine Wiederverwendung oder erneute Sterilisierung kann die Leistungsqualität des Führungsdrahts beeinträchtigen, und es besteht das Risiko von Komplikationen wie z. B. Infektionen.

**Warnhinweise**

- Dieser Führungsdraht darf nur von einem für die Durchführung von PCI-Eingriffen qualifizierten Arzt verwendet werden.
- Dieser Führungsdraht darf niemals zusammen mit Kathetern mit Metallteilen, die direkt mit der Oberfläche dieses Führungsdrahtes in Berührung kommen können (z. B. Atherektomiekatether, Dilatoren aus Metall), Kanülen oder Dilatoren aus Metall verwendet werden.
- Während der Verwendung des Führungsdrahtes ist die Bewegung seiner Spitze unter Fluoroskopie zu kontrollieren und zu überwachen. Nicht in Bereichen von Gefäßen

verwenden, die nicht mittels Bildgebung dargestellt werden oder werden können.

- Verbinden Sie den Führungsdraht nicht mit abnehmbaren Verlängerungsdrähten, die von anderen Herstellern als ASAHI INTECC hergestellt werden. Bewegen Sie den Führungsdraht nicht, solange der abnehmbare Verlängerungsdraht noch angeschlossen ist. Der Führungsdraht kann sonst beschädigt werden oder das abnehmbare Verlängerungskabel sich ungewollt lösen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Führungsdraht vor.

**Vorsichtsmaßnahmen**

- Der Führungsdraht darf nach dem auf der Produktverpackung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwendet werden. Entsorgen Sie jeden Führungsdraht nach Ablauf des Verfallsdatums.
- Führungsdrähte sind empfindliche Instrumente und müssen vorsichtig behandelt werden.
- Verwenden Sie den Führungsdraht nicht, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.

Öffnen Sie die Verpackung immer erst kurz vor der Verwendung. Verwenden Sie bei der Handhabung und Verwendung des Führungsdrahtes aseptische Techniken.

- Reinigen Sie diesen Führungsdraht nicht mit einer organischen Lösung, wie z. B. Alkohol.
- Ergreifen Sie nach der Anwendung vorbeugende Maßnahmen gegen Infektionen. Entsorgen Sie diesen Führungsdraht als medizinischen Abfall.

- Dieser Führungsdraht darf niemals gegen einen Widerstand geschoben, gebohrt, herausgezogen oder gedreht werden. Das Drehen oder Schieben des Führungsdrahtes gegen einen Widerstand kann zur Beschädigung bzw. Ablösung seiner Spitze oder zur unmittelbaren Beschädigung eines Gefäßes führen. Zuwiderhandlungen können zur Beschädigung des Führungsdrahtes führen. Ermitteln Sie die Ursache des Widerstands mittels Fluoroskopie und ergreifen Sie notwendige Abhilfemaßnahmen.
- Führungsdrähte grundsätzlich langsam und vorsichtig vorschieben oder zurückziehen.
- Drehen Sie den Führungsdraht im Inneren des Blutgefäßes nicht kontinuierlich in dieselbe Richtung. Drehen Sie den Führungsdraht abwechselnd im und entgegen dem Uhrzeigersinn. Drehen Sie ihn nicht häufiger als zwei Mal (720°) in dieselbe Richtung.
- Spülen Sie den Führungsdraht während des Herausziehens und Wiedereinführens mit heparinisierter und sterilisierter Kochsalzlösung oder einer anderen geeigneten Lösung, damit keine Luft in das interventionelle Instrument eintreten kann. Führen Sie den Austausch dieses Führungsdrahtes vorsichtig durch, um Lufteintritt bzw. Traumata zu vermeiden. Achten Sie beim Wiedereinführen des Führungsdrahtes darauf, dass die Spitze des interventionellen Instruments frei im Gefäßlumen liegt und nicht an der Gefäßwand anliegt. Es besteht ansonsten die Gefahr eines Traumas. Verwenden Sie zur Kontrolle der Position die röntgendichte Markierung des interventionellen Instruments.
- Die Bewegungsfreiheit des Führungsdrahtes innerhalb des interventionellen Instruments ist eine wesentliche Eigenschaft eines lenkbaren Führungsdrahtsystems, da sie dem Anwender wertvolle haptische Informationen liefert. Untersuchen Sie das System vor dem Gebrauch auf eventuelle Widerstände. Verstellen Sie das hämostatische Ventil oder ersetzen Sie es durch ein verstellbares Ventil, wenn es die Bewegungsfreiheit des Führungsdrahtes verhindert.
- Verwenden Sie bei der Platzierung des Stents nicht mehr als einen Führungsdraht und führen Sie den Führungsdraht nicht durch Stent-Stege. Der Stent kann dadurch beschädigt werden oder der Führungsdraht kann abreißen oder abbrechen.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Führungsdraht in Größe und Form für den Eingriff geeignet und mit dem zu verwendenden Instrument kompatibel ist.
- Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung des medizinischen Instruments (z. B. Ballonkatheter oder sonstige interventionelle Behandlungsinstrumente), das zusammen mit diesem Führungsdraht verwendet werden soll.
- Beim Anschluss des abnehmbaren Verlängerungsdrahtes an diesen Führungsdraht sollte dieser fest an der Übergangslinie zwischen dem unbeschichteten und dem mit PTFE beschichteten Bereich am proximalen Ende des Führungsdrahtes eingeführt werden. Sollte eine Anomalie an der Verbindung festgestellt werden, ist die Verwendung des Führungsdrahts sofort zu beenden.
- Überprüfen Sie den Führungsdraht vor der Verwendung und nach Möglichkeit auch während des Eingriffs sorgfältig auf Biegungen, Knicke oder sonstige Schäden. Verwenden Sie den Führungsdraht nicht, wenn dieser beschädigt ist.
- Achten Sie beim Ausformen der Spitze darauf, die Spule nicht zu beschädigen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einführen des Führungsdrahtes, welches Ende das distale Ende ist, und führen Sie den Draht von der distalen Seite her ein.
- Sorgen Sie während des Eingriffs für eine kontinuierliche Spülung mit Kochsalzlösung zwischen dem Führungskatheter und dem interventionellen Instrument und dem Führungsdraht. Die Spülung verhindert die Bildung von Kontrastmittel bzw. eine Klumpenbildung auf dem Führungsdraht und im Lumen des Katheters.

## 1. Fehlfunktionen

|                                   |                                          |                                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Eine Läsion ist nicht passierbar  | Bruch oder Verbiegen des Führungsdrahtes | Schäden wie Abtrennung                        |
| Schwierigkeiten beim Herausziehen | Ablösen der Beschichtung                 | Rückstände eines beschädigten Führungsdrahtes |
| Tod                               | Infektion                                | Gefäßdissektion                               |
| Gefäßperforation                  | Komplikationen aufgrund von Blutungen    | Embolie                                       |
| Thrombus                          | Infarkt                                  | Ischämie                                      |
| Arrhythmie                        | Vasospasmus                              | Gefäßverschluss                               |
| Blutdruckabfall                   | Allergische Reaktion                     |                                               |

## Anwendung

### 1. Überprüfung vor der Verwendung

- Vor dem Gebrauch alle Führungsdrähte und Verpackungen kontrollieren und auf Unversehrtheit prüfen.
- Vor dem Gebrauch überprüfen, ob der Führungsdraht mit den zu verwendenden interventionellen Instrumenten kompatibel ist.

- Spritze mit heparinisierter und sterilisierter Kochsalzlösung, um das gesamte Instrument damit zu tränken. Beachten Sie, dass zu diesem Zeitpunkt heparinisierte und sterilisierte Kochsalzlösung aus dem Dispenser austreten kann.
- Befüllen Sie das Lumen des interventionellen Instruments vor dem Einführen des Führungsdrahts mit heparinisierter und sterilisierter Kochsalzlösung.
  - Lösen Sie den Führungsdraht vom Clip. Schieben Sie anschließend das distale Ende des Führungsdrahtes langsam durch den Dispenser (B). (Abbildung 1)

### 2. Vorbereitung

- Wählen Sie den am besten geeigneten Führungsdraht für den betroffenen Bereich aus und entnehmen Sie den Dispenser mit dem Führungsdraht aus der sterilen Verpackung.
- Befüllen Sie den Dispenser mithilfe einer

Führungsdraht (proximales Ende)

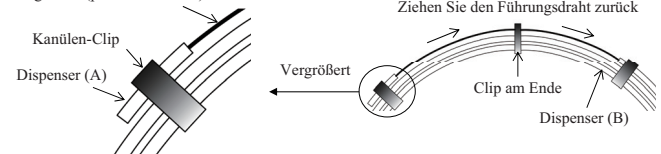


Abbildung 1

- Formen Sie die Spitze, falls erforderlich, auf die allgemein übliche Art, wenn das distale Ende des Führungsdrahtes mehr als 5 - 6 cm über das andere Ende des Dispensers hinausragt.
- Greifen Sie den am distalen Ende des

- Dispensers herausragenden Führungsdraht behutsam möglichst nahe am Dispenser und ziehen Sie ihn langsam und vorsichtig heraus.
- Injizieren Sie erneut heparinisierte und sterilisierte Kochsalzlösung in den Dispenser, falls beim Herausziehen des Führungsdrahts

## Fehlfunktionen und unerwünschte Ereignisse

Mögliche Fehlfunktionen und unerwünschte Ereignisse beim Gebrauch dieses Führungsdrahts sind unter anderem:

vom Dispenser Widerstand spürbar ist. Ziehen Sie den Führungsdraht erst dann weiter heraus, wenn kein Widerstand mehr spürbar ist. Achten Sie darauf, ausreichend heparinisierte und sterilisierte Kochsalzlösung in den Dispenser zu injizieren, da er durch gewaltsames Herausziehen beschädigt werden kann.

- h) Untersuchen Sie den Führungsdraht nach dem Herausziehen, um sicherzugehen, dass er nicht beschädigt ist.

### 3. Anleitung zum Einführen

#### ■ System über den Draht

- a) Führen Sie das distale Ende des Führungsdrahtes vorsichtig in das Führungsdrahtlumen des interventionellen Instruments ein.
- b) Schieben Sie den Führungsdraht vorsichtig vorwärts, bis sich seine Spitze direkt proximal zur Spitze des interventionellen Instruments befindet.
- c) Schließen Sie den Führungskatheter an und schieben Sie das interventionelle Instrumentensystem (mit Führungsdraht) in den Y-Anschluss.
- d) Schieben Sie das interventionelle Instrumentensystem durch den Führungskatheter, bis die Spitze des Führungsdrahtes direkt proximal zur Spitze des Führungskatheters liegt.
- e) Ziehen Sie zum Abdichten des interventionellen Instruments das hämostatische Ventil des Y-Anschlusses an. Vergewissern Sie sich, dass sich der Führungsdraht noch nicht bewegen lässt.
- f) Prüfen Sie, ob der Führungsdraht leicht gleitet.
- g) Befestigen Sie die Rotationshilfe bei Bedarf am Führungsdraht.
- h) Schieben Sie diesen Führungsdraht unter Fluoroskopie durch die Läsion vorwärts. Kontrollieren Sie mittels Angiographie, ob der Führungsdraht die verengte Zielläsion passiert hat.
- i) Beobachten Sie die Bewegung des Führungsdrahtes in den Gefäßen.
- j) Schieben Sie das interventionelle Instrument bis zur Läsion vor und achten Sie darauf, dass sich der Führungsdraht dabei nicht bewegt. Vergewissern Sie sich, dass die distale Spitze des Führungsdrahtes

und seine Position im Gefäß während der Eingriffe mit dem interventionellen Instrument sichtbar sind.

#### ■ Schnellwechselsystem

- a) Schieben Sie den Führungskatheter ein.
- b) Setzen Sie das Einführbesteck für den Führungsdraht in den Y-Anschluss des Führungskatheters ein.
- c) Schieben Sie die Spitze des Führungsdrahtes vorsichtig in das Einführbesteck.
- d) Schieben Sie den Führungsdraht unter Fluoroskopie durch den Führungskatheter, bis sich die Spitze des Führungsdrahtes direkt proximal zur Spitze des Führungskatheters liegt.
- e) Befestigen Sie die Rotationshilfe bei Bedarf am Führungsdraht.
- f) Schieben Sie den Führungsdraht unter Fluoroskopie durch die Läsion vorwärts. Kontrollieren Sie mittels Angiographie, ob der Führungsdraht die verengte Zielläsion passiert hat.
- g) Beobachten Sie die Bewegung des Führungsdrahtes in den Gefäßen.
- h) Entfernen Sie die Rotationshilfe und das Einführbesteck für den Führungsdraht.
- i) Folgen Sie dem interventionellen Instrument mit dem Führungsdraht. Achten Sie darauf, dass sich der Führungsdraht dabei nicht bewegt, und schieben Sie ihn bis zur Läsion vor. Vergewissern Sie sich, dass die distale Spitze des Führungsdrahtes und seine Position im Gefäß während der Eingriffe mit dem interventionellen Instrument sichtbar sind.

### 4. Auswechseln des Führungsdrahtes

#### ■ System über den Draht

- a) Entfernen Sie diesen Führungsdraht langsam und überwachen Sie seine Bewegung dabei unter Fluoroskopie.
- b) Führen Sie den nächsten Führungsdraht gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Anwendung“ ein.

## Lagerbedingungen

Lagern Sie den Führungsdraht und die Verpackung nicht in einem gebogenen Zustand und nicht unter schweren Gegenständen. Führungsdraht und die Verpackung vor Nässe schützen. Lagern Sie den Führungsdraht und die Verpackung an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort.

## Verfallsdatum

Das Verfallsdatum ist auf dem Etikett auf der Führungsdrahtverpackung angegeben.

## Inhalt

5 Stück/Schachtel

## Haftungsausschluss

**„ASAHI INTECC CO., LTD. und dessen Partnerunternehmen“ (im Folgenden als „Unternehmen“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Haftung für Unfälle, Personenschäden und Zwischenfälle infolge des unsachgemäßen Gebrauchs dieses Produkts/dieser Produkte oder jeder anderen Verwendung, die im Widerspruch zu den hier aufgeführten Anweisungen steht. Das Unternehmen übernimmt darüber hinaus keinerlei Haftung für Schäden, die (i) aus der Lagerung des Produkts/der Produkte nach dem Versand durch das Unternehmen oder (ii) aufgrund der Auswahl der Patienten, der Operationsmethoden oder aufgrund irgendwelcher sonstigen medizinischen Tätigkeiten seitens der medizinischen Einrichtung, die dieses Produkt verwendet, entstehen.**

„ASAHI Miracle“, „MIRACLEbros“, „Grand Slam“ und „EXTENSION“ sind in Japan und weiteren Ländern eingetragene Warenzeichen von ASAHI INTECC CO.,LTD.

Σειρά ASAHI Miracle / MIRACLEbros

Grand Slam

Καθοδηγητικό σύρμα PCI

Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα και τηρήστε τις ενδείξεις χρήσης, τις αντενδείξεις, τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και το πώς χρησιμοποιείται, στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθούν επιπλοκές, όπως σοβαρός τραυματισμός του ασθενούς ή θάνατος.

Εάν ο χρήστης ή/και ο ασθενής λάβει γνώση ενός σοβαρού περιστατικού που συνέβη σε σχέση με το καθοδηγητικό σύρμα, πρέπει να αναφέρει το γεγονός στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης αφορούν τις σειρές ASAHI Miracle, MIRACLEbros και το Grand Slam. Για λεπτομέρειες (μήκος του καθοδηγητικού σύρματος, μήκος του ακτινοσκοπικού τμήματος κ.λπ.), ανατρέξτε στην ετικέτα του προϊόντος.

Περιγραφές

Η βασική δομή του καθοδηγητικού σύρματος αποτελείται από πυρήνα σύρματος που στενεύει και σπειράμα. Ο πυρήνας σύρματος που στενεύει και το σπειράμα είναι συγκολλημένα. Το μήκος του σπειράματος είναι ακτινοσκοπικό, ώστε η θέση του να μπορεί εύκολα να επιβεβαιωθεί υπό ακτινοσκόπηση. Η απότερη επιφάνεια είναι καλυμμένη με υδροφοβική επικάλυψη (σιλικόνη), και η εγγύς επιφάνεια είναι καλυμμένη με PTFE (πολυτετραφθοροαιθυλένιο). Στο εγγύς άκρο του τεχνολογικού προϊόντος, εκτός από εκείνα με συνολικό μήκος 300 cm, υπάρχει μια σύνδεση για ένα σύρμα επέκτασης που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του συνδυασμένου τεχνολογικού προϊόντος, και μπορεί να συνδεθεί το σύρμα επέκτασης της ASAHI INTECC.

Συμβουλευθείτε τον παρακάτω πίνακα για το φορτίο άκρου\* του προϊόντος.

Πίνακας 1. Προδιαγραφές Προϊόντος

| Ονομασία Προϊόντος               | Εξωτερική διάμετρος    | Φορτίο άκρου* |
|----------------------------------|------------------------|---------------|
| ASAHI Miracle 3/ MIRACLEbros 3   | 0,36 mm (0,014 ίντσες) | 3,0 gf        |
| ASAHI Miracle 6/ MIRACLEbros 6   | 0,36 mm (0,014 ίντσες) | 6,0 gf        |
| ASAHI Miracle 12/ MIRACLEbros 12 | 0,36 mm (0,014 ίντσες) | 12,0 gf       |
| Grand Slam                       | 0,36 mm (0,014 ίντσες) | 0,7 gf        |

\*Οι τιμές φορτίου άκρου αντιπροσωπεύουν τις μέσες τιμές των τιμών προδιαγραφών του προϊόντος όπως έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμασίας εσωτερικού προτύπου υποθέτοντας τη δύναμη που εφαρμόζεται στη βλάβη από το άκρο του καθοδηγητικού σύρματος.

Ενδείξεις χρήσης

Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα προορίζεται για γενική διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI). Αυτός το οδηγός σύρματος προορίζεται για να διευκολύνει την τοποθέτηση καθετήρων διαστολής μπαλονιού ή άλλων παρεμβατικών θεραπευτικών τεχνολογικών προϊόντων εντός του καρδιαγγειακού συστήματος. Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα δεν προορίζεται για χρήση στο νευροαγγειακό και περιφερικό αγγειακό σύστημα.

Στοχευόμενος πληθυσμός θεραπείας

Οι σειρές ASAHI Miracle, MIRACLEbros και το Grand Slam προορίζονται για ασθενείς που πληρούν τις ενδείξεις για διαδικασίες PCI. Δεν ενδείκνυται για χρήση σε νεογνά, βρέφη ή παιδιά όπως και σε ασθενείς που κωφοροούν, έχουν νευρική δυσλειτουργία ή έχουν αλλεργική αντίδραση σε σκιαγραφικά μέσα.

Αντενδείξεις

- Επιβεβαιώστε τη συμβατότητα της διαμέτρου του καθοδηγητικού σύρματος με άλλη επεμβατική συσκευή πριν από την πραγματική χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε το καθοδηγητικό σύρμα σε ασθενείς με αλλεργική αντίδραση στο σκιαγραφικό υλικό ή με νευρική δυσλειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε το καθοδηγητικό σύρμα σε έγκυες ασθενείς ή σε ασθενείς που μπορεί να είναι έγκυες (η ακτινογραφία μπορεί να επηρεάσει το έμβρυο).
- Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ίδρυμα όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Εάν μια επείγουσα χειρουργική επέμβαση δεν είναι διαθέσιμη, στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να συμβούν απειλητικά για τη ζωή περιστατικά.
- Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα είναι προαστεγισμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (EOG) και προορίζεται μόνο για μία χρήση. Μην επαναχρησιμοποιείτε ή επαναποστεριώνετε. Σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης ή επαναποστείρωσης, η απόδοση ή η ποιότητα αυτού του καθοδηγητικού σύρματος και της συσκευασίας μπορεί να υποβαθμιστεί και υπάρχει κίνδυνος επιπλοκών, όπως η μόλυνση.

Προειδοποιήσεις

- Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ιατρό που είναι πλήρως εκπαιδευμένος στη θεραπεία PCI.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα σε συνδυασμό με καθετήρες με μεταλλικά μέρη που μπορεί να έρθουν σε άμεση επαφή με την επιφάνεια αυτού του καθοδηγητικού σύρματος (π.χ. καθετήρες αθηρεκτομής, μεταλλικοί διαστολείς), μεταλλικές βελόνες ή μεταλλικούς υποδοχείς θήκης.
- Κατά τη χρήση του καθοδηγητικού σύρματος, ελέγχετε και παρακολουθείτε την κίνηση του άκρου του υπό ακτινοσκόπηση. Μην το χρησιμοποιείτε σε σημεία του αγγείου που δεν είναι ή δεν μπορούν να απεικονιστούν.
- Μην συνδέετε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα με αποσπώμενα σύρματα επέκτασης τα οποία παράγονται από κατασκευαστές διαφορετικούς από την ASAHI INTECC. Μην χιρίσκετε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα όσο είναι συνδεδεμένο το αποσπώμενο σύρμα επέκτασης. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο καθοδηγητικό σύρμα ή να αποκολληθεί ακούσια το αποσπώμενο σύρμα επέκτασης.
- Μην τροποποιείτε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα για κανέναν λόγο.

Προφυλάξεις

- Μην χρησιμοποιείτε το καθοδηγητικό σύρμα μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα. Απορρίψτε κάθε καθοδηγητικό σύρμα όταν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του.
- Τα καθοδηγητικά σύρματα είναι ενιαίσθητα εργαλεία και πρέπει να τα χειρίζεστε προσεκτικά.
- Εάν η συσκευασία έχει ανοίξει ή έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε το καθοδηγητικό σύρμα. Μην ανοίγετε τη συσκευασία μέχρι λίγο

πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιήστε ασηπτική χειρική και το χειρισμό και τη χρήση του καθοδηγητικού σύρματος.

- Μην σκουπίζετε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα χρησιμοποιώντας οργανικό διάλυμα, όπως οινόπνευμα.
- Λάβετε προληπτικά μέτρα κατά της μόλυνσης μετά τη χρήση. Απορρίψτε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα και τη συσκευασία ως ιατρικά απόβλητα.
- Ποτέ μην σπρώχνετε, βιδώνετε, αποσύρετε ή στρέφετε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα που συναντά αντίσταση. Η στρέψη ή η πίεση αυτού του καθοδηγητικού σύρματος ενάντια στην αντίσταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή/και αποκόλληση του άκρου αυτού του καθοδηγητικού σύρματος ή άμεση ζημιά σε ένα αγγείο. Σε αντίθεση περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημιά σε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα. Προσδιορίστε την αιτία της αντίστασης υπό ακτινοσκόπηση και λάβετε κάθε αναγκαία διορθωτική ενέργεια.
- Πάντα να προωθείτε ή να αποσύρετε τα καθοδηγητικά σύρματα αργά και προσεκτικά.
- Όταν περιστρέφετε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα στο εσωτερικό του αμμοφόρου αγγείου, μην περιστρέφετε συνεχώς προς την ίδια κατεύθυνση. Κατά την περιστροφή του καθοδηγητικού σύρματος, περιστρέψτε το εναλλάξ δεξιόστροφα και αριστερόστροφα. Μην περιστρέφετε περισσότερο από δύο περιστροφές (720°) προς την ίδια κατεύθυνση.
- Ξεπλύνετε το καθοδηγητικό σύρμα με ηπαιρινισμένο και αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό ή άλλο κατάλληλο διάλυμα κατά την αφαίρεση και την επαντοποθέτησή του για να αποτρέψετε την είσοδο αέρα στην επεμβατική συσκευή. Προγραμματισμένη την αλλαγή αυτού του καθοδηγητικού σύρματος προσεκτικά για να αποφύγετε την είσοδο αέρα και/ή τραυματισμό. Κατά την επανεισαγωγή του καθοδηγητικού σύρματος, επιβεβαιώστε ότι το άκρο της επεμβατικής συσκευής είναι ελεύθερο εντός του αυλού του αγγείου και δεν ακουμπά στο τοίχωμα του αγγείου. Σε αντίθεση περίπτωση μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Χρησιμοποιήστε τον ακτινοσκόπεο δείκτη της επεμβατικής συσκευής για να επιβεβαιώσετε τη θέση.
- Η ελεύθερη κίνηση του καθοδηγητικού σύρματος εντός της επεμβατικής συσκευής είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ενός συστήματος κατευθυνόμενου καθοδηγητικού σύρματος, ιδίως

παρέχει στο χρήστη πολύτιμες πληροφορίες αψής. Δοκιμάστε το σύστημα για τυχόν αντίσταση πριν από τη χρήση. Ρυθμίστε ή αντικαταστήστε τη βαλβίδα αμείωσης με ρυθμιζόμενη βαλβίδα, εάν διαπιστωθεί ότι εμποδίζει την κίνηση του καθοδηγητικού σύρματος.

- Μην εκτελείτε τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) χρησιμοποιώντας περισσότερα από ένα καθοδηγητικά σύρματα ή λειτουργία σύρματος μέσω του στηρίγματος της ενδοπρόθεσης (stent). Διαφορετικά, η ενδοπρόθεση (stent) μπορεί να υποστεί βλάβη ή το καθοδηγητικό σύρμα μπορεί να σπάσει ή να διαλυθεί.
- Πριν από τη χρήση, επιβεβαιώστε ότι αυτό το καθοδηγητικό σύρμα έχει το κατάλληλο μέγεθος και σχήμα για τη διαδικασία και είναι συμβατό με τη συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό.
- Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που επισυνάπτονται στην ιατρική συσκευή (π.χ. καθετήρες διαστολής μπαλονιού ή άλλες επεμβατικές θεραπευτικές συσκευές) που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με αυτό το καθοδηγητικό σύρμα.
- Κατά τη σύνδεση του αποσπώμενου σύρματος επέκτασης με αυτό το καθοδηγητικό σύρμα, θα πρέπει να εισάγεται με ασφάλεια στη γραμμή οριοθέτησης μεταξύ της επικάλυψης χωρίς PTFE και της επικάλυψης PTFE στο εγγύς άκρο του καθοδηγητικού σύρματος. Εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε ανωμαλία στη σύνδεση, σταματήστε αμέσως τη χρήση του καθοδηγητικού σύρματος.
- Ελέγξτε προσεκτικά το καθοδηγητικό σύρμα για καμπύλες, στροφές ή άλλες ζημιές πριν από τη χρήση και όποτε είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Μην χρησιμοποιείτε το καθοδηγητικό σύρμα εάν έχει υποστεί ζημιά.
- Κατά τη διαμόρφωση του άκρου, προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο πνίγιο.
- Πριν εισαγάγετε το καθοδηγητικό σύρμα, ελέγξτε ποιο άκρο είναι το άνω άκρο και βεβαιωθείτε ότι το εισαγάγετε από το άνω άκρο.
- Διατηρήστε συνεχή έκλυση φυσιολογικού ορού μεταξύ του καθοδηγητικού καθετήρα και της επεμβατικής συσκευής και μεταξύ της επεμβατικής συσκευής και του καθοδηγητικού σύρματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η έκλυση αποτρέπει το σχηματισμό σκιαγραφικού και/ή τη δημιουργία θρόμβων στο

καθοδηγητικό σύρμα και στον αυλό του καθετήρα.

## Δυσλειτουργίες και αντίξοα περιστατικά

Οι πιθανές δυσλειτουργίες και τα αντίξοα περιστατικά από τη χρήση αυτού του καθοδηγητικού σύρματος περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

### 1. Δυσλειτουργίες

|                                 |                                            |                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Αδυναμία διαπέρασης μιας βλάβης | Σπάσιμο ή κάμψη του καθοδηγητικού σύρματος | Ζημιές όπως ο διαχωρισμός                                 |
| Δυσκολία στην αφαίρεση          | Αφαίρεση επικάλυψης                        | Υπολείμματα από καθοδηγητικό σύρμα που έχει υποστεί ζημιά |

### 2. Αντίξοα περιστατικά

|                              |                        |                   |
|------------------------------|------------------------|-------------------|
| Θάνατος                      | Μόλυνση                | Διατομή αγγείου   |
| Διάρθρωση αγγείου            | Αιμορραγικές επιπλοκές | Εμβολή            |
| Θρόμβος                      | Έμφραγμα               | Ισχυμία           |
| Αρρυθμία                     | Αγγειοσπασμός          | Αγγειακή απόφραξη |
| Μείωση της αρτηριακής πίεσης | Αλλεργική αντίδραση    |                   |

## Πώς χρησιμοποιείται

### 1. Έλεγχος πριν από τη χρήση

- Πριν από τη χρήση, ελέγξτε προσεκτικά και επιβεβαιώστε ότι το καθοδηγητικό σύρμα και η συσκευασία δεν έχουν υποστεί ζημιά.
- Πριν από τη χρήση, επιβεβαιώστε ότι το καθοδηγητικό σύρμα είναι συμβατό με τις επεμβατικές συσκευές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

με τον ηπαιρινισμένο και αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό πριν από την εισαγωγή του καθοδηγητικού σύρματος.

δ) Απελευθερώστε το καθοδηγητικό σύρμα από το κλίπ και σύρετε αργά το καθοδηγητικό σύρμα, σπρώξτε το άνω άκρο του καθοδηγητικού σύρματος μέσα από το σωλήνα υποδοχής (B). (Εικόνα 1)

### 2. Προετοιμασία

- Επιλέξτε το κατάλληλο καθοδηγητικό σύρμα για την πληγείσα περιοχή και αφαιρέστε το σωληνάριο υποδοχής που περιέχει το καθοδηγητικό σύρμα από την αποστειρωμένη συσκευασία.
- Γεμίστε τον σωλήνα υποδοχής με ηπαιρινισμένο και αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό χρησιμοποιώντας μια σύριγγα για να εμποτίσετε ολόκληρη τη συσκευή. Λάβετε υπόψη ότι ο ηπαιρινισμένος και αποστειρωμένος φυσιολογικός ορός μπορεί να χυθεί από τον σωλήνα υποδοχής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
- Γεμίστε τον αυλό της επεμβατικής συσκευής



## ASAHI Miracle / MIRACLEbros sorozat

### Grand Slam

### PCI vezetődrt

Használati útmutató

Mielőtt használni kezdené a vezetődrtöt, alaposan olvassa el ezeket az utasításokat, és tartsa be a jelen használati útmutató Felhasználási javallatok, Ellenjavallatok, Figyelmeztetések, Óvintézkedések és Használat fejezetében foglaltakat. A leírtak figyelmen kívül hagyása nem várt eredményeket, a páciens súlyos testi sérülését vagy halálát okozhatja.

Amennyiben a felhasználónak és/vagy a páciensnek a vezetődrttől kapcsolatos súlyos incidens jut tudomására, jelentse a tényt a gyártónak és a tagállam illetékes hatóságának.

Ez a használati útmutató az ASAHI Miracle, MIRACLEbros sorozatú és a Grand Slam vezetődrtóra érvényes. A részleteket (a vezetődrt hossza, a röntgensugárzást nem áteresztő rész hossza stb.) lásd a termékcímken.

### Leírások

A vezetődrt alapszerkezete egy kúpos maghuzalból és egy tekercsből áll. A kúpos maghuzal és a tekercs forrasztott. A tekercs hossza röntgensugárzást nem áteresztő, így annak pozíciója könnyen ellenőrizhető röntgenképalkotás alatt.

A disztális felület hidrofób (szilikon) bevonattal, a proximális felület pedig PTFE (poli-tetrafluor-etilén) bevonattal van bevonva. A készülék proximális végén, kivéve azt, melynek hossza kevesebb, mint 300 cm, egy csatlakozó található egy hosszabbító vezetékhez, amely a kombinált eszköz helyettesítésére használható, és az ASAHI INTECC hosszabbító vezeték csatlakoztatható.

A termék csúcának terheléséhez\* lásd az alábbi táblázatot.

1. táblázat. Termék specifikációi

| A termék neve                    | Külső átmérő            | Csúcs terhelése* |
|----------------------------------|-------------------------|------------------|
| ASAHI Miracle 3/ MIRACLEbros 3   | 0,36 mm (0,014 hüvelyk) | 3,0 gf           |
| ASAHI Miracle 6/ MIRACLEbros 6   | 0,36 mm (0,014 hüvelyk) | 6,0 gf           |
| ASAHI Miracle 12/ MIRACLEbros 12 | 0,36 mm (0,014 hüvelyk) | 12,0 gf          |
| Grand Slam                       | 0,36 mm (0,014 hüvelyk) | 0,7 gf           |

\*A csúcs terhelésének értékei a belső szabványos vizsgálati módszerrel mért termékspecifikációs értékek átlagértékeit jelentik, feltételezve a vezetődrt csúcsa által a lézióra kifejtett erőt.

### Felhasználási javallatok

Ez a vezetődrt általános perkután koronária intervenció (PCI) céljára szolgál. Ez a vezetődrt a ballonos tágitókatéterek vagy más intervenciók terápiás eszközei kardiovaszkuláris rendszerben történő elhelyezésének megkönnyítésére szolgál.

A vezetődrt az idegrendszeri és perifériás érrendszerben nem használható.

### Kezelt célcsoport

ASAHI Miracle, MIRACLEbros sorozatú és Grand Slam vezetődrtok olyan betegek számára készültek, akik megfelelnek a PCI-eljárások javallatainak. Használata nem javallott újszülöttek, csecsemők vagy gyermekek, valamint terhes, csökkent vesefunkciójú vagy kontrasztanyagra allergiás betegek esetében.

### Ellenjavallatok

- A tényleges használat előtt erősítse meg a vezetődrt átmérőjét másik intervenció eszközével.
- Ne használja a vezetődrtöt olyan betegeknél, akik allergiás reakciót mutatnak a kontrasztanyagra, vagy akiknek csökkent a vesefunkciója.
- Ne használja a vezetődrtöt terhes vagy gyaníthatóan terhes páciensek (a röntgensugárzás hatással lehet a magzatra).
- Ezt a vezetődrtöt csak olyan intézményben szabad használni, ahol azonnal végrehajthatók a

sürgősségi sebési beavatkozások. Ha sürgősségi sebési beavatkozással nem érhető el, a legrosszabb esetben életveszéllyel fenyegető események is bekövetkezhetnek.

- A vezetődrt etilén-oxid gázzal (EOG) van elősterilizálva és kizárólag egyszeri használatra készült. Ne használja vagy sterilizálja újra. Ismételt felhasználás vagy újraszterilizálás esetén a vezetődrt teljesítménye és minősége csökkenhet, továbbá komplikációkat, pl. fertőzést okozhat.

### Figyelmeztetések

- A vezetődrtöt kizárólag a PCI eljárásokban megfelelően jártas orvos használhatja.
- Soha ne használja ezt a vezetődrtöt olyan katéterekkel együtt, amelyeknek fém részei közvetlenül érintkezhetnek a vezetődrt felületével (pl. atherectomiás katéterek, fémátvitel), illetve féműkkel vagy fém hüvelybehelyezőkkel.
- A vezetődrt használatát során fluoroszkópiás megfigyeléssel ellenőrizze és kövesse nyomon a
- csúcs mozgását. Ne használja olyan ereken, amelyek nem lehet vagy tud megtekinteni.
- Ne csatlakoztassa a vezetődrtöt olyan leválasztható hosszabbító vezetékhez, amelyeket nem az ASAHI INTECC, hanem más gyártó gyártott. Ne manipulálja a vezetődrtöt, ha a leválasztható hosszabbító drót csatlakoztatva van. Ellenkező esetben a vezetődrt megsérülhet, illetve a leválasztható hosszabbító vezeték véletlenül megsérülhet.
- Semmilyen ok miatt ne módosítsa a vezetődrtöt!

### Óvintézkedések

- Használja fel a vezetődrt csomagolásán feltüntetett lejárati időn belül. Dobjon el minden olyan vezetődrtöt, amelynek letelt a lejárata.
- A vezetődrtök törékeny műszerek, és óvatosan kell kezelni őket.
- Ne használja a vezetődrtöt, ha a csomagolás kinyílt vagy megsérült. Kizárólag közvetlenül a felhasználás előtt nyissa ki a csomagolást. A vezetődrt kezeléséhez és használatához aszeptikus technikákat használjon.
- Semmilyen szerves oldattal (pl. alkohol) ne törölje át a vezetődrtöt.
- Használat után alkalmazzon megelőző intézkedéseket a fertőzések elkerülésére. A vezetődrtöt és a csomagolást orvosi hulladékként dobja ki.
- Soha ne tolja, csavarja be vagy húzza ki a vezetődrtöt és soha ne fejtse ki nyomatekót rá, ha ellenállást tapasztal. Az eszköz erővel történő nyomása vagy tolasa sérülést okozhat, és/vagy a vezetődrt csúcának leválásához vezethet, illetve közvetlen érkárosodást okozhat. Ennek elmulasztása esetén a vezetődrt károsodhat. Fluoroszkópiával állapítsa meg az ellenállás okát, és járjon el annak megfelelően.
- Mindig lassan és óvatosan vezesse be ill. húzza vissza a vezetődrtöt.
- Ha a vezetődrtöt nyomattal terheli az ér belsejében, ne terhelje folyamatosan ugyanabba az irányba. Ha nyomattal terheli a vezetődrtöt, felváltva forgassa az óramutató járásával ellentétes és megegyező irányokba. Ne

forgassa több mint két fordulatnyit (720°) ugyanabba az irányba.

- Annak elkerülése érdekében, hogy levegő kerüljön az intervenció eszközbe, a vezetődrót eltávolítása és a behelyezése során folyamatosan öblítse le a vezetődrótot heparinizált és sterilizált sóoldattal vagy egyéb megfelelő oldattal. A levegőbejutás és/vagy a trauma elkerülése érdekében óvatosan hajtja végre a vezetődrót cseréjét. A vezetődrót ismételt bevezetésekor győződjön meg róla, hogy az intervenció eszköz csúcsa szabadon mozog az ér lumenben, és nem ütközik az érfalnak. Ennek elmulasztása sérüléshez vezethet. A helyzet megállapításához alkalmazzon sugár át nem eresztő jelzést az intervenció eszközön.
- A vezetődrót szabad mozgása a beavatkozási eszközön belül fontos tulajdonság az irányítható vezetődrótnál, mivel a felhasználónak értékes, kézszelvezhető visszajelzést ad. Ellenőrizze a rendszert használat előtt, nem tapasztal-e ellenállást. Állítsa be vagy cserélje ki a hemosztázis-szelepet egy állítható szelepre, ha úgy látja, hogy akadályozza a vezetődrót mozgását.
- Ne végezzen sztent behelyezést, ha több vezetődrótot használ, vagy a sztent bordán keresztül vezeti a drótot. Ellenkező esetben a sztent megsérülhet vagy a vezetődrót elszakadhat vagy szétterhet.
- Használat előtt erősítse meg, hogy a vezetődrót mérete és formája megfelel-e a beavatkozásnak,

és kompatibilis-e az azzal együtt használni kívánt eszközzel.

- Olvassa el a vezetődróttal együtt használandó orvostechnikai eszközökhöz (pl. ballonos tágitó katéterekhez vagy egyéb intervenció terápiai eszközökhöz) mellékelt használati utasítást.
- Amikor a leválasztható hosszabbító drótot ehhez a vezetődróthoz csatlakoztatja, azt megfelelően kell behelyezni a vezetődrót proximális végén található nem PTFE bevonat és PTFE bevonat közti határvonalba. Ha a csatlakozás során bármilyen rendellenességet észlel a csatlakozásban, azonnal függesztse fel a vezetődrót használatát.
- Használat előtt, és amikor csak lehetséges a használat során, ellenőrizze a vezetődrótot, nincs-e rajta meghajlás, megtörés vagy egyéb sérülés. Ne használja a vezetődrótot, ha az sérült.
- A csűcs formázásakor ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a tekercset.
- A vezetődrót behelyezése előtt ellenőrizze, hogy melyik a disztális vége, és ügyeljen arra, hogy azt a disztális végéről helyezze be.
- Az eljárás során a vezető katéter és az intervenció eszköz, valamint az intervenció eszköz és a vezetődrót között folyamatos sóoldatos öblítést kell alkalmazni. Az öblítés megakadályozza a kontrasztanyag és/vagy a vérrögök képződését a vezetődróton és a katéter lumenében.

## Működési problémák és nemkívánatos események

A vezetődrót használata révén fellépő lehetséges működési problémák és nemkívánatos események többek között az alábbiak lehetnek:

### 1. Működési problémák

|                                |                                     |                               |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Sikertelen átjutás a sérülésen | A vezetődrót törése vagy meghajlása | Sérülések, pl. szétválás      |
| Nehézség az eltávolítás során  | A bevonat leválása                  | Törmélék sérült vezetődrótból |

### 2. Nemkívánatos események

|                        |                      |             |
|------------------------|----------------------|-------------|
| Halál                  | Fertőzés             | Érszakadás  |
| Az ér perforációja     | Vérzési komplikációk | Légembólia  |
| Thrombus               | Infarktus            | Iszkémia    |
| Aritmia                | Érgörcs              | Érelzáródás |
| A vérnyomás csökkenése | Allergiás reakciók   |             |


## Használat

### 1. Ellenőrzések a használat előtt

- Használat előtt vizsgálja meg figyelmesen, és győződjön meg róla, hogy a vezetődrót és csomagolása sértetlen-e.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a vezetődrót kompatibilis-e a használni tervezett intervenció eszközökkel.

### 2. Előkészítés

- Válassza ki az érintett területhez legmegfelelőbb vezetődrótot, és távolítsa el a vezetődrótot tartalmazó csőtartót a steril csomagolásból.

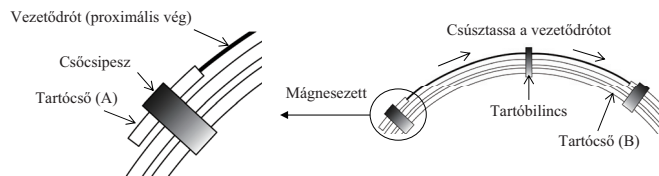

1. ábra

- Amikor a vezetődrót disztális vége legalább 5-6 cm-re van a tartócső másik végétől, akkor szükség esetén alakítsa a csűcsot a normál gyakorlatnak megfelelően.
- Fogja meg óvatosan a vezetődrótot, amely a tartócső disztális végéből jött ki, mégpedig a tartócsőhöz legközelebbi ponton, majd húzza ki a vezetődrótot lassan és óvatosan.
- Ha ellenállás érezhető a vezetődrót csőtartóból történő eltávolítása során, fecskenedzen ismét heparinizált és sterilizált sóoldatot a csőtartóba. Az ellenállás megszűnése után folytassa a vezetődrót eltávolítását. Győződjön meg arról, hogy elegendő mennyiségű heparinizált és sterilizált sóoldatot fecskendezzen be a csőtartóba, mert az megsérülhet a vezetődrót erővel történő eltávolításakor.
- Miután kihúzza a vezetődrótot a tartócsőből, vizsgálja meg, és győződjön meg róla, hogy nem sérült-e meg.

### 3. A behelyezés műveletei

- Over-the-wire rendszer
  - Óvatosan nyomja be a vezetődrót disztális

- Fecskendő segítségével töltsse fel a csőtartót heparinizált és sterilizált sóoldattal, és áztassa be a teljes eszközt. Vigyázzon arra, hogy a heparinizált és sterilizált sóoldat ennél a műveletnél kifolyhat a csőtartóból.
- A vezetődrót behelyezése előtt töltsse fel az intervenció eszköz lumenjét heparinizált és sterilizált sóoldattal.
- Vegye ki a vezetődrótot a tartóbilincsből, és lassan csúsztassa ki a vezetődrótot, majd tolja át a vezetődrót disztális végét a csőtartón (B). (1. ábra)

végét az intervenció eszköz vezetődrót lumenébe.

- Óvatosan vezesse be a vezetődrótot, míg a csűcs az intervenció eszköz csűcsának közelébe nem ér.
- Kösse be a vezetőkatétert, és nyomja be az intervenció eszközrendszer (a vezetődróttal) az Y-csatlakozóba.
- Tolja át az intervenció eszközrendszer a vezetőkatéteren, míg a vezetődrót-rendszer csűcsa meg nem közelíti a vezetőkatéter hegyét.
- Az intervenció eszköz körüli szigetelés létrehozása érdekében szorítsa meg az Y-csatlakozó hemosztázis-szelepet. Győződjön meg róla, hogy a vezetődrót mozgása továbbra is lehetséges-e.
- Ellenőrizze, hogy a vezetődrót simán mozog-e.
- Szükség esetén csatlakoztassa a nyomatékészkezt a vezetődróthoz.
- Fluoroszkópia alatt tolja előre ezt a vezetődrótot, hogy átjusson a lézió. Angiográfia segítségével erősítse meg, hogy a vezetődrót áthaladt-e a beszűkült részen.

- i) Figyelje a vezetődórt mozgását az erekben.
- j) A lézió eléréséig tolja be az intervenció eszközt, miközben megakadályozza a vezetődórt mozgását. Biztosítsa, hogy a vezetődórt disztális csúcsa és annak érbén történő elhelyezkedése az intervenció eszköz használata során is látható legyen.

#### ■ Gyors cserélőrendszer

- a) Kösse be a vezetőkátétert.
- b) Nyomja be a vezetődórt bevezetőjét a vezetőkátéter Y-csatlakozójába.
- c) Óvatosan tolja be a vezetődórt csúcsát a bevezetőbe.
- d) Fluoroszkópia mellett tolja át a vezetődórtot a vezetőkátéteren, míg a vezetődórt csúcsa a vezetőkátéter csúcának közelébe nem kerül.
- e) Szükség esetén csatlakoztassa a nyomatéskészítőt a vezetődórhoz.
- f) Fluoroszkópia alatt tolja előre a vezetődórtot, hogy átjusson a lézión.

- Angiográfia segítségével erősítse meg, hogy a vezetődórt áthaladt-e a beszűkült részen.
- g) Figyelje a vezetődórt mozgását az erekben.
- h) Távolítsa el a vezetődórt nyomatéskészítőt és a vezetődórt bevezetőjét.
- i) Kövesse nyomon az intervenció eszközt a vezetődórt mentén, miközben megakadályozza a vezetődórt mozgását, és addig tolja előre, míg el nem éri a léziót. Biztosítsa, hogy a vezetődórt disztális csúcsa, és annak érbén történő elhelyezkedése az intervenció eszköz használata során is látható legyen.

#### 4. A vezetődórt cseréjének eljárásai

##### ■ Over-the-wire rendszer

- a) Lassan távolítsa el a vezetődórtot annak folyamatos, fluoroszkópiás megfigyelése során.
- b) A „Használat” fejezetben leírtaknak megfelelően helyezze be a következő vezetődórtot.

### A tárolás módja

Ne tartsa a vezetődórtot és csomagolását hajlított vagy erősen terhelt állapotban. Ezt a vezetődórtot és csomagolását víztől távol kell tárolni. Hűvös, sötét és száraz helyen tárolja.

### Lejárat

A lejárat dátumát lásd a vezetődórt csomagolásának címkéjén.

### A csomag tartalma

5 darab / doboz

### Felelősség kizárása

Az „ASAHI INTECC CO., LTD. és partnervállalatai” (a továbbiakban a „Vállalat”) semmilyen esetben sem vonható felelősségre az olyan balesetek, személyi sérülések vagy mellékhatások miatt, melyek a termék(ek) nem megfelelő, illetve a jelen utasításokkal összhangban nem lévő használatából adódnak. A vállalat semmiképpen nem felel azokért a károkért, amelyek vagy (i) a termék(ek)nek a vállalatától való kiszállítása utáni tárolására, vagy (ii) a betegek, sebészeti eljárások vagy más orvosi tevékenység megválasztására vezethetők vissza.

Az „ASAHI Miracle”, a „MIRACLEbros”, a „Grand Slam” és az „EXTENSION” az ASAHI INTECC CO., LTD. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei Japánban és egyéb országokban.

## Serie ASahi Miracle/MIRACLEbros Grand Slam Filo guida per ICP

Istruzioni per l'uso

**Prima di utilizzare il filo guida, leggere attentamente e attenersi a quanto riportato nelle sezioni "Indicazioni per l'uso", "Controindicazioni", "Avvertenze", "Precauzioni" e "Modalità di utilizzo" delle presenti Istruzioni per l'uso. In caso contrario potrebbero verificarsi complicanze, comprese gravi lesioni al paziente, anche mortali.**

Se un utente e/o un paziente vengono a conoscenza di un incidente grave che si è verificato in relazione al filo guida, sono tenuti a segnalarlo al produttore e alle autorità competenti dello Stato membro.

Le presenti istruzioni per l'uso si applicano alla serie ASahi Miracle, MIRACLEbros e Grand Slam. Per ulteriori informazioni (lunghezza del filo guida, lunghezza della sezione radiopaca, ecc.), consultare l'etichetta del prodotto.

### Descrizioni

La struttura di base di questo filo guida è costituita da un filo conico animato e da una spirale. Il filo conico animato e la spirale sono saldati. La spirale è radiopaca su tutta la lunghezza, in modo che possa essere facilmente individuata con una radioscopia.

La superficie distale è rivestita con un rivestimento idrofobico (silicone), mentre la superficie prossimale è rivestita con PTFE (politetrafluoroetilene). Sull'estremità prossimale dei dispositivi diversi da quelli con lunghezza totale di 300 cm, è presente un collegamento per un filo di prolunga, utilizzato per sostituire il dispositivo abbinato, e a tale estremità può essere collegato il filo di prolunga ASahi INTECC.

Per il carico della punta\* di questo prodotto, fare riferimento alla tabella seguente.

Tabella 1. Caratteristiche del prodotto

| Nome del prodotto               | Diametro esterno        | Carico della punta* |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------|
| ASahi Miracle 3/MIRACLEbros 3   | 0,36 mm (0,014 pollici) | 3,0 gf              |
| ASahi Miracle 6/MIRACLEbros 6   | 0,36 mm (0,014 pollici) | 6,0 gf              |
| ASahi Miracle 12/MIRACLEbros 12 | 0,36 mm (0,014 pollici) | 12,0 gf             |
| Grand Slam                      | 0,36 mm (0,014 pollici) | 0,7 gf              |

\*I valori di carico della punta rappresentano le medie dei valori delle specifiche tecniche del prodotto misurate secondo il metodo di prova standard interno, ipotizzando la pressione applicata alla lesione dalla punta del filo guida.

### Indicazioni per l'uso

Il filo guida è progettato per interventi coronarici percutanei (ICP). Questo filo guida è progettato per facilitare il posizionamento dei cateteri per dilatazione a palloncino, o altri dispositivi interventistici a scopo terapeutico, nel sistema cardiovascolare.

**Il filo guida non è destinato all'uso nel sistema neurovascolare e nei vasi periferici.**

### Popolazione target trattata

Le serie ASahi Miracle, MIRACLEbros e Grand Slam sono pensate per essere utilizzate su pazienti che soddisfano le indicazioni previste per le procedure ICP. Non devono essere utilizzate su neonati, lattanti o bambini, né su pazienti in stato di gravidanza, affetti da disfunzione renale o allergici al mezzo di contrasto.

### Controindicazioni

- Prima dell'uso effettivo, verificare la compatibilità del diametro del filo guida con gli altri dispositivi interventistici.
- Non utilizzare il filo guida nei pazienti allergici ai mezzi di contrasto o affetti da disfunzione renale.
- Non utilizzare il filo guida nelle pazienti in stato di gravidanza, anche presunto, (i raggi X possono nuocere al feto).
- Il filo guida deve essere utilizzato in strutture sanitarie in grado di eseguire prontamente un intervento chirurgico d'urgenza. Nel caso in cui
- sia impossibile eseguire un intervento chirurgico d'urgenza, nel peggiore dei casi possono verificarsi eventi con rischio per la vita del paziente.
- Il filo guida è presterilizzato con ossido di etilene (EOG) ed è inteso esclusivamente monouso. Non riutilizzare né risterilizzare. Se riutilizzato o risterilizzato, le prestazioni o la qualità del filo guida e della confezione possono risultare compromesse, con rischio di complicanze, comprese infezioni.

### Avvertenze

- Il filo guida deve essere utilizzato esclusivamente da un medico qualificato per i trattamenti ICP.
- Non utilizzare il filo guida in abbinamento a cateteri con parti metalliche che possano entrare direttamente a contatto con la superficie del filo guida (p.es. cateteri per aterectomia, dilatatori metallici), aghi metallici o inserter con guaina metallica.
- Durante l'uso del filo guida, controllare e monitorare il movimento della punta sotto guida
- fluoroscopica. Non utilizzare in aree vascolari non visualizzate o impossibili da visualizzare.
- Non collegare il filo guida a fili di prolunga scollegabili prodotti da aziende diverse da ASahi INTECC. Non maneggiare il filo guida con il filo di prolunga scollegabile collegato. In caso contrario, il filo guida può subire danni o la prolunga rimovibile può staccarsi accidentalmente.
- Non modificare il filo guida per nessun motivo.

### Precauzioni

- Non utilizzare il filo guida oltre la data di scadenza riportata sull'etichetta. Eliminare il filo guida se la data di scadenza è stata superata.
- I fili guida sono strumenti delicati che vanno maneggiati con cura.
- Non utilizzare il filo guida se la confezione è aperta o danneggiata. Non aprire la confezione fino al momento immediatamente precedente all'uso. Maneggiare e utilizzare il filo guida in condizioni asettiche.
- Non pulire il filo guida con soluzioni organiche come alcol.
- Dopo l'utilizzo adottare misure preventive contro le infezioni. Smaltire il filo guida e la relativa confezione come rifiuti medicali.
- In caso di resistenza, non spingere, ruotare, ritrarre o torcere il filo guida. Torcere o spingere il filo guida a fronte di resistenza può danneggiarlo e/o causarne il distacco della punta ovvero danneggiare direttamente un vaso. In caso contrario, il filo guida può subire danni. Determinare le cause della resistenza tramite fluoroscopia e intraprendere le necessarie azioni correttive.
- Far avanzare o ritirare il filo guida sempre lentamente e con cautela.
- Durante la torsione del filo guida all'interno di un vaso sanguigno, non procedere sempre nella stessa direzione, bensì ruotarlo alternativamente in senso orario e antiorario. Non eseguire più di due rotazioni (720°) nello stesso senso.
- Durante la rimozione o il reinserimento del filo guida, irrigarlo con soluzione salina eparinata e sterilizzata o con altra soluzione idonea per evitare l'ingresso di aria nel dispositivo interventistico. Eseguire con cautela la

sostituzione del filo guida per evitare l'ingresso di aria e/o traumi. Quando si introduce nuovamente il filo guida, verificare che la punta del dispositivo interventistico sia libera all'interno del lume del vaso e non urti contro la parete del vaso stesso. In caso contrario, si possono provocare traumi. Utilizzare il marcatore radiopaco del dispositivo interventistico per verificare la posizione.

- Il movimento libero del filo guida all'interno del dispositivo interventistico è una caratteristica importante dei sistemi a filo guida orientabile perché fornisce all'operatore utili informazioni tattili. Prima dell'uso verificare la presenza di resistenze nel sistema. Se si nota che la valvola emostatica si oppone al movimento del filo guida, regolarla o sostituirla con una valvola regolabile.
- Non eseguire il posizionamento di stent utilizzando più di un filo guida o facendo passare il filo attraverso le maglie dello stent. In caso contrario, lo stent può danneggiarsi o il filo guida può rompersi o spezzarsi.
- Prima dell'uso, verificare che il filo guida abbia le dimensioni e la forma corrette per la procedura specifica e sia compatibile con il dispositivo da abbinare.

- Consultare le Istruzioni per l'uso allegate al dispositivo medico (ad es. cateteri per dilatazione a palloncino o altri dispositivi terapeutici interventistici) da abbinare al filo guida.
- Quando si collega il filo di prolunga scollegabile al filo guida, questo deve essere inserito saldamente tra il segmento rivestito in PTFE e il segmento non rivestito in PTFE sull'estremità prossimale del filo guida. In caso di anomalia durante l'inserimento, interrompere immediatamente l'uso del filo guida.
- Controllare attentamente l'eventuale presenza di piegature, torsioni o altri danni del filo guida prima dell'uso e, se possibile, durante la procedura. Non utilizzare il filo guida se è danneggiato.
- Durante la sagomatura della punta, prestare attenzione a non danneggiare la spirale.
- Prima di inserire il filo guida, individuare l'estremità distale e verificare che venga inserito con questa estremità.
- Durante la procedura, mantenere un'irrigazione continua tra il catetere guida e il dispositivo interventistico, e tra il dispositivo interventistico e il filo guida. L'irrigazione impedisce la presenza di mezzo di contrasto e/o la formazione di coaguli sul filo guida e nel lume del catetere.

## Malfunzionamenti ed eventi avversi

I possibili malfunzionamenti ed eventi avversi durante l'uso del filo guida includono, ma non sono limitati a, quanto segue:

### 1. Malfunzionamenti

|                                        |                                    |                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Mancato attraversamento di una lesione | Rottura o piegatura del filo guida | Danni quali distacco                   |
| Difficoltà di rimozione                | Distacco del rivestimento          | Frammenti di un filo guida danneggiato |

### 2. Eventi avversi

|                                     |                         |                      |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Decesso                             | Infezioni               | Dissezione vascolare |
| Perforazione vascolare              | Complicanze emorragiche | Embolia              |
| Trombo                              | Infarto                 | Ischemia             |
| Aritmia                             | Vasospasmo              | Occlusione vascolare |
| Riduzione della pressione arteriosa | Reazione allergica      |                      |

## Modalità di utilizzo

### 1. Ispezione prima dell'uso

- Prima dell'uso, eseguire un'ispezione accurata e verificare che il filo guida e la relativa confezione non siano danneggiati.
- Prima dell'uso, verificare che il filo guida sia compatibile con il dispositivo interventistico da utilizzare.

### 2. Preparazione

- Selezionare il filo guida più adatto per l'area interessata e rimuovere dalla confezione sterile il tubo contenitore con il filo guida.
- Riempire il tubo contenitore con soluzione

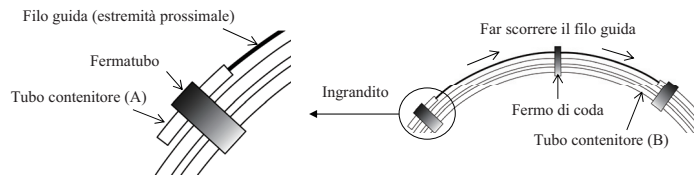


Figura 1

- Quando l'estremità distale del filo guida sporge di oltre 5-6 cm dall'altra estremità del tubo contenitore, sagomare la punta, se necessario, secondo le pratiche standard.
- Afferrare delicatamente il filo guida fuoriuscito dall'estremità distale del tubo contenitore, il più vicino possibile a quest'ultimo, ed estrarlo lentamente e con cautela.
- In caso di resistenza durante la rimozione del filo guida dal tubo contenitore, iniettare altra soluzione salina eparinata e sterilizzata nel tubo contenitore. Continuare a rimuovere il filo guida quando non si avverte più resistenza. Assicurarsi di iniettare nel tubo contenitore sufficiente soluzione salina eparinata e sterilizzata perché potrebbe subire danni se si rimuove con forza il filo guida rivestito.
- Dopo avere estratto il filo guida dal tubo contenitore, ispezionarlo per verificare che non sia danneggiato.

### 3. Procedure per l'inserimento

- Sistema Over-the-wire
  - Inserire con attenzione l'estremità distale

- salina eparinata e sterilizzata utilizzando una siringa, in modo da immergere l'intero dispositivo. Durante l'operazione, la soluzione salina eparinata e sterilizzata può fuoriuscire dal tubo contenitore.
- Prima di inserire il filo guida, riempire il lume del dispositivo interventistico con la soluzione salina eparinata e sterilizzata.
  - Rilasciare il filo guida dal fermo di coda e farlo scorrere lentamente, spingendone l'estremità distale attraverso il tubo contenitore (B). (Figura 1)

- del filo guida nel lume del filo guida del dispositivo interventistico.
- Far avanzare con cautela il filo guida finché la punta non si trovi in posizione appena prossimale rispetto alla punta del dispositivo interventistico.
  - Innestare il catetere guida e inserire il sistema del dispositivo interventistico (con il filo guida) nel connettore a Y.
  - Far avanzare il sistema del dispositivo interventistico attraverso il catetere guida finché la punta del sistema del filo guida non si trovi in posizione appena prossimale rispetto alla punta del catetere guida.
  - Serrare la valvola emostatica del connettore a Y per creare una chiusura ermetica attorno al dispositivo interventistico. Verificare che il movimento del filo guida sia ancora possibile.
  - Verificare che il filo guida si muova agevolmente.
  - Se necessario, applicare sul filo guida il dispositivo di controllo della torsione.
  - Far avanzare il filo guida sotto guida fluoroscopica attraverso la lesione.

Verificare mediante angiografia che il filo guida abbia superato la lesione target sede del restringimento.

- i) Osservare il movimento del filo guida nei vasi.
- j) Far avanzare il dispositivo interventistico fino a raggiungere la lesione, evitando che il filo guida si sposti. Verificare che la punta distale del filo guida e la sua posizione nel vaso siano visibili durante la manipolazione del dispositivo interventistico.

■ Sistema di sostituzione rapida

- a) Innestare il catetere guida.
- b) Inserire l'introduttore del filo guida nel connettore a Y del catetere guida.
- c) Inserire con cautela la punta del filo guida nell'introduttore.
- d) Far avanzare il filo guida attraverso il catetere sotto guida fluoroscopica finché la punta del filo guida non si trova in posizione appena prossimale rispetto alla punta del catetere guida.
- e) Se necessario, applicare sul filo guida il dispositivo di controllo della torsione.
- f) Far avanzare il filo guida sotto guida

fluoroscopica attraverso la lesione.

Verificare mediante angiografia che il filo guida abbia superato la lesione target sede del restringimento.

- g) Osservare il movimento del filo guida nei vasi.
- h) Rimuovere il dispositivo di controllo della torsione del filo guida e l'introduttore del filo guida.
- i) Guidare il dispositivo interventistico sul filo guida evitandone lo spostamento e avanzare fino a raggiungere la lesione. Verificare che la punta distale del filo guida e la sua posizione nel vaso siano visibili durante la manipolazione del dispositivo interventistico.

4. Procedure per la sostituzione del filo guida

■ Sistema Over-the-wire

- a) Rimuovere lentamente il filo guida, controllandone il movimento sotto guida fluoroscopica.
- b) Inserire il nuovo filo guida secondo le indicazioni contenute nella presente sezione "Modalità di utilizzo".

## Metodo di conservazione

Non conservare il filo guida e la relativa confezione ripiegati e/o sottoposti a carichi pesanti. Il filo guida e la relativa confezione devono essere conservati lontano dall'acqua. Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.

## Data di scadenza

La data di scadenza è indicata sull'etichetta applicata sulla confezione del filo guida.

## Contenuto

5 pezzi / scatola

## Esclusione di responsabilità

**In nessun modo "ASAHI INTECC CO., LTD. e le sue affiliate" (in seguito denominate "Azienda") possono essere ritenute responsabili per incidenti, lesioni personali ed eventi avversi dovuti a qualsiasi utilizzo improprio di questo/i prodotto/i non conforme alle presenti istruzioni. In nessun caso l'Azienda può essere ritenuta responsabile dei danni derivanti (i) dalla conservazione dei prodotti dopo la spedizione dall'Azienda stessa o (ii) causati dalla selezione di pazienti, tecniche chirurgiche o altre attività mediche effettuate dalla struttura medica che utilizza i prodotti.**

"ASAHI Miracle", "MIRACLEbros", "Grand Slam" ed "EXTENSION" sono marchi commerciali o marchi registrati di ASAH I INTECC CO.,LTD. in Giappone e in altri Paesi.

## Seria ASAHI Miracle / MIRACLEbros

### Grand Slam

### Prowadnik PCI

#### Instrukcja użytkowania

Przed użyciem prowadnika należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Należy przestrzegać instrukcji zawartych w punktach „Wskazania do stosowania”, „Przeciwwskazania”, „Przestrogi”, „Środki ostrożności” oraz „Sposób korzystania z produktu”, będących częścią niniejszej instrukcji użytkowania. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować powikłaniami, które mogą prowadzić do poważnych urazów u pacjenta bądź do jego śmierci.

Jeżeli użytkownik i/lub pacjent dowie się o poważnym zdarzeniu związanym z prowadnikiem, powinien zgłosić ten fakt producentowi i właściwemu organowi w państwie członkowskim.

Niniejsza Instrukcja użytkowania odnosi się do serii ASAHI Miracle, MIRACLEbros i Grand Slam. Informacje szczegółowe (długość prowadnika, długość odcinka nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich, itd.) podano na etykiecie produktu.

### Opis

Podstawowa struktura tego prowadnika składa się ze stożkowego przewodu głównego i spirali. Stożkowy przewód główny i spirala są lutowane. Długość spirali nie przepuszcza promieni rentgenowskich, dzięki czemu jej położenie można łatwo sprawdzić za pomocą radioskopii.

Powierzchnia dystalna jest pokryta powłoką hydrofobową (silikonową), a powierzchnia proksymalna jest pokryta PTFE (politetrafluoretylenem). Na proksymalnym końcu wyrobów o długości całkowitej innej niż 300 cm znajduje się przyłącze przewodu przedłużającego, który służy do wymiany wyrobu używanego w połączeniu oraz można do niego podłączyć przewód przedłużający ASAHI INTECC.

Należy zapoznać się z poniższą tabelą dotyczącą obciążenia końcówki\* tego produktu.

Tabela 1. Specyfikacja produktu

| Nazwa produktu                   | Średnica zewnętrzna  | Obciążenie końcówki* |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| ASAHI Miracle 3/ MIRACLEbros 3   | 0,36 mm (0,014 cala) | 3,0 gf               |
| ASAHI Miracle 6/ MIRACLEbros 6   | 0,36 mm (0,014 cala) | 6,0 gf               |
| ASAHI Miracle 12/ MIRACLEbros 12 | 0,36 mm (0,014 cala) | 12,0 gf              |
| Grand Slam                       | 0,36 mm (0,014 cala) | 0,7 gf               |

\*Wartości obciążenia końcówki reprezentują średnie wartości specyfikacji produktu zmierzone zgodnie z wewnętrzną standardową metodą testowania przy założeniu siły przyłożonej do zmiany przez końcówkę prowadnika.

### Wskazania do stosowania

Ten prowadnik jest przeznaczony do ogólnej przeszskórnej interwencji wieńcowej (PCI). Ten prowadnik jest przeznaczony do uławiania umieszczania balonowych cewników dylatacyjnych lub innych interwencyjnych wyrobów terapeutycznych w obrębie układu sercowo-naczyniowego.

**Ten prowadnik nie jest przeznaczony do stosowania w strukturach nerwowo-naczyniowych i naczyniach obwodowych.**

### Docelowa populacja poddawana leczeniu

ASAHI Miracle, seria MIRACLEbros i Grand Slam są przeznaczone dla pacjentów spełniających wskazania do zabiegów PCI. Nie jest wskazany do stosowania u noworodków, niemowląt lub dzieci, a także u pacjentek w ciąży, z zaburzeniami czynności nerek lub reakcjami alergicznymi na środki kontrastowe.

### Przeciwwskazania

- Przed użyciem należy sprawdzić kompatybilność średnicy prowadnika z innym urządzeniem interwencyjnym.
  - Nie należy stosować prowadnika u pacjentów, u których występuje reakcja alergiczna na środki kontrastowe lub z zaburzeniami czynności nerek.
  - Nie stosować prowadnika u pacjentek w ciąży lub pacjentek, które mogą być w ciąży (promieniowanie rentgenowskie może szkodliwie oddziaływać na płód).
  - Prowadnik musi być używany w instytucji, w której można przeprowadzać zabiegi chirurgiczne w trybie pilnym. Jeśli
- przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego w trybie pilnym będzie niemożliwe, w najgorszym przypadku może dojść do zdarzeń zagrażających życiu.
- Prowadnik jest wstępnie sterylizowany tlenkiem etylenu (EOG) i jest przeznaczony do jednorazowego użytku. Nie używać ponownie ani nie sterylizować ponownie. Ponowne użycie lub ponowna sterylizacja mogą negatywnie wpłynąć na działanie lub jakość prowadnika i opakowanie, a także sprzyjają ryzyku wystąpienia powikłań, z zakażeniem włącznie.

### Przestrogi

- Prowadnik może być używany wyłącznie przez lekarza, który został w pełni przeszkolony w zakresie PCI.
  - Nigdy nie należy używać tego prowadnika w połączeniu z cewnikami posiadającymi metalowe części, które mogą bezpośrednio stykać się z powierzchnią tego prowadnika (np. cewniki do ateryktomii, metalowe rozszerzacze), metalowymi igłami lub wkładkami w osłonie metalowej.
  - Podczas stosowania prowadnika należy sprawdzać i monitorować ruch jego końcówki
- pod kontrolą fluoroskopii. Nie używać w obszarach naczyń, które nie są lub nie mogą zostać uwidocznione.
- Nie należy łączyć tego prowadnika z przedłużaczami wyprodukowanymi przez firmy inne niż ASAHI INTECC. Nie ruszać prowadnikiem, gdy podłączony jest przedłużacz. W przeciwnym razie prowadnik może zostać uszkodzony lub przedłużacz może zostać nieumyślnie odłączony.
  - W żaden sposób nie modyfikować prowadnika.

### Środki ostrożności

- Nie używać tego prowadnika po upływie daty ważności wskazanej na etykiecie. Wszystkie prowadniki, których data ważności upłynęła, należy wyrzucić.
- Prowadniki to delikatne instrumenty i należy obchodzić się z nimi ostrożnie.
- Jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone, nie należy używać prowadnika. Produkt należy rozpakować zawsze bezpośrednio przed użyciem. Podczas przenoszenia i użycia prowadnika należy zachować zasady aseptyki.

- Nie należy wycierać tego przewodnika używając roztworu organicznego, np. alkoholu.
- Po użyciu narzędzia należy podjąć środki zapobiegające zakażeniu. Zutilizować przewodnik i opakowanie jako odpad medyczny.
- Nigdy nie należy pchać, wkręcać, wyciągać ani obracać przewodnika, który napotyka na opór. Obracanie lub pchanie przewodnika wbrew napotkanemu oporowi może spowodować uszkodzenie i/lub oddzielenie końcówki przewodnika lub uszkodzić bezpośrednio naczynie. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia tego przewodnika. Należy określić fluoroskopowo przyczynę oporu i podjąć wszelkie niezbędne środki zaradcze.
- Przewodnik należy zawsze wsuwać i wyjmować powoli i ostrożnie.
- Obracając ten przewodnik w naczyniu krwionośnym, nie należy obracać go ciągle w tym samym kierunku. Obracając przewodnik, należy to czynić naprzemiennie zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Nie należy obracać o więcej niż dwa obroty (720°) w tym samym kierunku.
- Podczas wyciągania i ponownego wprowadzania przewodnika należy przepłukać go heparynizowanym i jałowym roztworem soli fizjologicznej lub innym odpowiednim roztworem, aby zapobiec przedostaniu się powietrza do urządzenia zabiegowego. Przewodnik należy wymieniać ostrożnie, aby nie dopuścić powietrza i/lub nie spowodować urazu. Wprowadzając przewodnik ponownie, należy upewnić się, czy końcówka urządzenia zabiegowego jest swobodna w świetle naczynia i czy nie jest nastawiona na ścianę naczynia. W przeciwnym razie może dojść do urazu. Aby potwierdzić położenie, należy zastosować nieprzepuszczający promieni rentgenowskich znacznik urządzenia zabiegowego.
- Swobodny ruch przewodnika w urządzeniu zabiegowym jest ważną cechą sterownego systemu przewodnika, ponieważ daje użytkownikowi cenne, realne informacje. Przed użyciem należy sprawdzić system pod kątem występowania oporu. Wyregulować lub

- wymienić zastawkę hemostatyczną na zastawkę regulowaną jeśli hamuje ruch przewodnika.
- Nie umieszczać stentu przy użyciu więcej niż jednego przewodnika lub operując przewodnikiem za pośrednictwem rozpórki stentu. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia stentu bądź pęknięcia lub rozpadnięcia się przewodnika.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy ten przewodnik ma odpowiedni rozmiar i kształt do zabiegu oraz czy jest kompatybilny z urządzeniem, które będzie używane w połączeniu z nim.
- Należy zapoznać się z Instrukcją użytkowania dołączoną do wyrobu medycznego (np. balonowych cewników dylatacyjnych lub innych terapeutycznych wyrobów interwencyjnych), który ma być używany w połączeniu z tym przewodnikiem.
- Podłączając przedłużacz do tego przewodnika należy go bezpiecznie włożyć do linii granicznej pomiędzy powłoką niewykonaną z PTFE a powłoką z PTFE na proksymalnym końcu przewodnika. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w połączeniu, należy natychmiast zaprzestać używania przewodnika.
- Dokładnie sprawdzić przewodnik, czy nie uległ zgięciu, zagięciu lub innym uszkodzeniom przed użyciem, a także dokładnie go sprawdzać, jeśli to możliwe, podczas wykonywania zabiegu. Nie używać uszkodzonego przewodnika.
- Podczas formowania końcówki należy uważać, aby nie uszkodzić spirali.
- Przed wprowadzeniem przewodnika należy sprawdzić, który koniec jest końcem dystalnym i upewnić się, że jest on wprowadzany od strony dystalnej.
- Podczas zabiegu należy utrzymywać ciągle płukanie solą fizjologiczną pomiędzy cewnikiem prowadzącym a urządzeniem interwencyjnym oraz pomiędzy urządzeniem interwencyjnym a przewodnikiem. Płukanie zapobiega gromadzeniu się środka kontrastowego i/lub tworzeniu się skrzepów na przewodniku i w świetle cewnika.

## 1. Nieprawidłowe działanie

|                                 |                                   |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Niemожność przejścia za zmianę  | Złamanie lub wygięcie przewodnika | Uszkodzenia takie jak oddzielenie |
| Trudności w wyjęciu             | Odchodzenie powłoki               | Odłamki uszkodzonego przewodnika  |
| <b>2. Zdarzenia niepożądane</b> |                                   |                                   |
| Śmierć                          | Zakażenie                         | Rozwarstwienie ściany naczynia    |
| Perforacja naczynia             | Powikłania związane z krwawieniem | Zator                             |
| Powstanie zakrzepu              | Zawał                             | Ischemia                          |
| Arytmia                         | Skurcz naczyń                     | Okluzja naczyniowa                |
| Obniżenie ciśnienia krwi        | Reakcja alergiczna                |                                   |

## Sposób korzystania z produktu

### 1. Sprawdzenie przed użyciem


- Przed użyciem dokładnie sprawdzić i potwierdzić, czy przewodnik i opakowanie nie są uszkodzone.
- Przed użyciem potwierdzić, że przewodnik jest kompatybilny z mającymi zostać użytymi urządzeniami interwencyjnymi.

### 2. Przygotowanie

- Wybrać najbardziej odpowiedni przewodnik dla zmienionego chorobowo miejsca i wyciągnąć rękę uchwytu zawierającą przewodnik ze sterylnego opakowania.

- Napełnić rękę uchwytu heparynizowanym i jałowym roztworem soli fizjologicznej przy użyciu strzykawki, aby nawilżyć całe urządzenie. Należy pamiętać, że heparynizowany i jałowy roztwór soli fizjologicznej może wtedy wylać się z ręki uchwytu.
- Przed włożeniem przewodnika napełnij światło urządzenia zabiegowego heparynizowanym i jałowym roztworem soli fizjologicznej.
- Zwolnić przewodnik z tylnego klipsa i wolno go przesunąć, pchnąć dystalną końcówkę przewodnika przez rękę uchwytu (B) (rys. 1).

Przewodnik (proksymalna końcówka)

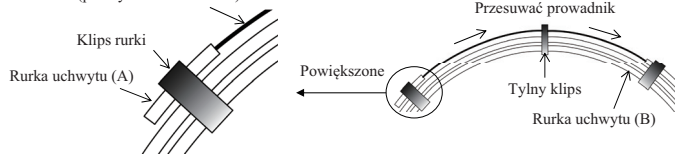

Rysunek 1

- Gdy końcówka dystalna przewodnika jest przedłużona o 5–6 cm poza drugi koniec ręki uchwytu, jeśli jest to konieczne, należy uformować końcówkę w sposób standardowy.
- Delikatnie chwycić przewodnik wystający z dystalnego końca ręki uchwytu, możliwe

- najbliżej ręki uchwytu oraz powoli i ostrożnie wyciągnąć przewodnik.
- Jeśli odczuwalny jest opór podczas wyjmowania przewodnika z ręki uchwytu, należy ponownie wstrzyknąć heparynizowany i jałowy roztwór soli fizjologicznej do ręki

## Usterki, uszkodzenia i zdarzenia niepożądane

Ewentualnie usterki, uszkodzenia i zdarzenia niepożądane związane z użyciem przewodnika obejmują m.in.:

uchwyty. Kiedy opór przestanie być wyczuwalny, należy kontynuować wyciąganie przewodnika. Należy upewnić się, że wstrzyknięto odpowiednią ilość heparynizowanego i jałowego roztworu soli fizjologicznej do rurki uchwyty, ponieważ podczas wyjmowania przewodnika z użyciem dużej siły może dojść do jej uszkodzenia.

- h) Wyciągnąć przewodnik z rurki uchwyty, sprawdzić, czy nie jest uszkodzony.

### 3. Procedury wkładania

#### ■ System over-the-wire

- Włożyć dystalną końcówkę przewodnika ostrożnie w światło przewodnika urządzenia interwencyjnego.
- Wprowadzić ten przewodnik ostrożnie do momentu, gdy jego końcówka jest w pozycji proksymalnej do końcówki urządzenia interwencyjnego.
- Zaczepić cewnik prowadzący i włożyć urządzenie interwencyjne (z przewodnikiem) do złącza Y.
- Wprowadzać urządzenie interwencyjne przez cewnik prowadzący do momentu, gdy końcówka przewodnika będzie w pozycji proksymalnej w stosunku do końcówki cewnika prowadzącego.
- Zacisnąć zastawkę hemostatyczną złącza Y, aby utworzyć uszczelnienie dookoła urządzenia interwencyjnego. Upewnić się, czy ruch przewodnika jest ciągle dozwolony.
- Sprawdzić, czy przewodnik porusza się gładko.
- Dołączyć urządzenie obrotowe do przewodnika, jeśli to konieczne.
- Wprowadzić przewodnik pod obserwacją fluoroskopową, aby przejść przez zmianę. Potwierdzić za pomocą angiografii, że przewodnik przeszedł przez docelową zwężoną zmianę.
- Obserwować ruch przewodnika w naczyniach.
- Wprowadzić urządzenie interwencyjne do

momentu osiągnięcia zmiany zapobiegając ruchowi przewodnika. Zapewnić, by dystalna końcówka przewodnika i jego umiejscowienie były widoczne podczas poruszania urządzeniem interwencyjnym.

#### ■ System szybkiej wymiany

- Zaczepić cewnik prowadzący.
- Wprowadzić introduktor przewodnika do złącza Y cewnika prowadzącego.
- Ostrożnie włożyć końcówkę przewodnika do introduktora.
- Wprowadzić przewodnik przez cewnik wprowadzający pod kontrolą fluoroskopową do momentu, gdy końcówka przewodnika znajdzie się w pozycji proksymalnej do końcówki cewnika wprowadzającego.
- Dołączyć urządzenie obrotowe do przewodnika, jeśli to konieczne.
- Wprowadzić przewodnik pod kontrolą fluoroskopową, aby przejść za zmianę. Potwierdzić za pomocą angiografii, że przewodnik przeszedł przez docelową zwężoną zmianę.
- Obserwować ruch przewodnika w naczyniach.
- Usunąć urządzenie obrotowe przewodnika oraz introduktor przewodnika.
- Śledzić urządzenie interwencyjne za przewodnikiem, zapobiegając ruszaniu się przewodnika, wprowadzać do momentu dotarcia do zmiany. Zadbaj o to, by dystalna końcówka przewodnika i jej miejsce w naczyniu były widoczne w trakcie wykonywania ruchów urządzeniem interwencyjnym.

### 4. Procedury wymiany przewodnika

#### ■ System over-the-wire

- Usunąć wolno przewodnik, monitorując ruch przewodnika fluoroskopowo.
- Włożyć następny przewodnik zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie „Sposób korzystania z produktu”.

## Data ważności

Data ważności jest podana na etykiecie umieszczonej na opakowaniu przewodnika.

## Zawartość

5 sztuk / pudełko

## Wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej

Firma „ASAHI INTECC CO., LTD. i jej podmioty zależne” (odtąd nazywane „Firmą”) w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki, obrażenia osób, zdarzenia niepożądane spowodowane nieprawidłowym stosowaniem produktu lub produktów albo jakimkolwiek innym działaniem niezgodnym z niniejszą instrukcją. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe (i) wskutek nieprawidłowego przechowywania produktu(-ów) po wysyłce z Firmy lub (ii) wskutek niewłaściwego wyboru pacjentów, technik chirurgicznych lub jakichkolwiek innych działań lekarskich powziętych przez instytucję medyczną korzystającą z produktu(-ów).

„ASAHI Miracle”, „MIRACLEBros”, „Grand Slam” oraz „EXTENSION” są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ASAHI INTECC CO., LTD. w Japonii i innych krajach.

## Przechowywanie

Nie przechowywać przewodnika i opakowania w pozycji zgiętej i/lub silnie obciążonej. Przewodnik i opakowanie należy przechowywać z dala od wody. Przechowywać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu.

Série ASAHI Miracle / MIRACLEbros

Grand Slam

Fio guia PCI

Instruções de utilização

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar este fio guia e observe o estipulado nas seções Indicações de utilização, Contraindicações, Advertências, Precauções e Procedimento recomendado nestas Instruções de Utilização. A não observação pode resultar em complicações, incluindo lesão grave ou morte do paciente.

Se um utilizador e/ou um doente tomar conhecimento de que um incidente sério ocorreu relativamente ao fio guia, comunique a situação ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro.

Estas Instruções de Utilização aplicam-se à série ASAHI Miracle, MIRACLEbros e Grand Slam. Para informações (comprimento do fio guia, comprimento da secção radiopaca, etc.), consulte a etiqueta do produto.

Descrições

A estrutura básica deste fio guia consiste num cabo principal cónico e numa bobina. O cabo principal cónico e a bobina são soldados. O comprimento da bobina é radiopaco para que a sua posição possa ser facilmente confirmada através de radioscopia. A superfície distal tem um revestimento hidrófobo (silicone) e a superfície proximal é revestida com PTFE (politetrafluoroetileno). Na extremidade proximal dos dispositivos sem um comprimento total de 300 cm existe uma conexão para um fio de extensão, que é utilizado para substituir o dispositivo combinado; o fio de extensão ASAHI INTECC pode ser conectado.

Consulte na tabela abaixo a carga da ponta\* deste produto.

Tabela 1. Especificações do Produto

| Nome do Produto                   | Diâmetro Externo          | Carga da Ponta* |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| ASAHI Miracle 3 / MIRACLEbros 3   | 0,36 mm (0,014 polegadas) | 3,0 gf          |
| ASAHI Miracle 6 / MIRACLEbros 6   | 0,36 mm (0,014 polegadas) | 6,0 gf          |
| ASAHI Miracle 12 / MIRACLEbros 12 | 0,36 mm (0,014 polegadas) | 12,0 gf         |
| Grand Slam                        | 0,36 mm (0,014 polegadas) | 0,7 gf          |

\*Os valores da carga da ponta representam os valores médios dos valores de especificação do produto medidos de acordo com o método de teste padrão interno, assumindo a força aplicada à lesão pela ponta do fio guia.

Indicações de utilização

Este fio guia tem como finalidade a intervenção coronária percutânea (ICP) geral. Este fio guia destina-se a facilitar a colocação de cateteres de dilatação por balão ou outros dispositivos terapêuticos intervencionistas na cardiовасculatura.

Este fio guia não se destina a utilização na neurovasculatura ou na vascularização periférica.

População-alvo tratada

A série ASAHI Miracle, MIRACLEbros e Grand Slam destina-se a doentes elegíveis de acordo com as indicações para os procedimentos de ICP. Não é indicada para a utilização em recém-nascidos, lactentes ou crianças, bem como em doentes que estejam grávidas, tenham a função renal comprometida ou tenham uma reação alérgica aos meios de contraste.

Contraindicações

- Confirmar a compatibilidade do diâmetro do fio guia com outro dispositivo de intervenção antes da utilização efetiva.
- Não utilize o fio guia em doentes que tenham uma reação alérgica aos meios de contraste ou a função renal comprometida.
- Não use o fio guia em doentes grávidas ou que possam estar grávidas (o raio X pode afetar o feto).
- Este fio guia deve ser utilizado numa instituição onde seja possível efetuar imediatamente uma cirurgia de emergência. Se não estiver disponível uma cirurgia de emergência, no pior dos cenários, podem ocorrer eventos potencialmente fatais.
- Este fio guia foi pré-esterilizado com gás de óxido de etileno (GOE) e destina-se apenas a uma utilização única. Não reutilize ou reesterilize. Se reutilizado ou reesterilizado, o desempenho ou a qualidade deste fio guia e respetiva embalagem podem ficar comprometidos, havendo o risco de ocorrência de complicações, incluindo infeção.

Advertências

- Este fio guia deve ser utilizado exclusivamente por um médico com a devida formação no tratamento por ICP.
- Nunca utilize este fio guia em combinação com cateteres com peças de metal que possam entrar em contacto direto com a superfície deste fio guia (por exemplo, cateteres de aterectomia, dilatadores de metal), agulhas de metal ou introdutores de bainha metálica.
- Durante a utilização do fio guia, verificar e controlar o movimento da sua ponta sob fluoroscopia. Não utilize em áreas dos vasos que não sejam ou não possam ser visualizadas.
- Não ligue este fio guia a fios de extensão destacáveis disponibilizados por outros fabricantes além da ASAHI INTECC. Não manipule este fio guia enquanto o fio de extensão destacável estiver ligado. De contrário, o arame guia poderá ser danificado ou o fio de extensão destacável poderá ser separado não intencionalmente.
- Não modifique este fio guia sob nenhum pretexto.

Precauções

- Não utilize o fio guia após o prazo de validade indicado na etiqueta. Elimine qualquer fio guia que ultrapasse o prazo de validade.
- Os fios-guia são instrumentos delicados e devem ser manuseados com cuidado.
- Não utilize o fio guia se a embalagem estiver aberta ou danificada. Abra a embalagem diretamente antes da utilização do produto. Utilize uma técnica asséptica no manuseamento e utilização do fio guia.
- Não limpe este fio guia utilizando uma solução orgânica como álcool.
- Tome medidas preventivas contra infeções após a utilização. Descarte este fio guia e a embalagem como resíduos médicos.
- Nunca empurre, force, retire ou rode este fio guia a ponto de sentir resistência. Rodar ou empurrar este fio guia quando sentir resistência pode provocar danos e/ou a separação da ponta deste fio guia ou lesões diretas num vaso. Não seguir estas indicações poderá causar danos a este fio guia. Determine a causa da resistência sob fluoroscopia e adote quaisquer medidas necessárias.
- Introduza sempre ou retire os fios-guia devagar e com cuidado.
- Ao rodar este fio guia dentro do vaso sanguíneo, não rode continuamente na mesma direção. Ao rodar o fio guia, faça-o alternadamente no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido inverso.

Não exceda as duas rotações (720°) na mesma direção.

- Irrigue o fio guia com solução salina heparinizada e esterilizada ou outra solução adequada enquanto o remove e reinsere para evitar a entrada de ar no dispositivo de intervenção. Efetue a troca deste fio guia com cuidado para evitar a entrada de ar e/ou traumatismos. Ao reintroduzir o fio guia, confirme se a ponta do dispositivo de intervenção está desobstruída no lúmen do vaso e não está a incidir contra a parede do vaso. A não observação desta regra pode resultar em trauma. Utilize o marcador radiopaco do dispositivo de intervenção para confirmar a posição.
- A liberdade de movimentos do fio guia dentro do dispositivo de intervenção é uma característica importante de um sistema de fio guia orientável porque fornece ao utilizador informações tácteis úteis. Teste o sistema para verificar se apresenta resistência antes da utilização. Regule ou substitua a válvula hemostática por uma válvula regulável caso se considere que esta inibe os movimentos do fio guia.
- Não efetue a administração do stent utilizando mais de um fio guia ou operação com fio através de um suporte do stent. De contrário, o stent poderá danificar-se ou o fio guia poderá partir-se ou partir-se.
- Antes de utilizar, confirme que este fio guia tem o tamanho e formato apropriados para o

procedimento e se é compatível com o dispositivo a ser utilizado em combinação.

- Consulte as Instruções de Utilização anexadas ao dispositivo médico (p. ex., cateteres de dilatação por balão ou outros dispositivos terapêuticos de intervenção) a utilizar em combinação com este fio guia.
- Quando ligar o fio de extensão destacável a este fio guia, deverá ser firmemente inserido até à linha divisória entre os segmentos não revestidos com PTFE e os segmentos revestidos com PTFE na extremidade proximal do fio guia. Se alguma anormalidade for encontrada na conexão, deixe de utilizar o fio guia imediatamente.
- Inspeção cuidadosamente o fio guia para verificar se apresenta dobras, vincos ou outros danos antes da utilização e sempre que possível durante o procedimento. Não utilize o fio guia se este estiver danificado.
- Ao moldar a ponta, tenha cuidado para não danificar a bobina.
- Antes de inserir o fio guia, verifique qual é a extremidade distal e certifique-se de o inserir a partir da extremidade distal.
- Mantenha uma solução salina contínua entre o cateter-guia e o dispositivo de intervenção e entre o dispositivo de intervenção e o fio guia durante o procedimento. A irrigação evita a formação e/ou coagulação do meio de contraste no fio guia e no lúmen do cateter.

## Avarias e eventos adversos

As possíveis avarias e eventos adversos resultantes da utilização deste fio guia incluem, sem caráter limitativo:

### 1. Avarias

|                                        |                             |                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Incapacidade para atravessar uma lesão | Quebra ou dobra do fio guia | Danos como separação                 |
| Dificuldade na remoção                 | Saída do revestimento       | Fragmentos de um fio guia danificado |

### 2. Eventos adversos

|                             |                            |                   |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Morte                       | Infeção                    | Dissecção do vaso |
| Perfuração do vaso          | Complicações de hemorragia | Embolia           |
| Trombo                      | Enfarte                    | Isquemia          |
| Arritmia                    | Vasoespasm                 | Oclusão vascular  |
| Redução da pressão arterial | Reação alérgica            |                   |

## Como utilizar

1. Inspeção antes da respetiva utilização
  - a) Antes da utilização, inspecione e confirme cuidadosamente se o fio guia e a embalagem não estão danificados.
  - b) Antes da utilização, confirme se o fio guia é compatível com o dispositivo de intervenção a utilizar.
2. Preparativos
  - a) Selecione o fio guia mais adequado para a área afetada e remova o tubo de suporte que contém o fio guia da embalagem esterilizada.
  - b) Encha o tubo de suporte com solução salina

- heparinizada e esterilizada utilizando, uma seringa para embeber o dispositivo completo. Tenha em atenção que a solução salina heparinizada e esterilizada pode derramar do tubo de suporte durante esta ação.
- c) Encha o lúmen do dispositivo de intervenção com a solução salina heparinizada e esterilizada antes de inserir o fio guia.
  - d) Liberte o fio guia do clipe traseiro e faça-o deslizar lentamente, empurre a extremidade distal do fio guia através do tubo de suporte (B). (Figura 1)

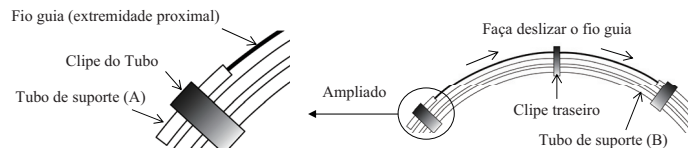


Figura 1

- e) Quando a extremidade distal do fio guia for superior a 5 cm a 6 cm para além da outra extremidade do tubo de suporte, caso seja necessário, deve moldar a ponta em conformidade com a prática habitual.
  - f) Agarrar gentilmente o arame guia que saiu da extremidade distal do tubo de suporte, na ponta, o mais próximo possível do tubo de suporte e puxar o arame guia lenta e cuidadosamente.
  - g) Se sentir resistência ao remover o fio guia do tubo de suporte, volte a injetar a solução salina heparinizada e esterilizada no tubo de suporte. Continue a remover o fio guia depois de deixar de sentir resistência. Certifique-se de que injeta soro fisiológico heparinizado e esterilizado suficiente no tubo de suporte, visto que pode ficar danificado ao remover o fio guia revestido com demasiada força.
  - h) Depois de puxar o fio guia para fora do tubo de suporte, inspecione-o para garantir que não está danificado.
3. Procedimentos de inserção
    - Sistema ao longo do fio
- a) Insira a extremidade distal do fio guia cuidadosamente no lúmen do fio guia do dispositivo de intervenção.
  - b) Faça avançar este fio guia cuidadosamente até a ponta ficar proximal à ponta do dispositivo de intervenção.
  - c) Encaixe o cateter-guia e insira o sistema de dispositivo de intervenção (com o fio guia) no conector em Y.
  - d) Faça avançar o sistema de dispositivo de intervenção pelo cateter-guia até a ponta do sistema de fio guia ficar proximal à ponta do cateter-guia.
  - e) Aperte a válvula hemostática do conector em Y para criar um isolamento em torno do dispositivo de intervenção. Certifique-se de que o fio guia ainda apresenta liberdade de movimentos.
  - f) Certifique-se de que o fio guia se move sem obstruções.
  - g) Coloque o dispositivo de rotação no fio guia, se necessário.
  - h) Faça avançar este fio guia sob fluoroscopia para passar pela lesão. Através da angiografia, confirme se o fio guia passou

pela lesão-alvo estreita.

- i) Observe o movimento do fio guia nos vasos.
- j) Faça avançar o dispositivo de intervenção até atingir a lesão, evitando que o fio guia se mova. Certifique-se de que a ponta distal do fio guia e a respetiva localização no vaso são visíveis durante as manipulações do dispositivo de intervenção.

#### ■ Sistema de troca rápida

- a) Encaixe o cateter-guia.
- b) Insira o introdutor do fio guia no conector em Y do cateter-guia.
- c) Insira cuidadosamente a ponta do fio guia no introdutor.
- d) Faça avançar o fio guia pelo cateter-guia sob fluoroscopia até a ponta do fio guia ficar proximal à ponta do cateter-guia.
- e) Coloque o dispositivo de rotação no fio guia, se necessário.
- f) Faça avançar o fio guia sob fluoroscopia

para passar pela lesão. Através de angiografia, confirme se o fio guia passou pela lesão-alvo estreita.

- g) Observe o movimento do fio guia nos vasos.
- h) Remova o dispositivo de rotação do fio guia e o introdutor do fio guia.
- i) Localize o dispositivo de intervenção no fio guia evitando que este se mova e faça-o avançar até atingir a lesão. Certifique-se de que a ponta distal do fio guia e a respetiva localização no vaso são visíveis durante as manipulações do dispositivo de intervenção.

#### 4. Procedimentos para trocar o fio guia

##### ■ Sistema ao longo do fio

- a) Remova este fio guia lentamente enquanto monitoriza o movimento deste fio guia sob fluoroscopia.
- b) Insira o fio guia seguinte de acordo com as instruções da secção “Procedimento recomendado”.

### Método de armazenamento

Não mantenha o fio guia e a embalagem dobrados e/ou sob carga excessiva. Este fio guia e embalagem devem ser mantidos afastados de água. Guarde num local fresco, escuro e seco.

### Data de validade

A data de validade é indicada na etiqueta da embalagem do fio guia.

### Conteúdo

5 peças/caixa

### Exoneração de responsabilidade

De modo algum deverá a “ASAHI INTECC CO., LTD. e as suas empresas afiliadas” (doravante designadas como a “Empresa”) ser responsabilizada por acidentes, lesões pessoais, eventos adversos devido ao uso inapropriado do(s) produto(s) ou outro uso inconsistente com estas instruções. Em circunstância alguma será a Empresa responsável por quaisquer danos (i) decorrentes do armazenamento do(s) produto(s) após a expedição por parte da Empresa ou (ii) devido à seleção dos doentes, técnicas cirúrgicas ou quaisquer outras intervenções médicas efetuadas pela instituição médica que utiliza o(s) produto(s).

“ASAHI Miracle”, “MIRACLEbros”, “Grand Slam” e “EXTENSION” são marcas comerciais ou marcas registadas da ASAHI INTECC CO.,LTD. no Japão e noutros países.

Serie ASAHI Miracle/MIRACLEbros  
Grand Slam  
Alambre guía para ACP  
Instrucciones de uso

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el alambre guía y tenga en cuenta las secciones Indicaciones para el uso, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones y Procedimientos recomendados de las Instrucciones de uso. Si no se hace de este modo, pueden surgir complicaciones, incluyendo lesiones graves del paciente o su muerte.

Si un usuario o paciente se entera de que ha ocurrido un incidente grave en relación con el alambre guía, informe el hecho al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro.

Estas instrucciones de uso se aplican a las series ASAHI Miracle, MIRACLEbros y a Grand Slam. Para ver los detalles (longitud del alambre guía, longitud de la sección radiopaca, etc.), consulte la etiqueta del producto.

Descripciones

La estructura básica de este alambre guía consiste en un alambre central cónico y una espiral. El alambre central cónico y la espiral están soldados. La longitud de la espiral es radiopaca, de modo que su posición puede confirmarse fácilmente mediante radiología. La superficie distal está recubierta con revestimiento hidrofóbico (silicona) y la superficie proximal está recubierta con PTFE (politetrafluoroetileno). En el extremo proximal de los dispositivos que no son aquellos con una longitud total de 300 cm, hay una conexión para un alambre de extensión, que se utiliza para reemplazar el dispositivo combinado, y puede conectarse el alambre de extensión de ASAHI INTECC.

Consulte la siguiente tabla para ver la carga de la punta\* de este producto.

Tabla 1. Especificaciones del producto

| Nombre del producto             | Diámetro exterior        | Carga de la punta* |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| ASAHI Miracle 3/MIRACLEbros 3   | 0,36 mm (0,014 pulgadas) | 3,0 gf             |
| ASAHI Miracle 6/MIRACLEbros 6   | 0,36 mm (0,014 pulgadas) | 6,0 gf             |
| ASAHI Miracle 12/MIRACLEbros 12 | 0,36 mm (0,014 pulgadas) | 12,0 gf            |
| Grand Slam                      | 0,36 mm (0,014 pulgadas) | 0,7 gf             |

\* Los valores de carga de la punta representan los valores medios de los valores de especificación del producto medidos de acuerdo con el método interno de prueba estándar que asume la fuerza que la punta del alambre guía aplica a la lesión.

Indicaciones para el uso

Este alambre guía fue concebido para la angioplastia coronaria percutánea (ACP) general. Este alambre guía está diseñado para facilitar la colocación de catéteres de dilatación con globo u otros dispositivos terapéuticos de intervención dentro de la cardiовасculatura.

**Este alambre guía no fue concebido para usar en la neurovasculatura y la vasculatura periférica.**

Población objetivo tratada

Las series ASAHI Miracle, MIRACLEbros y el Grand Slam están diseñados para pacientes que cumplen con las indicaciones para los procedimientos de ACP. No está indicado para usarse en neonatos, bebés pequeños o niños ni en pacientes embarazadas, con disfunción renal alterada o que tienen una reacción alérgica a los medios de contraste.

Contraindicaciones

- Confirme la compatibilidad del diámetro del alambre guía con el de otro dispositivo quirúrgico antes de su uso real.
- No utilice el alambre guía en pacientes que presenten una reacción alérgica a los medios de contraste o que tengan disfunción renal alterada.
- No utilice el alambre guía en pacientes embarazadas o que puedan estarlo (los rayos X podrían afectar el feto).
- Este alambre guía se debe utilizar en lugares donde se pueda realizar de modo inmediato una operación quirúrgica de emergencia. Si no se puede ejecutar una operación quirúrgica de emergencia, en el peor de los casos, pueden producirse situaciones en las que se ponga en peligro la vida.
- Este alambre guía está esterilizado previamente con gas de óxido de etileno (EOG), habiéndose concebido solo para un único uso. No lo vuelva a utilizar ni a esterilizar. Si se reutiliza o se vuelve a esterilizar, el rendimiento o la calidad de este alambre guía y paquete puede verse afectada y existen riesgos de complicaciones, incluida una infección.

Advertencias

- Este alambre guía solo debe utilizarlo un médico con la adecuada formación en el tratamiento de ACP.
- Nunca utilice este alambre guía en combinación con catéteres con partes metálicas que puedan entrar en contacto directo con la superficie del alambre guía (p. ej., catéteres de aterectomía, dilataadores metálicos), agujas metálicas o insertadores de fundas metálicas.
- Durante el uso del alambre guía, verifique y controle el movimiento de esta punta bajo fluoroscopia. No lo utilice en zonas de vasos que no se visualicen o no se puedan visualizar.
- No conecte este alambre guía con alambres de extensión desmontables producidos por fabricantes distintos a ASAHI INTECC. No manipule este alambre guía mientras se encuentra conectado el alambre de extensión desmontable. En caso contrario, el alambre guía puede resultar dañado o se puede desacoplar accidentalmente el alambre de extensión desmontable.
- No modifique este alambre guía bajo ninguna circunstancia.

Precauciones

- No utilice el alambre guía después de la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta. Deseche cualquier alambre guía después de su fecha de caducidad.
- Los alambres guía son instrumentos delicados y se deben manejar con cuidado.
- Si el envase está abierto o deteriorado, no utilice el alambre guía. No abra el envase hasta inmediatamente antes de proceder a su uso. Utilice técnicas asépticas en la manipulación y el empleo del alambre guía.
- No limpie este alambre guía con una solución orgánica, como alcohol.
- Tras usar el alambre, tome medidas preventivas para evitar infecciones. Deseche este alambre guía y el envase como residuos médicos.
- No empuje, taladre, retire, ni presione nunca este alambre guía cuando note resistencia. Torsionar o empujar este alambre guía contra una resistencia puede dañar o separar la punta de este alambre guía o dañar directamente un vaso. Si no se hace de este modo, podría dañarse el alambre guía. Determine la causa de la resistencia bajo fluoroscopia y tome las medidas necesarias.
- Avance y retire el alambre guía siempre despacio y con cuidado.
- Al girar este alambre guía en el interior del vaso sanguíneo, no proceda a su rotación continua en

el mismo sentido. Al girar el alambre guía, rótele en sentido horario y antihorario de forma alternativa. No gire más de dos vueltas (720°) en la misma dirección.

- Rocie el alambre guía con una solución salina esterilizada y heparinizada o de otro tipo adecuado al proceder a la retirada y a la reintroducción para evitar que entre aire en el dispositivo quirúrgico. Tenga cuidado al cambiar este alambre guía para evitar que entre aire o que se produzcan traumatismos. Al reintroducir el alambre guía, confirme que la punta del dispositivo quirúrgico se encuentra libre en el vaso y no se apoya contra la pared del mismo. Si no se hace de este modo, se puede provocar un traumatismo. Utilice el marcador radiopaco del dispositivo quirúrgico para confirmar la posición.
- El movimiento libre del alambre guía dentro del dispositivo quirúrgico es una característica importante de un sistema de alambre guía direccionable, ya que da al usuario una información táctil valiosa. Pruebe la resistencia del sistema antes de utilizarlo. Ajuste o cambie la válvula hemostática con una válvula regulable si observa que inhibe el movimiento del alambre guía.
- No proceda a la colocación de un stent empleando más de un alambre guía ni a la operación del alambre a través del tirante de un stent. En caso contrario, el stent puede resultar dañado o el alambre guía se podría romper o quedar inservible.

- Antes de utilizarlo, confirme que este alambre guía es adecuado en tamaño y forma para el procedimiento y compatible con el dispositivo que se utilizará en combinación.
- Consulte las instrucciones de uso adjuntas al dispositivo médico (p. ej., catéteres de dilatación con globo u otros dispositivos terapéuticos de intervención) que se usarán en combinación con este alambre guía.
- Al conectar el alambre de extensión desmontable con este alambre guía, se debe insertar firmemente en la línea límite que se encuentra entre los revestimientos de PTFE y distinto a PTFE en el extremo proximal del alambre guía. Si se encuentra alguna anomalía en la conexión, deje de usar el alambre guía inmediatamente.
- Revise el alambre guía atentamente por si tiene dobleces, torceduras, u otro daño, antes de utilizarlo y siempre que sea posible durante el procedimiento. No utilice el alambre guía si está dañado.
- Al conformar la punta, tenga cuidado de no dañar la espiral.
- Antes de insertar el alambre guía, verifique cuál es el extremo distal y asegúrese de insertarlo desde el extremo distal.
- Mantenga un rociado continuo de solución salina entre el catéter guía y el dispositivo quirúrgico y entre el dispositivo quirúrgico y el alambre guía durante el procedimiento. El rociado evita la formación del medio de contraste o la coagulación en el alambre guía y en la luz del catéter.

## Fallos de funcionamiento y efectos adversos

Se pueden producir posibles fallos de funcionamiento y efectos adversos en el uso de este alambre guía, entre los que se encuentran los siguientes:

### 1. Fallos de funcionamiento

|                               |                                     |                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Fallo al atravesar una lesión | Rotura o curvatura del alambre guía | Daños como la separación         |
| Dificultad de extracción      | Desprendimiento del revestimiento   | Restos de un alambre guía dañado |

### 2. Efectos adversos

|                      |                              |                   |
|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Muerte               | Infección                    | Diseción del vaso |
| Perforación del vaso | Complicaciones de hemorragia | Embolia           |
| Trombo               | Infarto                      | Isquemia          |
| Arritmia             | Vasoespasmio                 | Oclusión vascular |

Reducción de la presión arterial

Reacción alérgica

## Procedimientos recomendados

- Inspección antes de utilizarlo
  - Antes de utilizarlo, revise atentamente y confirme que ningún alambre guía o paquete está dañado.
  - Antes de utilizarlo, confirme que el alambre guía sea compatible con los dispositivos quirúrgicos que se utilizarán.
- Preparación
  - Selección el alambre guía más adecuado para el área afectada y retire el tubo sujetador que contiene el alambre guía del paquete estéril.
  - Rellene el tubo sujetador con una solución salina esterilizada y heparinizada empleando una jeringuilla para empapar el dispositivo en su conjunto. Tenga en cuenta que la solución salina esterilizada y heparinizada se puede derramar del tubo sujetador en este momento.
  - Rellene la luz del dispositivo quirúrgico con solución salina esterilizada y heparinizada antes de insertar de nuevo la guía.
  - Suelte la guía del clip de cola y deslicela lentamente, presione el extremo distal de la guía a través del tubo sujetador(B). (Figura 1)

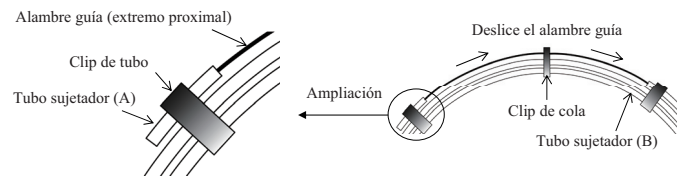


Figura 1

- Quando el extremo distal del alambre guía se extiende entre 5 y 6 cm más allá del otro extremo del tubo de fijación, de ser necesario, conforme la punta de acuerdo con la práctica estándar.
- Sujete suavemente el alambre guía que sale del extremo distal del tubo sujetador, por el punto más cercano posible al tubo sujetador, y extraiga el alambre guía lenta y cuidadosamente.
- Si se siente resistencia al extraer el alambre guía del tubo sujetador, inyecte de nuevo una solución salina esterilizada y heparinizada en el tubo sujetador. Continúe extrayendo el alambre guía cuando haya dejado de percibirse la resistencia. Asegúrese de inyectar suficiente solución salina esterilizada y heparinizada en el tubo sujetador, ya que podría dañarse al extraer con fuerza el alambre guía.
- Después de sacar el alambre guía del tubo sujetador, compruebe que no esté dañado.

### 3. Procedimientos de inserción

#### ■ Sistema del alambre

- Inserte el extremo distal del alambre guía con cuidado en la luz del alambre guía del dispositivo quirúrgico.
- Avance este alambre guía con cuidado hasta que su punta esté inmediatamente próxima a la punta del dispositivo quirúrgico.
- Meta el catéter guía e inserte el sistema del dispositivo quirúrgico (con el alambre guía) en el conector en Y.
- Avance el sistema del dispositivo quirúrgico a lo largo del catéter guía hasta que la punta del sistema del alambre guía esté inmediatamente próxima a la punta del catéter guía.
- Apriete la válvula hemostática del conector en Y para cerrar herméticamente alrededor del dispositivo quirúrgico. Compruebe que aún se pueda mover el alambre guía.
- Asegúrese de que el alambre guía se mueva

- sin problemas.
- g) Si es necesario, sujete el dispositivo de torsión al alambre guía.
  - h) Avance este alambre guía bajo fluoroscopia para que pase por la lesión. Confirme por angiografía que el alambre guía ha pasado la lesión objetivo más estrecha.
  - i) Observe el movimiento del alambre guía en los vasos.
  - j) Avance el dispositivo quirúrgico hasta que alcance la lesión mientras que evita que se mueva el alambre guía. Asegúrese de que la punta distal del alambre guía y su posición en el vaso estén visibles durante las manipulaciones del dispositivo quirúrgico.
- Sistema de intercambio rápido
- a) Meta el catéter guía.
  - b) Inserte el introductor del alambre guía en el conector en Y del catéter guía.
  - c) Inserte con cuidado la punta del alambre guía en el introductor.
  - d) Avance el alambre guía a lo largo del catéter guía bajo fluoroscopia hasta que la punta del alambre guía esté inmediatamente próxima a la punta del catéter guía.
  - e) Si es necesario, sujete el dispositivo de torsión al alambre guía.
- f) Avance el alambre guía bajo fluoroscopia para que pase por la lesión. Confirme por angiografía que el alambre guía ha pasado la lesión objetivo más estrecha.
  - g) Observe el movimiento del alambre guía en los vasos.
  - h) Extraiga el dispositivo de torsión del alambre guía y el introductor del alambre guía.
  - i) Siga al dispositivo quirúrgico por el alambre guía mientras evita que este se mueva, y avance hasta que alcance la lesión. Asegúrese de que la punta distal del alambre guía y su posición en el vaso estén visibles durante las manipulaciones del dispositivo quirúrgico.
4. Procedimientos para cambiar el alambre guía
- Sistema del alambre
- a) Extraiga este alambre guía despacio mientras controla su movimiento bajo fluoroscopia.
  - b) Inserte el siguiente alambre guía siguiendo las instrucciones de la sección Procedimientos recomendados.

### Método de conservación

No conserve la guía y el envase doblados ni soportando cargas pesadas. Esta guía y su envase se deben mantener alejados del agua. Proceda a su almacenamiento en un lugar fresco, oscuro y seco.

### Fecha de caducidad

La fecha de caducidad se indica en la etiqueta del envase del alambre guía.

### Contenido

5 unidades/caja

### Exención de responsabilidad

“ASAHI INTECC CO., LTD. y sus empresas afiliadas” (en adelante, “la Empresa”) no se hacen responsables en ningún caso de accidentes, heridas personales, efectos adversos debidos a un uso inadecuado del producto o de los productos, o de cualquier uso que no siga estas instrucciones. En ningún caso, la Empresa será responsable de los daños (i) procedentes de la conservación de los productos una vez enviados por la Empresa o (ii) debidos a la selección de pacientes, las técnicas quirúrgicas o cualquier otra actividad médica de la institución médica que utilice los productos.

“ASAHI Miracle”, “MIRACLEbros”, “Grand Slam” y “EXTENSION” son marcas comerciales o marcas registradas de ASAHI INTECC CO., LTD. en Japón y en otros países.

ASAHI Miracle / MIRACLEbros-serien  
Grand Slam  
PCI-ledare  
Bruksanvisning

Läs dessa instruktioner noggrant före användning av denna ledare och följ bruksanvisningens avsnitt för Indikationer, Kontraindikationer, Varningar, Försiktighetsåtgärder och Användning. Om instruktionerna inte följs kan det leda till komplikationer inklusive allvarliga personskador för patienten eller till och med dödsfall.

Om en användare och/eller patient får kännedom om en allvarlig incident som har inträffat i samband med ledaren ska detta rapporteras till tillverkaren och medlemsstatens behöriga myndighet.

Denna bruksanvisning gäller för ASAHI Miracle, MIRACLEbros-serien och Grand Slam. Detaljerad information (ledarens längd, längd på röntgentät del, osv.), anges på produktens etikett.

Beskrivningar

Den grundläggande strukturen för denna ledare består av en konisk kärntråd och spole. Den koniska kärntråden och spolen är lödda. Spolens längd är röntgentät så att dess position enkelt kan bekräftas under röntgen. Den distala ytan är belagd med hydrofob (silikon) beläggning och den proximala ytan är belagd med PTFE (polytetrafluoreten). Vid den proximala änden på andra enheter än de med en total längd på 300 cm finns en anslutning för en förlängningskabel som används för att ersätta den kombinerade enheten, och ASAHI INTECC:s förlängningskabel kan anslutas.

Se tabellen nedan för spetsbelastningen\* för den här produkten.

Tabell 1. Produktspecifikationer

| Produktnamn                      | Ytterdiameter       | Spetsbelastning* |
|----------------------------------|---------------------|------------------|
| ASAHI Miracle 3/ MIRACLEbros 3   | 0,36 mm (0,014 tum) | 3,0 gf           |
| ASAHI Miracle 6/ MIRACLEbros 6   | 0,36 mm (0,014 tum) | 6,0 gf           |
| ASAHI Miracle 12/ MIRACLEbros 12 | 0,36 mm (0,014 tum) | 12,0 gf          |
| Grand Slam                       | 0,36 mm (0,014 tum) | 0,7 gf           |

\*Spetsbelastningsvärden representerar medelvärdena för produktspecifikationsvärden som är uppmätta enligt den interna standardtestmetoden under antagande av den kraft som appliceras på lesionen av spetsen på ledaren.

Indikationer

Denna ledare är avsedd för allmän perkutan kranskärlsintervention (PCI). Denna ledare är avsedd att underlätta placeringen av ballongdilationskatetrar eller andra interventionella terapeutiska enheter inom kardiiovaskulaturen. Denna ledare är inte avsedd för användning i neurovaskulaturen och perifer vaskulaturen.

Mål behandlad population

ASAHI Miracle, MIRACLEbros-serien och Grand Slam är avsedda för patienter som uppfyller indikationer för PCI-ingrepp. Den är inte indicerad för användning på nyfödda, spädbarn eller barn samt patienter som är gravida, har nedsatt njurfunktion och som har en allergisk reaktion mot kontrastmedel.

Kontraindikationer

- Bekräfta ledarens diameter är kompatibel med annan interventionsanordning före faktisk användning.
  - Använd inte ledaren i patienter som har en allergisk reaktion mot kontrastmedel eller som har nedsatt njurfunktion.
  - Använd inte ledaren för gravida patienter eller patienter som kan vara gravida (röntgen kan påverka fostret).
  - Denna ledare måste användas på en institution där det finns omedelbar tillgång till nödkirurgi.
- Om det inte finns tillgång till nödkirurgi kan det i värsta fall uppstå livshotande situationer.
- Denna ledare är försteriliserad med etylenoxidgas (EOG) och endast avsedd för engångsbruk. Får inte återanvändas eller omsteriliseras. Om den återanvänds eller steriliseras på nytt kan ledarens och förpackningens prestanda och kvalitet försämrats vilket ger en risk för komplikationer, inklusive infektion.

Varningar

- Denna ledare får endast användas av en läkare som är fullständigt utbildad i PCI-behandling.
- Använd aldrig denna ledare i kombination med katetrar som har delar av metall som kan komma i direkt kontakt med ledarens yta (t.ex. aterektomikatetrar, metalldilatorer), metallnålar eller metallhylsor.
- Vid användning av ledaren ska du kontrollera och övervaka rörelsen av dess spets under fluoroskopi. Använd inte i kärlområden som inte är visualiserade eller inte kan visualiseras.
- Anslut inte denna ledare till en avtagbar förlängningsledare tillverkad av en annan producent än ASAHI INTECC. Manipulera inte denna ledare när den löstagbara förlängningsledaren är ansluten. Detta kan annars leda till att ledaren skadas eller att den avtagbara förlängningsledaren lossnar.
- Modifiera inte ledaren av något skäl.

Försiktighetsåtgärder


- Använd inte ledaren efter utgångsdatumet på etiketten. Kassera alla ledare som har passerat utgångsdatumet.
- Ledare är ömtåliga instrument och ska hanteras försiktigt.
- Använd inte ledaren om förpackningen är öppen eller skadad. Öppna inte förpackningen förrän alldeles innan produkten ska användas. Använd aseptisk teknik vid hantering och användning av ledaren.
- Torka inte av ledaren med en organisk lösning, t.ex. alkohol.
- Vidta förebyggande åtgärder mot infektion efter användning. Kasta ledaren och förpackningen som medicinskt avfall.
- Du får aldrig trycka, borra, dra tillbaka eller vrida denna ledare vid motstånd. Om ledaren förs in eller trycks mot motstånd kan det orsaka skador på spetsen och/eller leda till att spetsen lossnar från ledaren eller orsaka direkta skador på ett kärl. Underlåtenhet att göra så kan orsaka skada på ledaren. Fastställ orsaken till motståndet under fluoroskopi och vidta alla nödvändiga korrigeringar åtgärder.
- För alltid in och dra tillbaka ledare långsamt och försiktigt.
- När ledaren vrids inuti blodkärlet ska den inte vridas i samma riktning hela tiden. Roter ledaren medurs och moturs om vartannat när du vrider den. Roterar inte mer än två varv (720°) i samma riktning.
- Spola ledaren med steril hepariniserad koksaltlösning eller annan lämplig lösning när den dras ut eller förs in för att förhindra att det tränger in luft i interventionsinstrumentet. Byten av ledaren ska utföras försiktigt för att förhindra trauma och/eller att det tränger in luft. När ledaren förs in igen är det viktigt att säkerställa

att interventionsinstrumentets spets är fri inom kärlets lumen och att den inte ligger mot kärlets vägg. Om du inte gör detta kan det orsaka trauma. Använd interventionsinstrumentets röntgentäta markör för att bekräfta positionen.

- Ledarens fria rörelse inuti interventionsinstrumentet är en viktig funktion i ett styrbart ledarsystem eftersom det ger användaren värdefull känselinformation. Testa systemet för motstånd före användning. Testa eller ersätt hemostasventilen med en justerbar ventil om den förhindrar ledarens rörelse.
- Placera inte stenten med hjälp av mer än en ledare eller ledaranvändning genom stentstödet. Detta kan annars leda till att stenten skadas eller att ledaren bryts av eller går sönder.
- Kontrollera innan användning att ledaren har en lämplig storlek och form för proceduren och är kompatibel med enheten som den ska användas i med.
- Se bruksanvisningen som är fäst vid den medicinska utrustningen (t.ex. ballongdilationskatetrar eller andra interventionsanordningar) som ska användas i kombination med denna ledare.

- Vid anslutning av den löstagbara förlängningskabeln till ledaren bör den föras in säkert till gränslinjen mellan icke-PTFE-höljet och PTFE-höljet i den proximala änden av ledaren. Om någon avvikelse upptäcks i anslutningen så ska du omedelbart sluta använda ledaren.
- Inspektera ledaren noggrant för böjningar, veck eller andra skador före användning och när det är möjligt under proceduren. Använd inte ledaren om den är skadad.
- När du formar spetsen ska du vara försiktig så att du inte skadar spolen.
- Innan du för in ledaren ska du ta reda på vilken ände som är den distala änden och se till att föra in den från den distala änden.
- Upprätthåll en kontinuerlig koksaltlösning mellan styrkatetern och interventionsanordningen samt mellan interventionsanordningen och ledaren under proceduren. Spolning förhindrar bildning av kontrastmedel och/eller koagulering på ledaren och i kateterlumen.

- Välj den lämpligaste ledaren för det drabbade området och avlägsna behållaren som innehåller ledaren från den sterila förpackningen.
- Fyll behållaren med steril hepariniserad koksaltlösning med hjälp av en spruta för att blöta hela utrustningen. Tänk på att steril hepariniserad koksaltlösning kan rinna över ur

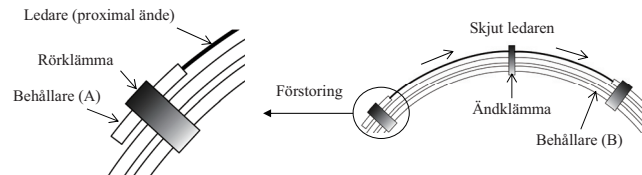

Figur 1

- När ledarens distala ände sticker ut mer än 5–6 cm på den andra sidan av behållaren så formar du spetsen i enlighet med vanlig praxis.
- Greppa försiktigt ledaren som sticker ut ur den distala änden av behållaren i spetsen så nära behållaren som möjligt och dra sakta och försiktigt ut ledaren.
- Om du känner ett motstånd när ledaren tas ur behållaren så injicerar du steril hepariniserad koksaltlösning i behållaren igen. Fortsätt att ta bort ledaren när du inte längre känner motståndet. Se till att injicera tillräckligt med steril hepariniserad koksaltlösning i behållaren eftersom den kan skadas om ledaren dras ut med våld.
- När ledaren har dragits ut ur den rörformiga behållaren ska den inspekteras för att kontrollera att den inte är skadad.

### 3. Proceduren för insättning

- System med införel via ledare
  - För in den distala änden av ledaren försiktigt i ledarlumen för interventionsinstrumentet.
  - För fram ledaren försiktigt tills dess spets befinner sig precis proximalt i relation till interventionsinstrumentets spets.
  - Anslut ledarkatetern och för in interventionsinstrumentssystemet (med ledare) i Y-anslutningen.
  - För fram interventionsinstrumentssystemet genom ledarkatetern tills spetsen för ledarsystemet befinner sig precis proximalt i

behållaren när du gör detta.

- Fyll lumen på interventionsinstrumentet med steril hepariniserad koksaltlösning innan ledaren förs in.
- Lösa ledaren från ändklämmen och skjut ledaren långsamt framåt. Tryck ledarens distala ände genom behållaren (B). (Figur 1)

relation till spetsen för ledarkatetern.

- Stäng Y-anslutningens hemostasventil för att skapa en föregelg runt interventionsinstrumentet. Säkerställ att det fortfarande går att röra ledaren.
- Kontrollera att det är möjligt att röra ledaren friktionsfritt.
- Fäst den medföljande vridenheten vid ledaren vid behov.
- För in ledaren under fluoroskopi för att passera genom lesionsområdet. Bekräfta via angiografi att ledaren har passerat det förträngda lesionsområdet.
- Observera ledarens rörelse i kärlen.
- För in interventionsinstrumentet tills lesionsområdet nås samtidigt som rörelse av ledaren förhindras. Säkerställ att ledarens distala spets och dess läge i kärlet är synliga under manipulering av interventionsinstrumentet.

### ■ System för snabbt byte

- Anslut ledarkatetern.
- För in ledarens införel i ledarkateterns Y-anslutning.
- För försiktigt in ledarens spets i införelen.
- För in ledaren genom ledarkatetern under fluoroskopi tills ledarens spets befinner sig precis proximalt i relation till ledarkateterns spets.
- Fäst den medföljande vridenheten vid ledaren vid behov.

## Funktionsfel och biverkningar

Möjliga funktionsfel och biverkningar som kan uppstå vid användning av denna ledare inkluderar, men är inte begränsade till följande:

### 1. Funktionsfel

|                                        |                                |                             |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Misslyckande att korsa en lesion/skada | Brott eller böjning av ledaren | Skador såsom separation     |
| Svår att avlägsna                      | Kommer av beläggningen         | Skräp från en skadad ledare |

### 2. Biverkningar

|                    |                         |                       |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| Dödsfall           | Infektion               | Kärldissektion        |
| Kärlperforering    | Blödningskomplikationer | Embolism              |
| Trombos            | Infarkt                 | Ischemi               |
| Arytmi             | Vasospasm               | Vaskulär tilltäppning |
| Blodtryckssänkning | Allergisk reaktion      |                       |

## Användning

- Inspektion innan användning
  - Kontrollera noggrant att ledaren och förpackningen är oskadade före användning.
  - Bekräfta att ledaren är kompatibel med interventionsinstrumentet som ska användas före användning.
- Förberedelse

- f) För in ledaren under fluoroskopi för att passera genom lesionsområdet. Bekräfta via angiografi att ledaren har passerat det förträngda lesionsområdet.
- g) Observera ledarens rörelse i kärlen.
- h) Avlägsna ledarens vridenhet och införare.
- i) För interventionsinstrumentet över ledaren samtidigt som rörelse av ledaren förhindras, tills lesionsområdet nås. Säkerställ att ledarens distala spets och dess läge i kärlet
- är synliga under manipulering av interventionsinstrumentet.
4. Procedurer för byte av ledaren
- System med införsel via ledare
    - a) Avlägsna ledaren långsamt, samtidigt som ledarens rörelser övervakas via fluoroskopi.
    - b) För in nästa ledare i enlighet med anvisningarna i avsnittet "Användning".

## Förvaring

Ledaren och förpackningen får inte förvaras böjd och/eller utsättas för stor belastning vid förvaring. Denna ledare och förpackning ska skyddas mot vatten. Förvara den på en sval, mörk och torr plats.

## Utgångsdatum

Utgångsdatumet anges på etiketten på ledarens förpackning.

## Innehåll

5 stycken/ask

## Ansvarsfriskrivning

Under inga omständigheter är "ASAHI INTECC CO., LTD. och dess dotterbolag" (kallas nedan för "Företaget") ansvarigt för olyckor, personskador, biverkningar som beror på felaktig användning av produkten/produkterna eller annan användning oförenlig med dessa instruktioner. I inget fall ska Företaget hållas ansvarigt för skador som antingen (i) uppstår från förvaring av produkten/produkterna efter transport från Företaget eller (ii) inträffar på grund av patientval, operationstekniker eller någon annan medicinsk aktivitet av den sjukvårdsinrättning som använder produkten/produkterna.

"ASAHI Miracle", "MIRACLEbros", "Grand Slam" och "EXTENSION" är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör ASAHI INTECC CO.,LTD. i Japan och andra länder.

## Rada ASAHI Miracle / MIRACLEbros Grand Slam Vodící drát pro PCI

Návod k použití

Před použitím výrobku si tyto pokyny důkladně přečtěte a v tomto návodu k použití věnujte pozornost sekcím Indikace pro použití, Kontraindikace, Upozornění, Bezpečnostní pokyny a Doporučený postup při použití. V opačném případě může dojít ke komplikacím, včetně závažného poranění pacienta nebo smrti.

Pokud se uživatel a/nebo pacient dozví o závažné události, ke které došlo v souvislosti s vodícím drátem, oznamte tuto skutečnost výrobci a příslušnému orgánu členského státu.

Tento návod k použití se vztahuje na výrobky ASAHI Miracle, MIRACLEbros řady a Grand Slam. Detailní charakteristiku (délku vodícího drátu, délku radiokontrastní části atd.) naleznete na štítku na obalu výrobku.

### Popis

Základní konstrukce tohoto vodícího drátu se skládá z kuželového plného drátu a civky. Kuželový plný drát a civka jsou připájeny. Délka civky je radiopřehledná, takže její polohu lze snadno potvrdit při radioskopii. Distální povrch je potažen hydrofobním (silikonovým) povlakem a proximální povrch je potažen PTFE (polytetrafluorethylenem). Na proximálním konci zařízení jiných než těch s celkovou délkou 300 cm je připojení pro prodlužovací drát, který se používá k nahrazení kombinovaného zařízení a připojit je možné prodlužovací drát společnosti ASAHI INTECC.

Zatížení špičky\* tohoto výrobku je uvedeno v tabulce níže.

Tabulka 1. Specifikace výrobku

| Název výrobku                    | Vnější průměr         | Zatížení špičky* |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|
| ASAHI Miracle 3/ MIRACLEbros 3   | 0,36 mm (0,014 palce) | 3,0 gf           |
| ASAHI Miracle 6/ MIRACLEbros 6   | 0,36 mm (0,014 palce) | 6,0 gf           |
| ASAHI Miracle 12/ MIRACLEbros 12 | 0,36 mm (0,014 palce) | 12,0 gf          |
| Grand Slam                       | 0,36 mm (0,014 palce) | 0,7 gf           |

\*Hodnoty zatížení špičky představují průměrné hodnoty specifikací produktu naměřené podle testovací metody interního standardu za předpokladu síly působící na lézi špičkou vodícího drátu.

### Indikace pro použití

Tento vodící drát je určen k obecné perkutánní koronární intervenci (PCI). Tento vodící drát je určen k usnadnění zavádění balonkových dilatačních katétrů nebo jiných intervenčních terapeutických zařízení do kardiiovaskulatury.

**Tento vodící drát není určen pro použití v neurovaskulárním systému ani periferních cévách.**

### Cílová léčená populace

Vodící dráty řady ASAHI Miracle, MIRACLEbros a Grand Slam jsou určeny pro pacienty, kteří splňují indikace pro PCI. Není indikován k použití u novorozenců, kojenců nebo dětí a u pacientů, kteří jsou těhotní, mají poruchu funkce ledvin nebo alergickou reakci na kontrastní látku.

### Kontraindikace

- Před vlastním použitím ověřte kompatibilitu průměru vodícího drátu s jiným intervenčním zařízením.
- Nepoužívejte vodící drát u pacientů, kteří jsou alergičtí na kontrastní látku, nebo u pacientů s dysfunkční ledvinou.
- Vodící drát nepoužívejte u těhotných pacientek ani pacientek, které mohou být těhotné (rentgenové záření může ovlivnit plod).
- Tento vodící drát je nutné používat pouze ve zdravotnickém zařízení, které disponuje možností hned provést akutní chirurgický zákrok.

Pokud není možnost provést akutní chirurgický zákrok, v nejhorším případě může dojít k příchodům ohrožujícím pacienta na životě.

- Vodící drát je předem sterilizován plynným ethylenoxidem (EOG) a je určen na jedno použití. Nepoužívejte jej opakovaně ani neprovádějte opakovanou sterilizaci. V případě opakovaného použití nebo sterilizování vodícího drátu může být snížena jeho funkčnost nebo kvalita a může dojít ke komplikacím, včetně infekce.

### Upozornění

- Tento vodící drát smí používat pouze lékař, který je plně vyškolen v terapii metodou PCI.
- Tento vodící drát nikdy nepoužívejte v kombinaci s katétry obsahujícími kovové části, které se mohou přímo dotýkat povrchu tohoto vodícího drátu (např. aterosklerotické katétry, kovové dilatátory), kovovými jehlami nebo zaváděči s kovovými pouzdry.
- Během používání vodícího drátu kontrolujte a sledujte pohyb jeho špičky pod skiaskopickou

kontrolou. Nepoužívejte v oblastech, které nejsou viditelné nebo je zviditelnit nelze.

- Vodící drát nepřipojujte k odnímatelným prodlužovacím drátům vyráběným jinými výrobci než společností než ASAHI INTECC. Vodícím drátem nemanipulujte, když je připojen odnímatelný prodlužovací drát. Jinak může dojít k poškození vodícího drátu nebo neúmyslnému uvolnění odnímatelného prodloužení.
- V žádném případě vodící drát neupravujte.

### Bezpečnostní pokyny

- Vodící drát nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti uvedeného na štítku. Po datu použitelnosti je nutné vodící drát zlikvidovat.
- Vodící dráty jsou jmeně nástroje a je nutné s nimi pracovat opatrně.
- Pokud je balení otevřeno nebo poškozeno, vodící drát nepoužívejte. Obal otevřete až bezprostředně před použitím. Při manipulaci s vodícím drátem dodržujte aseptické podmínky.
- Vodící drát neotvírejte organickými roztoky (jako např. alkohol).
- Po použití učiňte bezpečnostní opatření proti přenosu infekce. Vodící drát a obaly likvidujte jako biologický odpad.
- Nikdy netlačte, nevytahujte ani nekruťte nebo nesnažte vtlačit vodícím drátem, který narazil na odpor. Kroucení nebo zatlačování vodícího drátu proti odporu může vést k poškození nebo

oddělení špičky vodícího drátu nebo přímému poškození cévy. V opačném případě může dojít k poškození tohoto vodícího drátu. Skiaskopem zjistěte důvod odporu a proveďte veškeré potřebné nápravné akce.

- Vodící dráty vždy zavádějte a vytahujte pomalu a opatrně.
- Při rotaci vodícího drátu uvnitř krevní cévy neotáčejte stále ve stejném směru. Při rotaci vodícího drátu jím otáčejte střídavě ve směru a proti směru hodinových ručiček. Neotáčejte o více než dvě otočení (do 720°) ve stejném směru.
- Při vyjímání a opakovaném zavádění vodící drát propláchněte heparinizovaným sterilním fyziologickým roztokem nebo jinou vhodnou tekutinou, aby se zabránilo vniknutí vzduchu do intervenčního zařízení. Při výměně vodícího drátu postupujte opatrně, aby do systému nevnikl

vzduch nebo nedošlo k poranění. Při opakovaném zavádění vodicího drátu se ujistěte, že je špička intervenčního zařízení volně umístěná v lumen cévy a nenaléhá na její stěnu. Jinak může dojít k poranění. Pro potvrzení polohy intervenčního zařízení použijte radiokontrastrní markery.

- Volný pohyb vodicího drátu uvnitř intervenčního zařízení představuje důležitou funkci fideletního systému vodicího drátu, jelikož podává uživateli důležité taktilní informace. Před použitím systém otestujte, jestli při průchodu necítíte žádný odpor. Pokud zjistíte, že hemostatický ventil zpomaluje pohyb vodicího drátu, upravte jej nebo jej nahraďte nastavitelným ventilem.
- K zavádění stentu nepoužívejte více než jeden vodicí drát ani drát nezavádějte mřížkou stentu. V opačném případě může dojít k poškození stentu nebo poškození či zlomení vodicího drátu.
- Před použitím se ujistěte, že tento vodicí drát má odpovídající velikost a tvar pro daný zákrok a že je kompatibilní se zařízením, v kombinaci s kterým má být použit.
- Přečtěte si návod k použití příložený ke zdravotnickému prostředku (např. balónkovému dilatačnímu katétru nebo jiným intervenčním

terapeutickým prostředkům), který má být použit v kombinaci s tímto vodicím drátem.

- Při připojování k vodicímu drátu je nutné odnímatelný prodlužovací drát bezpečně zasunout k hraniční čáře mezi povrchovou úpravou bez PTFE a s PTFE na proximálním konci vodicího drátu. Pokud zjistíte jakoukoli abnormalitu připojení, okamžitě přestaňte vodicí drát používat.
- Vodicí drát před použitím, a kdykoli to bude během zákroku možné, pečlivě kontrolujte, jestli není ohnutý, zalomený nebo poškozený jiným způsobem. Pokud je vodicí drát poškozený, nepoužívejte jej.
- Při tvarování špičky dávejte pozor, abyste nepoškodili vnitřní.
- Před zavedením vodicího drátu zkontrolujte, který konec je distální, a ujistěte se, že provádíte zavádění z distálního konce.
- Během zákroku provádějte kontinuální proplachování fyziologickým roztokem mezi vodicím katétre a intervenčním zařízením a mezi intervenčním zařízením a vodicím drátem. Proplachování zabraňuje hromadění kontrastní látky a/nebo srážení na vodicím drátu a v lumen katétru.



nejdou vodicí drát a obal poškozeny.

- b) Před použitím se ujistěte, že je vodicí drát kompatibilní s používanými intervenčními zařízeními.

## 2. Příprava

- a) Vyberte nejvhodnější vodicí drát pro postizovanou oblast a vyjměte krycí trubici s vodicím drátem ze sterilního obalu.
- b) Pomocí injekční stříkačky naplňte krycí trubici heparinovaným, sterilním fyziologickým

Vodicí drát (proximální konec)

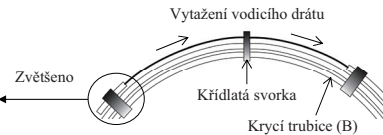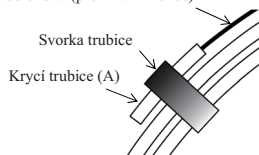

Obrázek 1

- e) Vyčnává-li distální konec vodicího drátu o 5 až 6 cm z opačného konce držáku je možné v případě potřeby upravit jeho špičku v souladu s běžnou praxí.
- f) Jemně uchopte vodicí drát vyčnávající z distálního konce držáku v nejbližším možném místě u držáku a pomalu a opatrně jej vytáhněte.
- g) Pokud při vytahování vodicího drátu z krycí trubice zjistíte odpor, znovu do krycí trubice vstříknete heparinovaný, sterilní fyziologický roztok. Jakmile odpor odezní, pokračujte ve vytahování vodicího drátu. Do krycí trubice je nutné vstříknout dostatečný objem heparinovaného, sterilního fyziologického roztoku, aby nedošlo k jejímu poškození při vytahování drátu za použití síly.
- h) Po vytážení vodicího drátu z krycí trubice jej zkontrolujte a ujistěte se, že není poškozen.

## 3. Postupy při zavádění

- **Systém Over-the-wire**
- a) Opatrně vložte distální konec vodicího drátu do lumen pro vodicí drát intervenčního zařízení.
- b) Vodicí drát opatrně zavádějte, dokud jeho špička nedosáhne polohy proximální ke špičce intervenčního zařízení.
- c) Zařaďte vodicí katétr a vložte systém

roztokem tak, aby se namočilo celé zařízení. Vezměte na vědomí, že heparinovaný, sterilní fyziologický roztok může z krycí trubice uniknout.

- c) Před zavedením vodicího drátu, naplňte lumen intervenčního zařízení heparinovaným, sterilním fyziologickým roztokem.
- d) Vodicí drát uvolněte z křídlaté svorky a pomalu jej suňte, protlačte distální konec vodicího drátu přes krycí trubici (B). (Obrázek 1)

intervenčního zařízení (s vodicím drátem) do Y konektoru.

- d) Posunujte systém intervenčního zařízení skrz vodicí katétr, dokud špička vodicího drátu nedosáhne proximální polohy vůči špičce vodicího katétru.
- e) Utáhněte hemostatický ventil Y konektoru, aby se vytvořilo těsné spojení kolem intervenčního zařízení. Ujistěte se, že je stále umožněn pohyb vodicího drátu.
- f) Zkontrolujte, že se vodicí drát pohybuje hladce.
- g) V případě potřeby připojte k vodicímu drátu příložené rotační zařízení.
- h) Za skiaskopické kontroly posunujte tento vodicí drát směrem k lézi. Angiograficky potvrďte, že vodicí drát dosáhl zúžené cílové léze.
- i) Kontrolujte pohyb vodicího drátu v cévách.
- j) Posunujte intervenční zařízení, dokud nedosáhnete léze, při tom zajistěte, aby se vodicí drát nepochyboval. Zajistěte, aby distální špička vodicího drátu a její poloha v cévě byly při manipulaci s intervenčním zařízením viditelné.

■ **Systém rychlé výměny**

a) Zařaďte vodicí katétr.

- b) Vložte zavaděč vodicího drátu do Y

## Poruchy funkce a nežádoucí příhody

Poruchy funkce a nežádoucí příhody spojené s používáním tohoto vodicího drátu mohou mimo jiné zahrnovat následující:

### 1. Poruchy funkce

|                               |                                     |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nemožnost dostat se přes lézi | Odlomení nebo ohnutí vodicího drátu | Poškození, jako je oddělení         |
| Potíže při vytahování         | Odlupování povlaku                  | Úlomky z poškozeného vodicího drátu |

### 2. Nežádoucí příhody

|                        |                                |              |
|------------------------|--------------------------------|--------------|
| Úmrtí                  | Infekce                        | Disekce cévy |
| Perforace cévy         | Komplikace spojené s krvácením | Embolie      |
| Krevní sraženina       | Infarkt                        | Ischémie     |
| Arytmie                | Vasospasmus                    | Okluze cév   |
| Snížení krevního tlaku | Alergická reakce               |              |

## Doporučený postup při použití

### 1. Prohlídka před použitím

- a) Před použitím pečlivě zkontrolujte, jestli

- konektoru vodícího katétru.
- c) Do zavaděče opatrně vložte špičku vodícího drátu.
- d) Za skiaskopické kontroly posunujte vodící drát přes vodící katétr, dokud špička vodícího drátu nedosáhne polohy proximálně od špičky vodícího katétru.
- e) V případě potřeby připojte k vodícímu drátu přiložené rotační zařízení.
- f) Za skiaskopické kontroly posunujte vodící drát směrem k lézi. Angiograficky potvrďte, že vodící drát dosáhl zúžené cílové léze.
- g) Kontrolujte pohyb vodícího drátu v cévách.
- h) Výměňte rotační zařízení vodícího drátu a zavaděč vodícího drátu.
- i) Intervenční zařízení posunujte po vodícím drátě, dokud nedosáhnete léze, při tom zamezte pohybu vodícího drátu. Zajistěte, aby distální špička vodícího drátu a její poloha v cévě byly při manipulaci s intervenčním zařízením viditelné.
4. Postupy při výměně vodícího drátu
- Systém Over-the-wire
    - a) Vodící drát pomalu vyjměte za skiaskopického monitorování pohybu.
    - b) Vložte další vodící drát v souladu s pokyny uvedenými v části „Doporučený postup při použití“.

### Podmínky uchovávání

Vodící drát a obal se nesmí při uchovávání ohýbat ani silně zatěžovat. Tento vodící drát a obal musí být uchovávány mimo dosah vody. Uchovávejte v chladu, temnu a suchu.

### Datum použitelnosti

Datum použitelnosti je uvedeno na štítku na obalu vodícího drátu.

### Obsah

5 kusů / krabička

### Odmítnutí odpovědnosti

V žádném případě není „ASAHI INTECC CO., LTD. a přidružené společnosti“ (dále jen „Společnost“) odpovědná za nehody, zranění osob, nežádoucí příhody vzniklé v důsledku jakéhokoli nesprávného použití výrobku (výrobků) nebo za jakékoli jiné použití, které není v souladu s těmito pokyny. V žádném případě nebude Společnost odpovědná za škody (i) vzniklé v důsledku skladování výrobku nebo výrobků po dodání od Společnosti nebo (ii) v důsledku výběru pacientů, operačních technik nebo jakýchkoli jiných lékařských úkonů prováděných zdravotnickým zařízením, které výrobek nebo výrobky používá.

„ASAHI Miracle“, „MIRACLEbros“, „Grand Slam“ a „EXTENSION“ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti ASAHI INTECC CO.,LTD. v Japonsku a dalších zemích.

ASAHI Miracle / MIRACLEbros-serien  
Grand Slam  
PCI-ledesonder

Bruksanvisning

Les denne bruksanvisningen nøye før du tar ledesonden i bruk og overhold indikasjoner for bruk, advarsler, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler ved bruk og anbefalt prosedyre i disse instruksjonene for bruk. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til komplikasjoner, inkludert alvorlig skade på pasienten eller død.

Hvis en bruker eller en pasient får kjennskap til en alvorlig hendelse som har oppstått i forhold til ledesonden, må dette rapporteres til produsenten og den kompetente myndigheten i medlemsstaten.

Denne bruksanvisningen gjelder ASAHI Miracle, MIRACLEbros-serien og Grand Slam. For detaljer (lengde av ledesonden, lengden på den røntgentette seksjonen, osv.), se produktetiketten.

Beskrivelser

Den grunnleggende strukturen til denne ledesonden består av en konisk kjernesonde og fjær. Den koniske kjernesonden og fjæren er loddet. Lengden av fjæren er røntgentett, slik at posisjonen enkelt kan bekrefte under røntgen. Den distale overflaten er belagt med hydrofobisk (silikon) belegg, og den proksimale overflaten er belagt med PTFE (polytetrafluoretylen). I den proksimale enden av enheter som er mindre enn 300 cm, er det en tilkobling for en forlengelsesledning som brukes til å erstatte den kombinerte enheten, og ASAHI INTECCs forlengsessonde kan kobles til.

Se tabellen nedenfor for tuppbelastning\* av dette produktet.

Tabell 1. Produktspesifikasjoner

| Produktnavn                       | Ytre diameter          | Tuppbelastning* |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| ASAHI Miracle 3 / MIRACLEbros 3   | 0,36 mm (0,014 tommer) | 3,0 gf          |
| ASAHI Miracle 6 / MIRACLEbros 6   | 0,36 mm (0,014 tommer) | 6,0 gf          |
| ASAHI Miracle 12 / MIRACLEbros 12 | 0,36 mm (0,014 tommer) | 12,0 gf         |
| Grand Slam                        | 0,36 mm (0,014 tommer) | 0,7 gf          |

\*Tuppbelastningsverdiene representerer gjennomsnittsverdier for produktspesifikasjonsverdiene målt iht. den interne standardtestmetoden, forutsatt at ledesondens tupp påfører kraften på lesjonen.

Indikasjoner for bruk

Denne ledesonden er beregnet for generell perkutan koronar intervensjon (PCI). Denne ledesonden er utformet for å gjøre det katetre å plassere ballongdilatasjonskatetre eller andre intervensjonelle terapeutiske enheter i kardiiovaskulærsystemet.

Denne ledesonden er ikke beregnet for bruk i det nevrovaskulære eller det kardiiovaskulære systemet.

Målgruppe for behandling

ASAHI Miracle, MIRACLEbros-serien og Grand Slam er beregnet på pasienter som møter indikasjonene for PCI-prosedyrer. Den er ikke beregnet for bruk på nyfødte, spedbarn eller barn, samt pasienter som er gravide, har nedsatt nyrefunksjon og som har en allergisk reaksjon på kontrastmidler.

Kontraindikasjoner

- Bekreft kompatibiliteten til diameteren på ledesonden med andre enheter for intervensjon før faktisk bruk.
- Ikke bruk ledesonden til pasienter som har en allergisk reaksjon på kontrastmidler, eller som har nedsatt nyrefunksjon.
- Ikke bruk ledesonden til gravide pasienter eller pasienter som kan være gravide (røntgen kan påvirke fosteret).
- Denne ledesonden skal brukes i institusjoner der akuttkirurgi kan utføres umiddelbart. Hvis akuttkirurgi ikke er tilgjengelig, kan i verste fall livstruende situasjoner oppstå.
- Ledesonden og emballasjen er sterilisert på forhånd med etylenoksidgass (EOG) og er kun beregnet for engangsbruk. Skal ikke resteriliseres eller brukes på nytt. Hvis ledesonden brukes på nytt eller resteriliseres, kan det gå ut over ytelsen eller kvaliteten til denne ledesonden og pakken, og det er fare for komplikasjoner, inkludert infeksjon.

Advarsler

- Denne ledesonden må kun brukes av en lege som har full opplæring i PCI-prosedyrer.
- Bruk aldri denne ledesonden i kombinasjon med katetere som har metalleder som kan komme i direkte kontakt med overflaten av denne ledesonden (f.eks. aterektomikateret, metalldilatorer), metallnåler eller metallhysterinleggere.
- Når ledesonden brukes, kontroller og overvåk bevegelsen til tuppen under fluoroskopi. Enheten må ikke brukes i blodåren som ikke kan sees eller visualiseres.
- Ledesonden skal ikke kobles til avtakbare forlengsessonder produsert av andre enn ASAHI INTECC. Ledesonden må ikke manipuleres mens den avtakbare forlengelsen er tilkoblet. Hvis ikke kan ledesonden bli skadet eller den avtakbare forlengsessonden kan løsne uten at det er meningen.
- Ikke endre denne ledesonden av noen årsaker.

Forholdsregler ved bruk

- Bruk ikke ledesonden etter holdbarhetsdatoen som er angitt på etiketten. Kast ledesonder som overskrider holdbarhetsdatoen.
- Ledesonder er ømfintlige instrumenter og bør behandles forsiktig.
- Ikke bruk ledesonden dersom emballasjen er åpnet eller skadet. Ikke åpne emballasjen før like før bruk. Bruk aseptisk teknikk ved håndtering og bruk av ledesonden.
- Ledesonden må ikke tørkes med en organisk løsning som alkohol.
- Iverksett preventive tiltak mot infeksjon etter bruk. Kast ledesonden og emballasjen som medisinsk avfall.
- Ledesonden som møter motstand må aldri skyves, skrues, trekkes tilbake eller ettertrekkes. Hvis ledesonden skyves eller ettertrekkes mot motstand, kan dette forårsake skade og/eller separasjon av tuppen fra ledesonden eller direkte skader på blodårene. Unnlatelse av å gjøre det kan føre til skade på denne ledesonden. Fastslå årsaken til motstanden under gjennomlysning, og iverksett nødvendige tiltak.
- Før eller trekk alltid ledesondene sakte og forsiktig frem.
- Ved ettertrekking av denne ledesonden inne i blodåren, skal den ikke ettertrekkes kontinuerlig i samme retning. Når ledesonden ettertrekkes, skal den roteres vekselvis med klokken og mot klokken. Ikke overstig to rotasjoner (720°) i samme retning.
- Skyll ledesonden med heparinisert og sterilisert saltvann eller annet egnet løsning mens ledesonden fjernes og settes inn igjen for å hindre at det kommer luft inn i intervensjonsenheten. Utfør utveksling av denne ledesonden nøye for å hindre at det kommer luft inn og/eller traumer. Når ledesonden føres inn på nytt, må du bekrefte

at tuppen på intervensjonsenheten er fri innenfor lumen til blodåren og ikke ligger mot åreveggen. Uten slik observasjon kan det oppstå skade. Bruk den røntgentette markøren på intervensjonsenheten til å bekrefte plasseringen.

- Fri bevegelse av ledesonden innen intervensjonsenheten er en viktig funksjon i en styrbar ledesonde fordi det gir brukeren verdifull informasjon. Systemet må testes for motstand før bruk. Juster eller bytt hemostaseventilen med en justerbar ventil dersom det hemmer bevegelsen til ledesonden.
- Ikke utfør stentplassering ved bruk av mer enn én ledesonde eller bruk av vaier gjennom stentveggen. Hvis ikke kan stenten bli skadet eller ledesonden kan brette.
- Før bruk, kontroller at denne ledesonden er passende i størrelse og form for prosedyren og er kompatibel med enheten som skal brukes i kombinasjon.
- Se instruksjonene som er festet til det medisinske utstyret (f.eks. ballongdilatasjonskaterer eller annet intervensjonell terapeutisk utstyr) som skal brukes i kombinasjon med denne ledesonden.

- Når den avtakbare forlengelsessonden kobles sammen med denne ledesonden, bør ledesonden være satt godt inn i grenselinjen mellom ikke-PFTE-belegg og PRFE-belegg i den proksimale enden av ledesonden. Slutt å bruke ledesonden umiddelbart hvis det blir funnet noe unormalt i tilkoblingen.
- Sjekk ledesonden nøye for bend, knekk eller andre skader før bruk og når det er mulig under prosedyren. Ikke bruk ledesonden hvis den er skadet.
- Når du former tuppen, vær forsiktig så du ikke skader spolen.
- Før du setter inn ledesonden, sjekk hvilken ende som er den distale enden og sørg for å sette den inn fra den distale enden.
- Oppretthold en kontinuerlig saltvannsspyling mellom ledekateret og intervensjonsenheten, og mellom intervensjonsenheten og ledesonden under prosedyren. Skylling forhindrer dannelse av kontrastmidler og/eller koagulering på ledesonden og i kateterlumen.

## Feilfunksjoner og ugunstige effekter

Mulige feilfunksjoner og ugunstige effekter ved bruk av denne ledesonden inkluderer, men er ikke begrenset til følgende:

### 1. Feilfunksjoner

|                                  |                                   |                                |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Unnlatelse av å krysse en lesjon | Brudd eller bøyning av ledesonden | Skader som separasjon          |
| Vanskeligheter med å fjerne      | Belegget går av                   | Rester fra en skadet ledesonde |

### 2. Ugunstige effekter

|                     |                         |                    |
|---------------------|-------------------------|--------------------|
| Dødsfall            | Infeksjon               | Disseksjon         |
| Karperforering      | Blodningskomplikasjoner | Emboli             |
| Trombe              | Infarkt                 | Ischemia           |
| Arytmi              | Vasospasm               | Vaskulær okklusjon |
| Blodtrykksreduksjon | Allergisk reaksjon      |                    |

## Anbefalt prosedyre

### 1. Inspeksjon før bruk

- Før bruk, sjekk nøye og bekreft at alle ledesonder og pakker er uskadet.
- Før bruk, bekreft at ledesonden er kompatibel med intervensjonsenheten som skal brukes.


### 2. Forberedelse

- Velg den mest passende ledesonden for det berørte området; fjern holderslangen som inneholder ledesonden fra den sterile


pakningen.

- Fyll holderslangen med heparinisert og sterilisert saltvann ved bruk av en sprøyte, for å væte hele enheten. Merk deg at heparinisert og sterilisert saltvann kan søle ut av slangen på dette tidspunktet.
- Fyll lumen på intervensjonsenheten med

Ledesonde (proksimale enden)

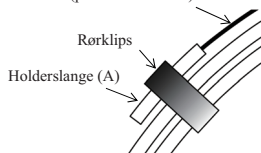

Figur 1

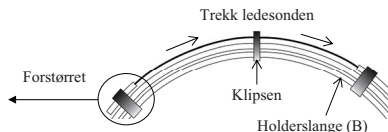

- Når ledesondens distale ende stikker mer enn 5–6 cm ut av den andre enden av holderslangen former du om nødvendig tuppen i samsvar med standard praksis.
- Ta forsiktig tak i ledesonden som kom ut fra den distale enden av holderslangen på det punktet som er så nær holderslangen som mulig, og dra ledesonden ut sakte og forsiktig.
- Hvis du merker motstand når ledesonden fjernes fra holderslangen, skal du sprøyte inn heparinisert og sterilisert saltvann i holderslangen på nytt. Fortsett å fjerne ledesonden når du ikke lenger kjenner motstand. Pass på at du sprøyter inn tilstrekkelig heparinisert og sterilisert saltvann i holderslangen, da den kan bli skadet hvis du fjerner ledesonden med tvang.
- Når ledesonden trekkes ut av holderslangen, sjekk for skader.

### 3. Prosedyrer for innsetting

#### ■ Over-the-wire-systemet

- Sett den distale enden av ledesonden forsiktig inn i lumen til intervensjonsenheten.
- Flytt ledesonden forsiktig frem inntil tuppen er proksimalt til tuppen av intervensjonsenheten.
- Aktiver ledekateret og sett intervensjonsenhetssystemet (med ledesonde) inn i Y-koblingen.
- Før intervensjonsenhetssystemet fremover gjennom det ledekateret til tuppen av

heparinisert og sterilisert saltvann før du fører inn ledesonden.

- Løsne ledesonden fra klipsen og trekk ledesonden sakte mens du skyver den distale enden av ledesonden gjennom holderslangen (B). (Figur 1)

ledesondesystemet er proksimalt til tuppen av det ledekateret.

- Stram hemostaseventilen på Y-koblingen for å lage en forseggjort rundt intervensjonsenheten. Sørg for at ledesonden fortsatt kan beveges.
- Sjekk at ledesonden beveger seg jevnt.
- Fest enheten for dreiemoment til ledesonden om nødvendig.
- Før ledesonden fremover til du har passert lesjonen. Bruk fluoroskopi til å kontrollere fremdriften. Bekreft med angiografi at ledesonden har passert den innsnevrede delen av mállesjonen.
- Observer ledesondens bevegelse i blodåren.
- Før intervensjonsenheten fremover inntil lesjonen er nådd mens du hindrer ledesonden i å bevege seg. Sørg for at den distale tuppen av ledesonden og dens plassering i blodåren blir synlig under manipulasjoner av intervensjonsenheten.

#### ■ System for raskt bytte

- Aktiver ledekateret.
- Sett innføringssettet på ledesonden inn i Y-koblingen på ledekateret.
- Sett tuppen forsiktig inn i innføringssettet.
- Før ledesonden fremover gjennom det ledekateret under fluoroskopi inntil tuppen til ledesonden er proksimalt til tuppen av det ledekateret.
- Fest enheten for dreiemoment til ledesonden om nødvendig.

- |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| f) Flytt ledesonden frem under fluoroskopi og passer gjennom lesjonen. Bekreft med angiografi at ledesonden har passert den innsnevrede delen av mållesjonen.                      | og dens plassering i blodåren blir synlig under manipulasjon av intervensjonsenheten.              |
| g) Observer ledesondens bevegelse i blodåren.                                                                                                                                      | 4. Prosedyrer for å bytte ut ledesonden                                                            |
| h) Fjern ledesondens vridningsenhet og innføringssettet til ledesonden.                                                                                                            | ■ Over-the-wire-systemet                                                                           |
| i) Spor intervensjonsenheten over ledesonden mens du hindrer ledesonden i å bevege seg, og før den fremover inntil lesjonen er nådd. Sørg for at den distale tuppen til ledesonden | a) Fjern ledesonden sakte mens ledesondens bevegelse overvåkes under fluoroskopi.                  |
|                                                                                                                                                                                    | b) Sett inn den neste ledesonden i samsvar med retningslinjene i denne "Anbefalt prosedyre"-delen. |

### Oppbevaring

Ikke oppbevar ledesonden og emballasjen i bøyd stilling eller med svært tung belastning. Denne ledesonden og emballasjen skal holdes borte fra vann. Oppbevares mørkt, tørt og kjølig.

### Holdbarhetsdato

Holdbarhetsdatoen er angitt på etiketten på ledesondens emballasje.

### Innhold

5 stk/eske

### Ansvarsfraskrivelse

“ASAHI INTECC CO., LTD. og dets tilsluttede selskaper” (heretter kalt “selskapet”) skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for ulykker, personskader, ugunstige effekter fra uriktig bruk av produktet eller produktene eller annen bruk som ikke er i overensstemmelse med disse instruksjonene. Selskapet skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for skader (i) som oppstår på grunn av hvordan produktet/-ene oppbevares etter forsendelse fra Selskapet, eller (ii) på grunn av pasientutvalg, kirurgiske teknikker eller noen andre medisinske aktiviteter ved helseinstitusjonen som bruker produktet/-ene.

“ASAHI Miracle”, “MIRACLEbros”, “Grand Slam” og “EXTENSION” er varemerker eller registrerte varemerker for ASAH I INTECC CO., LTD. i Japan og andre land.

## Rad ASAHI Miracle/MIRACLEbros Grand Slam Vodiaci drôt PCI

Návod na použitie

**Pred použitím vodiaceho drôtu si pozorne prečítajte tento návod na použitie a dodržiavajte pokyny uvedené v častiach Indikácie na použitie, Kontraindikácie, Upozornenia, Bezpečnostné opatrenia a Spôsob použitia. Ak tak neurobíte, môže dôjsť ku komplikáciám, vrátane vážneho zranenia alebo smrti pacienta.**

Ak sa používateľ a/alebo pacient dozvie o závažnom incidente, ku ktorému došlo v súvislosti s vodiacim drôtom, musí túto skutočnosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému úradu členského štátu.

Tento návod na použitie sa vzťahuje na rady ASAHI Miracle, MIRACLEbros a Grand Slam. Podrobnosti (dĺžka vodiaceho drôtu, dĺžka kontrastnej časti a pod.) nájdete na etikete výrobku.

### Popis

Základná štruktúra tohto vodiaceho drôtu pozostáva z kužeľového jadrového drôtu a cievky. Kužeľový jadrový drôt a cievka sú spájkované. Dĺžka cievky je röntgenkontrastná, vďaka čomu možno ľahko potvrdiť jej polohu pomocou rádioskopie.

Distálny povrch je potiahnutý hydrofóbnou (silikónovou) povrchovou vrstvou a proximálny povrch je potiahnutý PTFE (polytetrafluóretylénom). Na proximálnom konci iných pomôcok ako tých s celkovou dĺžkou 300 cm sa nachádza prípojka pre predlžovací drôt, ktorý sa používa na nahradenie kombinovanej pomôcky. Je možné pripojiť predlžovací drôt od spoločnosti ASAHI INTECC.

V tabuľke nižšie je uvedené zaťaženie špičky\* pre tento produkt.

Tabuľka 1. Špecifikácie produktu

| Názov produktu                  | Vonkajší priemer      | Zaťaženie špičky* |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| ASAHI Miracle 3/MIRACLEbros 3   | 0,36 mm (0,014 palca) | 3,0 gf            |
| ASAHI Miracle 6/MIRACLEbros 6   | 0,36 mm (0,014 palca) | 6,0 gf            |
| ASAHI Miracle 12/MIRACLEbros 12 | 0,36 mm (0,014 palca) | 12,0 gf           |
| Grand Slam                      | 0,36 mm (0,014 palca) | 0,7 gf            |

\* Hodnoty zaťaženia špičky predstavujú priemerné hodnoty hodnôt špecifikácie produktu namerané podľa internej štandardnej testovacej metódy za predpokladu sily pôsobiacej na léziu špičkou vodiaceho drôtu.

### Indikácie na použitie

Tento vodiaci drôt je určený na všeobecnú perkutánnu koronárnu intervenciu (PCI). Tento vodiaci drôt je určený na uľahčenie umiestnenia balónikových dilatčných katétrov alebo iných intervenčných terapeutických pomôcok do kardiovaskulárneho systému.

**Tento vodiaci drôt nie je určený na použitie v neurovaskulatúre a periférnej vaskulatúre.**

### Cieľová liečená populácia

Rady ASAHI Miracle, MIRACLEbros a Grand Slam sú určené pre pacientov, ktorí spĺňajú indikácie na PCI. Nie sú indikované na použitie u novorodencov, dojčiat alebo detí, ani u pacientiek, ktoré sú tehotné, majú poruchu funkcie obličiek a alergickú reakciu na kontrastné látky.

### Kontraindikácie

- Pred samotným použitím overte kompatibilitu priemeru vodiaceho drôtu s inou intervenčnou pomôckou.
- Vodiaci drôt nepoužívajte u pacientov s alergickou reakciou na kontrastnú látku alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek.
- Nepoužívajte vodiaci drôt u tehotných pacientok alebo pacientok, ktoré môžu byť tehotné (röntgenové žiarenie môže ovplyvniť plod).
- Tento Vodiaci drôt sa smie používať v inštitúcii, kde sa môže okamžite vykonať pohotovostná chirurgická operácia. Ak nie je dostupná pohotovostná chirurgická operácia, v najhoršom prípade môže dôjsť k život ohrozujúcim udalostiam.
- Vodiaci drôt je vopred sterilizovaný plyným etylénoxidom (EOG) a je určený len na jedno použitie. Nepoužívajte ani nesterilizujúce opakované. Keby sa opakované použil alebo sterilizoval, mohla by sa narušiť funkčnosť alebo kvalita vodiaceho drôtu a hrozilo by riziko komplikácií, vrátane infekcie.

### Upozornenia

- Vodiaci drôt smie používať výhradne lekár, ktorý je úplne vyškolený v oblasti liečby PCI.
- Nikdy nepoužívajte tento vodiaci drôt v kombinácii s katétromi s kovovými časťami, ktoré sa môžu priamo dotýkať povrchu tohto vodiaceho drôtu (napr. atereotomické katétre, kovové dilatátory), kovovými ihlami alebo kovovými puzdrovými záväzákmi.
- Počas používania vodiaceho drôtu kontrolujte a monitorujte pohyb jeho špičku pod fluoroskopom. Nepoužívajte ho v oblastiach ciev, ktoré nemožno vizualizovať.
- Vodiaci drôt nespájajte s odnímateľnými predlžovacími drôtmí od iných výrobcov ako ASAHI INTECC. Nemanimulujte s vodiacim drôtom, kým je k nemu pripojený odnímateľný vodiaci drôt. Ináč sa vodiaci drôt poškodí alebo sa odpojíte predlžujúci drôt neúmyselne odpoji.
- Vodiaci drôt zo žiadneho dôvodu neupravujte.

### Bezpečnostné opatrenia

- Vodiaci drôt nepoužívajte po dátume expirácie uvedenom na etikete obalu. Zlikvidujte všetky vodiace drôty, ktoré sú po dátume expirácie.
- Vodiace drôty sú citlivé nástroje a je potrebné narábať s nimi opatrne.
- Ak je obal otvorený alebo poškodený, vodiaci drôt nepoužívajte. Obal otvárať až tesne pred použitím. Pri manipulácii s vodiacim drôtom, ako aj pri ich používaní, použite aseptickú techniku.
- Vodiaci drôt neutierajte pomocou organického roztoku, napríklad alkoholu.
- Po použití podniknite protiinfekčné preventívne opatrenia. Vodiaci drôt a obal zlikvidujte ako zdravotný odpad.
- Nikdy netlačte, neskrúčajte, nevyťahujte ani netoče vodiaci drôt takou silou, aby ste cítili odpor. Točenie alebo zatlačenie vodiaceho drôtu napriek odporu môže spôsobiť poškodenie vodiaceho drôtu a oddelenie jeho špičky alebo priame poškodenie ciev. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu vodiaceho drôtu. Pod fluoroskopickým pozorovaním určite príčinu odporu a podniknite potrebný nápravný krok.
- Vodiace drôty vždy zasúvajte alebo vyťahujte pomaly a opatrne.
- Počas krútenia vodiacim drôtom vnútri krvnej ciev nekrúťte ním stále tým istým smerom. Pri krútení vodiacim drôtom ho striedavo otáčajte v smere a proti smeru hodinových ručičiek. Dbajte na to, aby ste nevykonali viac ako dve rotácie (720°) tým istým smerom.
- Pri odstraňovaní a opätovnom zavádzaní vodiaci drôt opláchnite heparinizovaným a sterilizovaným fyziologickým roztokom alebo iným vhodným roztokom, aby sa zabránilo vniknutiu vzduchu do intervenčnej pomôcky. Výmenu vodiaceho drôtu vykonajte opatrne, aby nedošlo k vniknutiu vzduchu a/alebo vzniku

traumy. Pri opakovanom zavádzaní vodiaceho drôtu sa presvedčte, že špička intervenčnej pomôcky je v lúмене cievy voľná a že nesmeruje k stene cievy. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k úrazu. Polohu potvrdte pomocou kontrastnej značky intervenčnej pomôcky.

- Voľný pohyb vodiaceho drôtu v intervenčnej pomôcke je dôležitým príznakom ovládacieho systému vodiaceho drôtu, pretože používateľovi poskytuje cenné dotykové informácie. Pred použitím systému vyskúšajte, ako sa správa pri odpore. Nastavte alebo vymeňte hemostatický ventil pomocou nastavovacieho ventilu, ak je prítomný, aby ste zamedzili pohybu vodiaceho drôtu.
- Stent neumiestňujte pomocou viacerých vodiacich drôtov ani nemanipulujte s drôtom prostredníctvom výstupu stentu. V opačnom prípade sa stent môže poškodiť a vodiaci drôt sa môže zlomiť alebo roztrhnúť.
- Pred použitím sa uistite, že vodiaci drôt má vhodnú veľkosť a tvar pre daný postup a je kompatibilný s pomôckou, ktorú sa má použiť v kombinácii s ním.
- Pozrite si návod na použitie priložený k zdravotníckej pomôcke (napr. balónikové dilatčné katétre alebo inej intervenčnej

terapeutické pomôcky), ktorú sa má použiť v kombinácii s týmto vodiacim drôtom.

- Pri pripájaní odnímateľného predlžovacieho drôtu k tomuto vodiacemu drôtu by sa drôt mal bezpečne zaviesť po hraničnú líniu medzi vrstvou bez polytetrafluóretylénu (PTFE) a vrstvou z PTFE na proximálnom konci vodiaceho drôtu. Ak sa v pripojke zistí akákoľvek abnormalita, okamžite prestaňte vodiaci drôt používať.
- Pred použitím vodiaceho drôtu a kedykoľvek je to možné počas zákroku dôkladne skontrolujte, či vodiaci drôt nie je ohnutý, zauzlený alebo inak poškodený. Ak je vodiaci drôt poškodený, nepoužívajte ho.
- Pri tvarovaní špičky dávajte pozor, aby ste nepoškodili cievku.
- Pred zavedením vodiaceho drôtu skontrolujte, ktorý koniec je distálny, a dbajte na to, aby ste ho nezávážali z distálneho konca.
- Počas zákroku vykonávajte priebežné preplachovanie fyziologickým roztokom medzi vodiacim katétrom a intervenčnou pomôckou a medzi intervenčnou pomôckou a vodiacim drôtom. Preplachovanie zabraňuje tvorbe a/alebo zrážaniu kontrastnej látky na vodiacom drôte a v lúмене katétra.


kompatibilný s intervenčnými pomôckami, ktoré sa majú použiť.

## 2. Príprava

- a) Zvoľte najvhodnejší vodiaci drôt pre postihnutú oblasť a pridržiavaciú rúrku obsahujúcu vodiaci drôt vyberte zo sterilného obalu.
- b) Pridržiavaciú rúrku pomocou injekčnej striekačky naplňte heparinizovaným a sterilizovaným fyziologickým roztokom, aby sa navlhčila celá pomôcka. Pripomíname, že

počas tohto úkonu môže heparinizovaný a sterilizovaný fyziologický roztok vytiecť z pridržiavacej rúrky.

- c) Pred zavedením vodiaceho drôtu naplňte lúmen intervenčnej pomôcky heparinizovaným a sterilizovaným fyziologickým roztokom.
- d) Vodiaci drôt uvoľnite zo zadnej svorky a pomaly ho posúvajte, distálny koniec vodiaceho drôtu tlačte cez pridržiavaciú rúrku (B). (Obrázok 1)

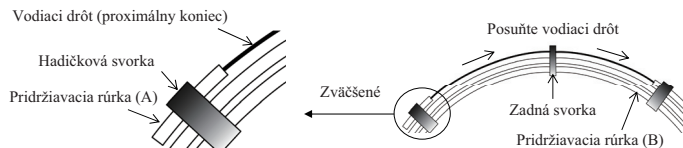

Obrázok 1

- e) Ak sa distálny koniec vodiaceho drôtu vysunie o viac ako 5 – 6 cm za opačný koniec pridržiavacej rúrky, upravte v prípade potreby tvar špičky podľa štandardného postupu.
- f) Jemne uchopte vodiaci drôt, ktorý vychádza z distálneho konca pridržiavacej rúrky v bode, ktorý je čo najbližšie k pridržiavacej rúrke, a vodiaci drôt pomaly a opatrne vytiahnite.
- g) Ak pri vytáňovaní vodiaceho drôtu z pridržiavacej rúrky pocítite odpor, znovu vstreknite do pridržiavacej rúrky heparinizovaný a sterilizovaný fyziologický roztok. Keď sa odpor stratí, pokračujte vo vytáňovaní vodiaceho drôtu. Dbajte na to, aby ste do pridržiavacej rúrky vstrekli dostatok heparinizovaného a sterilizovaného fyziologického roztoku, pretože pri násilnom vytáňovaní vodiaceho drôtu sa môže poškodiť.
- h) Po vytiahnutí vodiaceho drôtu z pridržiavacej rúrky sa presvedčte, či nie je poškodený.

jeho špička nedostane najbližšie k špičke intervenčnej pomôcky.

- c) Nasadíte vodiaci katéter a zavedte systém intervenčnej pomôcky (s vodiacim drôtom) do Y-konektora.
- d) Systém intervenčnej pomôcky zasúvajte cez vodiaci katéter, až kým sa špička systému vodiaceho drôtu nedostane najbližšie k špičke vodiaceho katétra.
- e) Utiahnite hemostatický ventil Y-konektora, aby sa vytvorilo utesnenie okolo intervenčnej pomôcky. Ubezpečte sa, že pohyb vodiaceho drôtu je ešte stále možný.
- f) Kontrolou sa presvedčte, že sa vodiaci drôt hladko pohybuje.
- g) V prípade potreby pripevnite k vodiacemu drôtu torzné zariadenie.
- h) Vodiaci drôt zasúvajte pod fluoroskopickým pozorovaním, až kým neprejde cez léziu. Angiografiu overte, či vodiaci drôt prešiel zúženou cieľovou léziou.
- i) Sledujte pohyb vodiaceho drôtu v cievach.
- j) Intervenčnú pomôcku zasúvajte, až kým sa nedostane k lézii, pričom zabráňte pohybu vodiaceho drôtu. Zabezpečte, aby bola distálna špička vodiaceho drôtu a jej poloha v cieve viditeľná počas manipulácie s intervenčnou pomôckou.

## 3. Postupy pre zavedenie

- Systém Over the wire (OTW)

- a) Distálny koniec vodiaceho drôtu opatrne zavedte do lúmenu pre vodiaci drôt intervenčnej pomôcky.
- b) Opatrne zasúvajte vodiaci drôt, až kým sa

## Poruchy činnosti a nežiaduce účinky

K možným poruchám činnosti a nežiaducim účinkom pri používaní vodiaceho drôtu okrem iného patria:

### 1. Porucha činnosti

|                           |                                        |                                      |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Neúspešný prechod léziou  | Zlomenie alebo ohnutie vodiaceho drôtu | Poškodenie, ako napríklad oddelenie  |
| Ťažkosti pri odstraňovaní | Odlúpenie povrchovej vrstvy            | Úlomky z poškodeného vodiaceho drôtu |

### 2. Nežiaduce účinky

|                        |                      |                |
|------------------------|----------------------|----------------|
| Úmrtie                 | Infekcia             | Disekcia ciev  |
| Perforácia ciev        | Krvávacé komplikácie | Embólia        |
| Trombus                | Infarkt              | Ischémia       |
| Arytmia                | Vazospazmus          | Cievna oklúzia |
| Zníženie krvného tlaku | Alergická reakcia    |                |

## Spôsob použitia

### 1. Kontrola pred použitím

- a) Pred použitím dôkladne skontrolujte a overte, či vodiaci drôt a obal nie sú poškodené.
- b) Pred použitím sa presvedčte, že vodiaci drôt je

#### ■ Systém Rapid exchange (RX)

- a) Nasadíte vodiaci katéter.
- b) Zavádzač vodiaceho drôtu zaved'ite do Y-konektora vodiaceho katétra.
- c) Opatrne zaved'ite špičku vodiaceho drôtu do zavádzača.
- d) Vodiaci drôt zasúvajte cez vodiaci katéter pod fluoroskopickým pozorovaním, až kým sa špička vodiaceho drôtu nedostane najbližšie k špičke vodiaceho katétra.
- e) V prípade potreby pripevnite k vodiacemu drôtu torzné zariadenie.
- f) Vodiaci drôt zasúvajte pod fluoroskopickým pozorovaním tak, aby prešiel cez léziu. Angiografiou overte, či vodiaci drôt prešiel zúženou cieľovou léziou.
- g) Sledujte pohyb vodiaceho drôtu v cievach.

h) Odstráňte torzné zariadenie vodiaceho drôtu a zavádzač vodiaceho drôtu.

- i) Ved'ite intervenčnú pomôcku po vodiacom drôte, pričom zabráňte pohybu vodiaceho drôtu, a zasúvajte ju až kým sa nedostane k lézii. Zabezpečte, aby bola distálna špička vodiaceho drôtu a jej poloha v cieve viditeľná počas manipulácie s intervenčnou pomôckou.

#### 4. Postupy na výmenu vodiaceho drôtu

##### ■ Systém Over the wire (OTW)

- a) Vodiaci drôt pomaly odstraňujte, pričom sledujte pohyb vodiaceho drôtu pod fluoroskopickým pozorovaním.
- b) Zaved'ite ďalší vodiaci drôt v súlade s pokynmi v časti Spôsob použitia.

### Spôsob uschovávania

Vodiaci drôt a jeho obal nenechávajte ohnutý a/alebo vystavený príliš veľkej záťaži. Vodiaci drôt a jeho obal chráňte pred vodou. Uchovávajte na chladnom, tmavom a suchom mieste.

### Dátum expirácie

Dátum expirácie je vyznačený na štítku na obale vodiaceho drôtu.

### Obsah

5 kusov v jednej škatuli

### Zrieknutie sa zodpovednosti

Spoločnosť „ASAHI INTECC CO., LTD. a jej pridružené spoločnosti“ (ďalej len „Spoločnosť“) nebude niesť žiadnu zodpovednosť za úrazy, osobné zranenia, nežiaduce účinky zapríčinené nesprávnym používaním produktu (produktov) alebo iným používaním, ktoré nie je v súlade s týmto návodom. Spoločnosť nie je v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne škody vyplývajúce (i) zo skladovania produktu (produktov) po odoslaní zo spoločnosti ani (ii) z dôvodu výberu pacientov, chirurgických postupov alebo iných lekárskejších činností zo strany zdravotníckych zariadení, kde sa produkt (produkty) používa.

„ASAHI Miracle“, „MIRACLEbros“, „Grand Slam“ a „EXTENSION“ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti ASAHI INTECC CO.,LTD. v Japonsku a ďalších krajinách.

## Seeriad ASAHI Miracle / MIRACLEbros Grand Slam PCI juhtetraat

Kasutusjuhend

Enne juhtetraadi kasutamist lugege hoolikalt käesolevaid juhiseid ja järgige selle kasutusjuhendi peatükke „Kasutusnäidustused“, „Vastunäidustused“, „Hoiatused“, „Ettevaatusabinõud“ ja „Kasutamine“. Selle teabe eiramine võib viia tüsistusteni, kaasa arvatud patsiendi tõsine vigastus või surm.

Kui kasutaja ja/või patsient saab teada tõsisest vahejuhtumist, mis juhtetraadiga seoses aset leidis, tuleb tootjat ja liikmesriigi pädevat asutust sellest teavitada.

Need kasutusjuhendid kehtivad seeriate ASAHI Miracle ja MIRACLEbros ning Grand Slami jaoks. Andmeid (juhtetraadi pikkus, röntgenkontrastse osa pikkus jne) vaadake tootesildilt.

### Kirjeldused

Selle juhtetraadi põhistruktuur koosneb koonilisest südamiku traadist ja spiraalst. Kooniline südamiku traat ja spiraal on joodetud. Spiraali pikkus on röntgenkontrastne, nii et selle asendit saab radioskoopilise vaatlusega hõlpsasti kontrollida.

Distaalne pind on kaetud hüdrofoobse (silikoon) kattega ja proksimaalne pind on kaetud PTFE-ga (polütetrafluoreetüleen). Muude kui 300 cm kogupikkusega seadmete proksimaalses otsas on ühendus pikendusjuhtme jaoks, mida kasutatakse kombineeritud seadme asendamiseks, ja sellega saab ühendada ASAHI INTECC-i pikendusjuhtme.

Selle toote otsa koormuse\* leiate allolevast tabelist.

Tabel 1. Toote spetsifikatsioonid

| Toote nimi                        | Välisläbimõõt         | Otsa koormus* |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
| ASAHI Miracle 3 / MIRACLEbros 3   | 0,36 mm (0,014 tolli) | 3,0 gf        |
| ASAHI Miracle 6 / MIRACLEbros 6   | 0,36 mm (0,014 tolli) | 6,0 gf        |
| ASAHI Miracle 12 / MIRACLEbros 12 | 0,36 mm (0,014 tolli) | 12,0 gf       |
| Grand Slam                        | 0,36 mm (0,014 tolli) | 0,7 gf        |

\* Otsa koormuse väärtused tähistavad keskmisi toote tehnilisi väärtusi, mis on mõõdetud standardse rahvusvahelise testimismeetodiga, mille kohaselt avaldatakse juhtetraadi otsaga lesionile jõudu.

### Näidustused

See juhtetraat on mõeldud üldiseks perkutaanseks koronaarinterventsiooniks (PCI). See juhtetraat on ette nähtud balloondilatatsiooniga kateetrite või muude sekkumisraviseadmete paigutamiseks kardiovaskulaarsüsteemi.

See juhtetraat ei ole ette nähtud kasutamiseks neurovaskulaarses ja perifeerses veresoontkonnas.

### Ravi sihtrühm

Seeriad ASAHI Miracle ja MIRACLEbros ning Grand Slam on ette nähtud patsientidele, kes vastavad PCI protseduuride näidustustele. See ei ole ette nähtud kasutamiseks vastündinutel, imikutel, lastel ega rasedatel, neerufunktsiooni häirega patsientidel või neil, kel on allergiline reaktsioon kontrastaine suhtes.

### Vastunäidustused

- Kontrollige enne tegelikku kasutamist juhtetraadi läbimõõdu ühilduvust muu sekkumiseadmega.
- Ärge kasutage juhtetraati patsientidel, kellel on kontrastaine suhtes allergiline reaktsioon või kellel on neerufunktsiooni häire.
- Ärge kasutage juhtetraati rasedate või potentsiaalselt rasedate patsientide puhul (röntgenkiirgus võib loodet mõjutada).
- Seda juhtetraati tohib kasutada vaid asutuses, kus on võimalik erakorralise kirurgilise operatsiooni viivitamatu teostamine. Kui erakorralise

kirurgilise operatsiooni tegemise võimalus puudub, võivad halvimal juhul tekkida surmaga lõppevad tüsistused.

- See juhtetraat on eelsteriliseeritud etüleenoksiidiga (EO) ja on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks. Ärge kasutage ega steriliseerige korduvalt. Korduv kasutamine või korduv steriliseerimine võib halvendada juhtetraadi kvaliteeti ja kahjustada selle pakendit, ning sellega kaasneb komplikatsioonide risk, kaasa arvatud infektsioonirisk.

### Hoiatused

- Seda juhtetraati tohib kasutada vaid PCI protseduuri ajal täieliku koolituse saanud arst.
- Ärge kunagi kasutage seda juhtetraati koos kateetritega, millel on metallosad, mis võivad otse selle juhtetraadi pinnaga kokku puutuda (nt aterektoomia kateetrid, metallist dilataatorid), metallist nõelte ega metallist hülsiga sisestajatega.
- Juhtetraadi kasutamise ajal kontrollige ja jälgige selle otse liikumist röntgenoloogiliselt. Ärge

kasutage veresoone piirkondades, mille visualiseerimine ei ole võimalik.

- Ärge ühendage selle juhtetraadi külge eemaldatavaid pikendustraate, mille tootja on muu kui ettevõtte ASAHI INTECC. Ärge käsitsesge seda juhtetraati, kui eemaldatav pikendustraat on ühendatud. Vastasel juhul võib kahjustada juhtetraati või eemaldatava pikendustraadi tahtmatult lahti ühendada.
- Ärge muutke juhtetraati ühelgi põhjusel.

### Ettevaatusabinõud

- Ärge kasutage juhtetraati pärast sildil toodud aegumiskuupäeva möödumist. Aegumiskuupäeva ületanud juhtetraadid tuleb ära visata.
- Juhtetraadid on õrnad instrumendid ja neid tuleb käsitseda ettevaatlikult.
- Ärge kasutage juhtetraati, kui pakend on avatud või kahjustatud. Avage pakend alles vahetult enne kasutamist. Kasutage juhtetraadi käsitlemisel aseptilist tehnikat.
- Ärge pühkige juhtetraati orgaanilise lahusega, näiteks alkoholiga.
- Võtke tarvitusele ennetavad meetmed kasutusjärgse infektsiooniohu vältimiseks. Kõrvaldage juhtetraat ja pakend kui meditsiinilised jäätmed.
- Ärge kunagi lükake, keerake, tõmmake välja ega pöörake juhtetraati, mille osas on tunda takistust. Juhtetraadi pööramine või lükkamine takistuse

vastu võib juhtetraati kahjustada ja/või põhjustada juhtetraadi otsa eraldumist või otseselt kahjustada veresoont. Selle eiramine võib juhtetraati kahjustada. Tehke takistuse põhjus röntgenoloogiliselt kindlaks ja kõrvaldage see.

- Lükake juhtetraati edasi ja tõmmake välja alati aeglaselt ja ettevaatlikult.
- Juhtetraadi pööramisel veresoone sees ärge pöörake seda pidevalt ühes suunas. Seadme pööramisel pöörake seda vaheldumisi päripäeva ja vastupäeva. Ärge pöörake ühes suunas järjest rohkem kui kaks täispöört (kuni 720°).
- Juhtetraadi eemaldamisel ja uuesti sisestamisel loputage seda hepariniseeritud ja steriliseeritud füsioloogilise lahuse või muu sobiva lahusega, et takistada õhu sattumist röntgenoloogilisse seadmesse. Vahetage juhtetraati ettevaatlikult, et vältida õhu sisenemist ja/või trauma tekkimist.

Juhtetraadi uuesti sisestamisel veenduge, et röntgenoloogilise seadme ots oleks vabalt veresoone valendikus ega puutuks vastu veresoone seina. Vastasel juhul tekib vigastuste oht. Asukoha kinnitamiseks kasutage röntgenoloogilise seadme röntgenkontrastset markerit.

- Juhtetraadi vaba liikumine röntgenoloogilises seadmes on juhitava juhtetraadi süsteemi oluline funktsioon, kuna see annab kasutajale väärtuslikku taktiilset teavet. Enne kasutamist kontrollige süsteemi mis tahes takistuste suhtes. Kui hemostaatiline klapp takistab juhtetraadi liikumist, reguleerige hemostaatilist klappi või vahetage see välja reguleeritava klapi vastu.
- Ärge sisestage stenti kasutades enam kui ühte juhtetraati või kui käsitsete traati läbi stendi seina. Vastasel juhul võib stent kahjustada või juhtetraat võib puruneda või lahti tulla.
- Enne kasutamist veenduge, et juhtetraat oleks protseduuri jaoks sobiva suuruse ja kujuga ning ühilduks kombineeritud kasutatava seadmega.
- Vaadake selle juhtetraadiga koos kasutatava selle külge kinnitatava meditsiiniseadme (nt

balloondilatatsiooni kateetrid või muud sekkumisraviseadmed) kasutusjuhendit.

- Juhtetraadiga ühendamiseks tuleb eemaldatav pikendustraaf kindlalt sisestada juhtetraadi proksimaalse otsa mitte-PTFE katte ja PTFE katte piirile. Kui ühenduses avastatakse häireid, lõpetage juhtetraadi kasutamine kohe.
- Kontrollige juhtetraati hoolikalt painutuskohtade, keerdude ja muude kahjustuste suhtes enne kasutamist ja igal võimalikul ajal protseduuri jooksul. Ärge kasutage juhtetraati, kui see on kahjustatud.
- Olge otsa vormimisel ettevaatlik, et spiraali mitte kahjustada.
- Enne juhtetraadi sisestamist kontrollige, milline ots on distaalne ots, ja sisestage see kindlasti distaalsest otsast.
- Protseduuri ajal säilitage juhtekateetri ja sekkumisseadme ning sekkumisseadme ja juhtetraadi vaheline pidev loputamine. Loputamine hoiab ära kontrastaine moodustumise ja/või hüübimise juhtetraadil ja kateetri luumenis.

## Tõrked ja kõrvaltoimed

Juhtetraadi kasutamisest tingitud võimalike tõrgete ja kõrvaltoimete hulka kuuluvad muuhulgas järgmised.

### 1. Talitlushäired

|                                       |                                        |                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Kahjustuskoha läbimise ebaõnnestumine | Juhtetraadi purunemine või kõverdumine | Kahjustus, näiteks eraldumine  |
| Keeruline eemaldada                   | Katte eraldumine                       | Kahjustatud juhtetraadi jäägid |

### 2. Kõrvaltoimed

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Surm                    | Infektsioon            | Veresoone dissektsioon |
| Veresoone perforatsioon | Veritsustüsistused     | Emboolia               |
| Tromb                   | Kärbumine              | Isheemia               |
| Arütmia                 | Vasospasm              | Vaskulaarne oklusioon  |
| Vererõhu langus         | Allergiline reaktsioon |                        |

## Kasutamine

### 1. Kasutuseelne kontrollimine

- Enne kasutamist kontrollige juhtetraati ja pakendit hoolikalt ja veenduge, et need oleksid kahjustamata.
- Enne kasutamist veenduge, et juhtetraat ühilduks kasutatavate menetlusradioloogiliste

seadmetega.


### 2. Ettevalmistus

- Valige kahjustatud ala jaoks sobivaim juhtetraat ja eemaldage hoidiktoru koos juhtetraadiga steriilselt pakendist.

- Täitke hoidiktoru hepariniseeritud ja steriliseeritud füsioloogilise lahusega, kasutades kogu seadme märjaks tegemiseks süstalt. Arvestage, et sellel ajal võib hepariniseeritud ja steriliseeritud füsioloogiline lahus hoidiktorust välja pritsida.

Juhtetraat (proksimaalne ots)

Toru klamber  
Hoidiktoru (A)

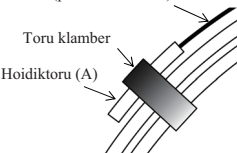

Tõmmake (libistage) juhtetraat tagasi

Suurendatult

Sabaklamber

Hoidiktoru (B)

Joonis 1

- Kui juhtetraadi distaalne ots on hoidiku toru teisest otsast rohkem kui 5 kuni 6 cm väljas, siis võite vajaduse korral muuta otsa kuju vastavalt tavapärasele praktikale.
- Haarake õrnalt juhtetraadist, mis väljus hoidiku toru distaalsest otsast, võimalikult hoidiku toru lähedalt ja tõmmake juhtetraat aeglaselt ja ettevaatlikult välja.
- Kui juhtetraadi eemaldamisel hoidiktorust on tunda takistust, süstige hepariniseeritud ja steriliseeritud füsioloogilist lahust uuesti hoidiktorusse. Jätake juhtetraadi eemaldamist kui takistust pole enam tunda. Veenduge, et süstiksite hoidiktorusse piisavalt hepariniseeritud ja steriliseeritud füsioloogilist lahust, sest see võib kahjustada, kui juhtetraadi eemaldamisel kasutatakse jõudu.
- Pärast juhtetraadi hoidiktorust välja tõmbamist kontrollige, et see ei oleks kahjustatud.

### 3. Sisestamismeetodid

#### ■ Üle traadi süsteem

- Sisestage juhtetraadi distaalne ots ettevaatlikult röntgenoloogilise seadme juhtetraadi valendikku.
- Lükake juhtetraati ettevaatlikult edasi, kuni selle ots on röntgenoloogilise seadme otsa suhtes täpselt proksimaalselt.
- Haarake juhtekateeter ja sisestage röntgenoloogilise seadme süsteem (koos juhtetraadiga) Y-konnektoris.
- Lükake röntgenoloogilise seadme süsteemi läbi juhtekateetri kuni juhtetraadi süsteemi ots on juhtekateetri otsa suhtes täpselt

- Täitke röntgenoloogilise seadme valendik hepariniseeritud ja steriliseeritud füsioloogilise lahusega enne juhtetraadi sisestamist.
- Vabastage juhtetraat sabaklambrist ja libistage, lükates juhtetraadi distaalset otsa aeglaselt läbi hoidiktoru (B). (Joonis 1)

proksimaalselt.

- Pinguldage Y-konnektori hemostaatilist klappi, et röntgenoloogilise seadme ümber tekiks tihend. Veenduge, et juhtetraati saaks siiski liigutada.
- Kontrollige, et juhtetraat liiguks sujuvalt.
- Vajaduse korral kinnitage traadipööramise seade juhtetraadi külge.
- Lükake seda juhtetraati kahjustusest läbi minemiseks röntgenoloogilisel kontrollides edasi. Veenduge angiograafiliselt, et juhtetraat oleks läbinud vastava kitsenunud kahjustuskolde.
- Jälgige juhtetraadi liikumist veresoones.
- Lükake röntgenoloogilist seadet edasi kuni kahjustuseni ja hoidke samas juhtetraati liikumatuna. Veenduge, et juhtetraadi distaalne ots ja selle asukoht veresoones oleks röntgenoloogilise seadme kasutamise ajal nähtav.

#### ■ Kiire vahetamise süsteem

- Kinnitage juhtekateeter.
- Sisestage juhtetraadi sisestaja juhtekateetri Y-konnektoris.
- Sisestage juhtetraadi ots ettevaatlikult sisestajasse.
- Lükake röntgenoloogilisel kontrollides juhtetraati läbi juhtekateetri kuni juhtetraadi ots on juhtekateetri otsaga täpselt proksimaalselt.
- Vajaduse korral kinnitage traadipööramise seade juhtetraadi külge.
- Lükake juhtetraati kahjustusest läbi

minemiseks röntgenoloogiliselt kontrollides edasi. Veenduge angiograafiliselt, et juhtetraat oleks läbinud vastava kitsenenud kahjustuskolde.

g) Jälgige juhtetraadi liikumist veresoones.

h) Eemaldage juhtetraadi pööramiseade ja juhtetraadi sisestaja.

i) Tuvastage juhtetraadil olev röntgenoloogiline seade, hoidke samas juhtetraati liikumatuna, ja lükake edasi kuni kahjustuseni. Veenduge, et juhtetraadi

distaalne ots ja selle asukoht veresoones oleks röntgenoloogilise seadme kasutamise ajal nähtav.

4. Viisid juhtetraadi vahetamiseks

■ Üle traadi süsteem

a) Eemaldage see juhtetraat aeglaselt ja jälgige samas juhtetraadi liikumist röntgenoloogiliselt.

b) Sisestage järgmine juhtetraat vastavalt peatükis „Kasutamine” toodud juhiste.

## Hoiustamine

Ärge hoidke juhtetraati ja pakendit painutatuna ega suure raskuse all. Juhtetraati ja pakendit peab veest eemal hoidma. Hoidke jahedas, pimedas ja kuivas kohas.

## Aegumiskuupäev

Aegumiskuupäev on toodud juhtetraadi pakendi etiketil.

## Pakendi sisu

5 tükki karbis

## Vastutusest loobumise säte

„ASAHI INTECC CO., LTD.“ ja sellega seotud ettevõtted (edaspidi „ettevõtte“) ei vastuta mingil viisil õnnetuste, vigastuste ega kõrvaltoimete eest, mille põhjuseks on toote sobimatu kasutamine või käesoleva juhendi eiramine. Mitte ühelgi juhul ei ole ettevõtte vastutav mis tahes kahjude eest, mis tulenevad kas i) toote (toodete) hoiustamisest pärast ettevõttepoolset tarnimist või ii) patsientide, operatsioonitehnikate või mis tahes muude meditsiiniliste tegevuste valikust toodet (tooteid) kasutava meditsiinasutuse poolt.

„ASAHI Miracle“, „MIRACLEbros“, „Grand Slam“ ja „EXTENSION“ on ettevõtte ASAHI INTECC CO., LTD. registreeritud kaubamärgid Jaapanis ja teistes riikides.

## ASAHI Miracle / MIRACLEbros sērija

### Grand Slam

### PCI vadītājsfiga

### Lietošanas norādījumi

Pirms izmantot šo vadītājsfigu, rūpīgi izlasiet šos norādījumus un ievērojiet Lietošanas norādījumos ietvertu sadaļu "Lietošanas indikācijas", "Kontraindikācijas", "Brīdinājumi", "Piesardzības pasākumi" un "Kā lietot" informāciju. To neievērojot, var izraisīt sarežģījumus, tajā skaitā nopietnus pacienta savainojumus vai nāvi.

Ja lietotājs un/vai pacients uzzina par nopietnu negadījumu, kas radies saistībā ar vadītājsfigu, ziņojiet par šo faktu ražotājam un kompetentajai iestādei attiecīgajā dalībvalstī.

Šie lietošanas norādījumi attiecas uz ASAHI Miracle, MIRACLEbros sēriju un Grand Slam. Detalizētu informāciju (vadītājsfigas garumu, starojumu neausrūpīgās daļas garumu u. c.) skatiet izstrādājuma etiķetē.

### Apraksts

Šīs vadītājsfigas pamatkonstrukcija sastāv no koniskas sfīgas serdes un tinuma. Koniskā sfīgas serde un tinums ir lodēti. Tinums ir rentgenkontrastējošs, lai tā novietojumu varētu viegli apstiprināt rentgenoskopijas kontrolē.

Distālā virsma ir pārklāta ar hidroforu (silikona) pārklājumu un proksimālā virsma ir pārklāta ar PTFE (politetrafluoretilēnu). Ierīču, izņemot ierīces, kuru kopējais garums ir 300 cm, proksimālajā galā ir savienojuma vieta sfīgas pagarinājumam, kas tiek izmantots, lai aizstātu kombinēto ierīci. Turklāt šajā vietā var pievienot ASAHI INTECC sfīgas pagarinājumu.

Šī produkta uzgaļa slodzi\* skatiet tabulā tālāk.

1. tabula. Produkta specifikācijas

| Produkta nosaukums                | Ārējais diametrs       | Uzgaļa slodze* |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|
| ASAHI Miracle 3 / MIRACLEbros 3   | 0,36 mm (0,014 collas) | 3,0 gf         |
| ASAHI Miracle 6 / MIRACLEbros 6   | 0,36 mm (0,014 collas) | 6,0 gf         |
| ASAHI Miracle 12 / MIRACLEbros 12 | 0,36 mm (0,014 collas) | 12,0 gf        |
| Grand Slam                        | 0,36 mm (0,014 collas) | 0,7 gf         |

\*Uzgaļa slodzes vērtības atspoguļo produkta specifikācijas vērtību vidējās vērtības, kas izmēritas saskaņā ar iekšējo standarta testēšanas metodi, nosakot spēku, ar kādu vadītājsfigas uzgalis iedarbojas uz bojājumu.

### Lietošanas indikācijas

Šo vadītājsfigu ir paredzēts izmantot vispārīgās perkutānās koronārās intervences (PCI) procedūrās. Šī vadītājsfiga ir paredzēta, lai atvieglotu balondilatācijas katetru vai citu invazīvu terapeitisko ierīču ievietošanu sirds un asinsvadu sistēmā.

Vadītājsfigu nav paredzēts izmantot neirovaskulārās un perifēro asinsvadu procedūrās.

### Ārstējamā mērķa populācija

ASAHI Miracle, MIRACLEbros sērija un Grand Slam ir paredzētas pacientiem, kuri atbilst PCI procedūru indikācijām. Tās nav indicētas lietošanai jaundzimušajiem, zīdaiņiem vai bērniem, kā arī pacientiem, kuri ir grūtnieces, kuriem ir nieru darbības traucējumi vai kuriem ir alerģiska reakcija pret kontrastvielu.

### Kontraindikācijas

- Pirms faktiskās izmantošanas pārbaudiet vadītājsfigas diametra atbilstību citām ķirurģiskajām ierīcēm.
- Neizmantot šo vadītājsfigu pacientiem, kuriem ir alerģiska reakcija pret kontrastvielu vai kuriem ir nieru darbības traucējumi.
- Neizmantot vadītājsfigu grūtniecēm vai pacientēm, kurām varētu būt iestājusies grūtniecība (rentgenstari var ietekmēt augli).
- Šī vadītājsfiga jāizmanto iestādē, kur var tūlītīgi veikt ķirurģisku operāciju. Ja nav pieejama tūlītēja ķirurģiskas operācijas iespēja, launākajā gadījumā var tikt izraisīti dzīvībai bīstami notikumi.
- Šī vadītājsfiga ir iepriekš sterilizēta ar etilēnoksidu gāzi (EOG) un paredzēta tikai vienreizējai lietošanai. Neizmantot, ja nesterilizēti atkārtoti. Ja to izmanto atkārtoti vai atkārtoti sterilizē, šīs vadītājsfigas un iepakojuma veiktspēja vai kvalitāte var tikt apdraudēta, un pastāv komplikācijas, tostarp, infekcijas risks.

### Brīdinājumi

- Šo vadītājsfigu drīkst lietot tikai ārsti, kas ir pilnībā apmācīti PCI.
- Nekad neizmantot vadītājsfigu kopā ar katetriem, kam ir metāla detaļas, kas var tieši saskarties ar šīs vadītājsfigas virsmu (piemēram, atsektomijas katetri, metāla dilatatori), metāla adatām vai metāla apvalka ievadītājiem.
- Vadītājsfigas lietošanas laikā pārbaudiet un uzraugiet tās uzgaļa kustību fluoroskopijas kontrolē. Nelietojiet tajās asinsvadu vietās, kuras netiek vizualizētas vai nevar vizualizēt.
- Nepievienojiet šo vadītājsfigu atvienojamiem sfīgas pagarinājumiem, kas nav ASAHI INTECC ražojums. Neveiciet manipulācijas ar vadītājsfigu, kamēr ir pievienots atvienojamais sfīgas pagarinājums. Pretējā gadījumā var sabojāties vadītājsfiga vai var netīšām atvienoties atvienojamais vadītājsfigas pagarinājums.
- Nekādā gadījumā nemodificējiet šo vadītājsfigu.

### Piesardzības

- Nelietojiet vadītājsfigu pēc etiķetē norādītā derīguma termiņa beigām. Izmetiet visas vadītājsfigas, kuru derīguma termiņš ir beidzies.
- Vadītājsfigas ir traušli instrumenti, tāpēc ar tām jārikojas uzmanīgi.
- Ja iesaiņojums ir atvērts vai bojāts, nelietojiet šo vadītājsfigu. Neatveriet iesaiņojumu līdz pašai lietošanai. Pārveicot un izmantojot vadītājsfigu, izmantojiet aseptisku tehniku.
- Neslaukiet vadītājsfigu, izmantojot organisku šķidrumu, piemēram, alkoholu.
- Pēc lietošanas veiciet profilakses pasākumus, lai nepieļautu infekciju. Izmetiet vadītājsfigu un tās iepakojumu kā medicīnas atkritumus.
- Nekādā gadījumā nestumiet, negrieziet, neizvelciet un nspiediet šo vadītājsfigu, ja ir jūtama pretestība. Stumjot vai spiežot šo vadītājsfigu ar spēku, iespējama vadītājsfigas sabojāšana un/vai uzgaļa atdalīšanās, kā arī iespējami tieši asinsvadu bojājumi. To neievērojot, šai vadītājsfigai var rasties bojājumi. Ar fluoroskopijas palīdzību nosakiet pretestības cēloni un veiciet visas nepieciešamās korektīvās darbības.
- Vienmēr virziet vai izņemiet vadītājsfigas lēnām un uzmanīgi.
- Grozot šo vadītājsfigu asinsvadā, negroziet to nepārtraukti vienā virzienā. Griežot vadītājsfigu, griežiet to pamišus pulksteņrādītāju kustības virzienā un pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Neveiciet vairāk nekā divus apgriezienus (720°) vienā virzienā.
- Ņemot un no jauna ievietojot vadītājsfigu, noskalojiet to ar sterilizētu heparinizētu fizioloģisko šķidrumu, lai nepieļautu gaisa iekļūvi ķirurģiskajā ierīcē. Uzmanīgi veiciet šīs vadītājsfigas nomaiņu, lai nepieļautu gaisa iekļūvi un/vai traumas. Ievadot vadītājsfigu no

jauna, pārliecinieties, vai ķirurģiskās ierīces gals ir brīvs asinsvada lūmenā un nepiekaras asinsvada sienai. To neievērojot, var izraisīt asinsvada traumas. Lai apstiprinātu pozīciju, izmantojiet starojuma necaurlaidīgu ķirurģiskās ierīces marķieri.

- Brīva vadītājsstīgas kustība ķirurģiskajā ierīcē ir svarīga vadāmās vadītājsstīgas sistēmas funkcija, jo lietotājam tā nodrošina vērtīgu taustes informāciju. Pirms lietošanas pārbaudiet sistēmu, vai nav nekādas pretestības. Ja konstatējat, ka hemostatiskais vārsts kavē vadītājsstīgas kustību, koriģējiet to vai aizstājiet ar regulējamu vārstu.
- Neveiciet stenta ievietošanu, izmantojot vairāk nekā vienu vadītājsstīgu vai asinsvada operāciju cauri stenta sienai. Pretējā gadījumā stents var tikt bojāts vai vadītājsstīga var salūzt vai pārlūzt.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ir izvēlēts procedūrai atbilstošs vadītājsstīgas izmērs un forma un vai tā ir saderīga ar ierīci, ko paredzēts lietot kombinācijā ar šo vadītājsstīgu.
- Skatiet lietošanas instrukciju, kas pievienota medicīnas ierīcei (piemēram, balona dilatācijas

katetri vai citas invazīvas terapeitiskās ierīces), ko paredzēts lietot kopā ar šo vadītājsstīgu.

- Savienojot ar vadītājsstīgu atvienojamo vadītājsstīgas pagarinājumu, tas stingri jāievieto līdz robežlīnijai starp ne PTFE un PTFE pārklājumu vadītājsstīgas proksimālajā galā. Ja savienojumā ir novērojama jebkāda problēma, nekavējoties pārtrauciet vadītājsstīgas izmantošanu.
- Pirms lietošanas un procedūras veikšanas laikā (kad vien iespējams) uzmanīgi pārbaudiet vadītājsstīgu, vai nav liekumu, mezglu vai citu bojājumu. Nelietojiet vadītājsstīgu, ja tai ir bojājumi.
- Uzgaļa veidošanas laikā rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu tīnumu.
- Pirms vadītājsstīgas ievietošanas pārbaudiet, kurš ir distālais gals, un sāciet ievietošanu ar distālo gala.
- Procedūras laikā uzturiet nepārtrauktu skalošanu ar fizioloģisko šķidrumu starp virzītājkatetri un ķirurģisko ierīci, kā arī starp ķirurģisko ierīci un vadītājsstīgu. Skalošana novērš kontrastvielās krāsošanu un/vai recēšanu uz vadītājsstīgas un katetra lūmenā.

## Darbības traucējumi un blakusparādības

Izmantojot šo vadītājsstīgu, iespējamie darbības traucējumi un blakusparādības ietver, bet neaprobežojas ar tālāk norādītajiem.

### 1. Darbības traucējumi

|                                |                                        |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nespēja šķērsot bojājuma vietu | Vadītājsstīgas salūšana vai saliekšāns | Bojājums, piemēram, atdalīšanās  |
| Grūtības izņemt                | Pārklājuma atdalīšanās                 | Bojātas vadītājsstīgas fragmenti |

### 2. Blakusparādības

|                              |                        |                          |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Nāve                         | Infekcija              | Asinsvada disekcija      |
| Asinsvada perforācija        | Asiņošanas sarežģījumi | Embolija                 |
| Trombi                       | Infarkts               | Išēmija                  |
| Aritmija                     | Asinsvadu spazmas      | Asinsvadu aizsprostojums |
| Asinsspiediena pazemināšanās | Alerģiska reakcija     |                          |

## Lietošana


### 1. Pārbaude pirms lietošanas

- a) Pirms lietošanas uzmanīgi pārbaudiet vadītājsstīgu un iepakojumu un pārliecinieties, vai nav bojājumu.
- b) Pirms lietošanas pārliecinieties, vai vadītājsstīga ir saderīga ar izmantojamo ķirurģisko ierīci.


### 2. Sagatavošana

- a) Izvēlieties attiecīgajai vietai vispiemērotāko vadītājsstīgu un izņemiet no sterilā iepakojuma turētājscauruli, kurā ir vadītājsstīga.
- b) Piepildiet turētājscauruli ar heparinizētu, sterilu fizioloģisko šķidrumu, izmantojot šļirci, lai samācētu visu ierīci. Ievērojiet, ka, to darot, no turētājscaurules var izlīst heparinizētais,

Vadītājsstīga (proksimālais gals)

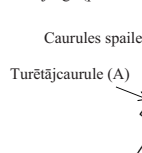

Vadītājsstīgas izvilkšana

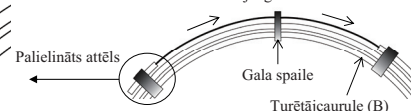

1. attēls

- e) Kad vadītājsstīgas distālais gals ir izstiepts 5–6 cm aiz turētāja caurules otra gala, ja nepieciešams, veidojiet gala formu atbilstoši standarta praksei.
- f) Vadītājsstīgu, kas tika izvērsta pa turētājscaurules distālo gala, saudzīgi satveriet pēc iespējas tuvāk turētājscaurulei un lēnām un uzmanīgi izvelciet.
- g) Ja, izņemot vadītājsstīgu no turētājscaurules, jūtama pretestība, injicējiet turētājscaurulē no jauna heparīnu saturošu sterilizētu fizioloģisko šķidrumu. Kad vairs nav jūtama pretestība, turpiniet vadītājsstīgas izņemšanu. Noteikti injicējiet turētājscaurulē pietiekamu heparīnu saturošu sterilizētu fizioloģiskā šķidruma daudzumu, jo ar spēku noņemot vadītājsstīgu, var to sabojāt.
- h) Pēc vadītājsstīgas izvilkšanas no turētājscaurules pārbaudiet to, lai pārliecinātos, vai nav bojājumu.

### 3. Ievietošanas procedūras

#### ■ Stīgas sistēma

- a) Uzmanīgi ievietojiet vadītājsstīgas distālo gala ķirurģiskās ierīces vadītājsstīgas lūmenā.
- b) Uzmanīgi virziet šo vadītājsstīgu, līdz tās gals ir tieši pie ķirurģiskās ierīces gala.
- c) Izmantojiet virzītājkatetri un ievietojiet ķirurģiskās ierīces sistēmu (ar vadītājsstīgu) Y veida savienotājā.
- d) Virziet ķirurģiskās ierīces sistēmu caur

sterilais fizioloģiskais šķidrums.

- c) Pirms ievietojat vadītājsstīgu, piepildiet ķirurģiskās ierīces lūmenu ar heparīnu saturošu sterilizētu fizioloģisko šķidrumu.
- d) Atbrīvojiet vadītājsstīgu no gala spaiļiem un lēni kustiniet vadītājsstīgu, izstumiet vadītājsstīgas distālo gala caur turētājscauruli (B). (1. attēls)

- virzītājkatetri, līdz vadītājsstīgas sistēmas gals ir tieši pie virzītājkatetra gala.
- e) Savelciet Y veida savienotāja hemostatisko vārstu, lai izveidotu ķirurģiskās ierīces izolāciju. Pārliecinieties, vai vadītājsstīgas kustība netiek traucēta.
- f) Pārbaudiet, vai vadītājsstīgas kustība notiek bez aizķeršanās.
- g) Ja nepieciešams, pievienojiet vadītājsstīgai pagriešanas ierīci.
- h) Izmantojot fluoroskopiju, virziet vadītājsstīgu cauri bojājumam. Izmantojot angiogrāfiju, pārliecinieties, vai vadītājsstīga ir pavirzīta garām sašaurinātajam mērķa bojājumam.
- i) Novērojiet vadītājsstīgas virzību asinsvados.
- j) Virziet ķirurģisko ierīci, līdz tiek sasniegti bojājums, vienlaikus nepieļaujot vadītājsstīgas kustību. Nodrošiniet, lai, veicot manipulācijas ar ķirurģisko ierīci, būtu redzams vadītājsstīgas distālais gals un tā atrašanās vieta asinsvadā.

#### ■ Straujas nomaņas sistēma

- a) Izmantojiet virzītājkatetri.
- b) Ievietojiet vadītājsstīgas ievadītāju virzītājkatetra Y veida savienotājā.
- c) Uzmanīgi ievietojiet vadītājsstīgas gala ievadītāju.
- d) Izmantojot fluoroskopiju, virziet vadītājsstīgu caur virzītājkatetri, līdz vadītājsstīgas gals ir tieši pie virzītājkatetra

- gala.
- e) Ja nepieciešams, pievienojiet vadītājsīstīgai pagriešanas ierīci.
- f) Izmantojot fluoroskopiju, virziet vadītājsīgtu, lai tā izietu cauri bojājumam. Izmantojot angiogrāfiju, pārliecinieties, vai vadītājsīgtā ir pavirzīta garām sašaurinātajam mērķa bojājumam.
- g) Novērojiet vadītājsīgtas virzību asinsvados.
- h) Izņemiet vadītājsīgtas pagriešanas ierīci un vadītājsīgtas ievadītāju.
- i) Virziet ķirurģisko ierīci pa vadītājsīgtu, vienlaikus nepieļaujot vadītājsīgtas kustību, un virziet to, līdz tiek sasniegts bojājums. Nodrošiniet, lai, veicot manipulācijas ar ķirurģisko ierīci, būtu redzams vadītājsīgtas distālais gals un tā atrašanās vieta asinsvadā.
4. Vadītājsīgtas maiņas procedūras
- Sīgtas sistēma
- a) Izņemiet vadītājsīgtu lēni, vienlaikus novērojot tās kustību ar fluoroskopijas palīdzību.
- b) Ievietojiet nākamo vadītājsīgtu atbilstoši norādījumiem šajā sadaļā "Lietošana".

## Uzglabāšanas metode

Neglabājiet vadītājsīgtu un iesaiņojumu saliektā un/vai noslogotā stāvoklī. Šī vadītājsīgtā un iesaiņojums jāsargā no ūdens. Glabājiet tos vēsā, tumšā un sausnā vietā.

## Derīguma termiņš

Derīguma termiņš norādīts uz vadītājsīgtas iesaiņojuma etiķetes.

## Saturs

5 gabali/kaste

## Saistību atruna

"ASAHI INTECC CO., LTD. un tā filiāles" (tālāk tekstā — "Uzņēmums") nekādā gadījumā neatbild par negadījumiem, personāla traumām un blaknēm, kas radušās, nepareizi vai jebkā citādi šiem norādījumiem neatbilstoši lietojot produktu(-us). Uzņēmums nekādā gadījumā neatbild ne par kādiem bojājumiem, kas (i) rodas, produktu(-us) glabājot pēc nosūtīšanas no Uzņēmuma, vai (ii) rodas, medicīnas iestādei, kura izmanto produktu(-us), izvēloties pacientus, ķirurģiskās iejaukšanās paņēmienus vai jebkādas citas medicīniskas darbības.

"ASAHI Miracle", "MIRACLEbros", "Grand Slam" un "EXTENSION" ir uzņēmuma "ASAHI INTECC CO., LTD." reģistrēta preču zīme Japānā un citās valstīs.

## ASAHI Miracle / MIRACLEbros serija

### Grand Slam

#### PKI kreipiamoji viela

##### Naudojimo instrukcija

Prieš naudodami šią kreipiamąją vielą atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir laikykitės šios naudojimo instrukcijos skyriuose „Naudojimo indikacijos“, „Kontraindikacijos“, „Ispėjimai“, „Atsargumo priemonės“ ir „Kaip naudoti“ pateiktų nurodymų. To nepadarius gali kilti komplikacijų, įskaitant sunkius paciento sužalojimus arba mirtį.

Jei naudotojas ir (arba) pacientas sužino apie rimtą incidentą, susijusį su kreipiamąja viela, jie turi pranešti apie tai gamintojui ir kompetentingai šalies narės institucijai.

Ši naudojimo instrukcija taikoma ASAHI Miracle, MIRACLEbros serijoms ir Grand Slam. Išsamios informacijos (kreipiamosios vielos ilgis, rentgenokontrastinės dalies ilgis ir t. t.) ieškokite gaminio etiketėje.

#### Aprašas

Pagrindinė šios kreipiamosios vielos struktūra susideda iš kūginės pagrindinės vielos ir ritės. Kūginė pagrindinė viela ir ritė yra lituojamos. Ritės ilgis yra rentgenokontrastinis, todėl atliekant rentgenoskopiją galima lengvai patvirtinti jos padėtį.

Distalinis paviršius padengtas hidrofbine (silikonine) danga, o proksimalinis paviršius padengtas PTFE (politetrafluoretilenu). Proksimaliniame prietaisų, kurių bendras ilgis neviršija 300 cm, gale yra jungtis, skirta ilginamajai vielai, kuri naudojama siekiant pakeisti sudėtinį prietaisą. Galima prijungti ASAHI INTECC ilginamąją vielą.

Toliau esančioje lentelėje rasite šio gaminio galiuko aprova\*.

1 lentelė. Gaminio specifikacijos

| Gaminio pavadinimas               | Išorinis skersmuo     | Galiuko aprova* |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| ASAHI Miracle 3 / MIRACLEbros 3   | 0,36 mm (0,014 colio) | 3,0 gf          |
| ASAHI Miracle 6 / MIRACLEbros 6   | 0,36 mm (0,014 colio) | 6,0 gf          |
| ASAHI Miracle 12 / MIRACLEbros 12 | 0,36 mm (0,014 colio) | 12,0 gf         |
| Grand Slam                        | 0,36 mm (0,014 colio) | 0,7 gf          |

\*Galiuko aprovos vertės yra vidutinės gaminio specifikacijos vertės, išmatuotos pagal vidinį standartinį bandymų metodą, darant prielaidą, kad kreipiamosios vielos galiukas veikia pažeidimą jėga.

#### Naudojimo indikacijos

Ši kreipiamoji viela skirta bendrajai perkutaninei koronarinei intervencijai (PKI) atlikti. Ši kreipiamoji viela skirta balioninių dilatatorių kateterių ir kitų intervencinių gydymų prietaisų įvedimui į širdies ir kraujagyslių sistemą palengvinti.

Ši kreipiamoji viela neskirta naudoti neurovaskulinėse ir periferinėse kraujagyslėse.

#### Tikslinė gydymų asmenų grupė

ASAHI Miracle, MIRACLEbros serija ir Grand Slam skirta pacientams, kurie atitinka perkutaninės koronarinės intervencijos (PKI) procedūrų indikacijas. Šio įtaiso negalima naudoti naujagimiams, kūdikiams ar vaikams, taip pat nėščioms pacientėms, pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi ir kurie yra alergiški kontrastinei medžiagai.

#### Kontraindikacijos

- Prieš naudodami patikrinkite kreipiamosios vielos skersmens suderinamumą su kitu intervenciniu prietaisu.
- Kreipiamosios vielos negalima naudoti pacientams, kurie yra alergiški kontrastinei medžiagai arba kuriems nustatytas inkstų funkcijos sutrikimas.
- Nenaudokite kreipiamosios vielos nėščioms arba galimai nėščioms pacientėms (rentgeno spinduliai gali paveikti vaisių).
- Ši kreipiamoji viela turi būti naudojama įstaigoje, kurioje nedelsiant galima atlikti neatidėliotiną chirurginę operaciją. Jei neatidėliotinos chirurginės operacijos atlikti negalima, blogiausi atveju gali įvykti gyvybei pavojingų įvykių.
- Ši kreipiamoji viela iš anksto sterilizuota etileno oksido dujomis (EOG) ir yra skirta naudoti tik vieną kartą. Nenaudokite ir nesterilizuokite pakartotinai. Pakartotinai naudojant šią kreipiamąją vielą gali pablogėti jos veikimas ar kokybė ir gali padidėti komplikacijų, įskaitant infekciją, riziką.

#### Ispėjimai

- Šią kreipiamąją vielą gali naudoti tik gydytojas, išmokytas atlikti PKI procedūras.
- Niekada nenaudokite šios kreipiamosios vielos su kateteriais, turinčiais metalinių dalių, kurios gali tiesiogiai liestis su šios kreipiamosios vielos paviršiumi (pvz., atektomijos kateteriais, metaliniais plėtikliais), metalinėmis adatomis arba metaliniais apvalkalų įvedimo įtaisais.
- Naudodami kreipiamąją vielą tikrinkite ir stebėkite jos galiuko judėjimą fluoroskopu.
- Nenaudokite kraujagyslės srityse, kurios nėra arba negali būti atvaizduotos.
- Nejunkite šios kreipiamosios vielos prie nuimamų ilginamųjų vielų, kurias pagamino ne ASAHI INTECC. Nevaldykite šios kreipiamosios vielos, kai prijungta nuimama ilginamoji viela. Priešingu atveju galite sugadinti kreipiamąją vielą arba gali netęti atsijungti nuimama ilginamoji viela.
- Nemodifikuokite šios kreipiamosios vielos dėl bet kokios priežasties.

#### Atsargumo priemonės

- Nenaudokite kreipiamosios vielos pasibaigus etiketėje nurodytam galiojimo terminui.
- Išmeskite visas kreipiamąsias vielas, kurių galiojimo terminas praėjęs.
- Kreipiamosios vielos yra jautrūs instrumentai ir su jomis reikia elgtis atsargiai.
- Jei pakuoatė atidaryta arba pažeista, kreipiamosios vielos nenaudokite. Pakuoatę atidarykite tik prieš pat naudojimą. Įdami ir naudodami kreipiamąją vielą, naudokite aseptinius metodus.
- Nevalykite kreipiamosios vielos organiniu tirpalu, pvz., alkoholiu.
- Panaudokite prietaisą imkitės prevencinių priemonių, kad užkirstumėte kelią infekcijai. Kreipiamąją vielą ir pakuoatę išmeskite kaip medicines atliekas.
- Nebandykite stumti, sukti, ištraukinėti ir sukiooti kreipiamosios vielos, jeigu jaučiamas pasipriešinimas. Sukant ar stumiant per jėgą kyla gali būti pažeista kreipiamoji viela ir (arba) gali atitrūkti jos galiukas, arba gali būti tiesiogiai pažeista kraujagyslė. Nesilaikydami šių nurodymų, galite sugadinti šią kreipiamąją vielą. Fluoroskopu nustatykite pasipriešinimo priežastį ir imkitės visų reikalingų taisomųjų veiksmų.
- Kreipiamąsias vielas visada stumkite arba traukite lėtai ir atsargiai.
- Sukdami šią kreipiamąją vielą kraujagyslėje, nesukite jos pastoviai ta pačia kryptimi. Kai sukate kreipiamąją vielą, pakaitomis sukite prieš laikrodžio rodyklę ir pagal laikrodžio rodyklę.

Nesukite daugiau nei du sukimus ( $720^\circ$ ) ta pačia kryptimi.

- Kreipiamąją vielą ištraukdami ir vėl įstatydami praplaukite heparinizuotu ir sterilizuotu fiziologiniu tirpalu arba kitu atitinkamu tirpalu, kad išvengtumėte oro patekimo į intervencinį prietaisą. Atsargiai pakeiskite šią kreipiamąją vielą, kad išvengtumėte oro patekimo ir (arba) traumos. Vėl kišdami kreipiamąją vielą įsitikinkite, kad intervencinio prietaiso galiukas kraujagyslės spindyje juda laisvai ir nėra prie kraujagyslės sienelės. To nepadarę galite sukelti traumą. Padėtį patvirtinkite naudodamiesi intervencinio prietaiso rentgenkontrastiniais žymekliais.
- Tai, kad kreipiamoji viela gali lengvai judėti intervenciniame prietaise, yra svarbi valdomosios kreipiamosios vielos sistemos savybė, nes suteikia naudotojui vertingos taktinės informacijos. Prieš naudodami patikrinkite, ar sistemoje nėra pasipriešinimo. Sureguliuokite arba pakeiskite hemostazinį vožtuvą reguliuojamu vožtuvu, jei jis trukdo kreipiamąjai vielai judėti.
- Įvesdami stentą naudokite tik vieną kreipiamąją vielą ir nebandykite kišti vielos pro stento atramą. Priešingu atveju stentas gali būti pažeistas arba kreipiamoji viela gali sulūžti arba perlūžti.
- Prieš naudodami įsitikinkite, kad ši kreipiamoji viela yra tinkamo dydžio ir formos, kad būtų

- galima atlikti procedūrą, ir yra suderinama su prietaisu, kuris bus naudojamas kartu.
- Žr. prie medicinos priemonės (pvz., balioninių dilatacinių kateterių ar kitų intervencinių terapinių prietaisų), kuri bus naudojama kartu su šia kreipiamąją vielą, pridėtą naudojimo instrukciją.
- Nuimamą ilgiamąją vielą prijungiant prie šios kreipiamosios vielos, kreipiamąją vielą gali reikėti tvirtai įstatyti prie ribinės linijos tarp dangos be PTFE ir PTFE dangos proksimaliniame kreipiamosios vielos galiuke. Jei jungtyje aptinkama kokių nors anomalijų, nenaudokite nustokite naudoti kreipiamąją vielą.
- Prieš naudodami ir, jei įmanoma, per procedūrą atidžiai patikrinkite, ar kreipiamoji viela nėra sulenkta, susisukusi ar kitaip pažeista. Nenaudokite kreipiamosios vielos, jei ji pažeistas.
- Formuodami galiuką būkite atsargūs, kad nepažeistumėte ritės.
- Prieš įvesdami kreipiamąją vielą patikrinkite, kuris galiukas yra distalinis, ir įsitikinkite, kad ją vedate pradėdami nuo distalinio galiuko.
- Per procedūrą užtikrinkite fiziologinio tirpalo leidimą tarp kreipiamos kateterio ir intervencinio prietaiso ir tarp intervencinio prietaiso ir kreipiamosios vielos. Fiziologinio tirpalo leidimas apsaugo nuo kontrastinės medžiagos susidarymo ir (arba) krešulių susidarymo ant kreipiamosios vielos ir kateterio spindžio.

### Sutrikimai ir nepageidaujami reiškiniai

Naudojant šią kreipiamąją vielą gali pasitaikyti toliau išvardytų sutrikimų ir nepageidaujamų reiškinių, tačiau šis sąrašas nėra išsamus.

#### 1. Sutrikimai

|                                     |                                            |                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Negebėjimas kirsti pažeidimo vietos | Kreipiamosios vielos lūžis arba sulinkimas | Pažeidimas, pavyzdžiui, atsiskyrimas     |
| Sunku pašalinti                     | Dangos atsiskyrimas                        | Pažeistos kreipiamosios vielos nuolaužos |

#### 2. Nepageidaujami reiškiniai


|                          |                              |                        |
|--------------------------|------------------------------|------------------------|
| Mirtis                   | Infekcija                    | Kraujagyslės disekcija |
| Kraujagyslės perforacija | Komplikacijos dėl kraujavimo | Embolija               |
| Trombas                  | Infarktas                    | Išemija                |
| Aritmija                 | Vazospazmas                  | Kraujagyslių okliuzija |

Sumažėjęs kraujų spaudimas

Alerginė reakcija

### Kaip naudoti

- Apžiūra prieš naudojant
  - Prieš naudodami atidžiai apžiūrėkite ir įsitikinkite, kad kreipiamoji viela ir pakuotė nepažeisti.
  - Prieš naudodami patikrinkite, ar kreipiamoji viela yra suderinama su intervenciniu prietaisu, kurį planuojama naudoti.
- Paruošimas
  - Pasirinkite pažeistai sričiai tinkamiausią kreipiamąją vielą ir iš sterilios pakuotės išimkite laikiklio vamzdelį, kuriame yra kreipiamoji viela.

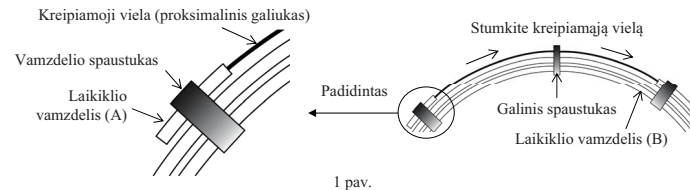

1 pav.

- Kai kreipiamosios vielos distalinis galiukas išlenda daugiau nei nuo 5 iki 6 cm pro kitą laikiklio vamzdelio galiuką, jei reikia, galiuką galite suformuoti įprastai.
  - Švelniai suimkite kreipiamąją vielą, išlindusią pro distalinį laikiklio vamzdelio galą, kuo arčiau laikiklio vamzdelio ir lėtai bei atsargiai ištraukite kreipiamąją vielą.
  - Jeigu kreipiamąją vielą ištraukiant iš laikiklio vamzdelio juntamas pasipriešinimas, į laikiklio vamzdelį vėl suleiskite heparinizuoto ir sterilizuoto fiziologinio tirpalo. Kai nebejausite pasipriešinimo, toliau traukite kreipiamąją vielą. Būtinai į laikiklio vamzdelį suleiskite pakankamai heparinizuoto ir sterilizuoto fiziologinio tirpalo, nes stipriai traukiant kreipiamąją vielą galima pažeisti.
  - Ištraukę iš laikiklio vamzdelio kreipiamąją vielą, patikrinkite, ar ji nepažeista.
- Įstatymo procedūros
    - „Over-the-wire“ sistema
- Atsargiai įstatykite distalinį kreipiamosios vielos galiuką į intervencinio prietaiso kreipiamosios vielos spindį.
  - Stumkite kreipiamąją vielą, kol jos galiukas bus prie intervencinio prietaiso galiuko.
  - Prijunkite kreipiamąjį kateterį į įstatykite intervencinio prietaiso sistemą (su kreipiamąja viela) į Y formos jungiamąją dalį.
  - Stumkite intervencinio prietaiso sistemą pro kreipiamąjį kateterį, kol kreipiamosios vielos sistemos galiukas bus šalia kreipiamos kateterio galiuko.
  - Užsukite Y formos jungiamosios dalies hemostazinį vožtuvą, kad intervencinis prietaisas būtų sandarus. Įsitikinkite, kad kreipiamoji viela vis dar gali judėti.
  - Patikrinkite, ar kreipiamoji viela sklandžiai juda.
  - Jei reikia, prie kreipiamosios vielos prijunkite sukimo prietaisą.
  - Stebėdami fluoroskopu prakiškite

kreipiamąją vielą pro pažeidimą.

Naudodami angiografiją įsitikinkite, kad kreipiamoji vielą praėjo pro siauriausią tikslinį pažeidimą.

- i) Stebėkite kreipiamosios vielos judėjimą kraujagyslėje.
- j) Nejudindami kreipiamosios vielos, stumkite intervencinį prietaisą, kol pasieksite pažeidimo vietą. Įsitinkite, kad kreipiamosios vielos distalinis galiukas ir jo padėtis kraujagyslėje matoma atliekant manipuliacijas intervenciniu prietaisu.

#### ■ Greitojo pakeitimo sistema

- a) Prijunkite kreipiamąjį kateterį.
- b) Įstatykite kreipiamosios vielos stūmklį į kreipiamąjį kateterio Y formos jungiamąją dalį.
- c) Atsargiai įstumkite kreipiamosios vielos galiuką į stūmklį.
- d) Stumkite kreipiamąją vielą pro kreipiamąjį kateterį stebėdami fluoroskopu, kol kreipiamosios vielos galiukas atsidurs šalia kreipiamąjį kateterio galiuko.
- e) Jei reikia, prie kreipiamosios vielos

prijunkite sukimo prietaisą.

- f) Stebėdami fluoroskopu prakiškite kreipiamąją vielą pro pažeidimą. Naudodami angiografiją įsitikinkite, kad kreipiamoji vielą praėjo pro siauriausią tikslinį pažeidimą.
- g) Stebėkite kreipiamosios vielos judėjimą kraujagyslėje.
- h) Nuimkite kreipiamosios vielos sukimo prietaisą ir kreipiamosios vielos stūmklį.
- i) Stumkite intervencinį prietaisą virš kreipiamosios vielos saugodami, kad kreipiamoji vielą nejudėtų, kol bus pasiektas pažeidimas. Įsitinkite, kad kreipiamosios vielos distalinis galiukas ir jo padėtis kraujagyslėje yra matoma atliekant manipuliacijas intervenciniu prietaisu.

#### 4. Kreipiamosios vielos pakeitimo procedūros

##### ■ „Over-the-wire“ sistema

- a) Lėtai ištraukite kreipiamąją vielą stebėdami jos judėjimą fluoroskopu.
- b) Remdamiesi skyriuje „Kaip naudoti“ pateiktais nurodymais, įstatykite kitą kreipiamąją vielą.

## Sandėliavimo būdas

Kreipiamosios vielos ir pakuotės nelaikykite sulenktų ir (arba) labai suspaustų. Šią kreipiamąją vielą ir pakuotę reikia laikyti atokiau nuo vandens. Laikykite vėsioje, tamsioje ir sausoje vietoje.

## Galiojimo terminas

Galiojimo terminas nurodytas kreipiamosios vielos pakuotės etiketėje.

## Turinys

5 vienetai dėžutėje

## Atsakomybės atsisakymas

Bendrovė „ASAHI INTECC CO., LTD. ir su ja susijusios bendrovės“ (toliau – „Bendrovė“) nėra atsakingos už nelaimingus atsitikimus, kūno sužalojimus ar kitus neigiamus reiškinius, kuriuos sukėlė bet kokio gaminio (-ių) netinkamas naudojimas ar bet koks kitas naudojimas, kuris neatitinka šių nurodymų. Bendrovė jokiomis aplinkybėmis neatsako už žalą, kuri atsiranda dėl i) netinkamo gaminio (-ių) laikymo po įsigijimo iš Bendrovės dienos arba ii) dėl netinkamo sveikatos priežiūros įstaigos, kuri naudoja gaminį (-ius), pacientų, operacinės technikos ar medicininių procedūrų pasirinkimo.

„ASAHI Miracle“, „MIRACLEbros“, „Grand Slam“ ir „EXTENSION“ yra „ASAHI INTECC CO., LTD.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Japonijoje ir kitose šalyse.

## ASAHI Miracle / MIRACLEbros serisi

### Grand Slam

### PCI Kılavuz Teli

#### Kullanım Talimatları

**Bu kılavuz teli kullanmadan önce Kullanım Talimatlarının Kullanım Endikasyonları, Kontrendikasyonlar, Uyarılar, Kullanım Önlemleri ve Kullanma Şekli bölümlerini dikkatle okuyun ve talimatlara uyun. Aksi durumda hastanın ciddi şekilde yaralanması veya ölümü dâhil komplikasyonlar ortaya çıkabilir.**

Bir kullanıcı ve/veya hasta kılavuz teli ile ilgili ciddi bir olaydan haberdar olursa bu durumu üreticiye ve Üye Devletin yetkili makamına bildirir.

Bu Kullanım Talimatları ASAHI Miracle, MIRACLEbros serisi ve Grand Slam modelleri için geçerlidir. Ayrıntılı bilgi için (kılavuz tel uzunluğu, radyopak bölüm uzunluğu, vb.), ürün etiketine bakın.

### Açıklamalar

Bu kılavuz telinin temel yapısı konik çekirdek tel ve halkadan oluşur. Konik çekirdek tel ve halka lehimlenmiştir. Halka radyopaktır, böylece radyoskopi ile yeri kolayca tespit edilebilir. Distal yüzey hidrofobik (silikon) kaplama ile, proksimal yüzey ise PTFE (politetrafloroetilen) ile kaplanmıştır. Toplam uzunluğu 300 cm olan modeller dışındaki cihazların, proksimal ucunda, birleşik cihazı değiştirmek için kullanılan bir uzatma teli için bir bağlantı vardır ve ASAHI INTECC'in Uzatma Teli bağlanabilir.

Bu ürünün uç yükü\* için aşağıdaki tabloya bakın.

Tablo 1. Ürün Özellikleri

| Ürün Adı                         | Dış Çap             | Uç Yüğü* |
|----------------------------------|---------------------|----------|
| ASAHI Miracle 3/ MIRACLEbros 3   | 0,36 mm (0,014 inç) | 3,0 gf   |
| ASAHI Miracle 6/ MIRACLEbros 6   | 0,36 mm (0,014 inç) | 6,0 gf   |
| ASAHI Miracle 12/ MIRACLEbros 12 | 0,36 mm (0,014 inç) | 12,0 gf  |
| Grand Slam                       | 0,36 mm (0,014 inç) | 0,7 gf   |

\*Uç yükü değerleri, kılavuz telinin ucu tarafından lezyona uygulanan kuvvet varsayılarak iş standart test yöntemine göre ölçülen ürün spesifikasyon değerlerine ilişkin ortalama değerleri ifade eder.

### Kullanım Endikasyonları

Bu kılavuz tel, yaygın perkütan koroner girişimler (PCI) için tasarlanmıştır. Bu kılavuz teli, balon dilatasyon kateterlerinin veya diğer girişimsel terapötik cihazların kardiyovaskülatür içine yerleştirilmesini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

**Bu kılavuz tel nörovaskülatürde ve periferik vaskülatürde kullanım için tasarlanmamıştır.**

### Tedaviye Yönelik Hedef Kitle

ASAHI Miracle, MIRACLEbros serisi ve Grand Slam, PCI prosedürlerine ilişkin endikasyonlara sahip hastalar için tasarlanmıştır. Yenidoganlarda, bebeklerde veya çocuklarda ve hamile olan, böbrek fonksiyon bozukluğu olan veya kontrast maddelere alerjik reaksiyon gösteren hastalarda kullanım için endike değildir.

### Kontrendikasyonlar

- Gerçek kullanımdan önce kılavuz tel çapının kullanılmalıdır. Bir acil cerrahi işlem diğer girişimsel cihazlarla uyumluluğunu onaylayın.
- Kontrast maddeye karşı alerjik reaksiyon gösteren veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kılavuz teli kullanmayın.
- Kılavuz teli hamile hastalar veya hamile olma ihtimali olan hastalar için kullanmayın (Röntgen fetüsü etkileyebilir).
- Bu kılavuz tel, acil cerrahi işlemlerin hemen gerçekleştirilebileceği bir tıbbi kurumda kullanılmıdır. Bir acil cerrahi işlem yapılamazsa en kötü durumda yaşamı tehdit edici olaylar meydana gelebilir.
- Bu kılavuz tel, etilen oksit gazıyla (EOG) önceden sterilize edilmiştir ve yalnızca tek kullanımlıktır. Tekrar kullanmayın veya tekrar sterilize etmeyin. Tekrar kullanıldığında veya tekrar sterilize edildiğinde kılavuz telin ve paketin performansı veya kalitesi bozulabilir ve enfeksiyon dâhil komplikasyon riski oluşabilir.

### Uyarılar

- Bu kılavuz tel, yalnızca PCI tedavisi konusunda tam eğitimli bir hekim tarafından kullanılmalıdır.
- Bu kılavuz teli asla bu kılavuz telin yüzeyine doğrudan temas edebilecek metal parçalara sahip kateterler (ör. aterektomi kateterleri, metal dilatörler), metal iğneler veya metal kılıf yerleştiriciler ile birlikte kullanmayın.
- Kılavuz telin kullanımı sırasında ucunun hareketini floroskopi altında kontrol edin ve izleyin. Görselleştirilmemiş veya görselleştirilemeyen damar bölgelerinde kullanmayın.
- Bu kılavuz teli, ASAHI INTECC dışındaki üreticilerin ürettiği ayrılabılır uzatma telleriyle bağlamayın. Bu kılavuz teli, ayrılabılır uzatma teli bağliken hareket ettirmeyin. Aksi halde kılavuz tel hasar görebilir veya ayrılabılır uzatma teli kazara çıkabilir.
- Bu kılavuz tel üzerinde herhangi bir nedenle değişiklik yapmayın.

### Kullanım Önlemleri

- Bu kılavuz teli etikette belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayın. Son kullanma tarihi geçmiş telleri atın.
- Kılavuz teller hassas aletlerdir ve dikkatle kullanılmalıdır.
- Ambalajı açılmış veya hasar görmüş kılavuz teli kullanmayın. Kullanımın hemen öncesine kadar ambalajı açmayın. Kılavuz teli taşırken ve kullanırken aseptik teknik kullanın.
- Bu kılavuz teli alkol gibi organik bir solüsyon kullanarak silmeyin.
- Kullanım sonrası enfeksiyona karşı önlleyici tedbirleri alın. Bu kılavuz teli ve ambalajını tıbbi atık olarak bertaraf edin.
- Bu kılavuz teli direnç hissedilebilecek şekilde hiçbir zaman itmeyin, bükmeyin, geri çekmeyin veya bastırmayın. Bu kılavuz telin dirence karşı torklanması veya itilmesi, bu kılavuz telin hasar görmesine ve/veya ucunun ayrılmasına veya bir kaba doğrudan zarar vermesine neden olabilir. Bunun yapılmaması bu kılavuz telin hasar görmesine neden olabilir. Direncin nedenini floroskopi altında belirleyin ve durumu düzeltmek için gereken önlemleri alın.
- Kılavuz telleri daima yavaş ve dikkatli bir şekilde ilerletin veya çekin.
- Bu kılavuz tele kan damarının içinde tork uygularken torku sürekli aynı yönde uygulamayın. Bu kılavuz tele tork uygularken teli sırayla saat yönünde ve saat yönünün tersine döndürün. Kılavuz teli aynı yönde ikiden fazla kez (720°) döndürmeyin.
- Kılavuz teli çıkarırken veya yeniden takarken girişimsel cihaza hava girmesini önlemek için kılavuz teli heparinize salın veya uygun başka solüsyonla yıkayın. Hava girmesini ve/veya travma oluşmasını önlemek için bu kılavuz teli dikkatle değiştirin. Kılavuz teli yeniden

yerleştirirken girişimsel cihazın ucunun damar lümeninin içinde serbest olduğunu ve damar duvarına yaslanmadığını teyit edin. Bunun yapılmaması travmaya neden olabilir. Konumu doğrulamak için girişimsel cihazın radyopak işaretçiyi kullanın.

- Kılavuz telin girişimsel cihazın içerisinde serbest hareket etmesi, yönlendirilebilir bir kılavuz tel sisteminin önemli bir özelliğidir, çünkü bu, kullanıcıya değerli dokunma bilgileri verir. Sistemi kullanmadan önce direnç olup olmadığını test edin. Kılavuz telin hareketini engellediği görülüyorsa hemostaz valfini ayarlayın veya ayarlanabilir bir valfle değiştirin.
- Birden fazla kılavuz tel kullanarak veya stent desteği aracılığıyla teli kullanarak stent yerleştirmeyin. Aksi durumda stent hasar görebilir, kılavuz tel kopabilir veya kırılabilir.
- Kullanmadan önce, bu kılavuz telin boyut ve şekil olarak prosedür için uygun olduğunu ve birlikte kullanılacak cihazla uyumlu olduğunu onaylayın.
- Bu kılavuz teli ile birlikte kullanılacak tıbbi cihaz (ör. balon dilatasyon kateterleri veya diğer

girişimsel tedavi edici cihazları) ekli Kullanım Talimatlarına bakın.

- Ayrılabilir uzatma telini bu kılavuz tele bağlarken ayrılabilir uzatma teli PTFE olmayan kaplama ve kılavuz telin proksimal ucundaki PTFE kaplama arasındaki sınır çizgisine güvenli bir şekilde yerleştirilmelidir. Bağlantıda herhangi bir anormallik tespit edilirse kılavuz teli kullanmayı derhal bırakın.
- Kullanmadan önce ve mümkün olduğu her durumda işlem sırasında kılavuz teli bükülmeler, kıvrılmalar ve başka hasarlar açısından dikkatle inceleyin. Kılavuz tel hasarlıysa kullanmayın.
- Ucu şekillendirirken bobine zarar vermeye dikkat edin.
- Kılavuz teli yerleştirmeden önce hangi ucu distal uç olduğunu kontrol edin ve distal uçtan yerleştirdiğinizden emin olun.
- İşlem sırasında kılavuz kateter ile girişimsel cihaz arasında ve girişimsel cihaz ile kılavuz tel arasında sürekli bir şekilde salın yıkama sağlayın. Yıkama, kılavuz tel üzerinde ve kateter lümeninde kontrast madde oluşumunu ve/veya pıhtılaşmayı önler.

## Arızalar ve Advers Olaylar

Bu kılavuz teli kullanırken ortaya çıkabilecek arızalar ve advers olaylar arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakiler bulunmaktadır:

### 1. Arızalar

|                          |                                        |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Bir lezyonu geçememek    | Kılavuz telin kırılması veya bükülmesi | Ayrılma gibi hasarlar                        |
| Çıkarma işleminde güçlük | Kaplamanın çıkması                     | Hasarlı kılavuz telinden kaynaklı kalıntılar |

### 2. Advers olaylar

|                       |                         |                   |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| Ölüm                  | Enfeksiyon              | Damar kesilmesi   |
| Damar delinmesi       | Kanama komplikasyonları | Emboli            |
| Trombüs               | Enfarktüs               | İskemi            |
| Aritmi                | Vazospazm               | Damar tıkanıklığı |
| Kan basıncında azalma | Alerjik reaksiyon       |                   |

## Kullanma Şekli

### 1. Kullanım öncesi denetim


- Kullanmadan önce, kılavuz telin ve ambalajının hasarsız olduğunu dikkatle inceleyin ve onaylayın.

### b) Kullanmadan önce, kılavuz telin kullanılacak

- girişimsel cihazla uyumlu olduğunu doğrulayın.

### 2. Hazırlık

- Etiketlenen bölge için en uygun kılavuz teli seçin ve kılavuz teli içeren tutucu tüpü steril ambalajdan çıkarın.
- Tüm cihazı ısılatmak için bir ısıtma kullanarak tutucu tüpü heparinize ve sterilize salinle doldurun. Bu sırada tutucu tüpten heparinize ve sterilize salin dökülebileceğini unutmayın.

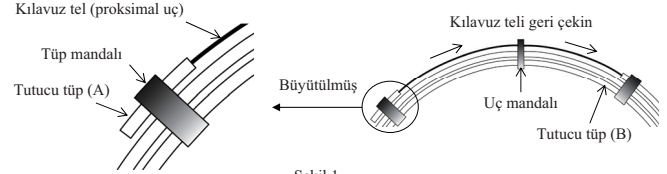

Şekil 1

- Kılavuz telin distal ucu tutucu tüpün diğer ucundan 5-6 cm uzaktıysa, gerektiği takdirde standart uygulamaya uygun şekilde ucu şekillendirin.
- Tutucu tüpün distal ucundan gelen kılavuz telini hafifçe kavrayın, tutucu tüpe mümkün olduğunca yakın bir noktada kılavuz teli yavaş ve dikkatli şekilde dışarı çekin.
- Kılavuz teli tutucu tüpten çıkarırken direnç hissederseniz, tutucu tüpe yeniden heparinize ve sterilize salin ekleyin. Direnç hissetmeyece kadar kılavuz teli çıkarmaya devam edin. Kılavuz teli kuvvetlice çıkarırken tel hasar görebileceğinden, tutucu tüpe heparinize ve sterilize salin eklemeyi unutmayın.
- Kılavuz teli tutucu tüpten çekip çıkardıktan sonra, hasar görmediğinden emin olmak için kılavuz teli inceleyin.

### 3. Yerleştirme işlemleri

- Tel üzeri sistem
  - Kılavuz telin distal ucunu, girişimsel cihazın kılavuz tel lümeninin içine dikkatle yerleştirin.
  - Bu kılavuz teli, ucu girişimsel cihazın ucuna tam proksimal olana kadar dikkatle ilerletin.
  - Kılavuz kateter takın ve girişimsel cihaz sistemini (kılavuz teli birlikte) Y konektörüne yerleştirin.
  - Kılavuz tel sistemi kılavuz kateterin ucuna tam proksimal olana kadar girişimsel cihaz sistemini kılavuz kateterden ilerletin.

- Kılavuz teli yerleştirmeden önce, girişimsel cihazın lümenini heparinize ve sterilize salinle doldurun.
- Kılavuz teli arkadaki mandaldan serbest bırakın ve kılavuz teli yavaşça kaydırarak kılavuz telin distal ucunu tutucu tüpten itin (B). (Şekil 1)

- Y konektörünün hemostaz valfini sıkarak, girişimsel cihazın etrafından bir mühür oluşmasını sağlayın. Kılavuz telin halen hareket edebildiğinden emin olun.
- Kılavuz telin pürüzsüz bir şekilde hareket ettiğini kontrol edin.
- Gerekirse tork cihazını kılavuz tele takın.
- Bu kılavuz teli, lezyondan geçene dek floroskopi altında ilerletin. Kılavuz telin hedef lezyonun dar bölümünden geçtiğini anjiyografiyle doğrulayın.
- Kılavuz telin damarlardaki hareketini gözlemleyin.
- Girişimsel cihazı, lezyona ulaşana kadar ilerletin ve bu sırada kılavuz telin hareket etmesini önleyin. Kılavuz telin distal ucunun ve damardaki konumunun girişimsel cihazın kullanılması sırasında görünür olduğundan emin olun.

### ■ Hızlı değiştirme sistemi

- Kılavuz kateteri takın.
- Kılavuz tel yerleştiricisini kılavuz kateterin Y konektörüne yerleştirin.
- Kılavuz tel ucunu yerleştiricinin içine dikkatle yerleştirin.
- Kılavuz teli, kılavuz telin ucu kılavuz kateterin ucuna tam proksimal olana kadar kılavuz kateterden floroskopi altında ilerletin.
- Gerekirse tork cihazını kılavuz tele takın.
- Kılavuz teli, lezyondan geçene dek

floroskopi altında ilerletin. Kılavuz telin hedef lezyonun dar bölümünden geçtiğini anjiyografiyle doğrulayın.

- g) Kılavuz telin damarlardaki hareketini gözlemleyin.
- h) Kılavuz tel tork cihazını ve kılavuz tel yerleştiricisini çıkarın.
- i) Kılavuz telin hareket etmesini önleyerek, girişimsel cihazı kılavuz telin üzerinden izleyin ve lezyona ulaşana kadar ilerletin. Kılavuz telin distal ucunun ve damardaki

konumunun girişimsel cihazın kullanılması sırasında görünür olduğundan emin olun.

#### 4. Kılavuz tel değiştirme işlemleri

- Tel üzeri sistem
  - a) Bu kılavuz telin hareketini floroskopi altında gözlemleyerek bu kılavuz teli yavaşça çıkarın.
  - b) Sonraki kılavuz teli, bu “Kullanma şekli” bölümündeki talimatlara göre yerleştirin.

### Saklama Biçimi

Kılavuz teli ve paketini bükülmüş ve/veya aşırı yüklü bir durumda muhafaza etmeyin. Bu kılavuz tel ve paket suyun dışında tutulmalıdır. Serin, karanlık ve kuru bir yerde saklayın.

### Son Kullanma Tarihi

Son kullanma tarihi, kılavuz tel ambalajının etiketinde gösterilmiştir.

### Paket İçeriği

5 adet/kutu

### Yükümlülük Feragati

“ASAHI INTECC CO., LTD. ve bağlı şirketleri” (bundan böyle “şirket” olarak anılacaktır) ürünün/ ürünlerin hatalı kullanımından ve bu talimatlara uymayan her türlü kullanımdan doğan kaza, bedensel yaralanma ve advers olaylarda hiçbir şekilde yükümlülük kabul etmez. Şirket, şu nedenlere bağlı olarak meydana gelen zararlardan hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz: (i) Ürün veya ürünlerin şirket tarafından sevkiyatı tamamlandıktan sonraki saklama ve depolama koşullarına bağlı olarak meydana gelen zarar(lar) veya (ii) ürün veya ürünleri kullanan sağlık kuruluşunun hasta, cerrahi teknik ve diğer tıbbi cihazlara ilişkin seçimine bağlı olarak meydana gelen zarar(lar).

“ASAHI Miracle”, “MIRACLEbros”, “Grand Slam” ve “EXTENSION”, ASahi INTECC CO., LTD.'nin Japonya'da ve diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Серия ASAHI Miracle / MIRACLEbros  
Grand Slam

Проволочный проводник для ЧКВ  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием проволочного проводника внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по применению и придерживайтесь содержащихся в ней показаний к применению, противопоказаний, предупреждений, мер предосторожности, а также указаний в разделах процедуры применения. Несоблюдение этих требований может привести к осложнениям, включая серьезные травмы или смерть пациента.

Если пользователю и/или пациенту стало известно о серьезном происшествии, связанном с данным проволочным проводником, следует сообщить об этом производителю и в уполномоченную организацию государства-члена ЕС.

Данная инструкция по применению относится к сериям ASAHI Miracle, MIRACLEbros и Grand Slam. Дополнительные сведения (длина проволочного проводника, рентгеноконтрастной части и т. д.) указаны на этикетке изделия.

Описание

Основная структура этого проволочного проводника состоит из конического сердечника проводника и спирали. Конический сердечник проводника и спираль спаяны. Длина спирали рентгеноконтрастна, поэтому ее положение можно легко подтвердить при рентгенокоскопии. Дистальная поверхность покрыта гидрофобным (силиконовым) покрытием, а проксимальная — политетрафторэтиленом (ПТФЭ). На проксимальном конце устройств общей длиной менее 300 см имеется соединитель для удлинительного провода, который используется с целью замены комбинированного устройства. Можно подсоединить удлинитель ASAHI INTECC.

Нагрузка на наконечник\* данного изделия приведена в таблице ниже.

Таблица 1. Технические характеристики изделия

| Наименование изделия              | Внешний диаметр       | Нагрузка на наконечник* |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| ASAHI Miracle 3 / MIRACLEbros 3   | 0,36 мм (0,014 дюйма) | 3,0 гс                  |
| ASAHI Miracle 6 / MIRACLEbros 6   | 0,36 мм (0,014 дюйма) | 6,0 гс                  |
| ASAHI Miracle 12 / MIRACLEbros 12 | 0,36 мм (0,014 дюйма) | 12,0 гс                 |
| Grand Slam                        | 0,36 мм (0,014 дюйма) | 0,7 гс                  |

\* Значения нагрузки на наконечник представляют собой средние значения технических характеристик продукта, измеренные в соответствии с методом испытаний по внутреннему стандарту с учетом силы, прилагаемой к очагу поражения наконечником проволочного проводника.

Показания к применению

Данный проволочный проводник предназначен для общего чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ). Этот проволочный проводник предназначен для облегчения установки

баллонных дилатационных катетеров или других интервенционных терапевтических устройств в сердечно-сосудистой системе.  
Данный проволочный проводник не предназначен для использования в нейрососудистой системе и периферической сосудистой сети.

Целевая группа пациентов

Проволочные проводники серии ASAHI Miracle, MIRACLEbros и Grand Slam предназначены для пациентов, отвечающих показаниям к процедуре ЧКВ. Он не показан для использования у новорожденных, младенцев и детей, а также у беременных, пациентов с нарушением функции почек или аллергической реакцией на контрастное вещество.

Противопоказания

- Перед использованием проверьте соответствие диаметра проволочного проводника другому интервенционному устройству.
- Запрещается использовать проволочный проводник для пациентов с аллергической реакцией на контрастное вещество или с нарушением функции почек.
- Запрещается использовать проволочный проводник для беременных пациенток или пациентов, которые предположительно могут быть беременны (рентгеновское излучение может повлиять на плод).
- Данный проволочный проводник разрешается использовать только в тех учреждениях, где может быть выполнено неотложное хирургическое вмешательство. Если неотложное хирургическое вмешательство невозможно, то при самом худшем варианте развития событий могут возникнуть явления, представляющие угрозу жизни пациента.
- Проволочный проводник перед отгрузкой стерилизуется этиленоксидом и предназначен только для одноразового использования. Запрещается повторное использование или стерилизация. Повторное использование или стерилизация могут отрицательно влиять на эксплуатационные характеристики и качество проволочного проводника и его упаковок, что сопряжено с риском осложнений, в частности инфекции.

Предупреждения

- Проволочный проводник должен использоваться только врачом, владеющим техникой выполнения ЧКВ.
- Запрещается использовать данный проволочный проводник в сочетании с катетерами, содержащими металлические детали, которые могут непосредственно соприкасаться с поверхностью проводника (например, катетеры для атерэктомии, металлические расширители), металлическими иглами или металлическими инструментами для введения интродьюсера.
- В процессе использования проволочного проводника проверяйте и контролируйте движение его наконечника посредством рентгенокоскопии. Запрещается применение в тех областях сосуда, которые не визуализированы или не могут быть визуализированы.
- Запрещается подсоединять к данному проволочному проводнику съемные удлинитель проводника, изготовленные не компанией ASAHI INTECC. Запрещается производить манипуляции проволочным проводником с присоединенным съемным удлинителем проводника. В противном случае можно повредить проволочный проводник или случайно отделить съемный удлинитель проводника.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию проволочного проводника независимо от причин.

Меры предосторожности

- Запрещается использовать проволочный проводник по истечении срока годности, указанного на этикетке. Если срок годности истек, утилизируйте проволочный проводник.

- В силу своей хрупкости проволочные проводники требуют осторожного обращения.
- Запрещается использовать проволочный проводник, если упаковка вскрыта или повреждена. Упаковку разрешается вскрывать только непосредственно перед использованием. При обращении с проволочным проводником и его использованием обязательно применение асептического способа.
- Запрещается протирать проволочный проводник органическим раствором, например, спиртом.
- После использования примите профилактические меры во избежание инфицирования. Утилизируйте проволочный проводник и его упаковку в соответствии с правилами утилизации медицинских отходов.
- Запрещается прилагать силу при проталкивании, ввинчивании, извлечении или вращении проволочного проводника, если ощущается сопротивление. Вращение или проталкивание проволочного проводника при наличии сопротивления может привести к повреждению и/или отделению наконечника проволочного проводника или непосредственному повреждению сосуда. Невыполнение этого требования может привести к повреждению проволочного проводника. Определите причину сопротивления с помощью рентгенооскопии и выполните соответствующие действия для исправления ситуации.
- Во всех случаях продвигайте или извлекайте проволочные проводники медленно и осторожно.
- Запрещается вращать проволочный проводник внутри кровеносного сосуда постоянно в одном направлении. При вращении проволочного проводника чередуйте повороты по часовой стрелке с поворотами против часовой стрелки. Запрещается делать более двух оборотов (720°) в одном направлении.
- В целях предотвращения попадания воздуха в интервенционное устройство промойте проволочный проводник гепаринизированным и стерильным физиологическим раствором или иным подходящим раствором при извлечении и повторном введении. При замене проволочного проводника проявляйте

- осторожность, чтобы не допустить попадания воздуха и/или нанесения травмы. При повторном введении проволочного проводника убедитесь, что наконечник интервенционного устройства свободно расположен в просвете сосуда и не упирается в его стенку. Невыполнение этого требования может привести к травме. Для определения положения следите за рентгеноконтрастным маркером интервенционного устройства.
- Свободное движение проволочного проводника внутри интервенционного устройства является важной характеристикой системы управляемого проволочного проводника, дающей пользователю ценную осязательную информацию. Перед применением проверьте систему на наличие сопротивления. Если гемостатический клапан ограничивает движение проволочного проводника, то отрегулируйте его или замените на регулируемый клапан.
  - Запрещается выполнять установку стента с помощью более чем одного проволочного проводника или перемещать проволочный проводник через каркас стента. В противном случае можно повредить стент, а также повредить или сломать проволочный проводник.
  - Перед применением убедитесь, что размер и форма данного проволочного проводника соответствуют проводимой процедуре, а также устройству, в сочетании с которым он будет использоваться.
  - Ознакомьтесь с инструкцией по применению, прилагаемой к медицинскому изделию (например, к баллонным дилатационным катетерам или другим интервенционным терапевтическим устройствам), которое должно использоваться в сочетании с данным проволочным проводником.
  - При подсоединении съемного удлинителя к проволочному проводнику следует надежно вставить его до граничной линии между покрытием не из ПТФЭ и покрытием из ПТФЭ на проксимальном конце проволочного проводника. Немедленно прекратите использование проволочного проводника при обнаружении каких-либо неисправностей в соединении.
  - Перед использованием и во мере возможности во время проведения процедуры внимательно осматривайте проволочный

- проводник на предмет изгибов, перекручивания или иных повреждений. Запрещается использовать поврежденный проволочный проводник.
- Во время придания формы наконечнику будьте осторожны, чтобы не повредить спирали.
  - Перед введением проволочного проводника проверьте, какой конец является дистальным и удостоверьтесь, что устройство вводится именно дистальным концом.

- При выполнении процедуры обеспечивайте постоянную промывку физиологическим раствором участка между проводниковым катетером и интервенционным устройством, а также между интервенционным устройством и проволочным проводником. Промывка позволяет предотвратить образование и/или коагуляцию контрастного вещества на проводнике и в просвете катетера.

## Неправильное функционирование и неблагоприятные явления

К возможным случаям неправильного функционирования и неблагоприятным явлениям для данного проволочного проводника относятся, в частности, следующие:

### 1. Неправильное функционирование

|                                        |                                               |                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Невозможность пройти участок поражения | Повреждение или изгиб проволочного проводника | Повреждение, как например, отделение           |
| Затруднение при извлечении             | Отслоение покрытия                            | Обломки поврежденного направляющего проводника |

### 2. Неблагоприятные явления

|                             |                            |                   |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Смерть                      | Инфекция                   | Рассечение сосуда |
| Перфорация сосуда           | Геморрагические осложнения | Эмболия           |
| Тромб                       | Образование инфаркта       | Ишемия            |
| Аритмия                     | Спазм сосудов              | Окклюзия сосудов  |
| Снижение кровяного давления | Аллергическая реакция      |                   |

## Процедура применения

- Осмотр перед использованием
  - Перед использованием внимательно осмотрите и проверьте проволочный проводник и упаковку на предмет повреждений.
  - Перед использованием убедитесь, что проволочный проводник совместим с используемым интервенционным устройством.
- Подготовка
  - Выберите проволочный проводник, наиболее подходящий для пораженного участка, и извлеките из стерильной упаковки трубку-держатель, в которой находится проволочный проводник.
  - С помощью шприца полностью заполните трубку-держатель гепаринизированным и стерильным физиологическим раствором для промывки всего устройства. Имейте в виду, что во время этой процедуры гепаринизированный и стерильный физиологический раствор может выливаться из трубки-держателя.
  - Перед введением проволочного проводника заполните просвет интервенционного устройства гепаринизированным и стерильным физиологическим раствором.
  - Извлеките проволочный проводник из зажима, затем медленно и плавно

перемещайте проволоочный проводник, проталкивая дистальный конец

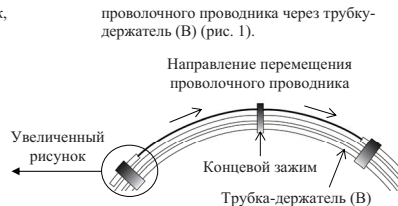
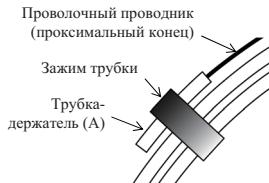


Рис. 1

- е) Когда дистальный конец проволоочного проводника выступит на 5–6 см за другой конец трубки-держателя, при необходимости придайте наконечнику форму в соответствии со стандартным методом.
- ф) Осторожно захватите проволоочный проводник, который выступил из дистального конца трубки-держателя как можно ближе к трубки-держателю и вытяните проволоочный проводник медленно и осторожно.
- г) Если при извлечении проволоочного проводника из трубки-держателя чувствуется сопротивление, снова шприцом введите гепаринизированный и стерильный физиологический раствор в трубку-держатель. Продолжайте извлечение проволоочного проводника, только если не будете чувствовать сопротивления при его перемещении. Убедитесь, что впрыскиваете в трубку-держатель достаточное количество гепаринизированного и стерильного физиологического раствора, поскольку при извлечении проволоочного проводника с усилием трубка может быть повреждена.
- х) После извлечения проволоочного проводника из трубки-держателя осмотрите его на предмет повреждений.

### 3. Процедуры введения

- Система доставки по проводнику
  - а) Осторожно вставьте дистальный конец проволоочного проводника в просвет для проволоочного проводника в интервенционном устройстве.
  - б) Осторожно продвигайте проволоочный проводник, пока его наконечник не

проволоочного проводника через трубку-держатель (В) (рис. 1).

- окажется проксимальным к концу интервенционного устройства.
- с) Присоедините проволоочный катетер и вставьте систему интервенционного устройства (с проволоочным проводником) в Y-образный соединитель.
- д) Продвигайте систему интервенционного устройства через проволоочный катетер, пока наконечник системы проволоочного проводника не окажется проксимальным к наконечнику проводникового катетера.
- е) Затяните гемостатический клапан Y-образного соединителя, чтобы создать герметичную среду вокруг интервенционного устройства. Убедитесь, что проволоочный проводник все еще можно перемещать.
- ф) Убедитесь, что проволоочный проводник движется плавно.
- г) По мере необходимости присоедините к проволоочному проводнику устройство для вращения.
- х) Под контролем рентгенографии продвигайте проволоочный проводник, пока он не пройдет участок поражения. С помощью ангиографии убедитесь, что проволоочный проводник прошел суженный целевой участок поражения.
- и) Следите за продвижением проволоочного проводника в сосудах.
- j) Продвигайте интервенционное устройство до участка поражения, предотвращая движение проволоочного проводника. При манипулировании интервенционным устройством должны быть видны дистальный конец проволоочного проводника и его положение в сосуде.

### ■ Система быстрой замены

- а) Присоедините проводниковый катетер.
- б) Вставьте интродьюсер проволоочного проводника в Y-образный соединитель проводникового катетера.
- с) Осторожно вставьте наконечник проволоочного проводника в интродьюсер.
- д) Под контролем рентгенографии продвигайте проволоочный проводник через проводниковый катетер, пока наконечник проволоочного проводника не окажется проксимальным к наконечнику проводникового катетера.
- е) По мере необходимости присоедините к проволоочному проводнику устройство для вращения.
- ф) Под контролем рентгенографии продвигайте проволоочный проводник, пока он не пройдет участок поражения. С помощью ангиографии убедитесь, что проволоочный проводник прошел

суженный целевой участок поражения.

- г) Следите за продвижением проволоочного проводника в сосудах.
- х) Извлеките устройство для вращения и интродьюсер проволоочного проводника.
- и) Продвигайте интервенционное устройство по проволоочному проводнику до участка поражения, предотвращая движение проволоочного проводника. При манипулировании интервенционным устройством должны быть видны дистальный конец проволоочного проводника и его положение в сосуде.

### 4. Процедура замены проволоочного проводника

#### ■ Система доставки по проводнику

- а) Медленно извлеките проволоочный проводник, контролируя его перемещение с помощью рентгенографии.
- б) Согласно указаниям раздела «Процедура применения» вставьте следующий проволоочный проводник.

## Условия хранения

Запрещается хранить проволоочный проводник и его упаковку в изогнутом виде и/или подвергая их избыточной нагрузке. Запрещается хранить данный проволоочный проводник и его упаковку вблизи воды. Храните их в прохладном, сухом и темном месте.

## Срок годности

Срок годности изделия указан на этикетке на упаковке проволоочного проводника.

## Содержимое упаковки

5 шт. / коробка

## Отказ от ответственности

Компания ASAHI INTECC CO., LTD и ее дочерние компании (в дальнейшем вместе именуемые «Компания») никоим образом не несут ответственности за несчастные случаи, травмирование персонала и неблагоприятные явления, произошедшие вследствие неправильного использования изделия (изделий) или любого другого действия с нарушением требований этой инструкции. Компания ни при каких условиях не несет ответственность за какие-либо повреждения, (i) возникшие в результате хранения данного изделия (изделий) после доставки его Компанией или (ii) в связи с выбором медицинским учреждением, использующим данное изделие (изделия), определенных пациентов, методик операций или каких-либо других медицинских действий.

«ASAHI Miracle» и «MIRACLEbros», «Grand Slam» и «EXTENSION» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками ASAHI INTECC CO.,LTD в Японии и других странах.

## Серии ASAHI Miracle/MIRACLEbros

### Grand Slam

#### Водач за PCI

Инструкции за употреба

Прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате този водач и спазвайте разделите Показания за употреба, Противопоказания, Предупреждения, Предпазни мерки и Как да използвате в тези Инструкции за употреба. Непазването на тези инструкции може да доведе до усложнения, включително сериозно нараняване на пациента или смърт.

Ако даден потребител и/или пациент разбере за сериозен инцидент, възникнал във връзка с водача, той следва да докладва този факт на производителя и компетентния орган на държавата членка.

Тези инструкции за употреба се отнасят за сериите ASAHI Miracle, MIRACLEbros и Grand Slam. За подробности (дължина на водача, дължина на рентгеноконтрастната част и т.н.) направете справка с етикета на продукта.

### Описания

Основната структура на този водач се състои от конусовидна сърцевина на проводника и намотка. Конусовидната сърцевина на проводника и намотката са запосени. Дължината на намотката е рентгеноконтрастна, така че нейната позиция може лесно да бъде потвърдена при рентгеноскопия. Дисталната повърхност е покрита с хидрофобно (силиконово) покритие, а проксималната повърхност е покрита с PTFE (политетрафлуоретилен). В проксималния край на изделията, освен на тези с обща дължина 300 см, има връзка за удължител, който се използва за заместване на комбинираният изделие, към което може да се свърже удължителят ASAHI INTECC.

Вижте таблицата по-долу за натоварването на върха\* на този продукт.

Таблица 1. Спецификации на продукта

| Наименование на продукта        | Външен диаметър      | Натоварване на върха* |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ASAHI Miracle 3/MIRACLEbros 3   | 0,36 мм (0,014 инча) | 3,0 gf                |
| ASAHI Miracle 6/MIRACLEbros 6   | 0,36 мм (0,014 инча) | 6,0 gf                |
| ASAHI Miracle 12/MIRACLEbros 12 | 0,36 мм (0,014 инча) | 12,0 gf               |
| Grand Slam                      | 0,36 мм (0,014 инча) | 0,7 gf                |

\*Стойностите за натоварване на върха представляват средните стойности на стойностите на продуктовете спецификация, измерени съгласно вътрешния стандартен метод за изпитване, като се приема силата, приложена върху лезията от върха на водача.

### Инструкции за употреба

Този водач е предназначен за обща перкутанна коронарна интервенция (PCI). Този водач е предназначен да улесни поставянето на балонни дилатационни катетри или други интервенционни терапевтични устройства в сърдечно-съдовата система.

**Този водач не е предназначен за използване в невровакулатурата и периферната васкулатура.**

### Целева популация, подлежаща на лечение

Сериие ASAHI Miracle, MIRACLEbros и Grand Slam са предназначени за пациенти, които отговарят на показания за PCI процедури. Те не са предназначени за употреба при новородени, кърмачета или деца, както и пациенти, които са бременни, имат увредена бъбречна функция или които имат алергична реакция към контрастни вещества.

### Противопоказания

- Потвърдете съвместимостта на диаметъра на водача с друго интервенционално устройство преди реална употреба.
- Не използвайте водача при пациенти, които имат алергична реакция към контрастни вещества или които имат нарушена бъбречна функция.
- Не използвайте водача при бременни пациентки или пациентки, които може да са бременни (рентгеновите лъчи могат да засегнат плода).
- Този водач трябва да се използва в здравно заведение, където може незабавно да бъде извършена спешна хирургична операция. Ако не е възможна спешна хирургична операция, в най-лошия случай може да настъпят животозастрашаващи събития.
- Този водач е подложен на предварителна газова стерилизация с етилен оксид (EOG) и е предназначен само за еднократна употреба. Не използвайте повторно или не стерилизирайте повторно. Ако се използва или стерилизира повторно, работата или качеството на този водач и опаковка могат да бъдат компрометирани и съществува риск от усложнения, включително инфекция.

### Предупреждения

- Този водач трябва да се използва само от лекар, който е напълно обучен за лечение чрез PCI.
- Никога не използвайте този водач в комбинация с катетри, които имат метални части, които могат да влязат в директен контакт с повърхността на този водач (напр. катетри за атеректомия, метални дилататори), метални игли или изделия за поставяне на метални обвивки.
- По време на използване на водача проверявайте и наблюдавайте движението на върха му под флуороскопия. Не използвайте в тези части на съда, които не са или не могат да бъдат визуализирани.
- Не свързвайте този водач с подвижни удължители от производители, различни от ASAHI INTECC. Не манипулирайте този водач, докато подвижният удължител е свързан. В противен случай водачът може да се повреди или подвижният удължител може неволно да се откачи.
- Не модифицирайте този водач по каквато и да е причина.

### Предпазни мерки

- Не използвайте водача след изтичане на срока на годност, посочен на етикета. Изхвърлете всеки водач с изтекъл срок на годност.
- Водачите са деликатни инструменти и с тях трябва да се работи внимателно.
- Ако опаковката е отворена или повредена, не използвайте водача. Отворете опаковката точно преди непосредствена употреба. Използвайте асептична техника при боравене и използване на водача.
- Не бършете този водач с органичен разтвор като спирт.
- Вземете превантивни мерки срещу инфекция след употреба. Изхвърлете този водач и опаковката като медицински отпадък.
- Никога не натискайте, не използвайте като свредло, не изтегляйте или не затягвайте водач, който среща съпротивление. Затягането или натискането на този водач срещу съпротивление може да причини повреда и/или отлеждане на върха на водача, или директно увреждане на съд. Неспазването на това предупреждение може да причини повреда на този водач. Определете причината за резистентност под флуороскопия и

извършете всички необходими коригиращи действия.

- Винаги придвижвайте напред или изтегляйте водачите бавно и внимателно.
- Когато затягате този водач вътре в кръвоносния съд, не затягайте непрекъснато в една и съща посока. Когато затягате водача, завъртете го последователно по посока на часовниковата стрелка и обратно на часовниковата стрелка. Не правете повече от две завъртания ( $720^\circ$ ) в една и съща посока.
- Промийте водача с хепаринизиран и стерилизиран физиологичен разтвор или друг подходящ разтвор, докато го изваждате и поставяте отново, за да предотвратите навлизането на въздух в интервенционалното устройство. Извършете внимателно смяната на този водач, за да предотвратите навлизане на въздух и/или нараняване. При повторно въвеждане на водача се уверете, че върхът на интервенционалното устройство е свободен в лумена на съда и не е срещу стената на съда. Ако не го направите, това може да доведе до травма. Използвайте рентгеноконтрастния маркер на интервенционалното устройство, за да потвърдите позицията.
- Свободното движение на водача в рамките на интервенционалното устройство е важна характеристика на системата с управляем водач, тъй като дава на потребителя ценна тактична информация. Тествайте системата за устойчивост преди употреба. Регулирайте или сменете хемостатната клапа с регулируема клапа, ако се установи, че възпрепятства движението на водача.
- Не извършвайте поставяне на стент, като използвате повече от един водач или

операция с водач през опора на стент. В противен случай стентът може да се повреди или водачът да се счупи или да се разпадне.

- Преди употреба се уверете, че този водач е подходящ по размер и форма за процедурата и е съвместим с изделието, което ще използвате в комбинация.
- Разгледайте инструкциите за употреба, приложени към медицинското изделие (напр. катетри за балонна дилатация или други интервенционални устройства), което ще се използва в комбинация с този водач.
- Когато свързвате подвижния удължител с този водач, той трябва да бъде здраво поставен в граничната линия между покритието без PTFE и покритието с PTFE в проксималния край на водача. Ако се открие някаква неизправност във връзката, незабавно спрете да използвате водача.
- Проверете внимателно водача за огъвания, прегъвания или други повреди преди употреба и когато е възможно по време на процедурата. Не използвайте водача, ако е повреден.
- Когато оформяте върха, внимавайте да не повредите намотката.
- Преди да въведете водача, проверете кой край е дисталният край и се уверете, че сте го поставили от дисталния край.
- Поддържайте непрекъснато промиване с физиологичен разтвор между водещия катетър и интервенционалното устройство и между интервенционалното устройство и водача по време на процедурата. Промиването предотвратява образуването на контрастна материя и/или съсирването върху водача и в лумена на катетъра.

Перфорация на съда  
Тромб  
Аритмия  
Спадане на кръвното налягане

Усложнения, свързани с кървене  
Инфаркт  
Вазоспазъм  
Алергична реакция

Емболия  
Ишемия  
Съдова оклузия


## Как да използвате

- Проверка преди употреба
  - Преди употреба проверете внимателно и се уверете, че водачът и опаковката не са повредени.
  - Преди употреба потвърдете, че водачът е съвместим с интервенционалните устройства, които ще използвате.
- Подготовка
  - Изберете най-подходящия водач за засегнатата област и извадете тръбния държач, съдържащ водача, от стерилната опаковка.
  - Напълнете тръбния държач с хепаринизиран и стерилизиран

физиологичен разтвор, като използвате спринцовка, за да намокрите цялото изделие. Обърнете внимание, че през това време хепаринизираният и стерилизиран физиологичен разтвор може да се разлее от тръбния държач.

с) Напълнете лумена на интервенционалното устройство с хепаринизиран и стерилизиран физиологичен разтвор, преди да поставите водача.

д) Освободете водача от скобата за задния край и го плъзнете бавно, бутнете дисталния край на водача през тръбния държач (B). (Фигура 1)

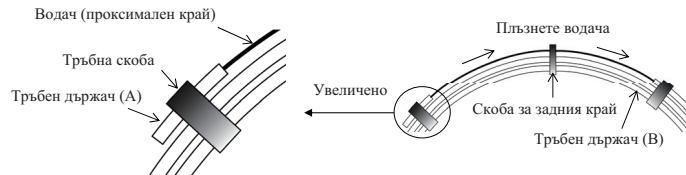

Фигура 1

- Когато дисталният край на водача е удължен 5 до 6 см извън другия край на тръбния държач, ако е необходимо, оформете върха в съответствие със стандартната практика.
- Внимателно хванете водача, който е излязъл от дисталния край на тръбния държач в точката, която е възможно най-близо до тръбния държач, и издръпайте водача бавно и внимателно.
- Ако почувствате съпротивление при отстраняване на водача от тръбния държач, инжектирайте отново хепаринизиран и стерилизиран физиологичен разтвор в тръбния държач. Продължете да

отстраняване водача, след като съпротивлението вече не се усеща. Уверете се, че сте инжектирали достатъчно хепаринизиран и стерилизиран физиологичен разтвор в тръбния държач, тъй като той може да се повреди при принудително отстраняване на водача.

h) След като издръпате водача от тръбния държач, проверете го, за да се уверите, че не е повреден.

## 3. Процедури по въвеждане

- Система над проводника
  - Вкарайте дисталния край на водача внимателно в лумена на водача на

## Неизправности и нежелани събития

Възможните неизправности и нежелани събития при използването на този водач включват, но не се ограничават до следното:

### 1. Неизправности

|                                  |                                |                           |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Неуспех при преминаване на лезия | Счупване или огъване на водача | Повреда като отделяне     |
| Трудности при отстраняването     | Отгледане от покритието        | Парчета от повреден водач |

### 2. Нежелани събития

|       |          |                  |
|-------|----------|------------------|
| Смърт | Инфекция | Дисекция на съда |
|-------|----------|------------------|

- интервенционалното устройство.
- b) Внимателно придвижете напред този водач, докато върхът му е точно проксимално до върха на интервенционалното устройство.
- c) Захванете водещия катетър и поставете системата за интервенционалното устройство (с водач) в Y-образния конектор.
- d) Придвижете напред системата на интервенционалното устройство през водещия катетър, докато върхът на системата на водача е точно проксимално до върха на водещия катетър.
- e) Затегнете хемостазната клапа на Y-образния конектор, за да създадете уплътнение около интервенционното устройство. Уверете се, че движението на водача все още е допустимо.
- f) Проверете дали водачът се движи гладко.
- g) Прикрепете устройството за затягане към водача, ако е необходимо.
- h) Придвижете напред този водач под флуороскопия, за да премине през лезията. Потвърдете чрез ангиография, че водачът е преминал през стеснената целева лезия.
- i) Наблюдавайте движението на водача в съдовете.
- j) Придвижете напред интервенционалното устройство, докато се достигне лезията, като същевременно предотвратявате движението на водача. Уверете се, че дисталният връх на водача и местоположението му в съда са видими по време на манипулации с интервенционалното устройство.

#### ■ Система за бърз обмен

### Начин на съхранение

Не дръжте водача и опаковката в огънато положение и/или в състояние под тежко натоварване. Този водач и опаковката трябва да се пазят от вода. Съхранявайте на хладно, тъмно и сухо място.

### Срок на годност

Срокът на годност е посочен на етикета на опаковката на водача.

### Съдържание

5 броя / кутия

### Отказ от отговорност

- a) Включете водещия катетър.
- b) Поставете интродюсера на водача в Y-образния конектор на водещия катетър.
- c) Внимателно поставете върха на водача в интродюсера.
- d) Придвижете напред водача през водещия катетър под флуороскопия, докато върхът на водача е точно проксимално до върха на водещия катетър.
- e) Прикрепете устройството за затягане към водача, ако е необходимо.
- f) Придвижете напред водача под флуороскопия, за да премине през лезията. Потвърдете чрез ангиография, че водачът е преминал през стеснената целева лезия.
- g) Наблюдавайте движението на водача в съдовете.
- h) Отстранете устройството за затягане на водача и интродюсера на водача.
- i) Проследете интервенционалното устройство през водача, като същевременно предотвратявате движението на водача, и придвижете напред, докато се достигне лезията. Уверете се, че дисталният връх на водача и местоположението му в съда са видими по време на манипулации с интервенционалното устройство.

#### 4. Процедури по смяна на водача

##### ■ Система над проводника

- a) Отстранете този водач бавно, докато наблюдавате движението му под флуороскопия.
- b) Поставете следващия водач в съответствие с указанията в този раздел „Как да използвате“.

По никакъв начин „ASAHI INTECC CO., LTD. и неговите дъщерни дружества“ (наричани по-нататък „Компанията“) не носят отговорност за злополуки, физически наранявания, нежелани събития, дължащи се на неправилна употреба на продукта(ите), или всяка друга употреба, несъвместима с тези инструкции. В никакъв случай Компанията не носи отговорност за каквито и да е щети или (i) произтичащи от съхранението на продукта(ите) след изпращането от Компанията, или (ii) поради подбор на пациенти, хирургични техники или всякакви други медицински дейности от лечебното заведение, което използва продукта(ите).

„ASAHI Miracle“, „MIRACLEBros“, „Grand Slam“ и „EXTENSION“ са търговски марки или регистрирани търговски марки на ASAHI INTECC CO., LTD. в Япония и други страни.

Seriya ASAHI Miracle / MIRACLEbros  
Grand Slam  
PCI vodilica  
Upute za uporabu

Prije uporabe ove vodilice pažljivo pročitajte i pridržavajte se odjeljaka Indikacije za uporabu, Kontraindikacije, Upozorenja, Mjere opreza i Kako se koristi u ovim Uputama za uporabu. Ako ih se ne budete pridržavali, može doći do komplikacija, uključujući ozbiljne ozljede pacijenta ili smrtnog ishoda.

Ako korisnik i/ili pacijent dođe do saznanja o ozbiljnoj nezgodi koja se javila vezano s ovom vodicom, prijavite tu činjenicu proizvođaču i nadležnom tijelu zemlje članice.

Ove Upute za uporabu primjenjuju se na serije ASAHI Miracle, MIRACLEbros i Grand Slam. Za pojedinosti (duljina vodilice, duljina radionepropusnog dijela, itd.), pročitajte etiketu proizvoda.

Opis

Osnovna struktura vodilice sastoji se od konusne žice s jezgrom i namotaja. Konusna žica s jezgrom i namotaj su zalemljeni. Duljina namotaja je radionepropusna tako da se njegov položaj može lako potvrditi radioskopijom. Distalna površina obložena je hidroforbnim (silikonskim) oblogom, a proksimalna površina obložena je materijalom PTFE (politetrafluoretilen). Na proksimalnom kraju uređaja, osim onim ukupne duljine od 300 cm, nalazi se priključak za produžnu žicu, koja služi za zamjenu kombiniranog uređaja; moguće je spojiti produžnu i žicu tvrtke ASAHI INTECC.

Pogledajte tablicu ispod za opterećenje vrha\* ovog proizvoda.

Tablica 1 Specifikacije proizvoda

| Naziv proizvoda                  | Vanjski promjer      | Opterećenje vrha* |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| ASAHI Miracle 3/ MIRACLEbros 3   | 0,36 mm (0,014 inča) | 3,0 gf            |
| ASAHI Miracle 6/ MIRACLEbros 6   | 0,36 mm (0,014 inča) | 6,0 gf            |
| ASAHI Miracle 12/ MIRACLEbros 12 | 0,36 mm (0,014 inča) | 12,0 gf           |
| Grand Slam                       | 0,36 mm (0,014 inča) | 0,7 gf            |

\*Vrijednosti opterećenja vrha predstavljaju srednje vrijednosti od vrijednosti specifikacije proizvoda izmjerene u skladu s internom standardnom metodom ispitivanja uz pretpostavku sile koju na leziju primjenjuje vrh vodilice.

Indikacije za uporabu

Ova je vodilica namijenjena za opću perkutanu koronarnu intervenciju (PCI). Ova vodilica namijenjena je za olakšavanje plasiranja balon dilatacijskih katetera ili drugih intervencijskih terapijskih uređaja u kardiovaskularni sustav. Ova vodilica nije namijenjena za uporabu u neurovaskularnom i perifernom vaskularnom sustavu.

Ciljana liječena populacija

Seriye ASAHI Miracle, MIRACLEbros i Grand Slam namijenjene su za pacijente koji imaju indikacije za PCI postupke. Nije indicirana za primjenu kod novorođenčadi, dojenčadi ili djece, kao ni kod pacijenata koje su trudne, pacijenata koji imaju oštećenu funkciju bubrega ili koji imaju alergijsku reakciju na kontrastna sredstva.

Kontraindikacije

- Potvrdite kompatibilnost promjera vodilice s drugim intervencijskim uređajem prije konkretne uporabe.
  - Nemojte koristiti vodicu na pacijentima koji imaju alergijsku reakciju na kontrastne medije ili koji imaju poremećenu funkciju bubrega.
  - Nemojte koristiti vodicu na trudnicama ili pacijenticama koje bi mogle biti trudne (rendgenske zrake mogu utjecati na fetus).
  - Ova se vodilica mora se koristiti u ustanovi gdje se hitna kirurška operacija može obaviti odmah.
- Ako hitna kirurška operacija nije dostupna, u najgoreom slučaju može doći do događaja opasnih po život.
- Ova vodilica prethodno je sterilizirana plinom etilen oksid (EOG) i namijenjena je samo za jednokratnu uporabu. Nemojte ponovno koristiti ili ponovno sterilizirati. Ako se ponovno koristi ili ponovno sterilizira, učinkovitost ili kvaliteta ove vodilice i pakiranja može biti narušena i postoji rizik od komplikacija, uključujući infekciju.

Upozorenja

- Ovu vodicu smije koristiti samo liječnik koji je prošao kompletnu obuku za PCI tretman.
  - Nikada ne koristite ovu vodicu u kombinaciji s kateterima s metalnim dijelovima koji mogu doći u izravan kontakt s površinom ove vodilice (npr. kateteri za aterektomiju, metalni dilatatori), metalnim iglama ili metalnim uvodnim ovojnicama.
  - Za vrijeme korištenja vodilice, provjeravajte i pratite kretanje njenog vrha pod fluoroskopijom.
- Nemojte koristiti u područjima žila koje nisu ili se ne mogu vizualizirati.
- Nemojte spajati vodicu s odvojivim produžnim žicama, a koje je proizveo neki drugi proizvođač a ne ASAHI INTECC. Nemojte rukovati vodicom dok je spojena odvojiva produžna žica. U suprotnom, vodilica se može oštetiti ili bi se odvojiva produžna žica mogla nenamjerno odvojiti.
  - Ni iz kakvog razloga ne smijete obavljati preinake ove vodilice.

Mjere opreza

- Nemojte koristiti vodicu nakon isteka roka označenog na etiketi. Odbacite svaku vodicu kojoj je istekao rok trajanja.
- Vodilice su osjetljivi instrumenti i njima se mora rukovati pažljivo.
- Ako je pakiranje otvoreno ili oštećeno, nemojte koristiti vodicu. Pakiranje otvorite isključivo neposredno prije uporabe. Pri rukovanju i korištenju vodilice koristite aseptičnu tehniku.
- Ne brišite vodicu organskim rastvorima kao što je alkohol.
- Nakon uporabe poduzmite preventivne mjere protiv infekcije. Zbrinite vodicu i pakiranje kao medicinski otpad.
- Nikada nemojte gurati, bušiti, povlačiti ili zatezati vodicu koja nailazi na otpor. Zatezanje ili guranje vodilice protiv otpora može uzrokovati oštećenje i/ili odvajanje vrha vodilice ili izravnu štetu na žili. Ako se ne pridržavate ovih savjeta, može doći do oštećenja vodilice. Pod fluoroskopijom utvrdite uzrok otpora i poduzmite potrebne mjere za uklanjanje.
- Vodilice uvijek uvodite ili povlačite polako i pažljivo.
- Pri zakretanju vodilice unutar krvne žile, nemojte zakretati stalno u istom smjeru. Pri zakretanju vodilice, okrećite je naizmjenično u smjeru kazaljke i suprotno od smjera kazaljke na satu. Nemojte okretati više od dva okreta (720°) u istom pravcu.
- Vodicu isperite hepariniziranom i steriliziranom fiziološkom otopinom ili drugom prikladnom otopinom dok je uklanjate i ponovno uvodite, kako biste spriječili ulazak zraka u intervencijski

- uređaj. Pažljivo obavite zamjenu vodilice kako biste spriječili ulazak zraka i/ili ozljedu. Prilikom ponovnog uvođenja vodilice, uvjerite se da je vrh intervencijskog uređaja slobodan unutar lumena krvne žile i da nije prislonjen na stijenku žile. Ako ne postupite tako, moglo bi doći do ozljede. Za potvrdu položaja, koristite radionepropusni marker intervencijskog uređaja.
- Slobodno kretanje vodilice unutar intervencijskog uređaja važna je značajka upravljivog sustava žice za navođenje jer korisniku daje vrijedne taktične informacije. Prije korištenja ispitajte nailazi li sustav na bilo kakav otpor. Podesite ili zamijenite ventil za hemostazu podesivim ventilom ako se ustanovi da onemogućuje kretanje vodilice.
  - Nemojte postavljati stent korištenjem više od jedne vodilice ili operaciju žice kroz mrežicu stenta. U suprotnom, stent se može oštetiti ili se vodilica može slomiti ili se raspasti.
  - Prije uporabe, potvrdite da je vodilica odgovarajuće veličine i oblika za taj postupak i da je kompatibilna s uređajem s kojim će se koristiti.
  - Pročitajte Upute za uporabu priložene uz medicinski uređaj (npr. balon dilatirajući kateteri

- ili drugi intervencijski terapijski uređaji) koji će se koristiti u kombinaciji s ovom vodilicom.
- Prilikom spajanja odvojive produžne žice s ovom vodilicom, treba je sigurno umetnuti u graničnu liniju između premaza koji nije PTFE i PTFE prema za proksimalnom kraju vodilice. Ako se u spoju otkrije abnormalnost, odmah prestanite koristiti vodilicu.
  - Prije korištenja i kad god je to moguće tijekom postupka, pažljivo pregledajte ima li vodilica savijenja, usukana ili ima neko drugo oštećenje. Nemojte koristiti vodilicu ako je oštećena.
  - Prilikom oblikovanja vrha, pazite da ne oštetite namotaj.
  - Prije uvođenja vodilice, provjerite koji kraj je distalni kraj i osigurajte da ćete uvesti sa distalnog kraja.
  - Održavajte kontinuirano ispiranje fiziološkom otopinom između katetera za navođenje i intervencijskog uređaja te između intervencijskog uređaja i vodilice tijekom postupka. Ispiranje sprječava stvaranje kontrastnog sredstva i/ili zgrušavanje na vodilici i u lumen katetera.

## Nepravilno funkcioniranje i štetni učinci

Moguće neispravno funkcioniranje i nuspojave zbog korištenja vodilice uključuju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

### 1. Neispravno funkcioniranje

|                          |                                 |                            |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Nije prođeno kroz leziju | Prijelom ili savijanje vodilice | Oštećenje poput odvajanja  |
| Poteskoće pri uklanjanju | Spadanje obloga                 | Talag sa oštećene vodilice |


### 2. Štetni učinci

|                         |                        |                     |
|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Smrt                    | Infekcija              | Disekcija žile      |
| Perforacija žile        | Komplikacije krvarenja | Embolija            |
| Tromb                   | Infarkcija             | Ishemija            |
| Aritmija                | Vazospazam             | Vaskularna okluzija |
| Snižavanje krvnog tlaka | Alergijska reakcija    |                     |

## Kako se koristi

- Pregled prije uporabe
  - Prije uporabe, pažljivo pregledajte i potvrdite da su vodilica i pakiranje neoštećeni.
  - Prije uporabe, potvrdite da je vodilica kompatibilna s intervencijskim uređajima koji će se koristiti.
- Priprema

- Izaberite najprikladniju vodilicu za zahvaćeno područje i uklonite držač cijevi u kojem je vodilica iz sterilnog pakiranja.
- Napunite držač cijevi hepariniziranom i steriliziranom fiziološkom otopinom pomoću štrcaljke kako biste natopili cijeli uređaj. Napominjemo da se heparinizirana i sterilizirana fiziološka otopina za to vrijeme

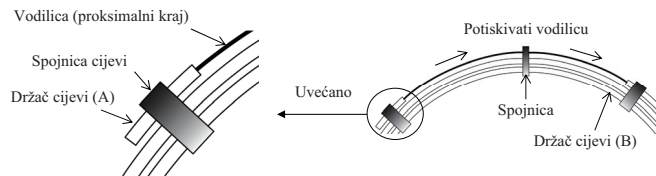

Slika 1

- Kada se distalni kraj vodilice produži 5 do 6 cm izvan drugog kraja držača cijevi, po potrebi oblikujte vrh u skladu sa standardnom praksom.
- Nježno uhvatite vodilicu koja je izašla iz distalnog kraja držača cijevi, na mjestu što je moguće bliže držaču cijevi i polako i pažljivo izvlačite vodilicu.
- Ako osjetite otpor pri vadenju vodilice iz držača cijevi, ponovo ubrizgajte hepariniziranu i steriliziranu fiziološku otopinu u držač cijevi. Nastavite s vadenjem vodilice kada prestanete osjećati otpor. Obavezno ubrizgajte dovoljno heparinizirane i sterilizirane fiziološke otopine u držač cijevi jer se bi se mogla oštetiti prilikom nasilnog vadenja vodilice.
- Nakon povlačenja vodilice iz držača cijevi, pregledajte ju kako biste se uvjerali da nije oštećena.

### 3. Postupci za uvođenje

- Sustav preko žice
  - Pažljivo umetnite distalni kraj vodilice u lumen vodilice intervencijskog uređaja.
  - Pažljivo uvodite vodilicu sve dok vrh ne bude proksimalan u odnosu na vrh intervencijskog uređaja.
  - Zahvatite vodeći kateter i umetnite sustav intervencijskog uređaja (s vodilicom) u priključak Y.
  - Uvodite sustav intervencijskog uređaja kroz

- može izliti iz držača cijevi.
- Napunite lumen intervencijskog uređaja hepariniziranom i steriliziranom fiziološkom otopinom prije umetanja vodilice.
- Otpustite vodilicu iz spojnice i lagano potiskujte vodilicu, gurnite distalni kraj vodilice kroz držač cijevi (B). (Slika 1)

- vodeći kateter sve dok vrh sustava vodilice ne bude proksimalan u odnosu na vrh vodećeg katetera.
- Zategnite ventil za hemostazu priključka Y kako biste stvorili brtvu oko intervencijskog uređaja. Osigurajte da je pomicanje vodilice i dalje dopušteno.
- Provjerite kako biste osigurali glatko pomicanje vodilice.
- Ako je potrebno, pričvrstite uređaj za zakretni moment na vodilicu.
- Uvodite vodilicu pod fluoroskopijom kako bi prošla kroz leziju. Angiografijom potvrdite da je vodilica prošla kroz suženu ciljnu leziju.
- Promatrajte pomicanje vodilice u žilama.
- Uvodite intervencijski uređaj dok ne dođe do lezije, istodobno sprječavajući pomicanje vodilice. Osigurajte da su distalni vrh vodilice i njegova lokacija vidljivi tijekom manipulacije intervencijskim uređajem.

### ■ Sustav brze zamjene

- Zahvatite vodeći kateter.
- Umetnite uvodnicu vodilice u priključak Y vodećeg katetera.
- Pažljivo umetnite vrh vodilice u uvodnicu.
- Uvodite vodilicu kroz vodeći kateter pod fluoroskopijom dok vrh vodilice ne bude proksimalan vrhu vodećeg katetera.
- Ako je potrebno, pričvrstite uređaj za zakretni moment na vodilicu.

- f) Uvodite vodilicu pod fluoroskopijom kako bi prošla kroz leziju. Angiografijom potvrdite da je vodilica prošla kroz suženu ciljnu leziju.
- g) Promatrajte pomicanje vodilice u žilama.
- h) Uklonite uređaj za zakretni moment vodilice i uvodnicu vodilice.
- i) Pratite intervencijski uređaj preko vodilice, istodobno sprječavajući pomicanje vodilice i uvodite dok ne dođe do lezije. Osigurajte

da su distalni vrh vodilice i njegova lokacija vidljivi tijekom manipulacije intervencijskim uređajem.

#### 4. Postupci zamjene vodilice

##### ■ Sustav preko žice

- a) Lagano vadite vodilicu dok nadzirete pomicanje ove vodilice pod fluoroskopijom.
- b) Umetnite sljedeću vodilicu prema uputama iz dijela „Kako se koristi”.

### Način skladištenja

Ne smijete čuvati vodilicu i pakiranje u savijenom i/ili pod teškim teretom. Vodilica i pakiranje moraju se čuvati dalje od vode. Čuvati na hladnom, tamnom i suhom mjestu.

### Rok trajanja

Rok trajanja označen je na etiketi pakiranja vodilice.

### Sadržaj

5 komada / kutija

### Odricanje od odgovornosti

Ni u kojem slučaju „ASAHI INTECC CO., LTD. i njegove pridružene tvrtke” (u daljnjem tekstu „Tvrtka”) biti odgovorni za nezgode, osobne ozljede, štetne učinke uslijed bilo kakve nepravilne uporabe proizvoda ili bilo koje druge uporabe koja nije u skladu s ovim uputama. Ni u kojem slučaju Tvrtka neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (i) koja proizlazi iz skladištenja proizvoda nakon otpreme iz Tvrtke ili (ii) zbog odabira pacijenata, kirurških tehnika ili bilo koje druge medicinske aktivnosti od strane medicinske ustanove koja koristi proizvod(e).

„ASAHI Miracle”, „MIRACLEbros”, „Grand Slam” i „EXTENSION” su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci ASAHI INTECC CO.,LTD. u Japanu i drugim zemljama.

ASAHI seriile Miracle / MIRACLEbros

Grand Slam

Fir de ghidaj pentru intervenția coronariană percutanată (PCI)

Instrucțiuni de utilizare

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza acest fir de ghidaj și respectați secțiunile Indicații pentru utilizare, Contraindicații, Avertismente, Precauții și Modul de utilizare din aceste Instrucțiuni de utilizare. Nerespectarea acestora poate duce la complicații, inclusiv la lezarea gravă a pacientului sau la deces.

În cazul în care un utilizator și/sau un pacient ia la cunoștință de un incident grav care a avut legătură cu firul de ghidaj, raportați acest lucru producătorului și autorității competente a Statului Membre.

Aceste instrucțiuni de utilizare se aplică la ASAHI Miracle, seria MIRACLEbros și Grand Slam. Pentru detalii (lungimea firului de ghidaj, lungimea secțiunii radioopace etc.), a se consulta eticheta produsului.

Descrieri

Structura de bază a acestui fir de ghidaj este formată dintr-un miez conic al firului și o bobină. Miezul conic al firului și bobina sunt lipite. Lungimea bobinei este radioopacă, astfel încât poziția acesteia poate fi confirmată cu ușurință prin radioscopie. Suprafața distală este acoperită cu un strat hidrofob (silicon), iar suprafața proximală este acoperită cu PTFE (politetrafluoroetilenă). La capătul proximal al dispozitivelor, altele decât cele cu o lungime totală de 300 cm, există o legătură pentru un fir de extindere, care este utilizat pentru a înlocui dispozitivul combinat, iar firul de extindere de la ASAHI INTECC poate fi conectat.

Consultați tabelul de mai jos pentru sarcina de vârf\* a acestui produs.

Tabel 1. Specificațiile produsului

| Denumirea produsului             | Diametru exterior    | Sarcina de vârf* |
|----------------------------------|----------------------|------------------|
| ASAHI Miracle 3/ MIRACLEbros 3   | 0,36 mm (0,014 inci) | 3,0 gf           |
| ASAHI Miracle 6/ MIRACLEbros 6   | 0,36 mm (0,014 inci) | 6,0 gf           |
| ASAHI Miracle 12/ MIRACLEbros 12 | 0,36 mm (0,014 inci) | 12,0 gf          |
| Grand Slam                       | 0,36 mm (0,014 inci) | 0,7 gf           |

\*Valorile sarcinii vârfului reprezintă valorile medii ale valorilor din specificațiile produsului măsurate conform metodei de testare a standardului intern, presupunând forța aplicată pe leziune de către vârful firului de ghidaj.

Indicații pentru utilizare

Acest fir de ghidaj este destinat intervenției coronariene percutanate (PCI) generale. Acest fir de ghidaj este destinat să faciliteze plasarea cateterelor de dilatare cu balon sau a altor dispozitive terapeutice de intervenție în interiorul sistemului cardiovascular. **Acest fir de ghidaj nu este destinat utilizării în sistemul neuro-vascular și în sistemul vascular periferic.**

Populația țintă tratată

ASAHI Miracle, seriile MIRACLEbros și Grand Slam sunt destinate pacienților care îndeplinesc indicațiile pentru proceduri de PCI. Nu este indicat pentru utilizare la nou-născuți, sugari sau copii, precum și la pacienții care sunt gravide, au funcția renală afectată sau care au o reacție alergică la substanța de contrast.

Contraindicații

- Confirmați compatibilitatea diametrului firului de ghidaj cu alt dispozitiv de intervenție înainte de utilizarea efectivă.
  - Nu folosiți firul de ghidaj la pacienții care au o reacție alergică la substanța de contrast sau care au funcția renală afectată.
  - Nu utilizați firul de ghidaj la pacientele gravide sau la pacientele care ar putea fi gravide (razele X pot afecta fătul).
  - Acest fir de ghidaj trebuie utilizat într-o instituție în care se poate efectua imediat intervenții
- chirurgicale de urgență. În cazul în care o intervenție chirurgicală de urgență nu este posibilă, în cel mai rău caz, pot apărea evenimente care pun viața în pericol.

  - Acest fir de ghidaj este pre-sterilizat cu gaz de oxid de etilenă (EOG) și este destinat unei singure utilizări. A nu se reutiliza sau resteriliza. Dacă este reutilizat sau resterilizat, performanța sau calitatea acestui fir de ghidaj și a ambalajului poate fi compromisă și există riscul apariției unor complicații, inclusiv a unei infecții.

Avertismente

- Acest fir de ghidaj trebuie utilizat numai de către un medic care este pe deplin instruit în tratamentul pacienților supuși intervenției coronariene percutanate (PCI).
  - Nu utilizați niciodată acest fir de ghidaj în combinație cu catetere care au părți metalice care pot intra în contact direct cu suprafața acestui fir de ghidaj (de exemplu, catetere de aterectomie, dilatatoare metalice), ace metalice sau inserții cu învelișuri placute cu metal.
  - În timpul utilizării firului de ghidaj, verificați și monitorizați mișcarea vârfului acestuia sub
- fluoroscopie. A nu se utiliza în zone ale vasului care nu sunt sau nu pot fi vizualizate.

  - A nu se conecta acest fir de ghidaj cu fire de extensie detașabile produse de alți producători decât ASAHI INTECC. A nu se manevra acest fir de ghidaj în timp ce firul de extensie detașabil este conectat. În caz contrar, firul de ghidaj se poate deteriora sau firul de extensie detașabil se poate desprinde involuntar.
  - A nu se modifica acest fir de ghidaj pentru niciun motiv.

Precauții

- A nu se folosi firul de ghidaj după data de expirare indicată pe etichetă. Aruncați orice fir de ghidaj care depășește data de expirare.
  - Firele de ghidaj sunt instrumente delicate și trebuie manevrate cu grijă.
  - Dacă ambalajul este deschis sau deteriorat, nu folosiți firul de ghidaj. A nu se deschide ambalajul decât cu puțin timp înainte de utilizare. Folosiți o tehnică aseptică la manevrarea și utilizarea firului de ghidaj.
  - Nu ștergeți acest fir de ghidaj folosind o soluție organică, cum ar fi alcoolul.
  - Luați măsuri de prevenire a infecțiilor după utilizare. Aruncați acest fir de ghidaj și ambalajul ca deșeu medical.
  - Nu împingeți, nu trageți, nu retrageți și nu răsuciți niciodată acest fir de ghidaj care
- întâmpină rezistență. Răsucirea sau împingerea acestui fir de ghidaj care întâmpină rezistență poate provoca deteriorarea și/sau separarea vârfului acestui fir de ghidaj sau deteriorarea directă a unui vas. În caz contrar, acest fir de ghidaj poate fi deteriorat. Determinați cauza rezistenței sub fluoroscopie și luați orice măsură de remediere necesară.

  - Intotdeauna introduceți sau retrageți firele de ghidaj încet și cu atenție.
  - Atunci când răsuciți acest fir de ghidaj în interiorul vasului de sânge, nu răsuciți în mod continuu în aceeași direcție. Atunci când răsuciți firul de ghidaj, rotiți-l alternativ în sensul acelor de ceasornic și în sens invers. Nu efectuați mai mult de două rotații (720°) în aceeași direcție.

- Spălați firul de ghidaj cu soluție salină heparinizată și sterilizată sau cu o altă soluție potrivită în timp ce îl scoateți și îl reintroduceți pentru a preveni pătrunderea aerului în dispozitivul de intervenție. Efectuați schimbarea acestui fir de ghidaj cu atenție pentru a preveni pătrunderea aerului și/sau traumatisme. Când reintroduceți firul de ghidaj, confirmați că vârful dispozitivului de intervenție nu este blocat în lumenul vasului și nu se sprijină pe peretele vasului. În caz contrar, se pot produce traumatisme. Utilizați marker-ul radioopac al dispozitivului de intervenție pentru a confirma poziția.
- Mișcarea liberă a firului de ghidaj în cadrul dispozitivului de intervenție este o caracteristică importantă a unui sistem de fire de ghidaj dirijabile, deoarece oferă utilizatorului informații tactile valoroase. Testați sistemul pentru a detecta orice rezistență înainte de utilizare. Reglați sau înlocuiți valva hemostatică cu o valvă reglabilă dacă se constată că aceasta împiedică mișcarea firului de ghidaj.
- Nu efectuați plasarea stentului folosind mai mult de un fir de ghidaj sau operația cu fire prin suportul stentului. În caz contrar, stentul poate fi deteriorat sau firul de ghidaj se poate rupe sau desprinde.
- Înainte de utilizare, confirmați că acest fir de ghidaj este adecvat ca dimensiune și formă pentru procedură și este compatibil cu

dispozitivul care urmează să fie utilizat în combinație.

- Consultați instrucțiunile de utilizare atașate dispozitivului medical (de exemplu, catetere de dilatare cu balon sau alte dispozitive terapeutice de intervenție) care urmează să fie utilizate în combinație cu acest fir de ghidaj.
- Atunci când conectați firul de extensie detașabil cu acest fir de ghidaj, acesta trebuie să fie introdus în siguranță până la linia de demarcație dintre stratul de acoperire fără PTFE și stratul de acoperire cu PTFE de la capătul proximal al firului de ghidaj. În cazul în care se constată orice anomalie la conectare, întrerupeți imediat utilizarea firului de ghidaj.
- Inspectați cu atenție firul de ghidaj pentru a vedea dacă există îndoiri, noduri sau alte deteriorări înainte de utilizare și ori de câte ori este posibil în timpul procedurii. Nu utilizați firul de ghidaj dacă este deteriorat.
- Atunci când modelați vârful, aveți grijă să nu deteriorați bobina.
- Înainte de a introduce firul de ghidaj, verificați care este capătul distal și asigurați-vă că îl introduceți de la capătul distal.
- Asigurați o clătire continuă cu soluție salină între cateterul de ghidaj și dispozitivul de intervenție și firul de ghidaj în timpul procedurii. Clătirea previne formarea substanței de contrast și/sau formarea de cheaguri pe firul de ghidaj și în lumenul cateterului.

## Defecțiuni și reacții adverse

Posibilele defecțiuni și efecte adverse cauzate de utilizarea acestui fir de ghidaj includ, dar nu se limitează la următoarele:

### 1. Defecțiuni

|                                         |                                        |                                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Imposibilitatea de a străbate o leziune | Ruperea sau îndoirea firului de ghidaj | Deteriorări, cum ar fi separarea            |
| Dificultăți la îndepărtare              | Desprinderea stratului de acoperire    | Resturile de la un fir de ghidaj deteriorat |

### 2. Reacții adverse

|                              |                        |                   |
|------------------------------|------------------------|-------------------|
| Deces                        | Infecții               | Disecția vaselor  |
| Perforarea vaselor           | Complicații hemoragice | Embolie           |
| Dezvoltarea trombolor        | Infarct                | Ischemie          |
| Aritmie                      | Spasm vascular         | Ocluzii vasculare |
| Scăderea tensiunii arteriale | Reacții alergice       |                   |

## Mod de utilizare

### 1. Inspectia înainte de utilizare

- Înainte de utilizare, inspectați cu atenție și confirmați că firul de ghidaj și ambalajul nu sunt deteriorate.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că firul de ghidaj este compatibil cu dispozitivele de intervenție care urmează să fie utilizate.

### 2. Pregătirea

- Selecțiți cel mai potrivit fir de ghidaj pentru zona afectată și îndepărtați tubul suport care conține firul de ghidaj din ambalajul steril.
- Umpleți tubul de suport cu soluție salină

Fir de ghidaj (capătul proximal)

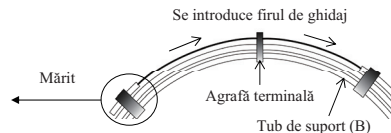
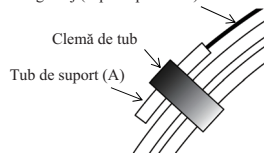


Figura 1

- Atunci când capătul distal al firului de ghidaj se extinde cu 5 până la 6 cm dincolo de celălalt capăt al tubului de suport, dacă este necesar, modelați vârful în conformitate cu practica standard.
- Prindeți ușor firul de ghidaj care a ieșit din capătul distal al tubului de suport, în punctul cât mai apropiat de tubul de suport și extrageți firul de ghidaj încet și cu grijă.
- Dacă la scoaterea firului de ghidaj din tubul de suport se întâmpină rezistență, se injectează din nou soluție salină heparinizată și sterilizată în tubul de suport. Continuați să îndepărtați firul de ghidaj după ce nu mai întâmpinați rezistență. Asigurați-vă că injectați suficientă soluție salină heparinizată și sterilizată în tubul de suport, deoarece poate fi deteriorat atunci când îndepărtați cu forță firul de ghidaj.
- După ce ați extras firul de ghidaj din tubul de suport, inspectați-l pentru a vă asigura că nu este deteriorat.

### 3. Proceduri de inserție

- Sistem cu cateter peste firul de ghidaj
  - Introduceți cu grijă capătul distal al firului

- heparinizată și sterilizată cu ajutorul unei seringi pentru a îmbiba întregul dispozitiv. Rețineți că soluția salină heparinizată și sterilizată se poate vărsa din tubul de suport în acest moment.
- Umpleți lumenul dispozitivului de intervenție cu soluție salină heparinizată și sterilizată înainte de a introduce firul de ghidaj.
- Eliberați firul de ghidaj din agrafa terminală și introduceți-l încet, împingeți capătul distal al firului de ghidaj prin tubul de suport (B). (Figura 1)

- de ghidaj în lumenul firului de ghidaj al dispozitivului de intervenție.
- Înainte de a introduce firul de ghidaj cu atenție până când vârful său este chiar în apropierea vârfului dispozitivului de intervenție.
- Conectați cateterul de ghidaj și introduceți sistemul dispozitivului de intervenție (cu firul de ghidaj) în conectorul în Y.
- Înaintați sistemul dispozitivului de intervenție prin cateterul de ghidaj până când vârful sistemului cu fir de ghidaj este chiar în apropierea vârfului cateterului de ghidaj.
- Strângeți valva hemostatică a conectorului în Y pentru a crea o etanșare în jurul dispozitivului de intervenție. Asigurați-vă că mișcarea firului de ghidaj este încă posibilă.
- Verificați dacă firul de ghidaj se mișcă fără probleme.
- Atașați dispozitivul de torsiune la firul de ghidaj, dacă este necesar.
- Înaintați acest fir de ghidaj sub fluoroscopie pentru a străbate leziunea. Confirmați cu ajutorul angiografiei că firul de ghidaj a

parcurs leziunea țintă îngustată.

- i) Observați mișcarea firului de ghidaj în vase.
- j) Înațtați dispozitivul de intervenție până când se ajunge la leziune, împiedicând în același timp mișcarea firului de ghidaj. Asigurați-vă că vârful distal al firului de ghidaj și locația acestuia în vas sunt vizibile în timpul manevrelor dispozitivului de intervenție.

■ Sistem de schimbare rapidă

- a) Conectați cateterul de ghidaj.
- b) Inserați liderul firului de ghidaj în conectorul în Y al cateterului de ghidaj.
- c) Introduceți cu grijă vârful firului de ghidaj în lider.
- d) Înațtați firul de ghidaj prin cateterul de ghidaj sub fluoroscopie până când vârful firului de ghidaj este chiar în apropierea vârfului cateterului de ghidaj.
- e) Atașați dispozitivul de torsiune la firul de ghidaj, dacă este necesar.
- f) Înațtați firul de ghidaj sub fluoroscopie

pentru a străbate leziunea. Confirmați cu ajutorul angiografiei că firul de ghidaj a parcurs leziunea țintă îngustată.

- g) Observați mișcarea firului de ghidaj în vase.
- h) Îndepărtați dispozitivul de torsiune a firului de ghidaj și liderul firului de ghidaj.
- i) Urmăriți dispozitivul de intervenție peste firul de ghidaj, împiedicând în același timp mișcarea firului de ghidaj, și avansați până când se ajunge la leziune. Asigurați-vă că vârful distal al firului de ghidaj și locația acestuia în vas sunt vizibile în timpul manevrelor dispozitivului de intervenție.

4. Proceduri de schimbare a firului de ghidaj

■ Sistem cu cateter peste firul de ghidaj

- a) Îndepărtați încet acest fir de ghidaj în timp ce monitorizați mișcarea acestuia sub fluoroscopie.
- b) Inserați următorul fir de ghidaj în conformitate cu instrucțiunile din această secțiune „Instrucțiuni de utilizare”.

## Metoda de depozitare

Nu păstrați firul de ghidaj și ambalajul în stare îndoită și/sau în condiții de sarcini foarte mari. Acest fir de ghidaj și ambalajul trebuie păstrate departe de apă. Depozitați-le într-un loc răcoros, întunecat și uscat.

## Data de expirare

Data de expirare este indicată pe eticheta ambalajului firului de ghidaj.

## Conținut

5 bucăți / cutie

## Clauza privind exonerarea de răspundere

În niciun caz „ASAHI INTECC CO., LTD. și companiile sale afiliate” (denumite în continuare „Compania”) nu vor fi răspunzătoare pentru accidente, vătămări corporale, reacții adverse datorate utilizării necorespunzătoare a produsului (produselor) sau oricărei alte utilizări neconforme cu aceste instrucțiuni. În niciun caz Compania nu va fi răspunzătoare pentru orice daune (i) care rezultă din depozitarea produsului (produselor) după expedierea de către Companie sau (ii) datorate selecției pacienților, tehnicilor chirurgicale sau oricăror alte activități medicale desfășurate de către instituția medicală care utilizează produsul (produsele).

„ASAHI Miracle”, „MIRACLEbros”, „Grand Slam” și „EXTENSION” sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale ASAHI INTECC CO., LTD. în Japonia și în alte țări.

Serije ASAHI Miracle/MIRACLEbros

Grand Slam

Vodilna žica PCI

Navodila za uporabo

Pred uporabo te vodilne žice natančno preberite ta navodila in upoštevajte razdelke Indikacije za uporabo, Kontraindikacije, Opozorila, Previdnostni ukrepi in Kako se uporablja v teh navodilih za uporabo. Če tega ne storite, lahko pride do zapletov, vključno z resnimi poškodbami bolnika ali smrtjo.

Če uporabnik in/ali bolnik izve za resen incident, ki se je zgodil v zvezi z vodilno žico, o tem obvesti proizvajalca in pristojni organ države članice.

Ta navodila za uporabo veljajo za serije ASAHI Miracle, MIRACLEbros in Grand Slam. Za podrobnosti (dolžina vodilne žice, dolžina radioopačnega odseka itd.) glejte etiketo izdelka.

Opisi

Osnovno strukturo te vodilne žice sestavljata zožena jedra žica in tuljava. Zožena jedra žica in tuljava sta spajkani. Dolžina tuljave je radioopačna, tako da je njeno lego mogoče enostavno potrditi z radioskopijo. Distalna površina je prevlečena s hidrofbno (silikonsko) prevleko, proksimalna površina pa je prevlečena s PTFE (politetrafluoroetilen). Na proksimalnem koncu pripomočkov, razen tistih s skupno dolžino 300 cm, je priključek za podaljševalno žico, ki se uporablja za zamenjavo kombiniranega pripomočka, in priključi se lahko podaljševalna žica ASAHI INTECC.

Glejte spodnjo tabelo za obremenitev konice\* tega izdelka.

Tabela 1. Specifikacije izdelka

| Ime izdelka                     | Zunanji premer        | Obremenitev konice* |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|
| ASAHI Miracle 3/MIRACLEbros 3   | 0,36 mm (0,014 palca) | 3,0 gf              |
| ASAHI Miracle 6/MIRACLEbros 6   | 0,36 mm (0,014 palca) | 6,0 gf              |
| ASAHI Miracle 12/MIRACLEbros 12 | 0,36 mm (0,014 palca) | 12,0 gf             |
| Grand Slam                      | 0,36 mm (0,014 palca) | 0,7 gf              |

\*Vrednosti obremenitve konice predstavljajo povprečne vrednosti od vrednosti specifikacije izdelka, izmerjene v skladu z interno standardno preskusno metodo, ob predpostavki sile, ki deluje na lezijo s konico vodilne žice.

Indikacije za uporabo

Ta vodilna žica je namenjena splošnemu perkutanemu koronarnemu posegu (PCI). Ta vodilna žica je namenjena olajšanju namestitve balonskih dilatacijskih katetrov ali drugih interventnih terapevtskih pripomočkov v kardiovaskularni sistem.

Ta vodilna žica ni namenjena uporabi v nevrovaskularnem sistemu in v perifernem vaskularnem sistemu.

Ciljna zdravljena populacija

Serije ASAHI Miracle, MIRACLEbros in Grand Slam so namenjene bolnikom, ki izpolnjujejo indikacije za postopke s PCI. Ni indicirano za uporabo pri novorojenčkih, dojenčkih ali otrocih ter bolnicah, ki so noseče, bolnikov, ki imajo okvarjeno ledvično funkcijo in imajo alergijsko reakcijo na kontrastna sredstva.

Kontraindikacije

- Pred dejansko uporabo potrdite združljivost premera vodilne žice z drugimi intervencijskimi pripomočki.
- Vodilne žice ne uporabljajte pri bolnikih, ki imajo alergijsko reakcijo na kontrastna sredstva ali pri tistih, ki imajo oslajbljeno delovanje ledvic.
- Vodilne žice ne uporabljajte pri nosečih bolnicah ali bolnicah, ki bi lahko bile noseče (rentgensko slikanje lahko vpliva na plod).
- To vodilno žico je treba uporabiti v ustanovi, kjer je mogoče takoj izvesti nujni kirurški poseg. Če nujni kirurški poseg ni na voljo, lahko v najslabšem primeru pride do smrtno nevarnih dogodkov.
- Ta vodilna žica je predhodno sterilizirana s plinom etilen oksidom (EOG) in je namenjena samo za enkratno uporabo. Ne uporabljajte ponovno ali ponovno sterilizirajte. Pri ponovni uporabi ali ponovni sterilizaciji je lahko učinkovitost ali kakovost te vodilne žice in embalaže ogrožena in obstaja tveganje zapletov, vključno z okužbo.

Opozorila

- To vodilno žico sme uporabljati le zdravnik, ki je v celoti usposobljen za zdravljenje PCI.
- Nikoli ne uporabljajte te vodilne žice v kombinaciji s katetri, ki imajo kovinske dele, ki bi lahko prišli neposredno v stik s površino te vodilne žice (npr. katetri za aterekotomijo, kovinski dilatatorji), kovinskimi iglami ali uvajalniki iz kovinskega ovojja.
- Med uporabo vodilne žice preverite in spremljajte gibanje njene konice pod fluoroskopijo. Ne uporabljajte na območjih žile, ki niso vidna ali jih ni mogoče videti.
- Te vodilne žice ne povežite s snemljivimi podaljševalnimi žicami, ki jih proizvajajo proizvajalci, ki niso ASAHI INTECC. Ne manipulirajte s to vodilno žico, medtem ko je snemljiva podaljševalna žica priključena. V nasprotnem primeru se lahko vodilna žica poškoduje ali pa se snemljiva podaljševalna žica nenamerno sname.
- Ne spreminjajte te vodilne žice iz kakršnega koli razloga.

Previdnostni ukrepi

- Vodilne žice ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na etiketi. Zavrzite vse vodilne žice, katerim je potekel rok uporabe.
- Vodilne žice so občutljivi instrumenti, zato je treba z njimi ravnati previdno.
- Vodilne žice ne uporabljajte, če je embalaža odprta ali poškodovana. Embalažo odprite šele tik pred uporabo. Pri rokovanju in uporabi vodilne žice uporabljajte aseptično tehniko.
- Ne brišite te vodilne žice z organsko raztopino, kot je alkohol.
- Po uporabi izvajajte preventivne ukrepe proti okužbam. To vodilno žico in embalažo zavrzite kot medicinske odpadke.
- Te vodilne žice, ki naleti na upor, nikoli ne potiskajte, vlecite, izvlecite ali zasukajte. Vrtenje ali potiskanje te vodilne žice proti upor lahko povzroči poškodbe in/ali ločitev konice te vodilne žice ali neposredno poškodbo žile. Če tega ne storite, lahko poškodujete to vodilno žico. Ugotovite vzrok upora pod fluoroskopijo in izvedite vse potrebne popravne ukrepe.
- Vodilne žice vedno premikajte ali izvlecite počasi in previdno.
- Ko zasukate to vodilno žico znotraj krvne žile, je ne vrtite neprekinjeno v isto smer. Ko zasukate vodilno žico, jo izmenično vrtite v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca. Ne zavrtite za več kot dva obrata (720°) v isto smer.
- Med odstranjevanjem in ponovnim uvajanjem vodilno žico sperite s heparinizirano in sterilizirano fiziološko raztopino ali drugo primerno raztopino, da preprečite vstop zraka v

intervencijski pripomoček. Pazljivo zamenjajte to vodilno žico, da preprečite vstop zraka in/ali poškodbe. Pri ponovnem uvajanju vodilne žice se prepričajte, da je konica intervencijskega pripomočka prosta v lumnu žile in ni ob steni žile. Če tega ne storite, lahko pride do poškodbe. Uporabite radioopačni označevalec na intervencijskem pripomočku, da potrdite položaj.

- Prosto gibanje vodilne žice znotraj intervencijskega pripomočka je pomembna značilnost vodljivega sistema vodilne žice, saj daje uporabniku dragocene občutljive informacije. Pred uporabo preizkusite sistem glede kakršnega koli upora. Prilagodite ali zamenjajte ventil za hemostazo z nastavljivim ventilom, če ugotovite, da zavira gibanje vodilne žice.
- Ne izvajajte nameščanja stenta z uporabo več kot ene vodilne žice ali postopka z žico skozi opornik stenta. V nasprotnem primeru se lahko stent poškoduje ali pa se vodilna žica zlomi ali razpade.
- Pred uporabo se prepričajte, da je ta vodilna žica po velikosti in obliki primerna za postopek in je združljiva s pripomočkom, s katerim jo boste uporabljali.

- Glejte navodila za uporabo, ki so priložena medicinskemu pripomočku (npr. balonskim dilatacijskim katetrom ali drugim intervencijskim pripomočkom), ki ga želite uporabiti v kombinaciji s to vodilno žico.
- Pri povezovanju snemljive podaljševalne žice s to vodilno žico mora biti ta varno vstavljena na mejno črto med prevleko brez PTFE in prevleko iz PTFE na proksimalnem koncu vodilne žice. Če opazite kakršno koli nepravilnost v povezavi, takoj prenehajte uporabljati vodilno žico.
- Pred uporabo in med postopkom, kadar koli je to mogoče, skrbno preglejte vodilno žico glede prepogjenosti, pregibov ali drugih poškodb. Ne uporabljajte vodilne žice, če je poškodovana.
- Pri oblikovanju konice pazite, da ne poškodujete tuljave.
- Pred uvajanjem vodilne žice, preverite, kateri konec je distalni konec, in poskrbite, da jo uvedete z distalnega konca.
- Med postopkom vzdržujte neprekinjeno izpiranje s fiziološko raztopino med vodilnim katetrom in intervencijskim pripomočkom ter med intervencijskim pripomočkom in vodilno žico. Izpiranje prepreči nastajanje kontrastnega sredstva in/ali strjevanje na vodilni žici in v lumnu katetra.

## Motnje delovanja in neželeni učinki

Možne motnje delovanja in neželeni učinki zaradi uporabe te vodilne žice vključujejo, vendar niso omejeni na naslednje:

### 1. Motnje delovanja

|                           |                                  |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Nezmožnost prehoda lezije | Zlom ali upogibanje vodilne žice | Poškodba kot je ločevanje žice   |
| Težave pri odstranjevanju | Odstopanje prevleke              | Ostanki poškodovane vodilne žice |

### 2. Neželeni učinki

|                        |                     |                     |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Smrt                   | Okužba              | Disekcija žil       |
| Perforacija žil        | Zapleti krvavenja   | Embolija            |
| Strdek                 | Infarkt             | Ishemija            |
| Aritmija               | Vazospazem          | Vaskularna okluzija |
| Znižanje krvnega tlaka | Alergijska reakcija |                     |

## Kako se uporablja

### 1. Pregled pred uporabo



- a) Pred uporabo natančno preglejte in se

- prepričajte, da sta vodilna žica in embalaža nepoškodovani.
- b) Pred uporabo preverite, če je vodilna žica združljiva z intervencijskimi pripomočki, ki jih boste uporabili.

### 2. Priprava

- a) Izberite najprimernejšo vodilno žico za prizadeto območje in odstranite nosilno cevko, ki vsebuje vodilno žico iz sterilnega ovoja.
- b) Z brizgo napolnite nosilno cevko s heparinirano in sterilizirano fiziološko

Vodilna žica (proksimalni konec)

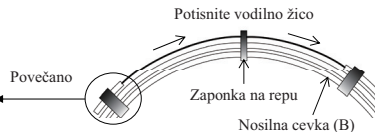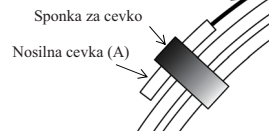

Slika 1

- e) Ko je distalni konec vodilne žice podaljšán 5 do 6 cm čez drugi konec nosilne cevke, po potrebi oblikujte konico v skladu s standardno prakso.
- f) Vodilno žico, ki je izšla iz distalnega konca nosilne cevke, nežno primite na mestu, ki je čim bližje nosilni cevki, in počasi in previdno izvlecite vodilno žico.
- g) Če pri odstranjevanju vodilne žice iz nosilne cevke začutite upor, ponovno vbrizgajte heparinirano in sterilizirano fiziološko raztopino v nosilno cevko. Nadaljujte z odstranjevanjem vodilne žice, ko ni več čutiti upora. Prepričajte se, da ste v nosilno cevko vbrzgali dovolj heparinirane in sterilizirane fiziološke raztopine, ker se lahko poškoduje, ko na silo odstranite prevlečeno vodilno žico.
- h) Ko vodilno žico izvlecete iz nosilne cevke, jo preglejte, da se prepričate, da ni poškodovana.

### 3. Postopki za uvajanje

- Sistem preko žice
  - a) Distalni konec vodilne žice previdno uvajajte v lumen vodilne žice intervencijskega pripomočka.
  - b) Previdno pomaknite to vodilno žico, dokler ni njena konica tik proksimalno od konice intervencijskega pripomočka.

raztopino, da namočite celotni pripomoček. Upoštevajte, da se lahko heparinirana in sterilizirana fiziološka raztopina v tem času razlije iz nosilne cevke.

- c) Preden vstavite vodilno žico, napolnite lumen intervencijskega pripomočka s heparinirano in sterilizirano fiziološko raztopino.
- d) Sprostite vodilno žico iz zapanke na repu in počasi potisnite vodilno žico, potisnite distalni konec vodilne žice skozi nosilno cevko (B). (Slika 1)

- e) Vstavite vodilni kateter in uvedite sistem intervencijskega pripomočka (z vodilno žico) v priključek Y.
- d) Pomaknite sistem intervencijskega pripomočka skozi vodilni kateter, dokler konica sistema vodilne žice ni tik proksimalno od konice vodilnega katetra.
- e) Zategnite ventil za hemostazo priključka Y, da ustvarite tesnenje okoli intervencijskega pripomočka. Prepričajte se, da je premikanje vodilne žice še dovoljeno.
- f) Preverite, če se vodilna žica premika gladko.
- g) Po potrebi pritrdite navorno napravo na vodilno žico.
- h) Pomaknite to vodilno žico pod fluoroskopijo, da gre skozi lezijo. Z angiografijo potrdite, da je vodilna žica prešla skozi zoženo ciljno lezijo.
- i) Opazujte gibanje vodilne žice v žilah.
- j) Pomaknite intervencijski pripomoček naprej, dokler ne dosežete lezije, pri tem pa preprečite premikanje vodilne žice. Zagotovite, da sta distalna konica vodilne žice in njena lokacija v žili vidni med manipulacijami z intervencijskim pripomočkom.

■ Sistem hitre menjave

- a) Vstavite vodilni kateter.
- b) Uvajalnik vodilne žice vstavite v priključek Y vodilnega katetra.
- c) Konico vodilne žice previdno vstavite v uvajalnik.
- d) Pomaknite vodilno žico skozi vodilni kateter pod fluoroskopijo, dokler ni konica vodilne žice tik proksimalno od konice vodilnega katetra.
- e) Po potrebi pritrdite navorno napravo na vodilno žico.
- f) Pomaknite vodilno žico pod fluoroskopijo, da gre skozi lezijo. Z angiografijo potrdite, da je vodilna žica prešla skozi zoženo ciljno lezijo.
- g) Opazujte gibanje vodilne žice v žilah.
- h) Odstranite navorno napravo vodilne žice in

uvajalnik vodilne žice.

- i) Sledite intervencijskemu pripomočku preko vodilne žice, medtem ko preprečujete premikanje vodilne žice, in pomikajte, dokler ne dosežete lezije. Zagotovite, da sta distalna konica vodilne žice in njena lokacija v žili vidni med manipulacijami z intervencijskim pripomočkom.

4. Postopki za zamenjavo vodilne žice

■ Sistem preko žice

- a) Počasi odstranite to vodilno žico, medtem ko spremljate gibanje te vodilne žice pod fluoroskopijo.
- b) Uvedite naslednjo vodilno žico v skladu z navodili v tem razdelku »Kako se uporablja«.

## Način shranjevanja

Vodilne žice in embalaže ne hranite v upognjenem in/ali močno obremenjenem stanju. Ta vodilna žica in embalaža ne smeta biti v vodi. Hraniti v hladnem, temnem in suhem prostoru.

## Rok uporabnosti

Rok uporabnosti je naveden na etiketi embalaže vodilne žice.

## Vsebina

5 kosov/skatla

## Zavrnitev odgovornosti

Podjetje „ASAHI INTECC CO., LTD. in njegova pridružena podjetja“ (v nadaljevanju „podjetje“) ne odgovarjajo za nesreče, telesne poškodbe, neželene učinke zaradi kakršne koli nepravilne uporabe izdelka(-ov) ali katere koli druge uporabe, ki ni v skladu s temi navodili. Podjetje v nobenem primeru ni odgovorno za kakršno koli škodo bodisi (i) zaradi shranjevanja izdelka(-ov) po odpremi iz podjetja bodisi (ii) zaradi izbire bolnikov, kirurških tehnik ali katere koli druge zdravstvene dejavnosti s strani zdravstvene ustanove, ki uporablja izdelek(-e).

„ASAHI Miracle“, „MIRACLEbros“, „Grand Slam“ in „EXTENSION“ so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja ASahi INTECC CO.,LTD. na Japonskem ali v drugih državah.

ASAHI Miracle / serje MIRACLEbros  
Grand Slam  
Wajer Gwida PCI  
Istruzzjonijiet għall-użu

Aqra dawn l-istruzzjonijiet b'attenzjoni qabel ma tuża dan il-wajer gwida u osserva t-taqsimiet Indikazzjonijiet għall-Użu, Kontraindikazzjonijiet, Twissijiet, Prekawzjonijiet, u Kif Tuża l-Prodott f'dawn l-istruzzjonijiet għall-użu. Jekk dan ma jsirx, jista' jirriżulta f'kumplikazzjonijiet, inkluż korrimment serju għall-pazjent jew mewt.

Jekk utent u/jew pazjent isir ja' dwar incident serju li sehħ b'rabta mal-wajer gwida, dan għandu jirrapporta l-fatt lill-manifattur u lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru.

Dawn l-Istruzzjonijiet għall-Użu japplikaw għal ASAHI Miracle, serje MIRACLEbros u Grand Slam. Għal dettalji (tul tal-wajer gwida, tul tas-sezzjoni radjopaka, eċċ.), irreferi għat-tikketta tal-prodott.

Deskrizzjonijiet

L-istruttura bażika ta' dan il-wajer gwida tikkonsisti minn wajer bil-qalba li jidjieg u kojł. Il-wajer bil-qalba li jidjieg u l-kojł huma ssaldjati. It-tul tal-kojł huwa radjopak halli l-pożizzjoni tiegħu tkun tista' tiġi kkonfermata faċilment bir-radjuskopja. Il-wiċċ distali huwa miksi b'kisi idrofiliċu (silikonu) u l-wiċċ prossimali huwa miksi b'PTFE (politetrafluorooetilen). Fit-tarf prossimali tal-apparat iqsar minn 300 cm, hemm konnessjoni għal wajer ta' estensjoni, li jintuża biex jissostitwixxi l-apparat ikkombinat; il-Wajer ta' Estensjoni ta' ASAHI INTECC jista' jiġi konness.

Irreferi għat-tabella ta' hawn taht għat-tagħbija fuq il-ponta\* ta' dan il-prodott.

Tabella 1. Speċifikazzjonijiet tal-Prodott

| Isem tal-Prodott                  | Dijametru ta' Barra     | Tagħbija fuq il-Ponta* |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| ASAHI Miracle 3 / MIRACLEbros 3   | 0.36 mm (0.014 pulzier) | 3.0 gf                 |
| ASAHI Miracle 6 / MIRACLEbros 6   | 0.36 mm (0.014 pulzier) | 6.0 gf                 |
| ASAHI Miracle 12 / MIRACLEbros 12 | 0.36 mm (0.014 pulzier) | 12.0 gf                |
| Grand Slam                        | 0.36 mm (0.014 pulzier) | 0.7 gf                 |

\*Il-valuri tat-tagħbija fuq il-ponta jirrappreżentaw il-valuri medji tal-valuri tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott imkejja skont il-metodu tal-ittestjar intern standard fejn tiġi preżunta l-forza applikata lil-leżjoni mill-ponta tal-wajer gwida.

Indikazzjonijiet għall-użu

Dan il-wajer gwida huwa maħsub għal interventi koronarji perkutanji (PCI) ġenerali. Dan il-wajer gwida huwa maħsub biex jiffaċilita t-tqegħid tal-kateters tad-dilatazzjoni bil-bużżieqa jew ta' apparat ieħor ta' intervent terapewtiku fil-kardjovaskulatura. **Dan il-wajer gwida ma huwiex maħsub għall-użu fin-newrovaskulatura u fil-vaskulatura periferika.**

Popolazzjoni Ttrattata fil-Mira

ASAHI Miracle, is-serje MIRACLEbros u Grand Slam huma maħsuba għal pazjenti li jissodisfaw l-indikazzjonijiet għall-proċeduri ta' PCI. Mhuwiex indikat għall-użu fi trabi tat-twelid, tfal żgħar, jew tfal kif ukoll f'pazjenti tqal, b'insuffiċjenza renali, jew dawk li jkollhom reazzjoni allerġika għal aġent ta' kuntrast.

Kontraindikazzjonijiet

- Ikkonferma l-kompatibbiltà tad-dijametru tal-wajer gwida ma' apparati ta' intervent oħrajn qabel l-użu propju.
- Tużax il-wajer gwida f'pazjenti b'reazzjoni allerġika għal aġenti ta' kuntrast jew li għandhom insuffiċjenza renali.
- Tużax il-wajer gwida għal pazjenti tqal jew pazjenti li jistgħu jkunu tqal (ir-raġġi X jistgħu jaffettwaw lill-fetu).
- Dan il-wajer gwida għandu jintuża f'istituzzjoni fejn tista' titwettaq operazzjoni kirurġika ta' emerġenza minnufih. Jekk operazzjoni kirurġika ta' emerġenza ma tkunx disponibbli, fl-aġar xenarju possibbli, jistgħu jsejtnu avvenimenti li jheddu l-hajja.
- Dan il-wajer gwida huwa sterilizzat minn qabel bil-gass tal-ossidu etilen (EOG) u huwa maħsub biex jintuża darba biss. Terġax tuża jew tisterilizza mill-ġdid. Jekk jintuża iktar minn darba jew ikun sterilizzat mill-ġdid, il-prestazzjoni jew il-kwalità ta' dan il-wajer gwida jistgħu jiġu kompromessi u hemm riskju ta' kumplikazzjonijiet, inkluża l-infezzjoni.

Twissijiet

- Dan il-wajer gwida għandu jintuża biss minn tabib li huwa kompletament imħarġ fit-trattament PCI.
- Qatt tuża dan il-wajer gwida flimkien ma' kateters b'partijiet tal-metall li jistgħu jiġu f'kuntatt dirett mal-wiċċ ta' dan il-wajer gwida (eż. kateters tal-ateretomija, dilators tal-metall), labar tal-metall jew apparat tal-metall għall-inserzjoni tal-għantijiet.
- Waqt l-użu tal-wajer gwida, iwerifika u ssorvelja l-moviment tal-ponta tiegħu permezz tal-fluworoskopija. Tużax f'żoni ta' važi li ma humiex jew ma jistgħux jiġu vizwalizzati.
- Tikkonnettax dan il-wajer gwida ma' wajers ta' estensjoni li jinqalgu prodotti minn manifatturi għajr ASAHI INTECC. Timmanipulax dan il-wajer gwida waqt li jkun konness il-wajer ta' estensjoni li jinqala'. Jekk le, il-wajer gwida jista' jsirlu l-hsara, jew il-wajer ta' estensjoni li jinqala' jista' jinqala' involontarjament.
- Timmodifikaż dan il-wajer gwida għall-ebda raġuni.

Prekawzjonijiet

- Tużax il-wajer gwida wara d-data ta' skadenza indikata fuq it-tikketta. Armi kwalunkwe wajer gwida li jaqbez din id-data ta' skadenza.
- Il-wajers gwida huma strummenti delikati u għandhom jiġu mmaniġġjati b'attenzjoni.
- Jekk il-pakkett ikun miftuħ jew dannegġat, tużax il-wajer gwida. Iftaħ il-pakkett biss eżatt qabel l-użu. Uża teknika aseptika għall-immaniġġjar u l-użu tal-wajer gwida.
- Timsaħx dan il-wajer gwida b'soluzzjoni organika bħall-alkohol.
- Hu miżuri preventivi kontra l-infezzjoni wara l-użu. Armi dan il-wajer gwida u l-pakkett mal-iskart mediku.
- Qatt timbotta, tittrapan, tiġbed jew iddawwar dan il-wajer gwida jekk issib reżistenza. It-tidwir jew l-imbottar ta' dan il-wajer gwida meta juri reżistenza jista' jikkawża hsara u/jew is-separazzjoni tal-ponta ta' dan il-wajer gwida jew hsara diretta lil važu. Jekk dan ma jsirx, tista' ssir hsara lil dan il-wajer gwida. Idetermina l-kawża tar-reżistenza bl-użu tal-fluworoskopija u hu kwalunkwe azzjoni rimedjali meħtieġa.
- Dejjem mexxi l-wajers gwida l'quddiem jew lura bil-mod u b'attenzjoni.
- Meta ddawwar dan il-wajer gwida ġewwa l-važu, iddawwarx kontinwament fl-istess direzzjoni. Meta ddawwar il-wajer gwida, alterna bejn tidwir skont l-arloġ u kontra l-arloġ. Iddawwarx aktar minn żewġ rotazzjonijiet (720°) fl-istess direzzjoni.
- Naddaf il-wajer gwida b'soluzzjoni salina jew soluzzjoni xierqa oħra eparinizzata u sterilizzata waqt li tnehhix u terġa' ddahhu sabieħ

tipprevjeni milli tidhol l-arja fl-apparat ta' intervent. Skambja dan il-wajer gwida b'attenzjoni biex tipprevjeni dhol tal-arja u/jew trauma. Meta tintroduci l-wajer gwida mill-gdid, ikkonferma li l-ponta tal-apparat ta' intervent huwa hiesle ġewwa l-lumen tal-važu u li mhux qed imiss mal-ġenb tal-važu. Jekk dan ma jsirx, jista' jirrizulta f' trauma. Uża l-markatur radjopak tal-apparat ta' intervent biex tikkonferma l-pożizzjoni.

- Il-moviment hiesle tal-wajer gwida fl-apparat ta' intervent huwa karatteristika importanti ta' sistema ta' wajer gwida orjentabbli għaliex jaqti lill-utent informazzjoni tattili ta' valur. Ittestja s-sistema għal kwalunkwe rezistenza qabel l-użu. Aġġusta jew issostitwixxi l-valvola emostatika b'valvola aġġustabbli jekk tinsab li tostakola l-moviment tal-wajer gwida.
- Tqegħidx stent bl-użu ta' aktar minn wajer gwida wiehed jew operazzjoni ta' wajer waħda bl-użu ta' stent strut. Jekk le, tista' ssir hsara lill-istent jew il-wajer gwida jista' jtkisser jew jiffrakk.
- Qabel l-użu, ikkonferma li dan il-wajer gwida huwa ta' daqs u forma xierqa għall-proċedura u li huwa kompatibbli mal-apparat li għandu jintuża flimkien miegħu.

- Irreferi għall-Istruzzjonijiet għall-Użu meħmużin mal-apparat mediku (eż. kateters tad-dilatazzjoni b'bużżieqa jew apparati ta' intervent terapewtiku oħrajn) li għandu jintuża flimkien ma' dan il-wajer gwida.
- Meta jiġi konness il-wajer ta' estensjoni li jinqala' ma' dan il-wajer gwida, għandu jiddaħhal b'mod sikur fil-linja konfinali bejn il-kisi mhux tal-PTFE u l-kisi tal-PTFE fit-tarf prossimali tal-wajer gwida. Jekk tinstab xi anomalija fil-konnessjoni, waqqaf l-użu tal-wajer gwida minnufih.
- Spezzjona l-wajer gwida b'attenzjoni għal liwi, għoqiedi jew hsara oħra qabel l-użu u meta possibbli waqt il-proċedura. Tużax il-wajer gwida jekk ikun danneġġat.
- Meta tifforma l-ponta, oqgħod attent li ma tagħmilx hsara lill-kojl.
- Qabel ma ddaħhal il-wajer gwida, i-verifika liema tarf huwa t-tarf distali u kun cert li ddaħhlu mit-tarf distali.
- Zomm fluss tas-salina bejn il-kateter ta' gwida u l-apparat ta' intervent, u bejn l-apparat ta' intervent u l-wajer gwida waqt il-proċedura. Il-fluss jipprevjeni l-formazzjoni ta' aġent ta' kuntrast radjografiku u/jew il-koagulazzjoni fuq il-wajer gwida u fil-lumen tal-kateter.

### Hsarat u Avvenimenti Avversi

Il-hsarat u l-avvenimenti avversi possibbli mill-użu ta' dan il-wajer gwida jinkludu, iżda ma humiex limitati għal dan li ġej:

#### 1. Hsarat

|                               |                               |                                   |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nuqqas ta' tislub ta' leżjoni | Ksur jew liwi tal-wajer gwida | Hsara bħal separazzjoni           |
| Diffikultà fit-tnehhija       | Tnehhija tal-kisi             | Debris minn wajer gwida bil-hsara |

#### 2. Avvenimenti avversi

|                        |                                   |                      |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Mewt                   | Infekzjoni                        | Dissezżjoni tal-važu |
| Perforazzjoni tal-važu | Kumplikazzjonijiet ta' emorraġġja | Embolizmu            |
| Trombożi               | Infart                            | Iskemija             |
| Arritmija              | Važospazmu                        | Okkluzjoni vaskulari |
| Pressjoni baxxa        | Reazzjoni allerġika               |                      |

### Kif Tuża l-Prodott

#### 1. Spezzjoni qabel l-użu

- a) Qabel l-użu, spezzjona b'attenzjoni u

kkonferma li ma hemmx hsara fil-wajer gwida u fil-pakkett.

- b) Qabel l-użu, ikkonferma li l-wajer gwida huwa kompatibbli mal-apparat ta' intervent li għandhom jintużaw.

#### 2. Preparazzjoni

- a) Aghżel l-aktar wajer gwida xierqa għaž-żona affettwata u neħhi t-tubu detentur li fih il-wajer gwida mill-pakkett sterili.
- b) Imkla t-tubu detentur b'salina eparinizzata u

Wajer gwida (tarf prossimali)

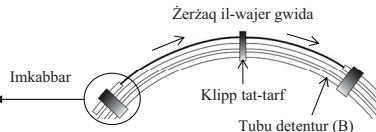
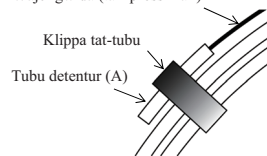


Figura 1

- c) Meta t-tarf distali tal-wajer gwida jiġi estż b'5 jew 6 cm oltre t-tarf l-iehor tat-tubu detentur, jekk neċessarju, ifforma l-ponta skont il-prattika standard.
- f) Aqbad il-wajer gwida li jkun hareġ mit-tarf distali tat-tubu detentur bil-mod, fl-eqreb punt possibbli għat-tubu detentur u iġbed il-wajer gwida 'l barra bil-mod u b'attenzjoni.
- g) Jekk tinhaas rezistenza meta tneħhi l-wajer gwida mit-tubu detentur, erga 'injetta s-salina eparinizzata u sterilizzata fit-tubu detentur. Kompl i neħhi l-wajer gwida wara li ma tibqax tinhaas ir-reżistenza. Kun cert li tinjetta biżżejjed salina eparinizzata u sterilizzata għat-tubu detentur għaliex tista' ssir hsara għall-kisi idrofiliġu meta tneħhi l-wajer gwida bis-saħħa.
- h) Wara li tiġbed il-wajer gwida barra mit-tubu detentur, spezzjonah sabiex tkun cert li ma hemmx hsara fih.

#### 3. Proċeduri għall-inserzjoni

- Sistema minn fuq il-wajer
  - a) Ddaħhal it-tarf distali tal-wajer gwida b'attenzjoni fil-lumen tal-wajer gwida tal-apparat ta' intervent.
  - b) Mexxi dan il-wajer gwida 'l quddiem b'attenzjoni sakemm it-tarf tiegħu jkun biss prossimali għat-tarf tal-apparat ta' intervent.

sterilizzata bl-użu ta' siringa biex ixxarrab l-apparat shih. Innata li s-salina eparinizzata u sterilizzata tista' tfur mit-tubu detentur f'dan il-mument.

- c) Imkla l-lumen tal-apparat ta' intervent bis-salina eparinizzata u sterilizzata qabel ma ddaħhal il-wajer gwida.
- d) Neħhi l-wajer gwida mill-klippa tat-tmiem u żerżaq il-wajer gwida bil-mod, imbotta t-tarf distali tal-wajer gwida minn got-tubu detentur (B). (Figura 1)

- c) Qabbad il-kateter gwida u ddaħhal is-sistema tal-apparat ta' intervent (bil-wajer gwida) fil-konnettur Y.
- d) Mexxi s-sistema tal-apparat ta' intervent 'il quddiem minn għol-kateter ta' gwida sakemm il-ponta tas-sistema tal-wajer gwida tkun biss prossimali għall-ponta tal-kateter gwida.
- e) Issikka l-valvola emostatika tal-konnettur Y biex tohloq sigill madwar l-apparat ta' intervent. Kun cert li l-moviment tal-wajer gwida jkun għadu possibbli.
- f) I-verifika li l-wajer gwida jiċċaqraq mingħajr xkiel.
- g) Wahhal l-apparat ta' torque mal-wajer gwida jekk meħtieġ.
- h) Mexxi dan il-wajer gwida 'l quddiem bl-użu tal-fluoroskopija biex jgħaddi minn għol-leżjoni. Ikkonferma bl-użu tal-aŋġiografija li l-wajer gwida jkun għadda mil-leżjoni ristretta fil-mira.
- i) Osserva l-moviment tal-wajer gwida fil-važi.
- j) Mexxi l-apparat ta' intervent 'il quddiem sakemm tintlehaq il-leżjoni fil-waqf li tipprevjeni l-wajer gwida milli jiċċaqraq. Kun cert li l-ponta distali tal-wajer gwida u l-pożizzjoni tagħha fil-važu jkunu viżibbli waqt il-manipulazzjonijiet tal-apparat ta'

intervent.

■ Sistema ta' skambju rapidu

- a) Qabbad il-kateter gwida.
- b) Dahhal l-introduttur tal-wajer gwida fil-konnettur Y tal-kateter gwida.
- c) Dahhal il-ponta tal-wajer gwida b'attenzjoni fl-introduttur.
- d) Mexxi l-wajer gwida 'l quddiem minn golkateter ta' gwida bl-użu tal-fluworoskopija sakemm il-ponta tal-wajer gwida tkun biss prossimali għall-ponta tal-kateter gwida.
- e) Wahhal l-apparat tat-torque mal-wajer gwida jekk mehtieg.
- f) Mexxi l-wajer gwida 'l quddiem bl-użu tal-fluworoskopija biex jghaddi minn goll-eżjoni. Ikkonferma bl-użu tal-anġjografija li l-wajer gwida jkun għadda mil-leżjoni ristretta fil-mira.
- g) Osserva l-moviment tal-wajer gwida fil-

važi.

- h) Nehhi l-apparat tat-torque tal-wajer gwida u l-introduttur tal-wajer gwida.
- i) Segwi l-apparat ta' intervent minn fuq il-wajer gwida sakemm tipprevjeni l-wajer gwida milli jimxi, u mexxi 'l quddiem sakemm tinklehaq il-leżjoni. Kun ċert li l-ponta distali tal-wajer gwida u l-pożizzjoni tagħha fil-važu jkunu viżibbli waqt il-manipulazzjonijiet tal-apparat ta' intervent.

4. Proċeduri għall-iskambju tal-wajer gwida

■ Sistema minn fuq il-wajer

- a) Nehhi dan il-wajer gwida bil-mod filwaqt li timmonitora l-moviment ta' dan il-wajer gwida bl-użu tal-fluworoskopija.
- b) Dahhal il-wajer gwida li jmiss skont id-direzzjonijiet fit-taqsima “Kif Tuża l-Prodott”.

## Metodu ta' Hżin

Iżżommx il-wajer gwida u l-pakkett f'kundizzjoni milwija u/jew taht toqol kbir. Dan il-wajer gwida u l-pakkett għandhom jinżammu 'l bogħod mill-ilma. Ahżen f'post frisk, mudlam u niexef.

## Data ta' Skadenza

Id-data ta' skadenza hija indikata fuq it-tikketta tal-pakkett tal-wajer gwida.

## Kontenut

5 biċċiet / kaxxa

## Ċaħda ta' responsabbiltà

“ASAHI INTECC CO., LTD. u l-kumpaniji affiljati tagħha” (minn hawn 'il quddiem il-“Kumpanija”) ma għandha bl-ebda mod tinżamm responsabbli għal incidenti, korrimenti personali, avvenimenti avversi minhabba użu mhux tajjeb tal-prodott(i) jew kwalunkwe użu ieħor li huwa inkonsistenti ma' dawn l-istruzzjonijiet. Il-Kumpanija fl-ebda ċirkostanza ma għandha tkun responsabbli għal xi danni li (i) jirriżultaw mill-hżin tal-prodott/i wara l-konsenja tal-Kumpanija jew (ii) minhabba l-għażla tal-pazjenti, it-tekniki tal-kirurġija, jew kwalunkwe attività medika mill-istitutzzjoni medika li tuża l-prodott/i.

“ASAHI Miracle”, “MIRACLEbros” “Grand Slam” u “EXTENSION” huma trademarks jew trademarks irreġistrati ta' ASAHI INTECC CO., LTD. fil-Gappun u f'pajjiżi oħra.



ASAHI INTECC CO.,LTD.  
3-100 Akatsuki-cho, Seto, Aichi 489-0071 JAPAN



Emergo Europe B.V.  
Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem  
The Netherlands

Basic UDI-DI: 4547327BGW007NH  
<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Country of origin for this product is indicated on the product label.



<https://medical.asahi-intecc.com/en>

©2024 ASAHI INTECC CO., LTD.  
2024-08-27 (1st edition)