


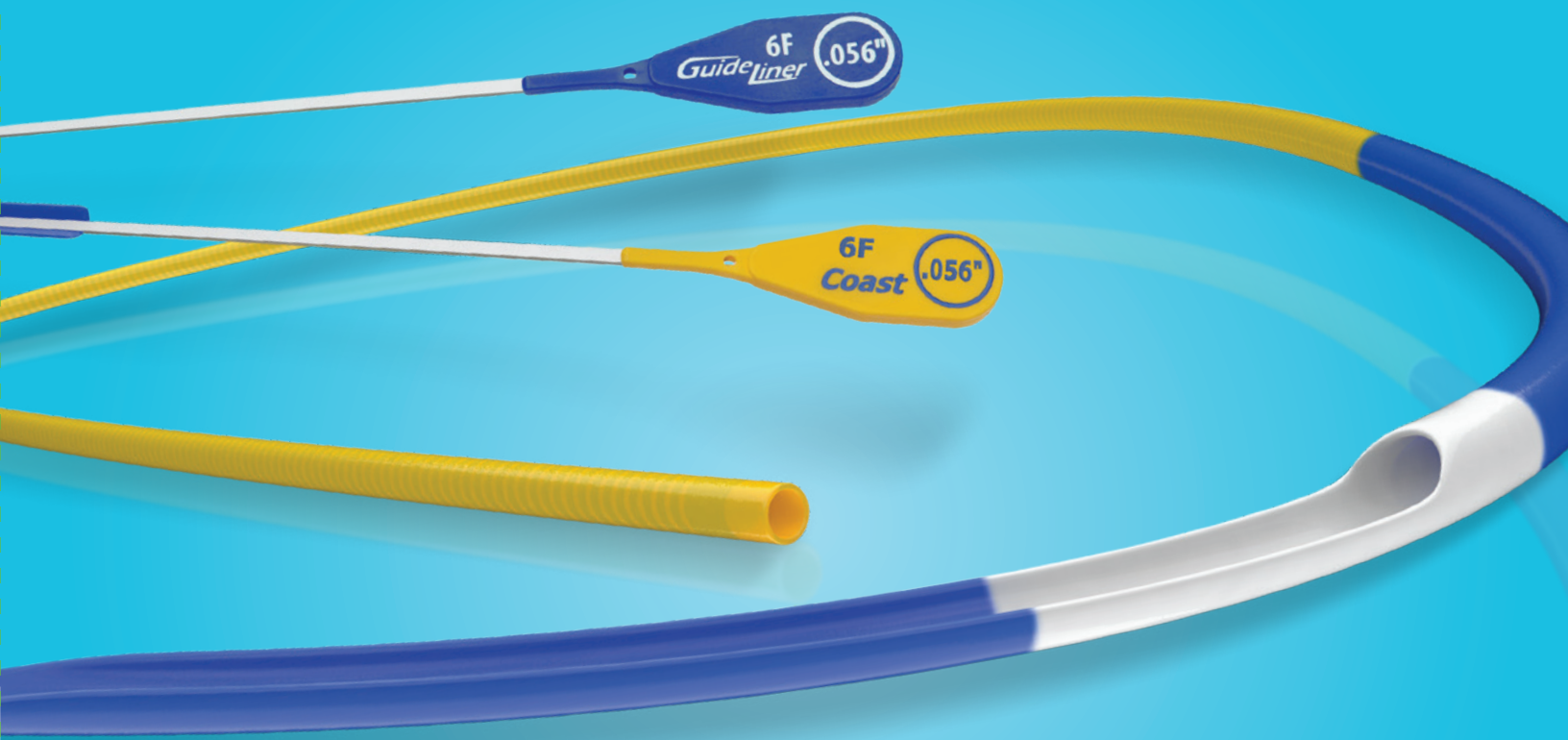

Las operaciones complejas
requieren la herramienta
adecuada.

GuideLiner® V3 y GuideLiner® Coast® Extensiones de catéteres guía

Cuando se trata del catéter GuideLiner®, tiene opciones.

Elija el catéter GuideLiner® adecuado para su paciente.



La capacidad de colocación se adapta a la anatomía de su paciente

En 2009, el catéter GuideLiner® revolucionó el sector y sigue basándose en un historial de innovación y rendimiento que se ha demostrado con más de 1,5 millones de catéteres en laboratorios de cateterismo de todo el mundo.¹ Ahora, con la incorporación del catéter GuideLiner® Coast®, tiene la libertad de seleccionar un catéter específico para satisfacer las necesidades concretas de su caso clínico.


GuideLiner® es la única gama de extensiones de cateteres guía disponible en el mercado que ofrece soluciones con recubrimiento de silicona e hidrófilo para responder a sus desafíos clínicos únicos con un rendimiento superior en apoyo² y capacidad de colocación.³

“El GuideLiner® me da la confianza para insertar el balón o el stent elegido en casi cualquier lugar”.⁴


- Michael S. Lee, MD, FACC, FSCAI

“El GuideLiner® se ha convertido en una parte indispensable de mi kit de herramientas para ICP complejas. En pocas palabras, cambia las reglas del juego”.⁴


- Matthew Price, MD, FACC, FSCAI

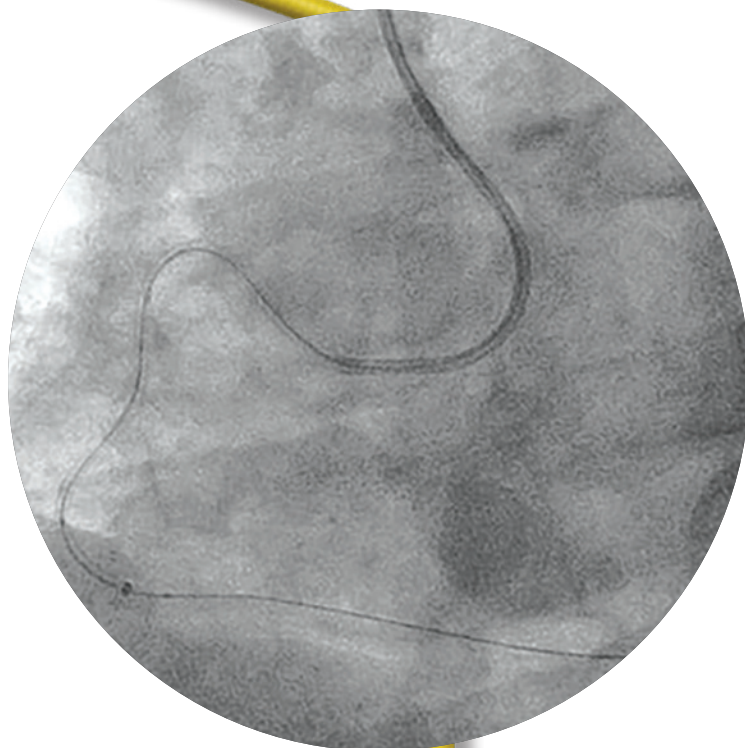


Múltiples usos clínicos

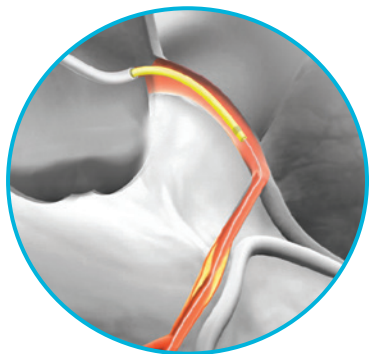

Alineación coaxial y sistema de apoyo

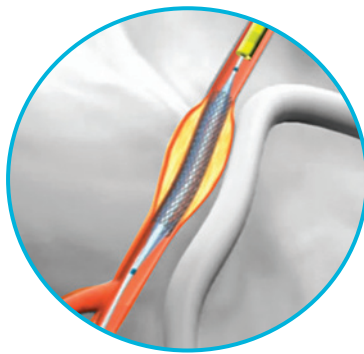

Asiento profundo para la inserción distal de dispositivos, incluida la asistencia para atravesar oclusiones totales crónicas (OTC)

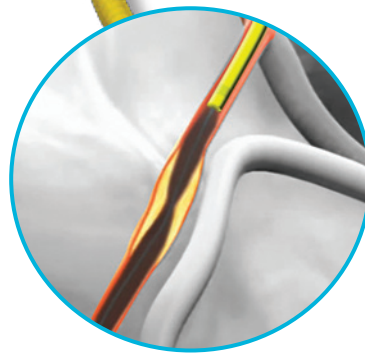

Administración selectiva de contraste

¹ Datos de archivo en Teleflex.


² Todos los valores se basan en los datos de las pruebas de laboratorio (n≥5) con modelos de 6 Fr. y se han analizado con un 95 % de confiabilidad como un porcentaje de las medias. Todas las comparaciones se basan en resultados de pruebas de laboratorio. Pruebas realizadas por Teleflex. Datos de archivo en Teleflex. Los resultados de las pruebas de laboratorio pueden no ser necesariamente indicativos del desempeño clínico.

³ Requiere menos fuerza en un modelo simulado. Pruebas realizadas por Teleflex. Datos de archivo en Teleflex. Los resultados de las pruebas de laboratorio pueden no ser necesariamente indicativos del desempeño clínico.

⁴ El Dr. Lee y el Dr. Price son consultores remunerados de Teleflex. Las declaraciones aquí contenidas reflejan la experiencia y opinión personales de estos médicos.

Diseñado para rendir

No es solo la tecnología propietaria Half-Pipe lo que diferencia a la gama de extensiones de catéteres guía GuideLiner® del resto. La extensión de catéter guía reforzada con bobinas ha sido diseñada exclusivamente para permitir un ajuste profundo en la colocación de dispositivos intervencionales en ubicaciones distales y para mantener la integridad de la vía.

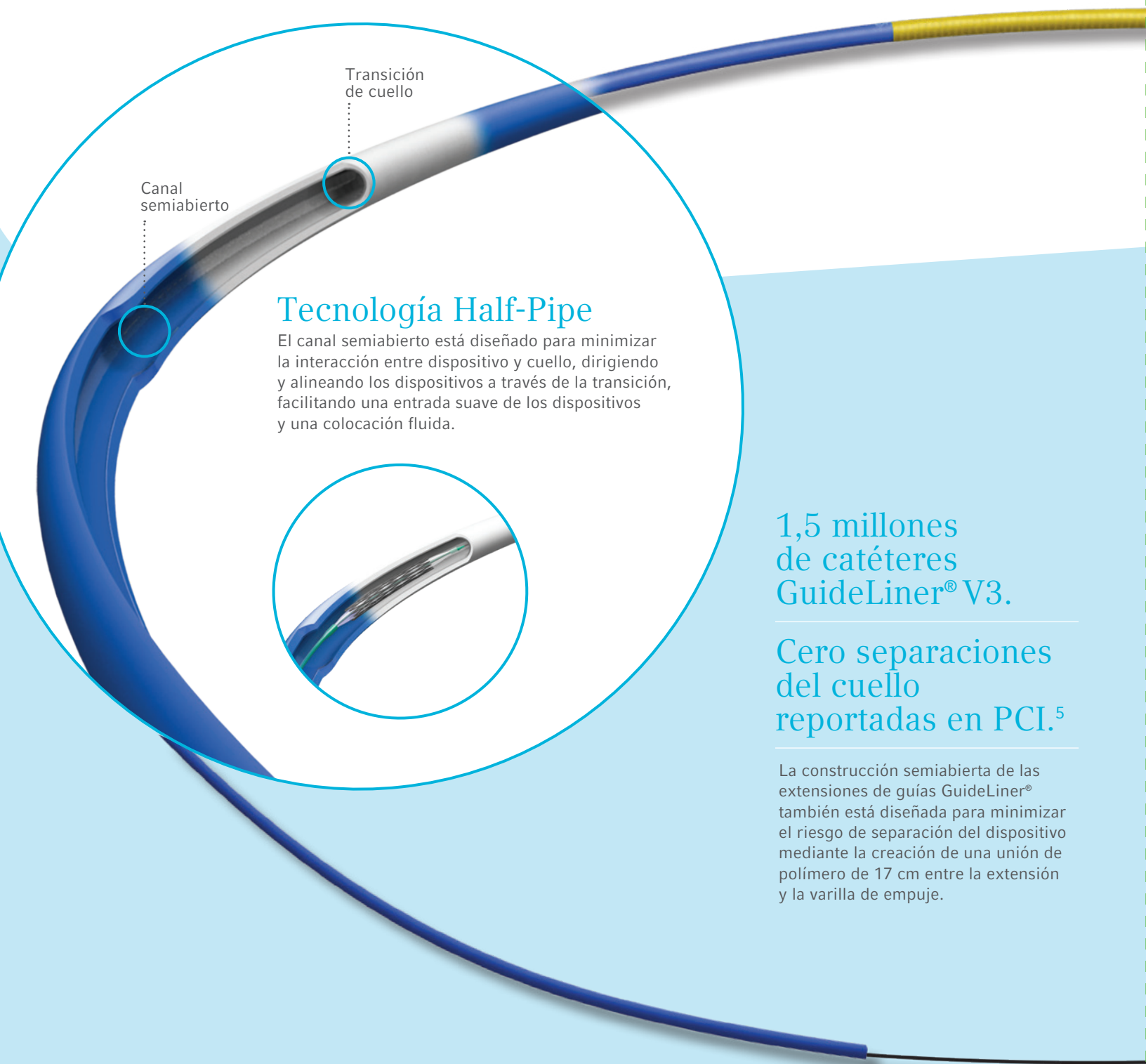

Tecnología Half-Pipe

El canal semiabierto está diseñado para minimizar la interacción entre dispositivo y cuello, dirigiendo y alineando los dispositivos a través de la transición, facilitando una entrada suave de los dispositivos y una colocación fluida.

1,5 millones
de catéteres
GuideLiner® V3.

Cero separaciones
del cuello
reportadas en PCI.⁵

La construcción semiabierta de las extensiones de guías GuideLiner® también está diseñada para minimizar el riesgo de separación del dispositivo mediante la creación de una unión de polímero de 17 cm entre la extensión y la varilla de empuje.

⁵ Basado en una revisión de los informes de experiencia de uso coronario de los catéteres GuideLiner® V3 desde su lanzamiento hasta el 9 de noviembre de 2022. Los catéteres GuideLiner® V3 requirieron menos fuerza en un modelo simulado. Datos de archivo en Teleflex. Los resultados podrían no ser indicativos del desempeño clínico.

Comprobados frente a la tortuosidad


De lesiones difíciles hasta ángulos agudos imposibles, las intervenciones coronarias percutáneas se han vuelto mucho más complejas. GuideLiner® es un portafolio completo de extensiones de catéteres guía diseñadas para adaptarse a los retos únicos que plantean las intervenciones coronarias percutáneas complejas, y ofrece a los usuarios una solución total para abordar las necesidades clínicas específicas que surgen durante el cruce de lesiones difíciles.

Catéter GuideLiner® V3, siliconado


Catéter GuideLiner® Coast®, hidrofílico

Extensión de catéter guía altamente flexible reforzada con bobinas


La extensión de catéter guía GuideLiner® reforzada con bobinas ofrece una excelente flexibilidad y resistencia a las torceduras, lo que permite avanzar fácilmente a través de vasos tortuosos para llegar al área objetivo de tratamiento.

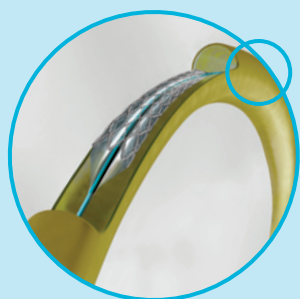

La extensión de catéter guía reforzada con bobinas se ha diseñado para mantener la integridad de la vía

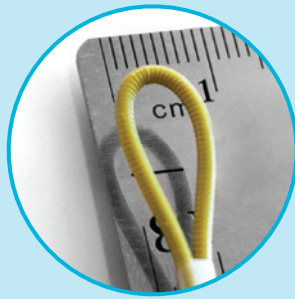

Resistencia a las torceduras⁶

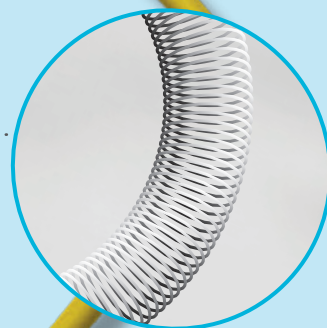


Lengüeta proximal

Varilla de empuje de acero inoxidable para mayor fuerza y resistencia a las torceduras

Altura de varilla de empuje de cinta (6 Fr.) = 0,012"


⁶ Pruebas realizadas por Teleflex. Datos de archivo en Teleflex. Los resultados de las pruebas de laboratorio pueden no ser indicativos del desempeño clínico.

Características de las extensiones de catéteres guía Guideliner®

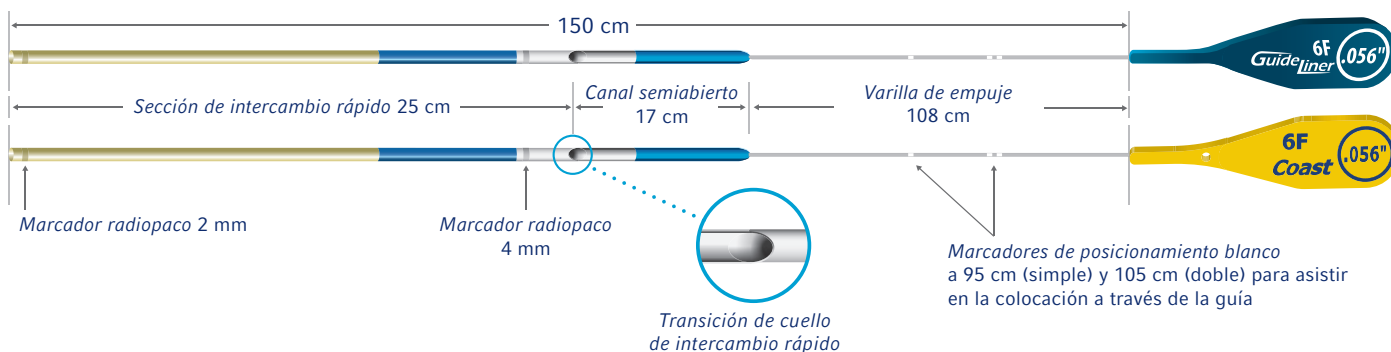

El tamaño sí que importa

Mientras que los dispositivos de la competencia incorporan una varilla de empuje cilíndrica, las extensiones de catéteres guía Guideliner® utilizan una varilla de alambre en forma de cinta plana a fin de ofrecer un diámetro interno (D.I.)* mayor y más efectivo durante la inserción de dispositivos intervencionistas. Aunque la varilla cilíndrica puede proporcionar una mejor capacidad de empuje, su mayor diámetro puede disminuir el espacio disponible para los dispositivos intervencionistas críticos.

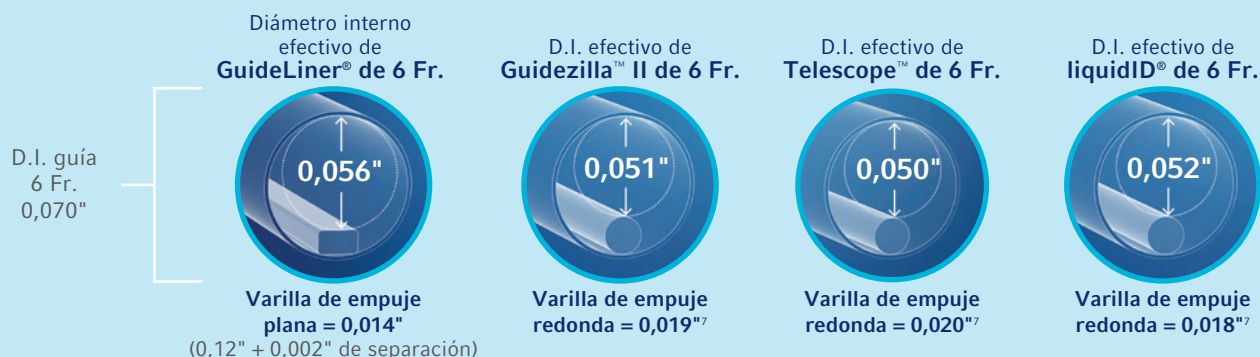


*D.I. efectivo = D.I. de catéter guía (0,070") - D.E. de la varilla de empuje

7 Dimensiones tomadas del etiquetado del fabricante y con pruebas internas realizadas por Teleflex. Datos de archivo en Teleflex. Los resultados de las pruebas de laboratorio pueden no ser indicativos del desempeño clínico.

Sistema de apoyo máximo


Con tan solo 5 mm de extensión, las pruebas de laboratorio han demostrado que el catéter Guideliner® V3 aumenta significativamente el sistema de apoyo de un catéter guía de 6 Fr.

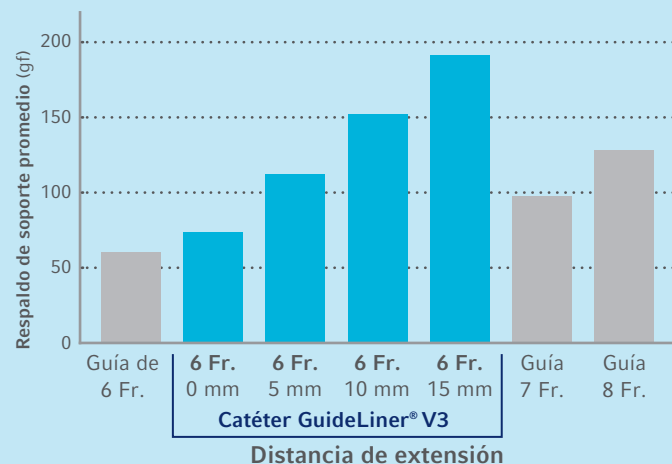

Dimensiones tomadas del etiquetado del fabricante y con pruebas internas realizadas por Teleflex. Datos de archivo en Teleflex. Los resultados de las pruebas de laboratorio pueden no ser indicativos del desempeño clínico.

Mayor capacidad de inserción

El catéter Guideliner® Coast® mostró una mayor capacidad de inserción a través del catéter guía y la vasculatura que el catéter Guidezilla™ II y el catéter Telescope™.

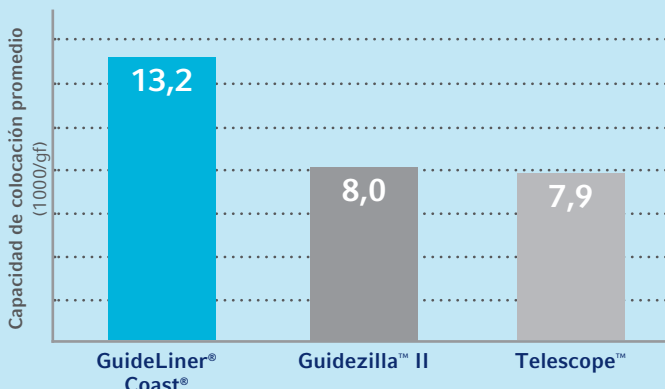

Catéteres guía de extensión hidrofílicos

La capacidad de inserción es proporcional a la inversa de la fuerza de empuje. Valores calculados como 1000 dividido por la fuerza de empuje. Requiere menos fuerza en un modelo simulado. Pruebas realizadas por Teleflex. Datos de archivo en Teleflex. Los resultados de las pruebas de laboratorio pueden no ser necesariamente indicativos del desempeño clínico.

Extensiones de catéteres guía GuideLiner®

Los catéteres GuideLiner® se han diseñado para usarse conjuntamente con catéteres guía a fin de acceder a regiones específicas de la vasculatura coronaria o periférica y para facilitar la inserción de dispositivos intervencionistas, así como para asistir en el cruce de las oclusiones totales crónicas (OTC). El catéter GuideLiner® V3 está indicado para OTC solo en EE. UU. El catéter GuideLiner® Coast® está indicado para la OTC en EE. UU. y Canadá. Los catéteres GuideLiner® están contraindicados en vasos de menos de 2,5 mm de diámetro y en vasos de la neurovasculatura o el sistema nervioso.

Dimensiones del catéter GuideLiner® V3

N.º DE PRODUCTO	TAMAÑO	D.I. CATÉTER GUÍA REQUERIDO	D. E. VARILLA DE EMPUJE	D.I. EXTENSIÓN DE GUÍA	D.E. PUNTA	LONGITUD DE INTERCAMBIO RÁPIDO	LONGITUD FUNCIONAL
5569	5 Fr.	D.I. 5 Fr. $\geq 0,056"$ (1,42 mm)	0,010" (0,25 mm)	0,046" (1,17 mm)	4,0 Fr. (1,35 mm / 0,053")	25 cm	150 cm
5570	5,5 Fr.	D.I. 6 Fr. $\geq 0,066"$ (1,68 mm)	0,012" (0,30 mm)	0,051" (1,30 mm)	4,8 Fr. (1,60 mm / 0,063")	25 cm	150 cm
5571	6 Fr.	D.I. 6 Fr. $\geq 0,070"$ (1,78 mm)	0,012" (0,30 mm)	0,056" (1,42 mm)	5,1 Fr. (1,70 mm / 0,067")	25 cm	150 cm
5572	7 Fr.	D.I. 7 Fr. $\geq 0,078"$ (1,98 mm)	0,012" (0,30 mm)	0,062" (1,57 mm)	5,7 Fr. (1,90 mm / 0,075")	25 cm	150 cm
5573	8 Fr.	D.I. 8 Fr. $\geq 0,088"$ (2,24 mm)	0,012" (0,30 mm)	0,071" (1,80 mm)	6,5 Fr. (2,16 mm / 0,085")	25 cm	150 cm

Envases de 1 unidad por caja.

Dimensiones del catéter GuideLiner® Coast®

N.º DE PRODUCTO	TAMAÑO	D.I. MÍNIMO DE CATÉTER GUÍA COMPATIBLE	D.E. VARILLA DE EMPUJE (CINTA PLANA)	D.I. DEL CATÉTER GUÍA MENOS EL DIÁMETRO DE LA VARILLA DE EMPUJE	D.I. EXTENSIÓN DE GUÍA	D.I. EFECTIVO
5270	5,5 Fr.	0,066" (6 Fr.)	$0,012" + 0,002" = 0,014"$	$0,066" - 0,014" = 0,052"$	0,051"	0,051"
5271	6 Fr.	0,070" (6 Fr.)	$0,012" + 0,002" = 0,014"$	$0,070" - 0,014" = 0,056"$	0,056"	0,056"
5272	7 Fr.	0,078" (7 Fr.)	$0,012" + 0,002" = 0,014"$	$0,078" - 0,014" = 0,064"$	0,062"	0,062"
5273	8 Fr.	0,088" (8 Fr.)	$0,012" + 0,002" = 0,014"$	$0,088" - 0,014" = 0,074"$	0,071"	0,071"

Envases de 1 unidad por caja.

Por restricciones de la legislación federal (de Estados Unidos), la venta de estos dispositivos solo puede ser realizada por médicos o bajo prescripción facultativa.

Es posible que no todos los productos estén disponibles en todos los países. Para obtener información sobre los productos, póngase en contacto con la.cs@teleflex.com o con su representante local. Consulte las respectivas instrucciones de uso para conocer las indicaciones aprobadas en su zona geográfica. Verifique el estado de aprobación en su normativa local.

Teleflex, el logotipo de Teleflex, Coast y GuideLiner son marcas comerciales o marcas registradas de Teleflex Incorporated o sus filiales en los EE. UU. u otros países © 2023 Teleflex Incorporated. Todos los derechos reservados. Revisado 01/2024 MC-009504 LA ES