


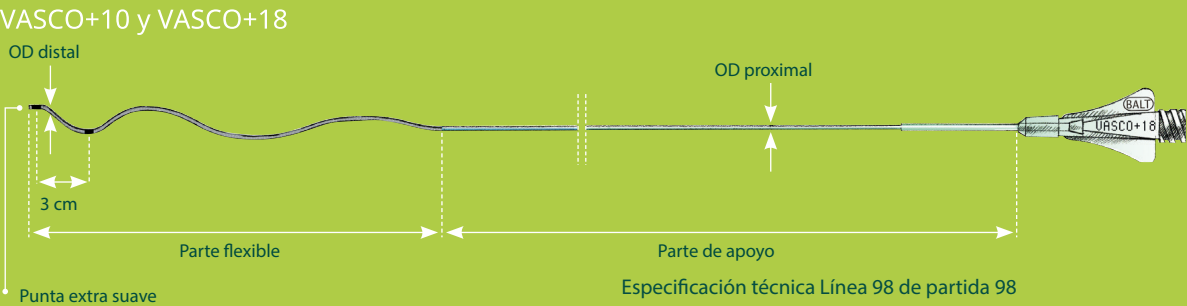

# Información de pedidos

Portafolio desarrollado con amplia gama.

| Vasco+ | Referencia           | OD proximal<br>- OD distal | ID    | Total<br>longitud (cm) | Recomendado<br>alambre guía<br>máximo | No. de Orx<br>marcadores | Curva                   |
|--------|----------------------|----------------------------|-------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|        | VASCO+10 (Demócrata) | 2,2 °F a 1,9 °F            | .017" | 155                    | .014"                                 | 2                        | Recta (D)               |
|        | VASCO+10MH (D-MP)    |                            |       |                        |                                       | 3                        |                         |
|        | VASCO+18             | 2,7 °F a 2,1 °F            | .021" | 155                    | .018"                                 | 2                        | Multipropósito<br>(MPI) |
|        | VASCO+21             | 2,7 °F a 2,4 °F            | .024" | 155                    | .021"                                 | 1                        |                         |
|        | VASCO+25             | 3,3F a 3,0F                | .029" | 155                    | .025"                                 | 1                        |                         |
|        | VASCO+28             | 3,4F a 3,3F                | .032" | 155                    | .028"                                 | 1                        |                         |
|        | VASCO+35             | De 4,0 °F a 3,8 °F         | .040" | 135                    | .035"                                 | 1                        |                         |
|        | VASCO+35ASPI (D-MP)  | 5,1F a 5,1F                | .040" | 140                    | .035"                                 | 1                        |                         |

Especificación técnica Línea 98 de partida 98

## Compatibilidades de administración de VASCO+

| Referencia | LEO+      | SILK+              | CATCH+     | CATCHVIEW                   | Coils/Partículas                      | Otro dispositivo     |
|------------|-----------|--------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| VASCO+10   | 2,0 a 3,0 |                    | CATCH+MINI | CATCHVIEW MINI              | Coils Optima, Coils Barricade & otros | Compatible con .017" |
| VASCO+10MH |           |                    |            |                             |                                       |                      |
| VASCO+18   |           |                    |            | CATCHVIEW<br>CATCHVIEW MAXI | Otros Coils*                          | Compatible con .021" |
| VASCO+21   | LEO+ 3,5  | SILK+<br>2,0 A 4,5 | CATCH      |                             | Inyección de partículas*              | Compatible con .024" |
| VASCO+25   | LEO+ 4,5  | SILK+<br>5,0 A 5,5 | CATCH+MINI |                             | Inyección de partículas*              | Compatible con .029" |
| VASCO+28   | LEO+ 5,5  |                    |            |                             | Inyección de partículas*              | Compatible con .032" |
| VASCO+35   |           |                    |            |                             | Inyección de partículas*              | Compatible con .040" |

\* comprobar la compatibilidad en el etiquetado de los productos

Vasco+ es un microcatéter reforzado destinado a la inyección de productos diagnósticos o terapéuticos; la colocación de espirales empujables "SPIRALES" o espirales desmontables, especialmente las del «sistema de desprendimiento mecánico» MDS; para la utilización del stent autoexpandible LEO+ o SILK+. Clase III CE0297 de conformidad con la Directiva sobre productos sanitarios (MDD 93/42/CEE modificada por 2007/47/CE). Fabricado por BALT EXTRUSION SAS. Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizarlo. No se reembolsa. Primer marcado CE: 2004. Los stents autoexpandibles SILK+ y SILK Vista Baby están diseñados para el tratamiento de aneurismas intracraneales y deben ser utilizados únicamente por médicos formados en la colocación de stents intracraneales. Clase III CE0297 de conformidad con la Directiva sobre productos sanitarios (MDD 93/42/ EEC modificada por 2007/47/EC). Fabricado por BALT EXTRUSION SAS. Lea atentamente las instrucciones de uso antes de su uso. No se reembolsa. Primer marcado CE: 2012. El stent autoexpandible LEO+/LEO+ Baby está diseñado para el tratamiento de aneurismas intracraneales en asociación con espirales de embolización. Clase III CE0297 de conformidad con la Directiva sobre productos sanitarios (MDD 93/42/EEC modificada por 2007/47/EC). Fabricado por BALT EXTRUSION SAS. Lea atentamente las instrucciones de uso antes de su uso. Códigos de reembolso franceses 3101316 y 3171593. Primer marcado CE: 2007 (LEO+), 2012 (LEO+Baby) CATCH+ y CATCHView están diseñados para su uso en la restauración del flujo de pacientes con accidente cerebrovascular isquémico debido a la oclusión de un vaso intracraneal grande. Están indicados para restaurar el flujo sanguíneo en la neurovasculatura de pacientes que no son elegibles para el activador tisular del plasminógeno intravenoso (t-PA), que no responden a la terapia IV t-PA o como tratamiento complementario de la terapia IV t-PA iniciada. Los dispositivos de tromboembolización CATCH+ y CATCHView solo deben ser utilizados por médicos capacitados en neuroradiología intervencionista y tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico. Clase III CE0297 de conformidad con la Directiva sobre productos sanitarios (MDD 93/42/EEC modificada por 2007/47/EC). Fabricado por BALT EXTRUSION SAS. Lea atentamente las instrucciones de uso antes de usarlo. No se reembolsa. Primer marcado CE: 2012 (CATCH+), 2018 (CATCHView). El sistema Optima Coil está diseñado para su uso en la vasculatura periférica y neurovascular para obstruir u ocluir endovascularmente el flujo sanguíneo en anomalías vasculares de los vasos neurovasculares y periféricos. Clase III CE0297 de conformidad con la Directiva de dispositivos médicos (MDD 93/42/EEC modificada por 2007/47/EC). Fabricado por BALT USA LLC. Lea atentamente las instrucciones de uso antes de usarlo. Código de reembolso francés 3162217. Primer marcado CE: 2017. El sistema de bobinas Barricade (BCS) está diseñado para la embolización endovascular de aneurismas intracraneales y otras anomalías neurovasculares como malformaciones arteriovenosas y fistulas arteriovenosas. El BCS también está diseñado para la oclusión vascular de vasos sanguíneos dentro del sistema neurovascular para obstruir permanentemente el flujo sanguíneo a un aneurisma u otra malformación vascular y para embolizaciones arteriales y venosas en la vasculatura periférica. El dispositivo solo debe ser utilizado por médicos que hayan recibido capacitación preclínica en todos los aspectos de los procedimientos de BCS según lo prescrito por Balt. Clase III CE0297 de conformidad con la Directiva de dispositivos médicos (MDD 93/42/EEC modificada por 2007/47/EC). Fabricado por BALT USA, LLC. Lea atentament las instrucciones de uso antes de utilizar el producto. Primera marca CE: 2012. El contenido de este documento, en particular los datos, la información, las marcas y los logotipos, son propiedad exclusiva de BALT SAS y sus filiales. © 2019 BALT SAS y sus filiales, todos los derechos reservados. Se prohíbe cualquier representación o reproducción, ya sea parcial o total, y se consideraría una violación de los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual de BALT SAS y sus filiales. Este documento con las imágenes asociadas no tiene carácter contractual y está destinado exclusivamente a los profesionales sanitarios y a los distribuidores de BALT (distribuidores de los proveedores de BALT). Los productos comercializados por BALT se utilizarán exclusivamente de acuerdo con las instrucciones de uso incluidas en las cajas. DC045ES (08/19).

# Vasco +

Balones de remodelación

# Vasco+

Microcatéter trenzado selectivo El microcatéter:  
Diseñado para brindar acceso y apoyo en el  
tratamiento de aneurismas intracraneales y  
trombectomía mecánica.


## Especificación técnica Línea 98 de partida 98



Trenzado  
Progresivo

### Alto soporte y flexibilidad progresiva

trenzado progresivo a lo largo

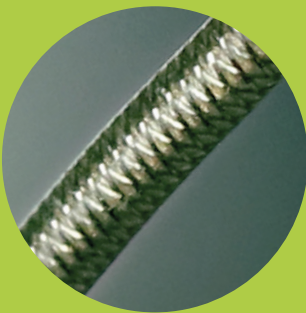

El microcatéter:

Trenzado ancho proximal para más estabilidad

Trenzado distal apretado para flexibilidad y  
resistencia a la torcedura

### Especificación técnica Línea 98 de partida 98



### Facilidad de navegabilidad y Entregabilidad controlada


Navegación y entrega fluidas Mejorado por  
una parte distal con revestimiento  
hidrófilo y el revestimiento interior de PTFE\*

Acceso suave

Permitido por punta flexible

Visibilidad


microcatéter radiopaco completo  
(Vasco+ 21, 25, 28 y 35)

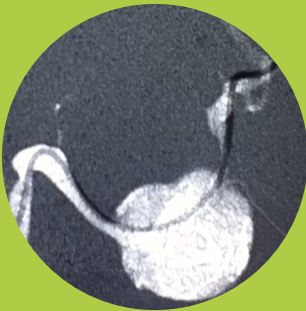

### Un tercer marcador para asistir a la entrega del coil

Vasco MH (Michael Holt)  
3 marcadores radiopacos para apoyo:

- Posicionamiento del coil en el aneurisma
- Selección del coil gracias a la  
retroalimentación visual  
(segundo marcador de 5mm)

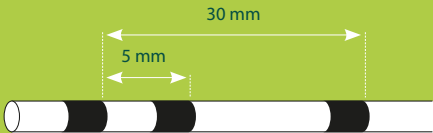

\* Politetrafluoroetileno