



Eclipse (hipercompatible):

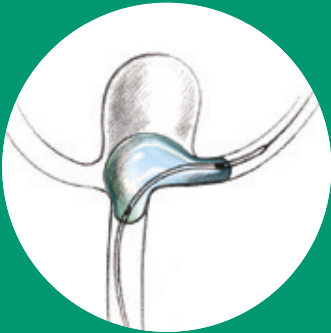

Copernic (compatible):

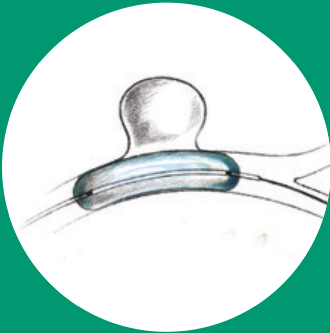

Información de pedidos

Eclipse y Copernic son catéteres con balón de un solo lumen empaquetados con la guía correspondiente.

Especificación técnica Línea 104 de partida 104

Eclipse	Referencia	Total longitud (cm)	Balón longitud (mm)	Balón diámetro (mm)	Máximo volumen (ml)	Marcadores RX	Alambre guía recomendado
	SECLIPSE7	160	7	4 a 6	0,2	3 marcadores	Compatible con .012" guía (embalaje incluye un HIBRIDO1214D)
	SECLIPSE9		9		0,25		
	SECLIPSE12		12		0,3		
	SECRETO15		15		0,4		
	SECLIPSE20		20		0,5		

Copérnico	Referencia	Total longitud (cm)	Balón longitud (mm)	Balón diámetro (mm)	Máximo volumen (ml)	Marcadores RX	Alambre guía recomendado
	SCOPERNIC10	160	10	3 a 5	0,25	2 marcadores	Compatible con .012" guía (embalaje incluye un HIBRIDO1214D)
	SCOPERNIC15		15		0,35		
	SCOPERNIC20		20		0,4		
	SCOPERNIC30		30		0,5		

Especificación técnica Línea 104 de partida 104


*Datos internos
COPERNIC y ECLIPSE son catéteres de oclusión indicados para su uso en la neurovasculatura y el sistema periférico para detener o controlar temporalmente el flujo sanguíneo, para tratar vasoespasmos y embolización de aneurismas con balones. Clase III CE0297 de conformidad con la Directiva de Productos Sanitarios (MDD 93/42/EEC modificada por 2007/47/EC). Fabricado por BALT EXTRUSION SAS, 10 rue de la Croix Vigneron, 96160 Montmorency, Francia. Lea atentamente las instrucciones de uso antes de su uso. Primer marcado CE: 2001 (COPERNIC), 2006 (ECLIPSE). Las guías HYBRID están diseñadas para facilitar la inserción de catéteres en las ramas vasculares intracraneales para uso diagnóstico o terapéutico. Clase III CE0297 de conformidad con la Directiva de Productos Sanitarios (MDD 93/42/EEC modificada por 2007/47/EC). Fabricado por BALT EXTRUSION SAS. Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.
Primer marcado CE: 2010. El catéter guía FARGO está destinado a facilitar la introducción de microcatéteres para uso terapéutico y diagnóstico. Clase III CE0297 de conformidad con la Directiva sobre productos sanitarios (MDD 93/42/CEE modificada por 2007/47/CE). Fabricado por BALT EXTRUSION SAS. Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto. Primer marcado CE: 2009.
El contenido de este documento, en particular los datos, la información, las marcas y los logotipos son propiedad exclusiva de BALT SAS y sus filiales. © 2021 BALT SAS y sus filiales, todos los derechos reservados. Toda representación y/o reproducción, ya sea parcial o total, está prohibido publicar en su totalidad o en su totalidad, ya que se consideraría una violación de los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual de BALT SAS y sus filiales. Este documento con las imágenes asociadas no es contractual y está destinado exclusivamente a los profesionales sanitarios y a los distribuidores de BALT (distribuidores de los proveedores de BALT).
Los productos comercializados por BALT se utilizarán exclusivamente de acuerdo con las instrucciones de uso incluidas en las cajas. DC054ES (03/2021)



Eclipse & Copernic

Catéteres con balón complacientes e hipercomplacientes.
Diseñado para detener o controlar temporalmente el flujo sanguíneo, para tratar vasoespasmos y para la embolización de aneurismas con balones.

Especificación técnica Línea 104 de partida 104

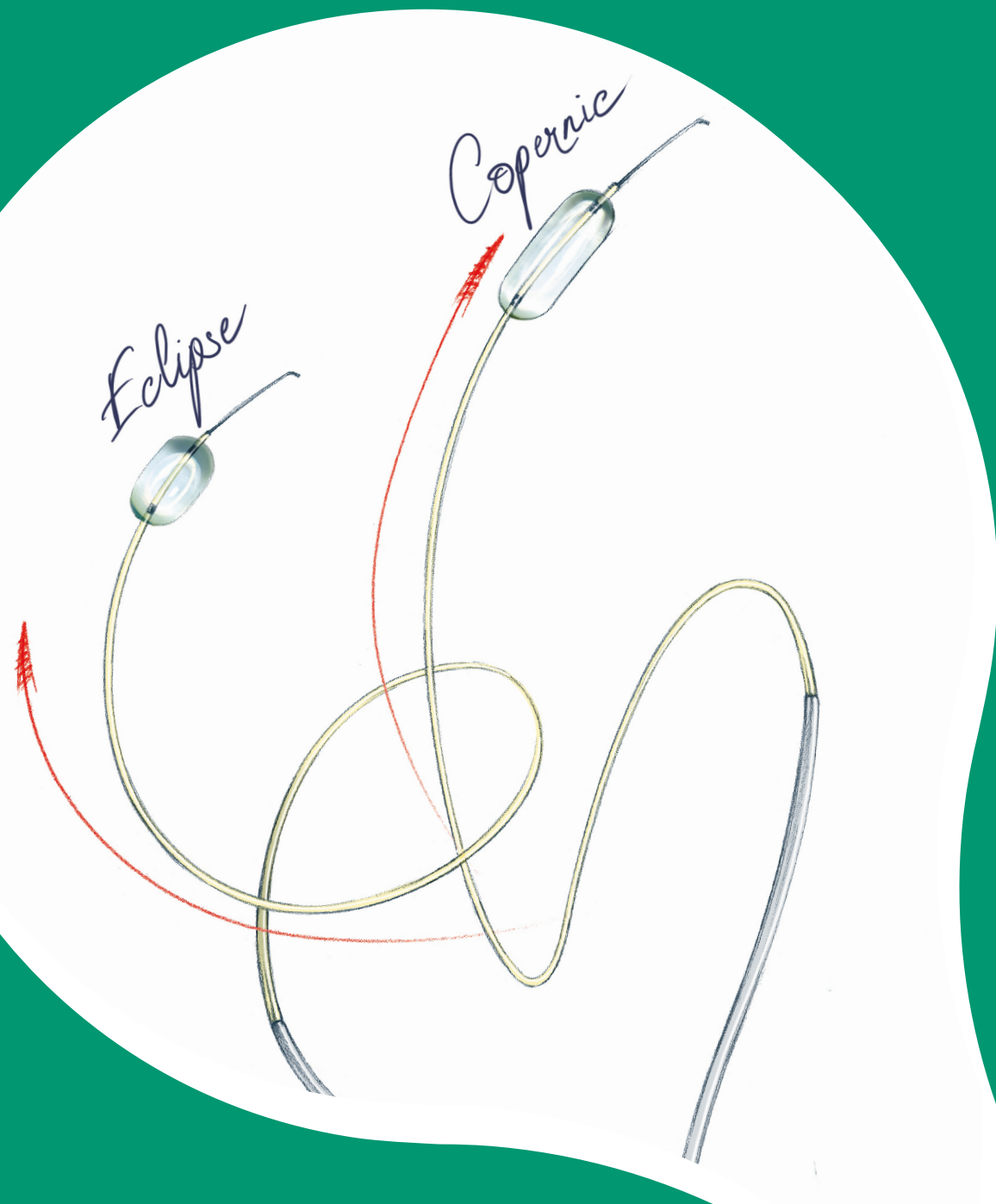

Balón

Tamaño de 4mm a 6mm
y de 3mm a 5 mm

Especificación técnica
Línea 104 de partida 104



Tratamiento del aneurisma

Navegación

Recubrimiento hidrofílico tanto en el catéter como en el balón para una progresión suave.


Compatibilidad con guía híbrida 1214D que garantiza soporte y trazabilidad.

Especificación técnica
Línea 104 de partida 104




Balones complacientes & hipercomplacientes

Fabricado con un elastómero muy flexible*
Para adaptarse fácilmente a la anatomía.
Inflación deflación rápida con 1/2 contraste*
Buena visibilidad, gracias a los marcadores 2RX que proporcionan la longitud del balón.

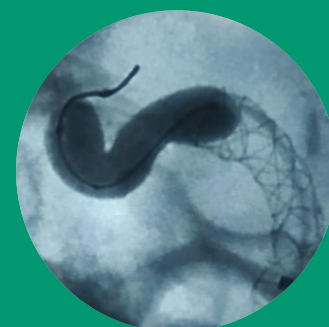

Con cortesía de
Dr. Sukalyan Purkayastha, India

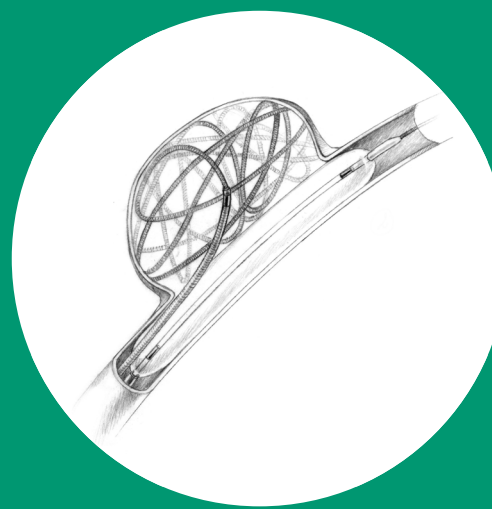

Remodelación

Tanto Eclipse como Copernic se puede utilizar en paralelo con un microcatéter en espiral en un único catéter guía 6F (FARGOMAX6F).