

Información de pedidos

El perfil bajo Silk+ ofrece la posibilidad de tratar arterias pequeñas hasta Ø 1,5 mm.

Silk +

Referencia	Diámetro del vaso (mm)	Silk + largo en Diámetro nominal (mm)	Stent sin restricciones		Cateter de entrega
			Diámetro (mm)	Longitud (mm)	
SILK 2,0x15	1,50 a 2,25	15	2,5	10	VASCO+21
SILK 2,0x20		20		11	
SILK 2,5x15	2,00 a 2,75	15	3,0	10	VASCO+21
SILK 2,5x20		20		13	
SILK 2,5x25		25		16	
SILK 3,0x15	2,50 a 3,25	15	3,5	10	VASCO+21
SILK 3,0x20		20		13	
SILK 3,0x25		25		16	
SILK 3,0x30		30		19	
SILK 3,5x15	3,00 a 3,75	15	4,0	11	VASCO+21
SILK 3,5x20		20		12	
SILK 3,5x25		25		14	
SILK 3,5x30		30		15	
SILK 3,5x35		35		17	
SILK 4,0x15	3,50 a 4,25	15	4,5	10	VASCO+21
SILK 4,0x20		20		12	
SILK 4,0x25		25		14	
SILK 4,0x30		30		16	
SILK 4,0x35		35		18	
SILK 4,0x40		40		20	
SILK 4,5x15	4,00 a 4,75	15	5,0	8	VASCO+21
SILK 4,0x20		20		10	
SILK 4,0x25		25		12	
SILK 4,0x30		30		15	
SILK 4,5x35		35		17	
SILK 4,5x40		40		19	
SILK 5,0x25	4,50 a 5,25	25	5,5	11	VASCO+25
SILK 5,0x30		30		13	
SILK 5,0x40		40		17	
SILK 5,5x25	5,00 a 5,75	25	6,0	11	VASCO+25
SILK 5,5x30		30		13	
SILK 5,5x40		40		17	

Tapared
Silk+

Referencia	Diámetro del vaso (mm)		Silk + largo en Diámetro nominal (mm)		Stent sin restricciones		Cateter de entrega
	Proximidad	Distribución	Proximidad	Distribución	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	
SILKP 4,0D3,0x30	3,50 a 4,25	2,50 a 3,25	12	10	4,5/3,5	15	VASCO+21
SILKP 4,5D3,0x25	4,00 a 4,75	2,50 a 3,25	12	10	5,0/3,5	20	
SILKP 4,5D3,5x30	4,00 a 4,75	3,00 a 3,75	11	15	5,0/4,0	16	


Los stents autoexpandibles SILK+ están diseñados para el tratamiento de aneurismas intracraneales y deben ser utilizados únicamente por médicos capacitados en la colocación de stents intracraneales. Clase III CE0297 de conformidad con la Directiva de Dispositivos Médicos (MDD 93/42/EEC modificada por 2007/47/EC). Fabricado por BALT Extrusion SAS. Lea atentamente las instrucciones de uso antes de su uso. Primer marcado CE: 2012. VASCO+ es un microcatéter reforzado destinado a la inyección de productos de diagnóstico o terapéuticos, para colocar espirales empujables "SPIRALES" o espirales desmontables, especialmente las del «sistema de desprendimiento mecánico» MDS, para el uso del stent autoexpandible LEO+ o SILK+. Clase III CE0297 de conformidad con la Directiva de Dispositivos Médicos (MDD 93/42/EEC modificada por 2007/47/EC). Fabricado por BALT Extrusion SAS. Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto. Primer marcado CE:2004. El contenido de este documento, en particular los datos, la información, las marcas y los logotipos son propiedad exclusiva de BALT SAS y sus filiales. © 2019 BALT SAS y sus filiales, todos los derechos reservados. Toda representación y/o reproducción, ya sea parcial o total, Está prohibido y se consideraría una violación de lo derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual de BALT SAS y sus filiales. Este documento con imágenes asociadas no es contractual y está destinado exclusivamente a los profesionales sanitarios y a los distribuidores de BALT (distribuidores de los proveedores de BALT). No se puede distribuir ni entregar a los pacientes. Los productos comercializados por BALT se deben utilizar exclusivamente de acuerdo con las instrucciones de uso incluidas. En las cajas. DC025GB (01/2019).



Silk +

Combinando fiabilidad y eficacia
Diseñado para el tratamiento de aneurismas intracraneales.

Especificación técnica Línea 122 de partida 122

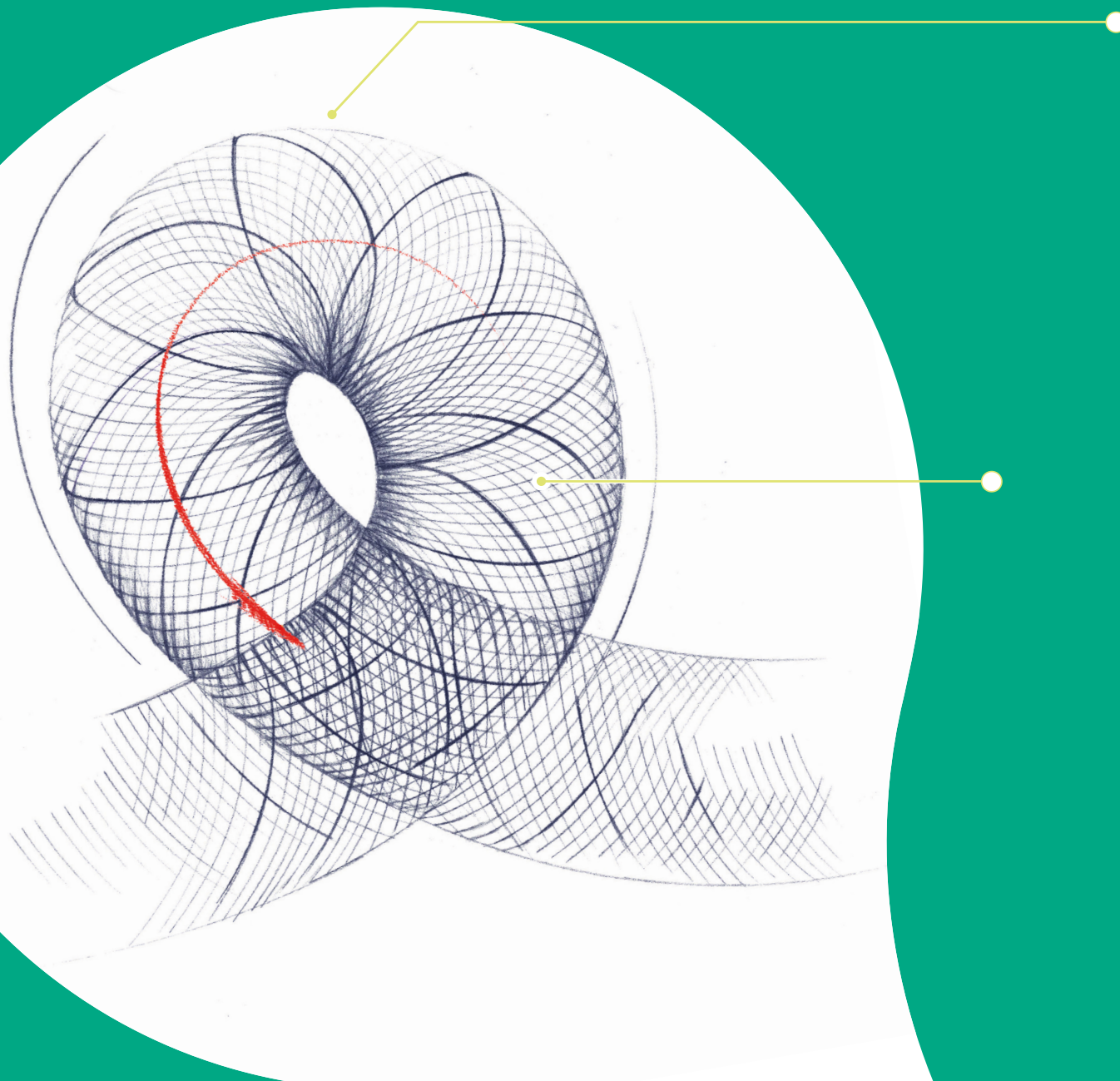

82,2%

Tasa de oclusión en 12 meses

Liberación mecánica facilitada por retracción del microcatéter.

Comportamiento adecuado incluso en anatomía distal y tortuosa

Flexibilidad: Gracias a los materiales de níquel titanio.

Conformabilidad: Dado por la tecnología de celdas deslizantes.

Uso con guía 0,014".

Aposición de pared lisa como resultado de los extremos cortos y redondeados.



Navegabilidad: Con perfil bajo VASCO+21 microcatéter de entrega.

Exclusión de aneurisma y vaso sanguíneo reconstrucción de muro

Desviación de flujo y cobertura del cuello
Proporcionado por 48 cables trenzados densos.

Preciso y controlado despliegue

Visibilidad
Cuatro marcadores helicoidales en toda la
Cuerpo del stent y efecto borde.
Capacidad de reenvainado hasta el 90% de la longitud desplegada.

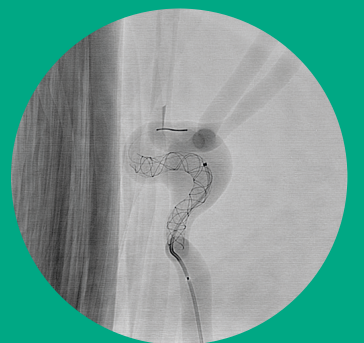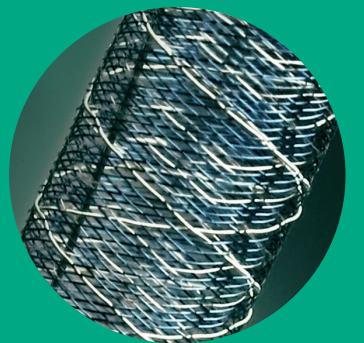

Tratamiento del aneurisma

Referencias:
1. Informe del estudio clínico.
DIVERSION: Evaluación del uso de desviadores de flujo intravascular en el tratamiento de aneurismas intracraneales.
2. Datos internos.